

Faxitron™
Trident® HD
Specimen Radiography System



Användarhandbok
MAN-06576-1602 Revidering 001

HOLOGIC®

Trident HD®

Provradiografisystemet

Användarhandbok

för programversion 1.0

Artikelnummer MAN-06576-1602

Revidering 001

Maj 2021

HOLOGIC®

Teknisk support

USA: +1.877.371.4372
Europa: +32 2 711 4690
Asien: +852 37487700
Australien: +1 800 264 073
Övriga: +1 781 999 7750
E-post: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2021 Hologic, Inc. Tryckt i USA. Denna handbok skrevs ursprungligen på engelska.

Hologic, Faxitron, Trident och associerade logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt kan vara skyddad genom ett eller flera amerikanska eller utländska patent som identifierats på www.Hologic.com/patents.

Innehållsförteckning

Förteckning över figurer	ix
Förteckning över tabeller	xi
1: Inledning	1
1.1 Avsedd användning.....	1
1.2 Systemfunktioner	1
1.3 Användarprofiler.....	2
1.4 Krav på kvalitetskontroller.....	2
1.5 Här hittar du installationsanvisningarna.....	2
1.6 Var man kan hitta information om teknisk beskrivning.....	2
1.7 Garantiuttalande.....	3
1.8 Teknisk support.....	3
1.9 Produktklagomål.....	3
1.10 Hologics uttalande om webbsäkerhet.....	3
1.11 Symboler.....	4
1.12 Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden.....	5
2: Allmän information	7
2.1 Systemöversikt.....	7
2.2 Safety Information.....	8
2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder.....	8
2.4 Förreglingar.....	13
2.5 Efterlevnad.....	13
2.5.1 Efterlevnadskrav.....	13
2.5.2 Överensstämmelsebevis.....	14
2.6 Dekalernas placering	15
3: Komponenter, kontroller och indikatorer	17
3.1 Systemkomponenter.....	17
3.1.1 Bildskåps komponenter	18
3.2 Systemanslutningar.....	20
3.3 Så här låser och låser man upp ett hjul.....	21
3.4 Så här flyttar man konsolen.....	21
3.5 Så här slår man på systemet och loggar in.....	21
3.5.1 Windows 10 Information.....	23
3.6 Så här loggar man ut.....	24
3.7 Så här slår man av systemet.....	24
3.7.1 Så här bryter man all ström till systemet.....	24

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Innehållsförteckning

4: Användargränssnitt	25
4.1 Om aktivitetsfältet.....	25
4.2 Välj patientskärm.....	27
4.2.1 Öppna en patient.....	28
4.2.2 Lägga till en ny patient.....	28
4.2.3 Redigera patientinformation.....	29
4.2.4 Dela patientjoumaler.....	30
4.2.5 Radera en patient.....	33
4.2.6 Filter för patienter.....	33
4.2.7 Så här uppdaterar man arbetslistan.....	35
4.2.8 Så här söker man i arbetslistan	35
4.2.9 Admin.....	35
4.2.10 Stäng patientlistan.....	35
4.3 Skämen Procedur.....	36
4.3.1 Lägg till en undersökning.....	37
4.3.2 Enkel och avancerad knapp.....	38
4.3.3 Hämta.....	39
4.3.4 Stäng en patient.....	39
4.3.5 Så här väljer man en resultatgrupp.....	39
4.4 Så här kommer man till bildgranskningsfunktionerna	39
4.5 Så här använder man resultatgrupper.....	39
4.5.1 Lägg till eller redigera en resultatgrupp.....	39
4.6 Så här använder man Utdata på begäran.....	40
4.6.1 Så här arkiverar man.....	40
4.6.2 Hur man exporterar.....	40
4.6.3 Skriv ut.....	41
5: Bilderna	43
5.1 Skärmen Bildvisning.....	43
5.2 Så här ställer man in exponeringsteknikerna	44
5.3 Så här tar man en bild.....	44
5.4 Så här granskar man bilderna	47
5.4.1 Bildgranskningsverktyg.....	48
5.5 Skicka bilderna till resultatanordningar.....	51
6: Exempel på kliniska sekvenser	53
6.1 Exempel bildarbetsflöde.....	53
6.2 Exempel driftsekvens.....	54
7: Kvalitetskontroll	61
7.1 Kvalitetskontrollprocedurer som krävs.....	61
7.2 Så här gör man för att öppna kvalitetskontrolluppgifterna	61
7.2.1 Förstärkningskalibrering.....	62

8: Underhåll, rengöring, och desinfektion	63
8.1 Allmän information	63
8.1.1 För allmän rengöring.....	63
8.1.2 För desinfektion.....	63
8.1.3 Gör så här för att undvika möjlig skada på person eller utrustning.....	64
8.2 Komponent specifiskkötsel	65
8.2.1 Så här rengör man bildvisningsmonitorn	65
8.2.2 Nätsladd	65
8.3 Underhåll.....	66
8.3.1 Schema för förebyggande underhåll	66
8.3.2 Om regenerering.....	66
9: Systemadministrationsgränssnitt	67
9.1 Skärmen Admin.....	67
9.2 Skärmen Om.....	69
9.3 Ändra preferens för användarspråk.....	70
9.4 Ställa in procedurflikar med flera rader.....	70
9.5 Systemverktyg.....	71
9.5.1 Systemverktyg för Chefsröntgentekniker.....	72
9.6 Arkiveringsverktyg.....	73
9.7 Så här ändrar man standardlåsningstiden.....	76
Bilaga A: Systemspecifikationer	77
A.1 Produktens mått	77
A.2 Miljö vid drift och förvaring	78
A.2.1 Allmänna villkor för användning.....	78
A.2.2 Allmänna förhållanden för transport och förvaring.....	78
A.3 Konsol teknisk information.....	79
A.3.1 Allmän information	79
A.3.2 Nätverksmiljö.....	79
A.4 Nätspänning	79
A.5 Röntgenrörs teknisk information.....	80
A.5.1 Röntgengenerator.....	80
A.6 Teknisk information om bildtagningssystemet.....	80
A.6.1 Bildmottagare.....	80
Bilaga B: Systemmeddelanden och varningar	81
B.1 Felkorrigering och felsökning.....	81
B.2 Typer av meddelanden och varningsmeddelanden.....	81
B.2.1 Felnivåer.....	81
B.2.2 Systemmeddelanden.....	82
B.3 Felsökning.....	82

Trident HD Proradiografisystemet användarhandbok

Innehållsförteckning

Ordlista över termer _____ 83

Sakregister _____ 85

Förteckning över figurer

Figur 1: Trident HD System.....	7
Figur 2: Dekalemas placering.....	15
Figur 3: Systemkomponenter.....	17
Figur 4: Provbrickans positioner.....	18
Figur 5: Provbrickans markeringar.....	19
Figur 6: Ström och nätverksanslutningar.....	20
Figur 7: Systemströmbrytare.....	21
Figur 8: Datorns strömbrytarkontakt.....	22
Figur 9: Inloggningsskärm.....	22
Figur 10: Startskärm	23
Figur 11: Aktivitetsfältet.....	25
Figur 12: Välj patientskärm.....	27
Figur 13: Lägg till patientskärmar.....	28
Figur 14: Redigera patient informationsskärmar.....	29
Figur 15: Skärmen Dela patientjournaler.....	30
Figur 16: Välj tillämplig undersökning för att dela patientjournaler.....	31
Figur 17: Välj rätt patient för att dela patientregister.....	32
Figur 18: Fliken Filter på skärmen Patientfilter.....	33
Figur 19: Skärmen Procedur.....	36
Figur 20: Dialogrutan Lägg till procedur.....	37
Figur 21: Verktyg-fliken, Enkel.....	38
Figur 22: Verktyg-fliken, Avancerad	38
Figur 23: Skärmen Skriv ut.....	42
Figur 24: Skärmen Bildvisning.....	43
Figur 25: Inbländad bild.....	44
Figur 26: Knapp RÖNTGEN.....	45
Figur 27: RÖNTGEN Knapp när exponeringen är igång.....	45
Figur 28: Fliken Verktyg i procedurskärmen.....	47
Figur 29: Bildgranskningsverktyget	48
Figur 30: Kommentarsfliken.....	49
Figur 31: Tidigare flik.....	50
Figur 32: Visningssätt	50
Figur 33: Skärmen Admin.....	67
Figur 34: Systemfliken på Om-skärmen.....	69
Figur 35: Knappen Systemverktyg.....	71
Figur 36: Skärmen Systemverktyg.....	72
Figur 37: Knappen Arkiv.....	73
Figur 38: Skärmen Arkiv för flera patienter på begäran	73
Figur 39: Skärmen Exportera.....	75
Figur 40: Konsol mått.....	77

Förteckning över tabeller

Tabell 1: Systemdekaler.....	16
Tabell 2: Aktivitetsfältsavsnitten.....	25
Tabell 3: Alternativ på fliken Filter (kräver åtkomsträttigheter).....	34
Tabell 4: Skärmen Procedur.....	36
Tabell 5: Procedurer som krävs	61
Tabell 6: Användarens förebyggande underhåll.....	66
Tabell 7: Service för förebyggande underhåll.....	66
Tabell 8: Funktioner på skärmen Admin.....	67
Tabell 9: Chefsröntgentekniker – funktioner i Systemverktyg.....	72

Kapitel 1 Inledning

Läs all denna information noga innan man använder systemet. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna handbok. Förvara denna handbok så att den är tillgänglig under ingreppen. Läkare bör berätta för patienterna om alla potentiella risker och biverkningar med hänsyn till användningen av systemet som beskrivs i denna handbok.

Obs



Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

1.1 Avsedd användning

R_X Only

I USA begränsar federal lag användning av denna anordning till läkare eller på läkares ordination.

Trident® provradiografisystemet är ett röntgensystem för skåp som används för att tillhandahålla digitala röntgenbilder av kirurgiska och kärmbiopsiprover från olika anatomiska regioner för att möjliggöra snabb verifiering av att den korrekta vävnaden har skurits under biopsiproceduren.

Att göra verifieringen i samma rum som proceduren eller i närheten förbättrar arbetsflödet, vilket minskar tiden patienten behöver undersöka.

1.2 Systemfunktioner

Trident-systemet förvarar och visar de radiografiska bilderna av kirurgiska och kärmprover som tagits från olika anatomiska regioner. Systemet har möjlighet att överföra bilderna till externa enheter. Bilderna som förvärvats med detta system är avsedda att bekräfta avlägsnande av en misstänkt skada eller patologi; systemet är inte avsett för diagnostiska ändamål.

Provradiografiksystemet används i diagnostiska avbildningsavdelningar, patologiska avdelningar eller i kirurgiska sviter. Radiologiska tekniker, kirurgisk personal, kirurger, radiologer och patologer kan använda provröntgenutrustningen.

Hologic rekommenderar att användare får utbildning i grundläggande joniserande strålningssäkerhet innan systemet används.

1.3 Användarprofiler

- En primär systemanvändare (till exempel en operationssjuksköterska) kan utföra grundläggande systemfunktioner, förutom de som kräver chef-privilegier. Den primära systemanvändaren hänvisas till i dokument som användaren.
- Systemadministratörer kan utföra alla systemfunktioner, lägga till och ta bort användarkonton och radera patienter. Systemchefen hänvisas till i detta dokument som chef.
- Servicepersonalen har full tillgång till alla systemfunktioner.

1.4 Krav på kvalitetskontroller

Utför alla kvalitetskontrolltester inom korrekt tidsram.

1.5 Här hittar du installationsanvisningarna

Installationsanvisningarna finns i *servicehandboken*.

1.6 Var man kan hitta information om teknisk beskrivning

Information om teknisk beskrivning finns i *servicehandboken*.

1.7 Garantiuttalande

Utöver det som uttryckligen i övrigt anges i överenskommelsen gäller följande: i) utrustning tillverkad av Hologic garanteras för den ursprungliga kunden fungerar i allt väsentligt i enlighet med publicerade produktspecifikationer under ett (1) år med början från datumet för leverans eller, om installation krävs, från datumet för installation ("garantiperioden"); ii) röntgenrör för mammografi med digital bildbehandling garanteras i tjugofyra (24) månader, under vilken tid röntgenrören omfattas av en fullständig garanti under de första tolv (12) månaderna och sedan omfattas av en rätlinjig pro rata-garanti under månad 13–24; iii) reservdelar och ombearbetade delar garanteras under återstoden av garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans, beroende på vilken period som är längst; iv) förbrukningsartiklar garanteras uppfylla publicerade specifikationer under en period som avslutas på det utgångsdatum som anges på respektive förpackning; v) licensierad programvara garanteras fungera i enlighet med publicerade specifikationer; vi) tjänster garanteras tillhandahållas på ett yrkesmässigt sätt; vii) utrustning som inte tillverkats av Hologic garanteras av tillverkaren och respektive tillverkares garantier ska gälla för Hologics kunder i den utsträckning som detta tillåts av tillverkare av sådan icke Hologic-tillverkad utrustning. Hologic garanterar inte avbrots- eller felfri användning av produkterna eller att de fungerar tillsammans med andra tillverkares produkter som inte godkänts av Hologic. Dessa garantier gäller inte för artiklar som: a) repareras, flyttats eller ändrats, förutom av servicepersonal som auktoriseras av Hologic; b) utsatts för miss bruk (inklusive termisk eller elektrisk), påfrestning eller felaktig användning; c) förvarats, underhållits eller använts på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga specifikationer eller anvisningar från Hologic, inklusive kundens vägran att tillåta programuppdateringar som rekommenderas av Hologic eller d) betecknas som levererade utan garanti från Hologic eller på förlanseringsbasis eller i befintligt skick.

1.8 Teknisk support

Se handbokens sida med upphovsrättssida för kontaktinformation för produktsupport.

1.9 Produktklagomål

Eventuella klagomål eller problem som rör denna produkts kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet eller prestanda ska rapporteras till Hologic. Om produkten har orsakat eller ökat en patientskada ska incidenten omedelbart rapporteras till Hologic.

1.10 Hologics uttalande om webbsäkerhet

Hologic testar kontinuerligt datorns aktuella status och nätverkssäkerhet för att utvärdera eventuella säkerhetsproblem. När det behövs tillhandahåller Hologic uppdateringar av produkten.

För dokument rörande bästa praxis för webbsäkerhet för Hologics produkter, se Hologics webbplats www.Hologic.com.

1.11 Symboler

I detta avsnitt beskrivs symbolerna på detta system.

Symbol	Beskrivning
	PÅ för en del av utrustningen
	Potentialutjämningsterminal
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant.
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Varning för strålning
	Varning för elektricitet
	Varning
	Följ bruksanvisningen
	Detta system avger icke-joniserande, radiofrekvens (RF) energi
	Katalognummer
	Serienummer

1.12 Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden

Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden som används i denna handbok:



VARNING!

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra potentiellt farlig eller dödlig skada.



Varng!

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra skada.



Försiktig:

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra skada på utrustningen, dataförlust eller skada på filer i programvarutillämpningar.



Obs

Obs-meddelanden innehåller ytterligare information.

Kapitel 2 Allmän information

2.1 Systemöversikt



Figur 1: Trident HD System

Figurförklaring

1. Bildmonitor
2. Kontrolldisplay
3. Bildskåp

2.2 Safety Information

Read and understand this manual before you use the system. Keep the manual available during the operation of the unit.

Always follow all the instructions in this manual. Hologic does not accept responsibility for injury or damage from incorrect system operation. For training options, contact your Hologic representative.

The system has safety interlocks, but the user must understand how to safely operate the system and be aware of the health hazards of x-ray radiation.

2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder



VARNING!

Endast utbildade serviceingenjörer som auktoriseras av Hologic får öppna någon av panelerna. Systemet innehåller dödlig spänning.



VARNING!

Elektrisk utrustning som används i närheten av lättantändliga narkosmedel kan orsaka explosion.



VARNING!

Användaren måste korrigera problemen innan systemet används. Kontakta en godkänd servicerepresentant för förebyggande underhåll.



VARNING!

Skyddet som tillhandahålls av utrustningen reduceras om utrustningen används i en metod som inte anges av Hologic.



VARNING!

Placera alltid Trident-systemet minst 1,5 meter (5 fot) från patienten.



VARNING!

Inga modifikationer av denna utrustning är tillåtna.



VARNING!

Försök inte använda någon konsol som kan ge en elstöt. Kontakta omedelbart Hologic eller din distributör.

**VARNING!**

För att undvika chockfel ska man inte använda systemet om inte bladen på polarpluggen kan sättas in helt i eluttaget.

**VARNING!**

Innan varje användning kontrolleras att nätsladden är i gott skick och är helt inkopplad i eluttaget.

**VARNING!**

Kontrollera att nätkabeln för systemkonsolen är i gott skick. En skadad nätsladd kan utgöra en risk för elektriska stötar. När konsolen kopplas från strömmen, ska man alltid fatta tag i kontakten vid införingspunkten och dra lätt. Dra ALDRIG i sladden för att koppla ur enheten.

**VARNING!**

Innan man flyttar konsolen, kontrollera att nätsladden och kablarna är urkopplade och lindade säkert runt ledningsplattan.

**VARNING!**

Innan man ställer in konsolens läge, se till att nätsladden och kablarna är säkert placerade och inte i vägen.

**VARNING!**

För att förhindra brand eller stöt, utsätt inte systemet för regn eller fukt.

**Varning:**

Denna anordning innehåller farliga material. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant.

**Varning:**

Kontrollera åtkomsten till utrustningen enligt lokala strålskyddsbestämmelser.

**Varning:**

Använd inte systemet om glaset är sprucket eller skadat.

Trident HD Proradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information



Varng:

Detta system kan vara farligt för användaren. Följ alltid säkerhetsanvisningarna för röntgenexponering.



Varng:

Kablar och sladdar kan utgöra en snubblingsrisk. Placera sladdar säkert så att de inte är i vägen. När man inte använder sladdarna ska de lindas upp ordentligt runt sladdhanteringsplattan.



Varng:

Innan man flyttar konsolen ska man kontrollera att låsen är upplåsta. Att försöka flytta systemet med låshjulen kan göra att konsolen spetsar över.



Varng:

Innan man flyttar systemet, rotera bildskärmsskärmen till ett läge som ger tydlig synlighet medan man trycker på konsolen.



Varng:

Flytta inte konsolen med överdriven kraft eller hastighet. Gör inga snabbstopp.



Varng:

När man flyttar konsolen ska man vara medveten om stötar, ramper, lutningar uppåt eller nedåt. Var försiktig när man flyttar konsolen på en ojämn eller sluttande yta.



Varng:

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att helt öppna bildskåpsdörren och för att försiktigt infoga eller ta bort provbrickan.



Varng:

Håll bildskåpsdörren stängd när den inte används. Om man lämnar dörren öppen kan det utgöra en snubblingsfara.



Varng:

Använd bildskåpsdörrhandtaget för att öppna och stänga dörren. Felaktig stängning av bildskåpsdörren kan orsaka en klämningsskada.



Varning

Risk för dataförlust. Placera inte några magnetiska medier i närheten eller ovanpå anordningar som bildar magnetfält.



Varning

För att minimera risken för skada på den digitala bildmottagaren på grund av värmechock, följ rekommenderad procedur för att stänga av utrustningen.



Varning

Använd minsta möjliga mängd rengöringsvätskor. Vätskorna får inte flöda eller rinna.



Varning

För att undvika skada på de elektroniska komponenterna, använd inte desinfektionsmedel i sprayform på systemet.



Varning

För att undvika skador på konsolen och dess komponenter, använd endast de rekommenderade rengöringsmetoderna.



Varning

Spill inte ut eller placera vätskor på pekskärmen eller pekplattan. Vätskor på pekskärmen och pekplattan kan orsaka funktionsfel. Kontrollera att pekskärmen och pekplattan är rena och torra innan systemet används.



Försiktig:

Systemet är en laboratorieenhets och inte en vanlig dator. Ändra inte maskinvaran eller programvaran som du inte har behörighet för. Installera denna anordning bakom en brandvägg för nätverkssäkerhet. Datorns virusskydd eller nätverkssäkerheten för denna laboratorieenhets tillhandahålls inte (till exempel en brandvägg). Nätverkssäkerhet och antivirusskydd är användarens ansvar.



Varning

För att förhindra eventuella skador på systemet, fölж det rekommenderade förfarandet för att stänga av utrustningen.



Varning

Systemet måste installeras och tas i bruk enligt anvisningarna i dessa instruktioner för att säkerställa dess elektromagnetiska kompatibilitet.

Trident HD Proradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information



Varning

Bärbar och mobil RF-kommunikation kan påverka medicinskelektrisk utrustning.



Varning

För att förhindra låg bildkvalitet, utför systemkalibreringar när man blir ombedd.



Varning

För att förhindra låg bildkvalitet, se till att ta bort allt patientmaterial från bildskåpet och provbrickan. Använd de rekommenderade rengöringsmetoderna för att rengöra och desinficera bildskåpet och provbrickan.



Varning

För att förhindra skador, var försiktig vid hantering och rengöring av provbrickan.



Varning

Vikt och rörlighet för detta system kräver följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när man flyttar systemet på ojämna eller sluttande ytor.
 - Se till att hjulen är låsta när systemet är stillastående.
 - Innan man flyttar konsolen, se till att kablarna är lagrade i ett säkert läge på konsolen.
 - Innan man flyttar konsolen rotera bildskärmsbildskärmen för att tillåta en obegränsad vy.
 - Gör inga snabbstopp. Flytta inte med överdriven kraft eller hastighet.
-

2.4 Förreglingar

Röntgengenereringen upphör automatiskt och ett felmeddelande visas när det finns ett avbrott i röntgenexponeringen, t.ex. när mAs-timern eller maximal exponeringstimern stängs av eller skåpdörren öppnas.

2.5 Efterlevnad

I detta avsnitt beskrivs efterlevnadskraven för systemet och tillverkarens ansvar.

2.5.1 Efterlevnadskrav

Tillverkaren ansvarar för denna utrustnings säkerhet, tillförlitlighet och prestanda under följande förutsättningar:

- Utrustningen används enligt bruksanvisningen.
- Handhavande, utbyggnad, justeringar, förändringar eller reparationer av systemet får endast utföras av auktoriserade personer.
- Nätverks- och kommunikationsutrustningen måste ha installerats så att det uppfyller IEC-standarderna.



Försiktig:

Systemet är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal. Detta system kan orsaka radiostörningar eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder, t.ex. att vända eller flytta på utrustningen eller skärma av platsen.



Försiktig:

Utrustningens emissionsegenskaper gör den lämplig att användas vid industrianläggningar och på sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljö (där CISPR 11 klass B normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt skydd för radiofrekvent kommunikationsutrustning. Användaren kan behöva vidta åtgärder, som att flytta utrustningen eller rikta den åt annat håll.



Försiktig:

Den medicinska elektriska (ME-) utrustningen eller ME-systemet får inte användas intill eller placerad ovanpå annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda den intill eller placerad ovanpå annan utrustning måste man kontrollera att ME-utrustningen eller ME-systemet fungerar på korrekt sätt i denna konfiguration.



Försiktig:

Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Hologic kan göra din rätt att använda utrustningen ogiltig.

2.5.2 Överensstämmelsebevis

Tillverkaren uppger att denna enhet är avsedd att uppfylla följande krav:

UL, IEC, EN:

- UL 61010-1: 2012 – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning; del 1: Allmänna krav
- IEC 61010-1 § 6.7
- IEC 61010-1: 2010, 3:e upplaga – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning; Del 1: Allmänna krav
- IEC 61010-2-091: 2012, 3:e upplaga – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning; Del 2-091: Särskilda krav för skåpröntgenanläggningar
- EN 61326-1: 2013 Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning – EMC-krav, allmänna krav
- EN 55011 och CISPR 11 (klass A) – Industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning (ISM) Radiofrekvensutrustning – Elektromagnetiska störningsegenskaper – Gränser och mätmetoder

CFR:

- 21 CFR § 1020.40 – Skåpröntgensystem
- 47 CFR Part 15.5 – Allmänna användarvillkor

CAN/CSA:

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 3:e upplaga – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning; Del 1: Allmänna krav

2.6 Dekalernas placering




Figur 2: Dekalernas placering

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information


Tabell 1: Systemdekaler

1

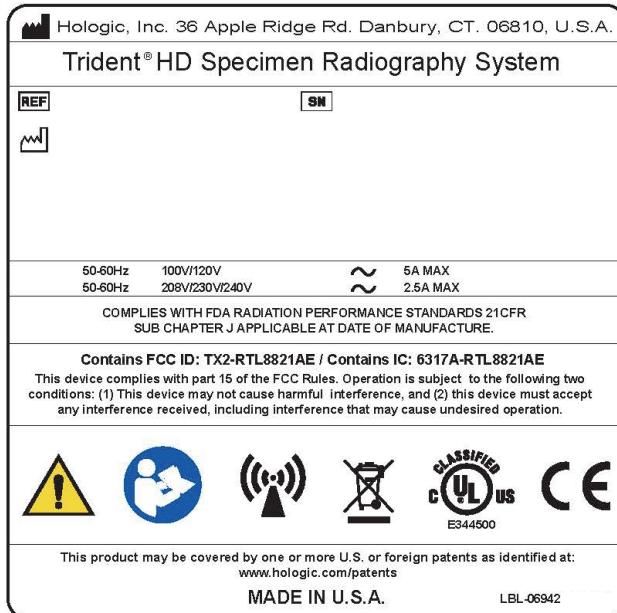


Systemets märkplåt

2

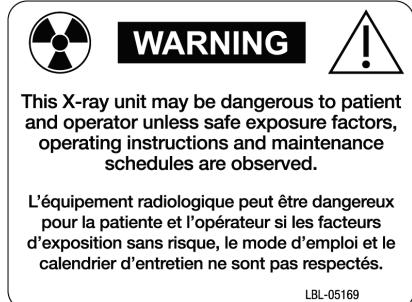

Varning för röntgenenhet


3

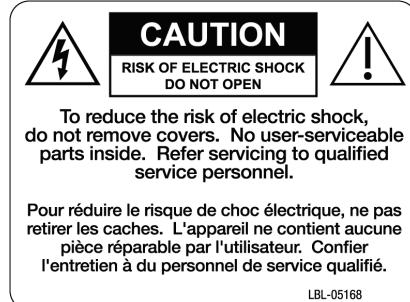

Varning för elstöt

Kapitel 3 Komponenter, kontroller och indikatorer

3.1 Systemkomponenter

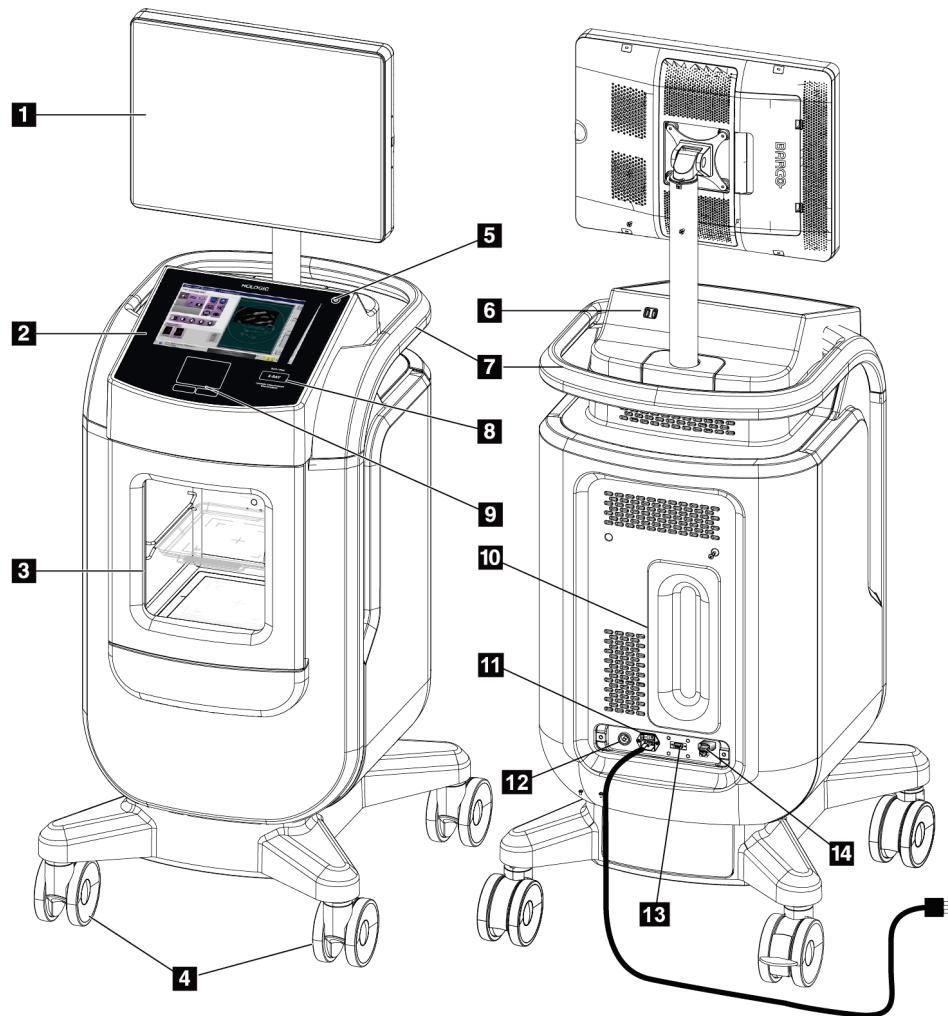


Figur 3: Systemkomponenter

Figurförklaring

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Bildmonitor | 9. Styrplatta |
| 2. Kontrolldisplay | 10. Kabel-administreringsplatta |
| 3. Bildskåp | 11. Systemströmbrytare och nätkabelanslutning |
| 4. Hjul | 12. Potentiell utjämningskontakt |
| 5. Knappen Slå på/starta om datorn | 13. Serviceport |
| 6. USB-portar | 14. Ethernet port |
| 7. Konsolhandtag | 15. [Bar Code Scanner] |
| 8. Knapp för röntgenaktivering | |

3.1.1 Bildskåps komponenter

Konsolen har ett skärmat bildskåp. Placeringen av provfältet bestämmer förstoringsnivån för bilden.

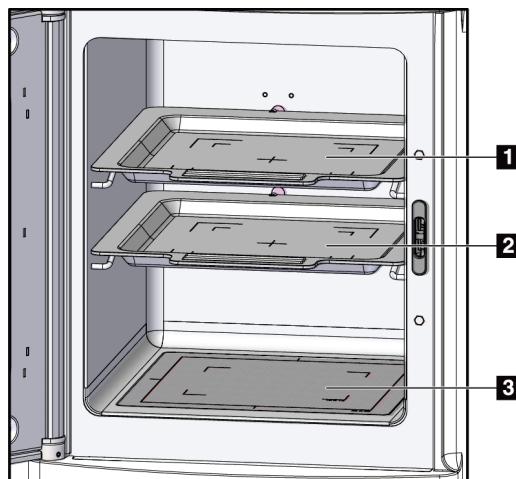


Figur 4: Provbrickans positioner

Figurförklaring

1. Provbricksplacering för 2,0x förstoring
2. Provbricksplacering för 1,5x förstoring
3. Provbricksplacering för 1,0x förstoring
(kontaktbild)

Provbricka

Provbrickan har markeringar för att visa 1,5x förstoringsmarginalerna och 2,0x förstoringsmarginalerna.

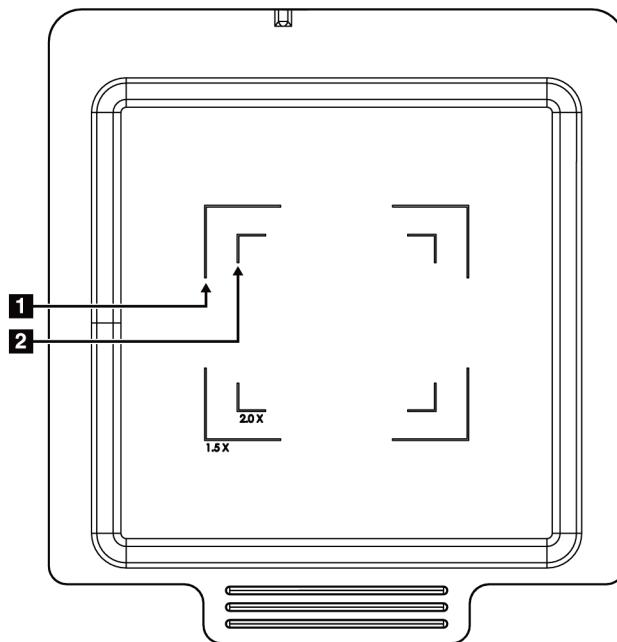

Figurförklaring

1. 1,5x Förstoringsmarginal
2. 2,0x Förstoringsmarginal

Figur 5: Provbrickans markeringar



Varning

För att förhindra skador, var försiktig vid hantering och rengöring av provbrickan.




Obs

Förvara provbrickan inuti bildskåpet.

3.2 Systemanslutningar

Ström och nätverksanslutningar

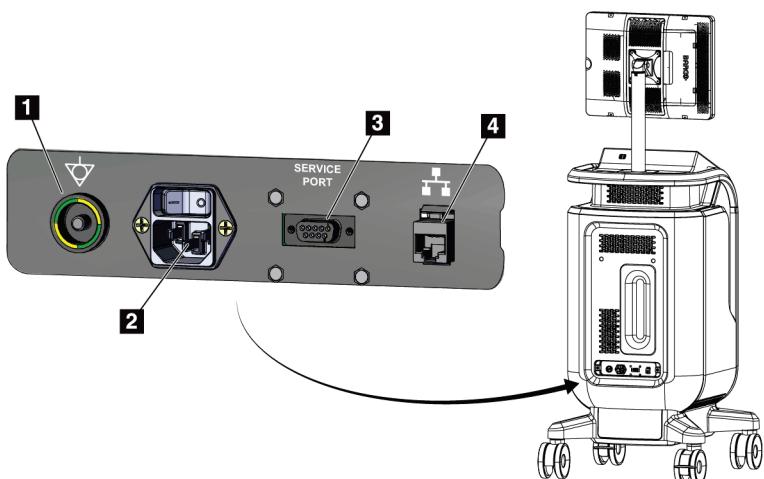

Figurförklaring

1. Potentiell utjämningskontakt
2. Nätsladdsanslutning
3. Serviceport
4. Ethernet port

Figur 6: Ström och nätverksanslutningar

1. Sätt systemet på en plats där man enkelt kan komma åt strömanslutningar och nätverksanslutningar.
2. Anslut systemkabeln till eluttaget.
3. Om så önskas, anslut nätverkskabeln till ethernet-porten.

USB-anslutningar

Konsolen har två USB-portar på baksidan av kontrolldisplayen.

Wi-Fi-anslutningar

Wi-Fi är konfigurerat via systeminställningar.

3.3 Så här låser och låser man upp ett hjul

- För att låsa ett hjul, sätt på spärrhaken på spaken tills spaken låses.
- För att låsa upp ett hjul, lyft spärrspaken på hjulet till UPP-läget.

3.4 Så här flyttar man konsolen




Obs

Nätkabeln är fäst på konsolens baksida för att säkerställa förvaring av sladden under konsolrörelsen.

1. Se till att datorsystemet och konsolen är helt AV.
2. Se till att nätkabeln är urkopplad och att nätverkskabeln är urkopplad.
3. Dra i nätsladden på kabelplattan.
4. Se till att alla komponenter och kablar är i ett säkert läge på konsolen.
5. Placera bildskärmskärmens så att man får en fri vy medan du trycker på konsolen.
6. Lås upp hjullåsen.
7. Flytta konsolen genom att trycka på konsolhandtaget.
8. Lås hjulen när konsolen är på rätt plats.

3.5 Så här slår man på systemet och loggar in

1. Se till att konsolhjulen är låsta.
2. Anslut systemet till ström. Om så önskas, anslut systemet till nätverket.
3. Slå PÅ strömbrytaren på baksidan av konsolen.

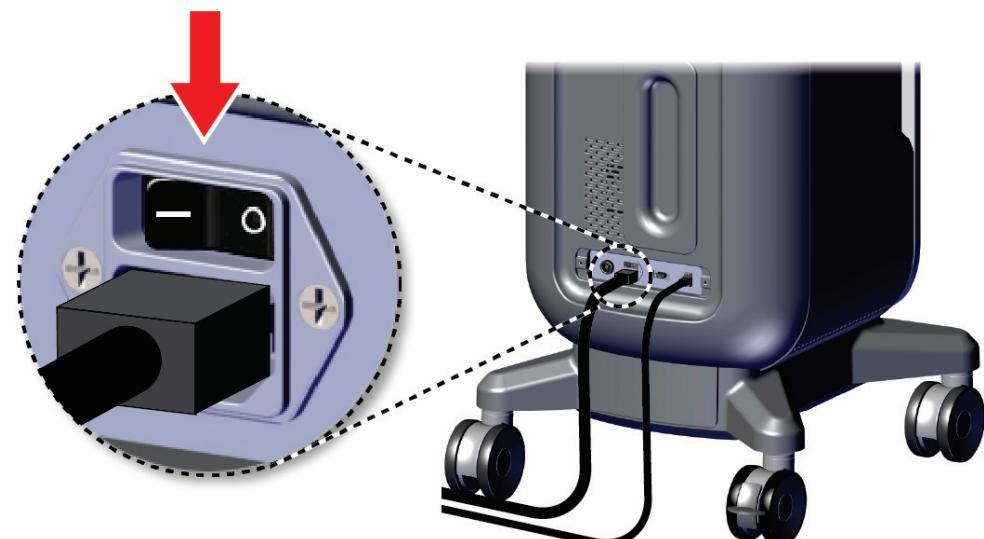

Figur 7: Systemströmbrytare


Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 3: Komponenter, kontroller och indikatorer

- Tryck på datorns strömbrytare på kontrolldisplayen. Datorn tänds och skärmen *Login* öppnas.



Figur 8: Datorns strömbrytarkontakt

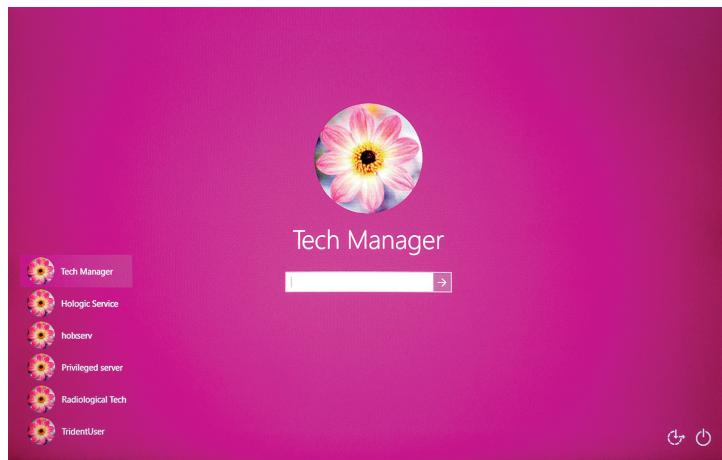

Figur 9: Inloggningsskärm


- Ange ditt användarnamn och lösenord och välj sedan ikonen pil. Efter ett ögonblick öppnas skärmen *Start*.

Obs



För att gömma det virtuella tangentbordet, tryck på den rosa bakgrunden

- På skärmen *Start*, välj knappen **Patientlista**.

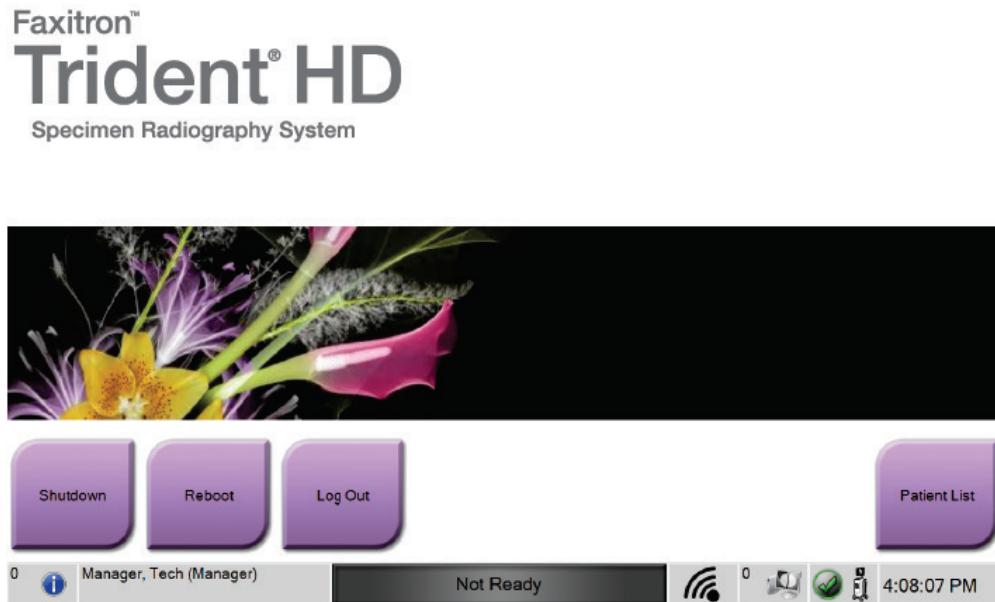

Figur 10: Startskärm

Obs

På skärmen *Start* finns en knapp **Stäng av** som stänger av datorn och en knapp **Starta om** som startar om datorn.

Obs

Se [Systemkomponenter](#) på sidan 17 för placeringar strömknappar.

Obs

För att ändra systemets språk eller andra inställningar, se [Systemadministrationsgränssnitt](#) på sidan 67.

3.5.1 Windows 10 Information

Trident-systemprogramvaran körs på operativsystemet Windows 10. Pekskärmen kommer att svara på vissa Windows 10 pekrörelser.

- Dra åt höger för att visa uppgiftsvyn.
- När Trident-systemapplikationen minimeras, svep upp för att visa Windows-aktivitetsfältet.
- Klicka på ikonen **Windows** på aktivitetsfältet för att öppna Windows Start-menyn.
- I uppgiftsvyn, tryck på Trident-systemapplikationsfönstret för att återgå till Trident-systemprogrammets hela skärm.

3.6 Så här loggar man ut

1. På skärmen *Förfarande*, välj knappen **Stäng patient**.
2. På skärmen *Välj patient*, välj **Stäng** knappen.
3. På *Start* skärmen, välj **Logga ut** knappen. På bekräftelseprompten, välj knappen **Ja**. Skärmen *Inloggning* öppnas.

3.7 Så här slår man av systemet

1. Avsluta eventuella öppna patientprocedurer.
2. På skärmen *Välj patient*, välj **Stäng** knappen.
3. På skärmen *Start*, välj knappen **Stänga av**. På bekräftelseprompten, välj knappen **Ja**. Datorsystemet stängs av men konsolen förblir på.
4. För att slänga av konsolen, släng AV strömbrytaren på baksidan av konsolen.

3.7.1 Så här bryter man all ström till systemet

1. Se till att datorsystemet och konsolen är helt AV.
2. Dra ut nätsladden ur eluttaget.

Kapitel 4 Användargränssnitt

4.1 Om aktivitetsfältet

Aktivitetsfältet längst ner på skärmen visar ytterligare iconer, som man kan välja för att komma åt information eller utföra systemuppgifter.



Figur 11: Aktivitetsfältet

Tabell 2: Aktivitetsfältsavsnitten


	Beskrivning	Meny
1	<p>Larminformation Välj Information ikonen på larmmenyn. Det här avsnittet på aktivitetsfältet blinkar med en gul färg om det finns ett larm. Välj Bekräfta alla för att ta bort den blinkande indikationen. Välj Hantera larm för att visa och stänga alla öppna larm.</p>	Inga larm Bekräfta alla Hantera larm ...
2	<p>Aktuell användare Välj användarnamnet för att visa en meny. Logga ut tar dig tillbaka till skärmen <i>Inloggning</i>. Mina inställningar öppnar skärmen <i>Redigeraoperatör</i> att granska eller redigera Operatörsinformation eller ändra ditt lösenord. Skriv ut skriver ut den visade patientlistan till en ansluten skrivare. Observera: den här popupmenyn är inaktiv i <i>Förfarande</i> skärmen.</p>	Användarmeny Logga ut ... Mina inställningar ... Skriv ut ...
3	<p>Bildstatus Visa bildstatus: Inte klar, klar eller röntgen pågår. Välj det här avsnittet för att aktivera eller inaktivera bildbehandling. När avbildningen är avaktiverad är den här sektionen grå och visar statusen Inte klar. När bildbildningsstatusen inte är klar aktiveras knappen RÖNTGEN också. När bildbehandling är aktiverad ändras det här avsnittet till grönt och visar en klar status. När bildstatusen är klar, lyser RÖNTGEN aktiveringsknappen på kontrolldisplayen.</p> <p style="text-align: center;">Färdigt Tryck för att inaktivera bildtagning</p> <p>När bildstatusen är klar, välj det här avsnittet för att inaktivera bildbehandling. För att förhindra oavsiktlig röntgenaktivering, behåll systemet i läget Ej klar tills man är redo att ta en bild.</p>	

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

4	<p>Nätverksanslutningar</p> <p>Välj ikonen Nätverk för att visa menyn Nätverksanslutning.</p> <p>Anslutningsnamn visar den aktuella nätverksanslutningen som används.</p> <p>Anslutningsstyrka visar styrkan på den trådlösa nätverksanslutningen.</p> <p>En nätverksanslutning krävs för att:</p> <ul style="list-style-type: none">• få schemalagda patientprocedurer från en leverantör av Modalitetsarbetslista• arkivera, exportera eller skriva ut förvärvade bilder• Fråga hämta bilder från ett arkiv	<p>Nätverksanslutning</p> <p>Anslutningsnamn: Hologic_guest Anslutningsstyrka: 100</p>
5	<p>Resultatenheter</p> <p>Välj arbetstation ikonen för att öppna skärmen <i>Hantera köer</i>. Numret bredvid ikonen är antalet jobb som finns kvar i kön.</p> <p>Skärmen <i>Hantera köer</i> visar status på jobb i kön, jobbinformation för vald resultatenhet, och det finns också möjlighet att filtrera kövisningen.</p>	
6	<p>Systemstatus</p> <p>Om ikonen Systemstatus (konsol) har ett grönt bockmärke bredvid sig är systemet klart att användas. Välj ikonen Systemstatus för att visa felmenyn.</p> <p>Om ikonen Systemstatus är röd med en siffra bredvid sig, behöver systemet vänta det angivna antalet minuter innan nästa bild kan tas på ett säkert sätt.</p> <p>Om ikonen Systemstatus har ett gult utropstecken bredvid sig och den här delen av aktivitetsfältet blinkar gult finns det ett fel. Välj ikonen Systemstatus för mer information om felet.</p> <p>Rensa alla fel tar bort alla felmeddelanden.</p> <p>Med Systemdiagnostik kommer man till inställningarna för undersystem. Man kan också växla in och stänga av skäplampan.</p> <p>Exponeringsinställningar låter dig ändra exponeringsteknikerna. Se Så här ställer man in exponeringsteknikerna på sidan 44.</p> <p>Om visar information om systemet. Se Skärmen Om på sidan 69.</p>	<p>Inga fel</p> <p>Rensa alla fel</p> <p>Systemdiagnostik ...</p> <p>Exponeringsinställningar ...</p> <p>Om ...</p>

4.2 Välj patientskärm

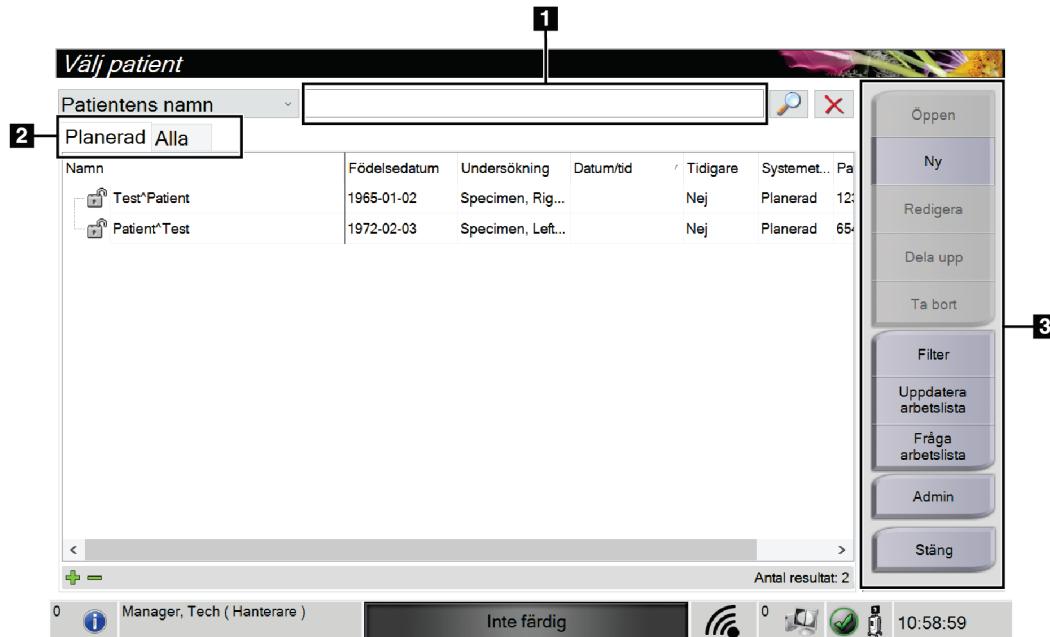

Figur 12: Välj patientskärm

Figurförklaring

1. Snabbsökning	Sök i den lokala databasen efter patientnamn, patient-ID eller accessions-nummer.
2. Flikar	<p>Filterflikarna högst upp på skärmen går att konfigurera. En chef kan ta bort flikar och skapa nya flikar (se Filter för patienter på sidan 33).</p> <ul style="list-style-type: none"> På fliken Schemalagd visas de schemalagda procedurerna. På fliken All (Alla) visas alla procedurer för samtliga användare.
3. Knappar	<p>Många funktioner är tillgängliga från detta fönster genom att välja en specifik knapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> Öppen: Öppna den valda patienten – se Öppna en patient på sidan 28. Ny: Lägg till en ny patient – se Lägg till en ny patient på sidan 28. Redigera: Redigera patientinformation – se Redigera patientinformation på sidan 29. Dela upp: Flytta bilder till en annan procedur – se Dela patientjournaler på sidan 30. Ta bort: Radera en patient från arbetslistan – se Radera en patient på sidan 33. Filter: Konfigurera patientfiltren – se Filter för patienter på sidan 33. Uppdatera arbetslista: Uppdatera informationen om den schemalagda patientarbetslistan, se Så här uppdaterar man arbetslistan på sidan 35 Sök i arbetslista: Söka efter en patient i Modalitetsarbetslistan – se avsnittet Så här söker man i arbetslistan på sidan 35. Admin: Öppna skärmen Admin – se Skärmen Admin på sidan 67. Stäng: Avsluta och återgå till Startskärmen.


Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

4.2.1 Öppna en patient

1. Välj en flik för att visa den önskade listan över patienter.
2. Välj en patient från listan. Knappen **Öppen** aktiveras.
3. Välj **Öppen** för att öppna skärmen *Undersökning* för denna patient.

4.2.2 Lägga till en ny patient

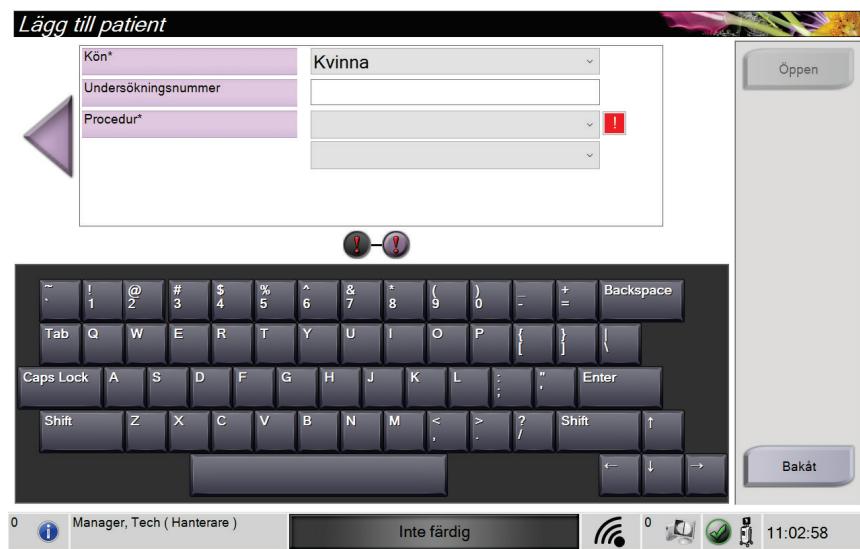

Figur 13: Lägg till patientskärmar

1. Välj knappen **Ny** på skärmen *Välj patient*. Skärmen *Lägg till patient* öppnas.
2. Ange den nya patientinformationen och välj en procedur.
3. Välj knappen **Öppen**. Skärmen *Undersökning* för den nya patienten öppnas.

4.2.3 Redigera patientinformation

Redigera patient: Test, Patient

Senast*	Test
Först	Patient
Mitt	
Patient-ID*	123456
Födelsedatum*	1 2 1965 M/D/YYYY

Spara

Bakåt

Manager, Tech (Hanterare) **Inte färdig** **0** **0** **11:03:25**

Redigera patient: Test, Patient

Kön*	Kvinna
Undersökningsnummer	
Procedur*	Specimen, Right
	Breast

Spara

Bakåt

Manager, Tech (Hanterare) **Inte färdig** **0** **0** **11:04:02**

Figur 14: Redigera patientinformationsskärmar

1. På skärmen *Välj patient* väljer man patientens namn och väljer sedan knappen **Redigera**.
2. På skärmen *Redigera patient* gör man ändringarna och väljer sedan knappen **Spara**.
3. Välj **OK** för meddelandet *Uppdatering genomförd*.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

4.2.4 Dela patientjurnaler



Figur 15: Skärmen Dela patientjurnaler

Med hjälp av funktionen Dela upp kan man flytta bilder om man råkar tar bilder i inkorrekt undersökning eller för fel patient.



Obs

Man kan inte dela bilder för skyddade patienter.




Obs

Arkiverade patientjurnaler måste fortfarande korrigeras i PACS eller andra arkivsystem efter att funktionen Dela upp använts.

Bilder togs i fel procedur

1. Välj patienten på skärmen *Välj patient*.
2. Välj knappen **Dela upp**. Skärmen *Dela patientjournaler* öppnas.
3. Välj de bilder som ska flyttas. Om alla bilder flyttas, ska man välja **Markera allt**.
4. Välj sökkriterier (till exempel Patientens namn eller Remissnummer) från rullgardinslistan nedanför bilderna.
5. Ange samma patientinformation och klicka på knappen **Sök** (förstoringsglaset).
6. När patientnamnet visas ska man välja tillämplig undersökning för bilderna.

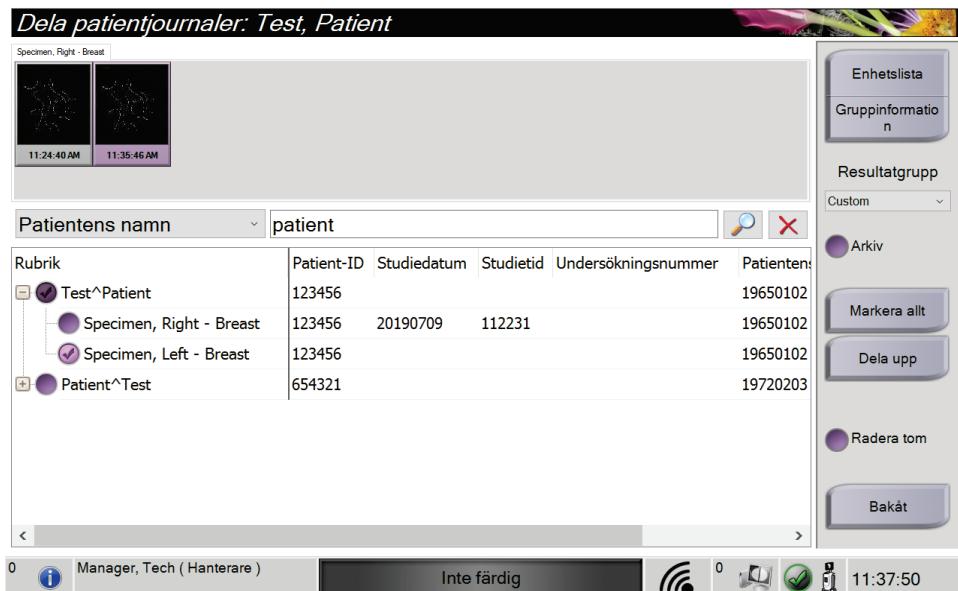

Figur 16: Välj tillämplig undersökning för att dela patientjournaler


7. Om ALLA bilderna flyttas och man vill ta bort den felaktiga proceduren, välj **Radera tom**.
8. Om man vill arkivera bilderna eller spara dem på en lagringsenhet, välj **Arkivera**. Bekräfta att rätt resultat har valts.
9. Välj **Dela upp** och sedan **OK** i meddelandet *Delningen har genomförts*.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

Bilder tagna under fel patient

1. På skärmen *Välj patient* ska man välja den patient som har bilderna som måste flyttas.
2. Välj knappen **Dela upp**. Skärmen *Dela patientjournaler* öppnas.
3. Välj de bilder som ska flyttas. Om alla bilder flyttas, ska man välja **Markera allt**.
4. Välj sökkriterier (till exempel Patientens namn eller Remissnummen) från rullgardinslistan nedanför bilderna.
5. Ange samma sökkriterier och välj knappen **Sök** (förstoringsglaset).
6. När patientnamnet visas, ska man välja den korrekta proceduren.

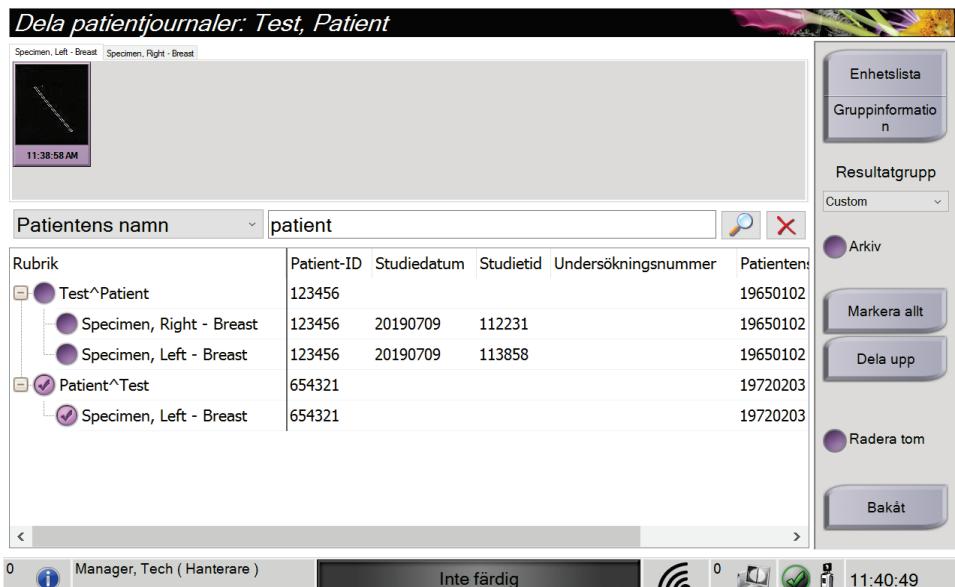

Figur 17: Välj rätt patient för att dela patientregister

7. Om ALLA bilderna flyttas och man vill ta bort den felaktiga patienten från patientlistan, välj **Radera tom**.
8. Om man vill arkivera bilderna eller spara dem på en lagringsenhet, välj **Arkivera**. Bekräfta att rätt resultat har valts.
9. Välj **Dela upp** och sedan **OK** i meddelandet *Delningen har genomförts*.

4.2.5 Radera en patient

1. Välj en eller flera patienter på skärmen *Välj patient*.
2. Välj knappen **Radera**.
3. När bekräftelsedialogrutan visas ska man välja **Ja**.


Obs

En primär systemanvändare kan inte radera patienter, men en chef kan.

Obs

Reklamation eliminerar vanligtvis behovet av att radera patienter.

4.2.6 Filter för patienter

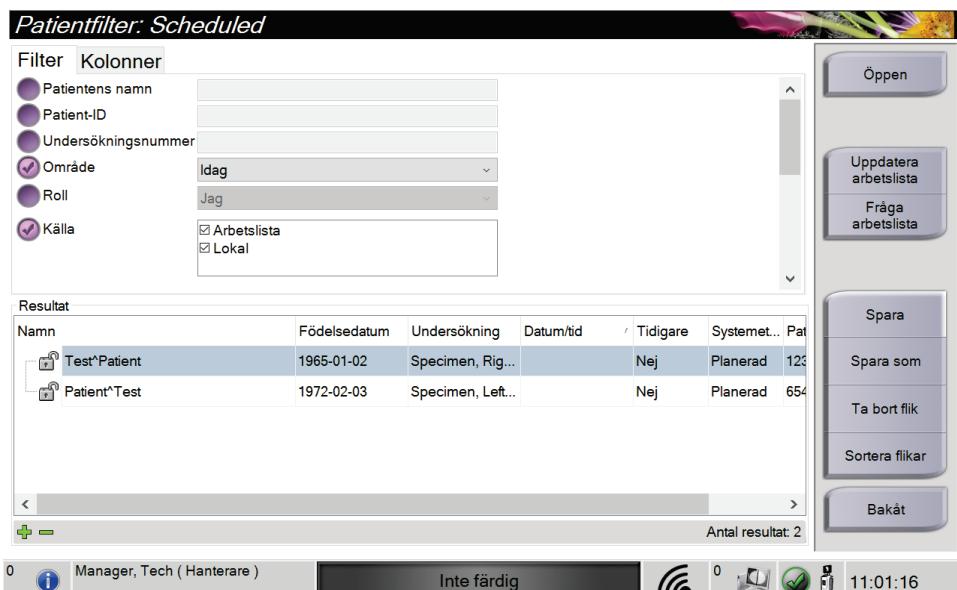

Figur 18: Fliken Filter på skärmen Patientfilter

Efter att man har valt knappen **Filtrera** på skärmen *Välj patient*, öppnas skärmen *Filtrera patient* för den valda fliken.

Fliken Filter

Använd fliken **Filter** för att ändra filteralternativen för patientlistan. När du markerar eller avmarkerar ett alternativ visas ändringen i området Resultat på skärmen.



Obs

Du måste ha behörighet på chefsnivå för att spara dessa nya filter på den valda fliken på skärmen *Välj patient*. (Se avsnittet [Övriga funktioner på fliken Filter](#) på sidan 34.)



Obs

När man väljer en rad i resultatlistan och sedan väljer knappen **Öppen** öppnas skärmen *Undersökning* för vald patient.

Övriga funktioner på fliken Filter

På fliken **Filter** kan användare med tillämplig behörighet lägga till, ändra eller radera flikar på skärmen *Välj patient*. Se tabellen nedan.

Tabell 3: Alternativ på fliken Filter (kräver åtkomsträttigheter)

Ändra aktuella parametrar för patientfiltrering.	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj filtreringsalternativ.Tryck på knappen Spara.Kontrollera att namnet på den flik du valde visas i namnrutan.Välj OK.
Skapa en ny flik på skärmen <i>Välj patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj filtreringsalternativ för fliken.Välj knappen Spara som.Ange ett nytt namn för fliken.Välj OK.
Radera en flik från skärmen <i>Välj patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj knappen Radera.Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Fliken Kolumner

Använd fliken **Kolumner** för att lägga till fler sökalternativ (t.ex. Ålder, Kön, Meddelanden) till den filtrerade listan. Alternativen visas som kolumner i resultatområdet. För att lägga till fler kolumner till en filtrerad lista väljer du fliken **Kolumner** och väljer sedan önskade alternativ.

Obs

Du måste ha systemåtkomst på chefsnivå för att spara dessa nya kolumner i patientfiltret.

Obs

När man väljer en rad i resultatlistan och sedan väljer knappen **Öppen** öppnas skärmen *Undersökning* för vald patient.

Knappen Sortera flikar

Välj knappen **Sortera flikar** för att ändra sorteringen av flikarna i patientlistan

4.2.7 Så här uppdaterar man arbetslistan

Välj knappen **Uppdatera arbetslista** för att uppdatera patientlistorna.

4.2.8 Så här söker man i arbetslistan

Använd funktionen **Sök** i arbetslistan för att söka efter en patient eller en lista med patienter. Använd ett eller flera fält för att söka i Leverantör av arbetslista för modalitet. Alla fält som går att söka i kan konfigureras. Standardfälten är de följande: Patientnamn, Patient-ID, Remissnummer, ID för begärd procedur, Schemalagt procedurdatum. Den schemalagda proceduren visas och patienten läggs till i den lokala databasen.

4.2.9 Admin

Välj knappen **Admin** för att öppna skärmen *Admin* och systemadministrationsfunktionerna. Se avsnittet Gränssnitt för systemadministration för ytterligare information.


4.2.10 Stäng patientlistan

Välj knappen **Stäng** för att lämna patientlistan och gå tillbaka till *Start*skärmen.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

4.3 Skärmen Procedur

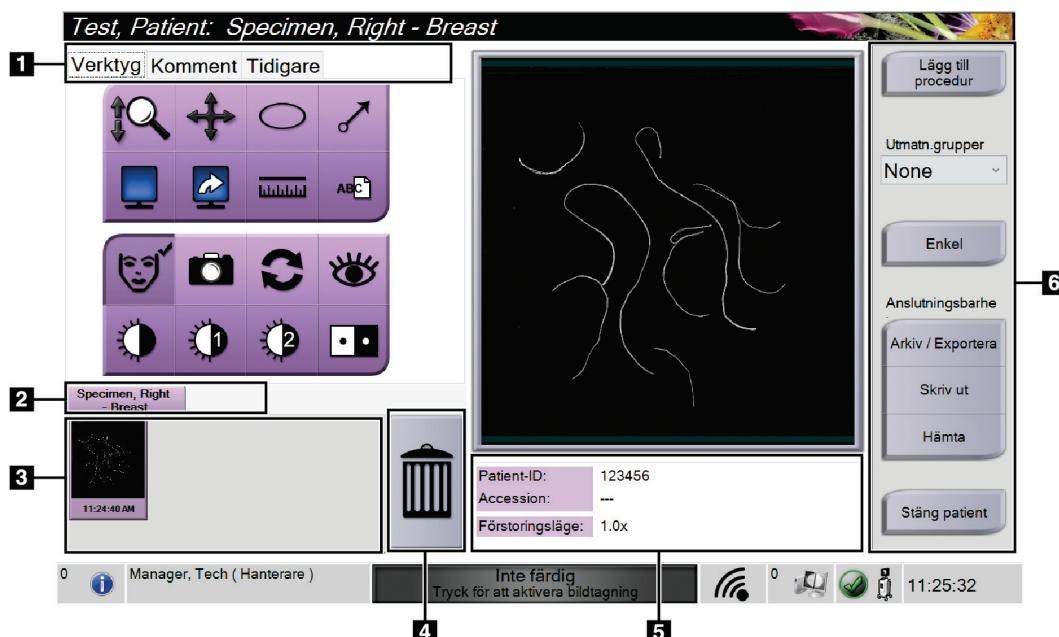

Figur 19: Skärmen Procedur

Tabell 4: Skärmen Procedur


1. Flikar	Välj fliken Verktyg för att granska bilderna, se avsnittet Bildgranskningsverktyg på sidan 48. Välj fliken Kommentarer för att lägga till kommentarer till bilderna – se fliken Kommentarsflik på sidan 49. Välj fliken Tidigare för att granska tidigare bilder för patienten – se fliken Tidigareflik på sidan 50.
2. Procedur flikar	Visar aktuella procedurer för patienten. Välj fliken för att välja önskad procedur för patienten. Obs: Flikarna kan ändras för att visa en eller två textrader – se Ställa in procedurflikar med flera rader på sidan 70.
3. Miniatyrbilder	Visar små ikoner av bilder relaterade till den valda patienten. En miniatyrbild med kamerans ikon är en ögonblicksbild. En ögonblicksbild skiljer sig åt i storlek och upplösning från originalbilden.
4. Ikonen Söptunna	Tar bort en vald miniatyrbild. Obs: Man kan inte återställa raderade bilder.
5. Procedurinformation	Visar patientens ID, anslutningsnummer och förstoringsnivå.

Tabell 4: Skärmen Procedur

6. Knappar	Många funktioner är tillgängliga från detta fönster genom att välja en specifik knapp: Lägg till procedur: Lägg till en ny procedur – se Lägg till en undersökning på sidan 37. Enkelt och Avancerat: Välj att visa en större eller mindre uppsättning bildredigeringsverktyg på fliken Verktyg – se Enkel och avancerad knapp på sidan 38. Arkiv/Exportera: Skicka bilder till utdataenhet, se avsnittet Så här använder man Utdata på begäran på sidan 40. Skriv ut: Skriva ut – hänvisar till Skriv ut på sidan 41. Hämta: Fråga de konfigurerade enheterna om den nuvarande patientinformationen. Stäng patient: Avsluta patienten och undersökningen – se Stäng en patient på sidan 39.
------------	---

4.3.1 Lägg till en undersökning

1. För att lägga till en ny procedur, välj knappen **Lägg till procedur** för att öppna dialogrutan **Lägg till procedur**.

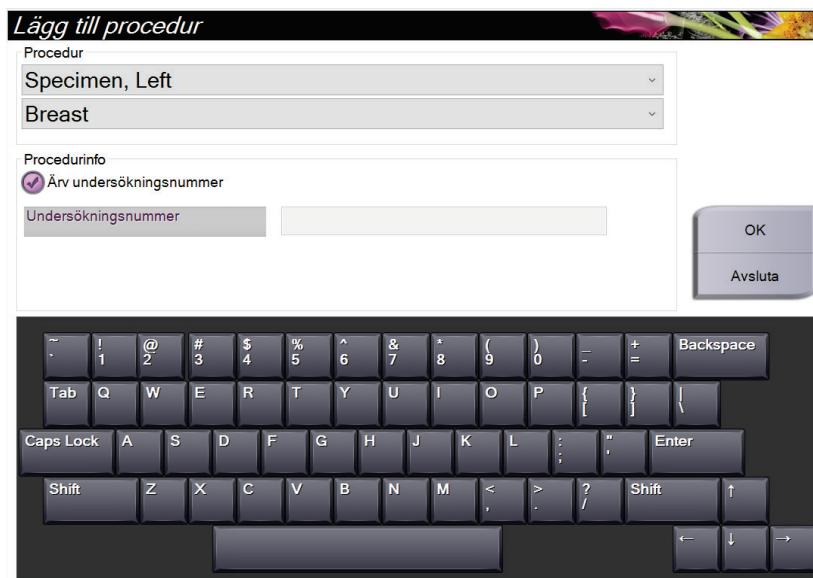


Figur 20: Dialogrutan Lägg till procedur

2. Använd rullgardinslistorna för att välja den typ av undersökning som ska läggas till.
3. Det aktuella undersökningsnumret används automatiskt. Använd ett annat remissnummer genom att avmarkera kryssrutan "Ärv undersökningsnummer" och ange önskat nummer.
4. Välj **OK**. En ny procedurflik läggs till för proceduren som valdes.

4.3.2 Enkel och avancerad knapp


Man kan visa en mindre eller större uppsättning verktyg för bildgranskning på fliken **Verktyg**. Den här knappen växlar uppsättningen verktyg som visas.

Välj knappen **Enkel** för att visa den förenklade versionen av fliken **Verktyg** med mindre bildredigeringsverktyg.

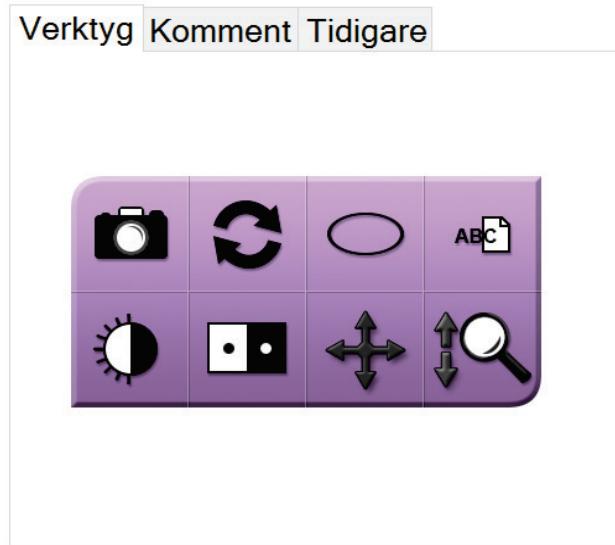

Figur 21: Verktyg-fliken, Enkel

Välj knappen **Avancerat** för att visa den avancerade versionen av fliken **Verktyg** med fler bildredigeringsverktyg.

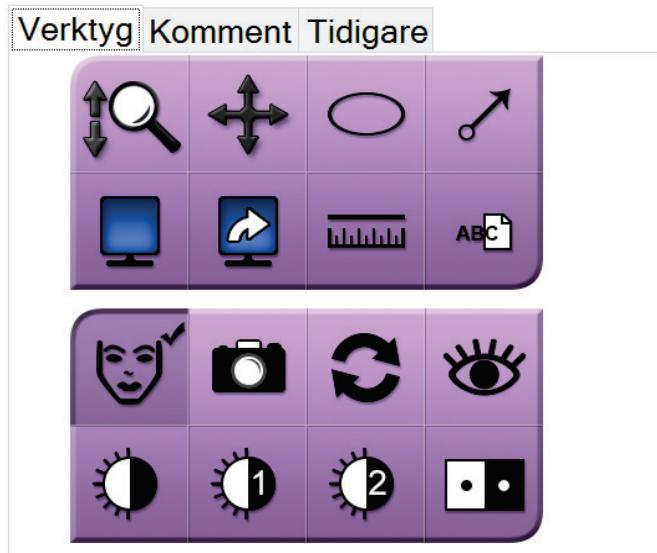

Figur 22: Verktyg-fliken, Avancerad

För information om verktyg för bildgranskning, se [Fliken Verktyg](#) på sidan 48.

4.3.3 Hämta

Välj knappen **Hämta** för att fråga de konfigurerade enheterna om den nuvarande patientinformationen. Knappen **Hämta** utför samma funktion som knappen **Sök och hämta** på skärmen *Admin*.

4.3.4 Stäng en patient

Välj knappen **Stäng patient**. Systemet återgår till skärmen *Välj patient* och sparar automatiskt till de konfigurerade utmatningsenheterna eventuella bilder som inte skickades tidigare.

4.3.5 Så här väljer man en resultatgrupp

Väljen utsignaluppsättning i rullgardinsmenyn *Utmatningsgrupper* på skärmen *Procedur*.

 **Obs**

Bilderna skickas inte om ingen resultatgrupp har valts.

4.4 Så här kommer man till bildgranskningsfunktionerna

Välj fliken **Verktyg** på skärmen *Procedur* för att öppna bildgranskningsfunktionerna och verktygen. Se [Fliken Verktyg](#) på sidan 48 för information.

4.5 Så här använder man resultatgrupper

Bilderna skickas automatiskt till utdataenheterna i den valda resultatgruppen när en patient stängs.

4.5.1 Lägg till eller redigera en resultatgrupp

 **Obs**

Konfigurationen av resultatgrupper görs under installationen, men du kan redigera befintliga grupper eller lägga till nya.

Gör så här för att lägga till en ny resultatgrupp:

1. Gå till skärmen *Admin*.
2. Välj knappen **Hantera utmatn.grupper**.
3. Välj knappen **Ny**, ange information och välj sedan resultatenhet(er).
4. Välj **Lägg till**, och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdateringen lyckades*.
5. Du kan ställa in valfri grupp som standard.

Så här redigerar du en resultatgrupp:

1. Gå till skärmen *Admin*.
2. Välj knappen **Hantera utmatn.grupper**.
3. Välj knappen **Redigera** och gör sedan ändringarna.
4. Välj **Spara** och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdatering genomförd*.

4.6 Så här använder man Utdata på begäran

Alternativen för Utdata på begäran är följande: Arkivera, Skriva ut, eller exportera. Man kan arkivera, exportera eller skriva ut aktuell öppnad patient manuellt tills proceduren stängs.

När man trycker på en knapp för resultat på begäran har man möjlighet att skicka bilden till någon av de konfigurerade resultatenheterna.

4.6.1 Så här arkiverar man

1. Välj knappen **Arkiv**.
2. Välj en lagringsenhet:
 - Välj **Lista lagringsenhet** knappen och gör ditt val från de alternativ som visas.
– ELLER –
 - Välj knappen **Lista resultatgrupp** och gör ditt val från de alternativ som visas.
3. Välj knappen **Sänd** att kopiera alla valda bilder från den öppna fallstudien till den valda enheten.

Obs

Använd funktionen **Manage Queue** (Hantera kö) i aktivitetsfältet för att granska arkivstatus.

4.6.2 Hur man exporterar

1. Välj knappen **Exportera**.
2. Välj en enhet (mål) från rullgardinsmenyn.
3. Välj knappen **START** för att kopiera alla valda bilder till vald enhet.

Obs


Om man inte vill visa patientrelaterad information i utmatningsbilden markerar man kryssrutan **anonym**.

4.6.3 Skriv ut

1. På skärmen *Procedur*, välj knappen **Skriv ut**. Skärmen *Skriv ut* öppnas. Se [figuren](#) på sidan 42 hur man förbereder information för utskrift.
2. Välj filmformat från sidans alternativområde.
3. Välj en miniatyrbild.
4. Välj bildvisningsrutan på höger sida av skärmen för att lägga den valda miniatyrbilden på filmen.
5. För att lägga andra miniatyrbilder på filmen, upprepa steg 2 till 4.
6. För att skriva ut ett annat filmformat av samma bilder, välj knappen **Ny film** och upprepa steg 1 till 4.
7. Välj knappen **Skriv ut** för att skriva ut dina filmer.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 4: Användargränssnitt

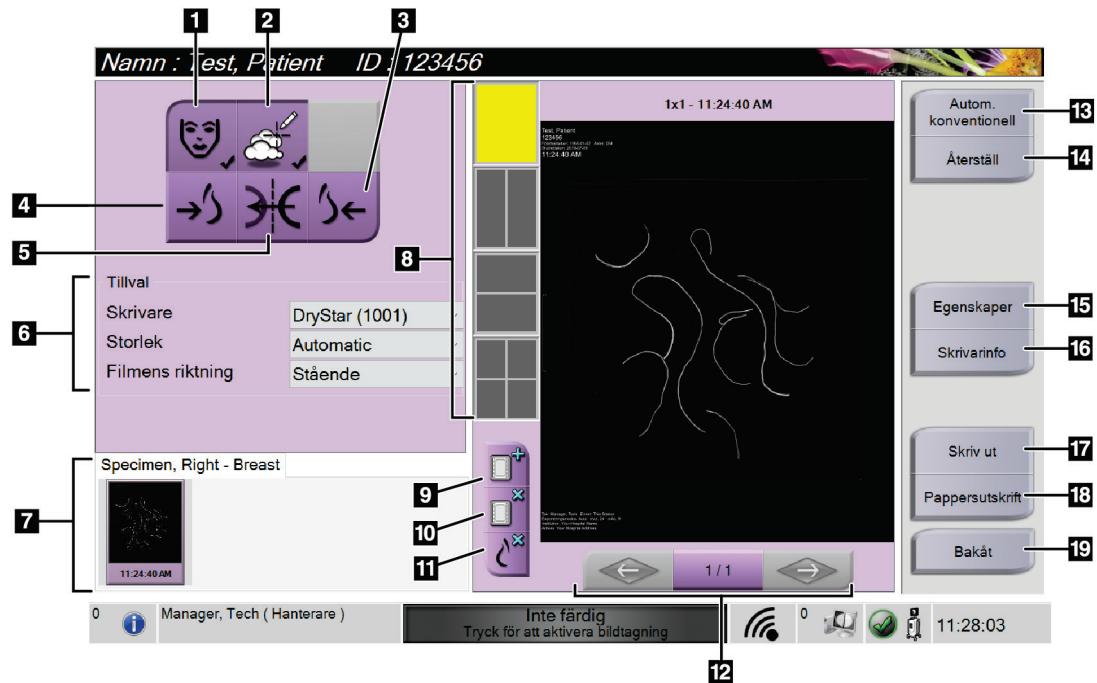

Figur 23: Skärmen Skriv ut

Figurförklaring

1. Visa eller dölja patientdata.
2. Visa eller dölja markeringar och kommentarer.
3. Skriv ut bilden från ett ventralt perspektiv.
4. Skriv ut bilden från ett dorsalt perspektiv.
5. Spegelvända bilden.
6. Välj skrivaralternativ.
7. Visa miniatyrbilder.
8. Välj filmformat (antal rutor).
9. Skapa en ny film.
10. Radera den aktuella filmen.
11. Radera en bild från den aktuella filmen.
12. Bläddra igenom filmsidorna.
13. Skapa (automatiskt) en film för varje konventionell bild.
14. Återgå till skärmen till tidigare inställningar.
15. Öppna skärmen *Egenskaper* för val av skrivarinställningar.
16. Visa skrivarrens IP-adress, AE-titel, port och kapacitet för utskrift i verlig storlek.
17. Starta utskriftsprocessen.
18. Skriv ut bilden på papper.
19. Återgå till skärmen *Procedur*.

Kapitel 5 Bilderna

5.1 Skärmen Bildvisning



Figur 24: Skärmen Bildvisning

Efter att man tagit en exponering öppnas den tagna bilden på bildmonitorn. Patient- och procedurinformation kan visas på skärmen *Image Display* (Bildvisning). För att aktivera eller avaktivera patient- och procedurinformation, gå till **Verktygs** fliken på skärmen *Procedur* och välj knappen **Patient Information**.

Figurförklaring

1. Patientinformation och undersökningsdatum
2. Procedur- och anläggningsinformation inklusive exponeringsteknik och teknologisk information
3. Bildgranskning Verktygsinformation, t.ex. fönster/nivå och zoomvärden

5.2 Så här ställer man in exponeringsteknikerna

Två exponeringskontrollägen (eller AEC-lägen) är tillgängliga för att välja exponeringsteknik.

- Auto-läget är det rekommenderade läget för exponeringsteknik. I autoläge väljer systemet automatiskt kV- och mAs-värdena.
- Manuell funktion kan användas om så önskas. I manuellt läge väljer användaren kV och mAs.

Ändra exponeringsläget:

1. Välj ikonen **konsol** i aktivitetsfältet för att öppna menyn Fel.
2. I felmenyn, välj **Exponeringsinställningar**. Skärmen *Exponeringsinställningar* öppnas.
3. Under "AECläge", använd + eller - knapparna för att välja läget.
4. I manuellt läge välj kV- och mAs-värdena.
 - För att öka eller minska en exponeringsteknik i stegvis, välj och släpp sedan + eller - knappen.
 - För att flytta snabbt genom värdena för exponeringsteknik, välj och håll ned + eller - knappen.
5. Välj den **Svarta** knappen för att återgå till ursprungsskärmen.



Obs

Om man ändrar exponeringsinställningarna blir de nya exponeringsteknikerna standardvärdet tills en patient är stängd.

5.3 Så här tar man en bild

1. Centrera provet på provfacket inom markeringen för den förstoringsnivå som behövs.
2. Placera provfacket i bildskåpet för den nödvändiga förstoringsnivån.
3. Stäng bildskåpsdörren.
4. Välj **Röntgen aktiv** för att aktivera röntgen. Fältet ändras till grönt och visar en Klar status. **RÖNTGEN**knappen lyser grönt på den nedre högra sidan av kontroldisplayen.

Färdigt
Tryck för att inaktivera bildtagning

Figur 25: Inbländad bild

5. Tryck på och släpp knappen RÖNTGEN.



Figur 26: Knapp RÖNTGEN

Under exponeringen:

- Knappen RÖNTGEN ändras till gult för att indikera att röntgenutsläppssekvensen har startat. Strålingssymbolen lyser under RÖNTGEN knappen. (Se figuren nedan.)



Figur 27: RÖNTGEN Knapp när exponeringen är igång

- En ljudsignal låter vid varje exponering; 10 enskilda pip hörs under exponeringssekvensen.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 5: Bilderna

Efter att exponeringen avslutas:

- Bilden öppnas på bildskärmskärmen och en miniatyrbild visas i miniatyrområdet på skärmbyn Procedur. Bilden godkänns omedelbart.
6. För att ta en annan bild, välj önskad ruta för **Röntgenstart** och tryck sedan på knappen **RÖNTGEN**.

För att stoppa exponering före automatisk avslutning, tryck på knappen **RÖNTGEN**. Ett felmeddelande visas.

För att starta en annan exponering efter att man stoppat en före automatisk uppsägning:

1. Välj **OK** i felmeddelandet.
2. Välj ikonen **konsoli** i aktivitetsfältet.
3. Välj **Rensa alla fel**.
4. Aktivera röntgen.
5. Tryck på knappen **RÖNTGEN**.

För att radera en bild välj miniatyrbilden och väljer sedan ikonen **Soptunna**.

Obs



Man kan inte återställa en raderad bild.

Se [Exempel på kliniska sekvenser](#) på sidan 53 för ytterligare information.

5.4 Så här granskar man bilderna



Figur 28: Fliken Verktyg i procedurskärmen

1. Välj en miniatyrbild. Bilden öppnas i förhandsgranskningssområdet på skärmen *Procedur* och på bildskärmskärmen.
 - När bildredigeringsverktygen används, visar förhandsgranskningssbilden förhållandet mellan det område som valts med verktyget och hela bilden.
2. Använd verktygen för bildgranskning (se [Fliken Verktyg](#) på sidan 48) för att förbättra hela bilden eller intressanta områden i bilden.

5.4.1 Bildgranskningsverktyg

Fliken Verktyg



Figur 29: Bildgranskningsverktyget

9. Verktyget **Patient Information** aktiverar patientinformationsdisplayen.
10. Knappen **Kamera** fångar en stillbild av bildvisningsområdet och lägger till ögonblicksbilden till det aktuella förfarandet.
11. Verktyget **Återställ** returnerar en förbättrad bild till det ursprungliga tillståndet.
12. **Förstärkt visualisering** justerar bildskärpan med ett skjutreglage.
13. Verktyget **Fönster/Nivå** används med musen för att ändra ljusstyrka och kontrast. För att återställa fönstret/nivån till de ursprungliga värdena, dubbelklicka på bilden.
14. De **Fördefinierade Fönster/Nivå**-verktygen anger de värden som används mest.
15. De **Fördefinierade Fönster/Nivå**-verktygen anger de värden som används mest.
16. Knappen **Invertera** ändrar svart till vitt och vitt till svart.

Obs



Linjalen, W / L-förinställningarna och förbättrad visualiseringsverktyg är inaktiva för stillbilder.

Obs




För att spara markeringar och kommentarer, använd knappen **Kamera** för att skapa en ögonblicksbild av bilden med markeringar och kommentarer.

Man kan växla mellan två uppsättningar verktyg för bildgranskning på fliken **Verktyg**. Välj knappen **Avancerad** för att visa alla verktyg för bildgranskning. Välj knappen **Enkel** för att bara visa de grundläggande bildgranskningsverktygen.

När ett bildgranskningsverktyg är aktivt visas en kryssrutan på verktygsknappen.

Om man vill spara markeringar och anteckningar på en bild, välj verktyget **Kamera** för att ta en bild på *Bilddisplayen* skärmen. En miniatyrbild av ögonblicksbilden läggs till i fliken **Procedur** och stillbilden sparas i proceduren.

Kommentarsflik

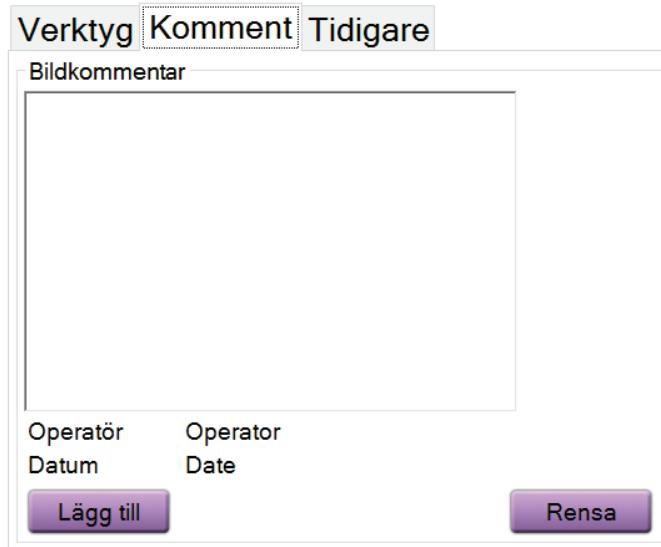

Figur 30: Kommentarsfliken

Med den här funktionen kan man göra anteckningar eller kommentarer om bildinnehåll. Denna information sparas i DICOM-rubriken. Informationen visas inte på bildskärmskärmen.


För att lägga till kommentarer till en bild:

1. Tryck på knappen **Lägg till**. En skärm med ett virtuellt tangentbord öppnas.
2. I rutan Bildkommentar väljer man ett alternativ från listan.
3. Använd det virtuella tangentbordet för att lägga till kommentarer i området Ytterligare objekt.
4. Välj knappen **Spara** för att spara kommentarer och återvända till *Procedur* skärmen.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 5: Bilderna

Tidigare flik

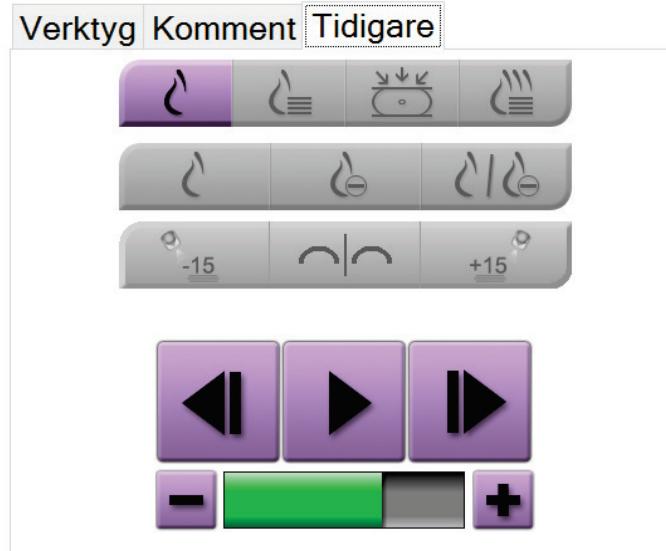


Figur 31: Tidigare flik

Man kan hämta eller importera tidigare DICOM-bilder för en patient och visa dem på systemet. Den typ av bild man tittar på bestämmer vilka knappar man kan använda.

Visningssätt

Använd knapparna i området Visningssätt på skärmen för att välja vilken typ av vy som ska visas på bildvisningsskärmen. Man kan växla mellan konventionella 2D, syntetiserade 2D, tomosyntesprojektioner och rekonstruktioner för att visa kombinationsbilderna.

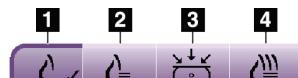

Figur 32: Visningssätt

Figurförklaring

1. Knappen **Konventionell** visar konventionella 2D-bilder.
2. Knappen **Genererad 2D** visar en syntetiserad 2D-bild genererad från en uppsättning tomosyntesbilder.
3. Knappen **Projektorer** visar 15°-projektionsbilder.
4. Knappen **Rekonstruktioner** visar rekonstruerade snitt.

Kontrastvy

- **Låg energi** knapp
- **Subtraktion** knapp
- **Låg energi/subtraherad delning** knapp

Stereoparvyer

- Välj knappen **-15** för att via den stereobilden.
- Välj knappen **+15** för att via den stereobilden.
- Välj mittknappen för att skapa en horisontell layout med 2 bilder (ovanför varandra) med bilden för +15 överst och bilden för -15 nederst.

Videovisningar


- Använd pilknapparna för att manuellt flytta igenom en uppsättning tomosyntesbilder en åt gången.
- Använd play/paus knappen för att visa uppsättningen bilder som en film.
- Den gröna linjen visar videohastigheten. Använd + och - knapparna för att anpassa videohastigheten.

5.5 Skicka bilderna till resultatanordningar

Man kan skicka bilderna till utmatningsenheter eller använda exportfunktionen för att kopiera bilder till en tillfällig lagringsenhets. Se [Så här använder man resultatgrupper](#) på sidan 39 för instruktioner.

Kapitel 6 Exempel på kliniska sekvenser


6.1 Exempel bildarbetsflöde

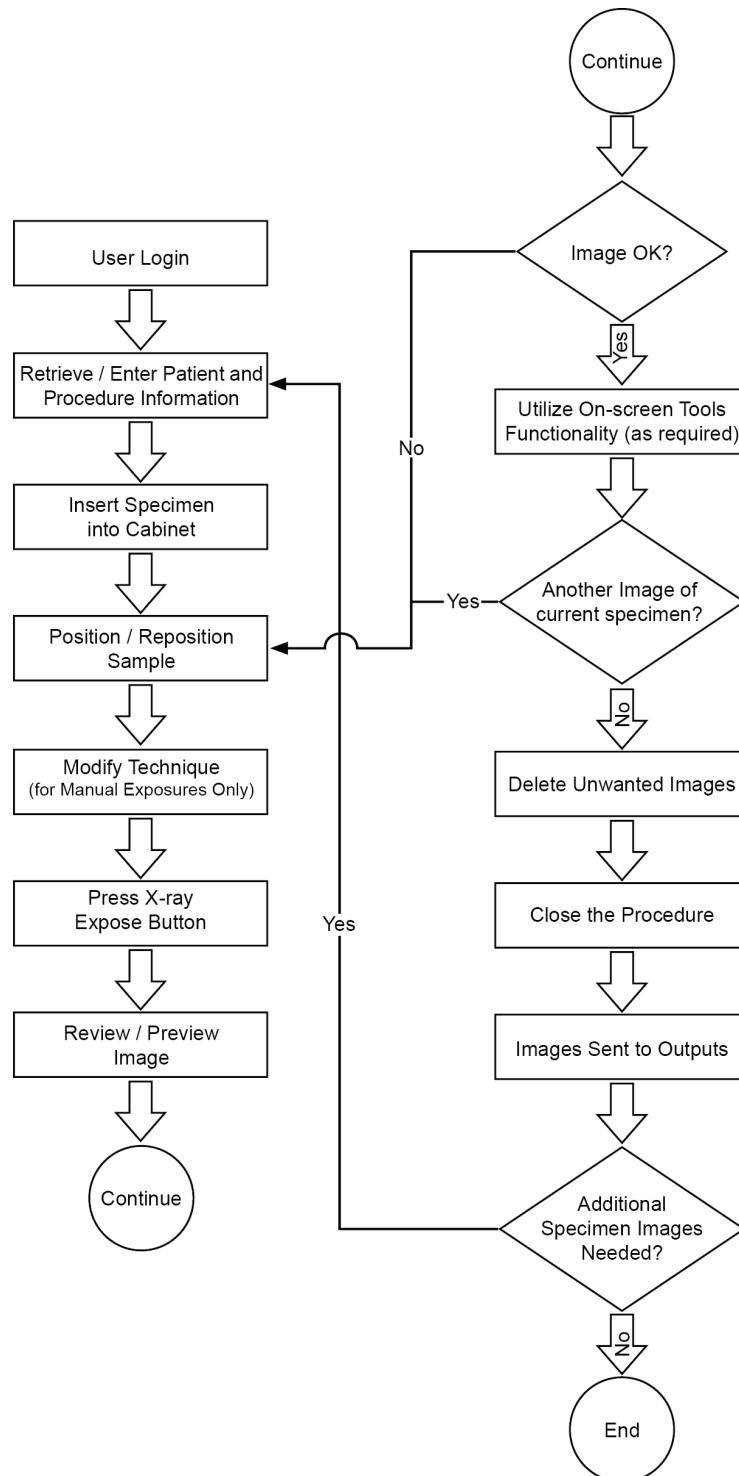

Trident HD Proradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser


6.2 Exempel driftsekvens

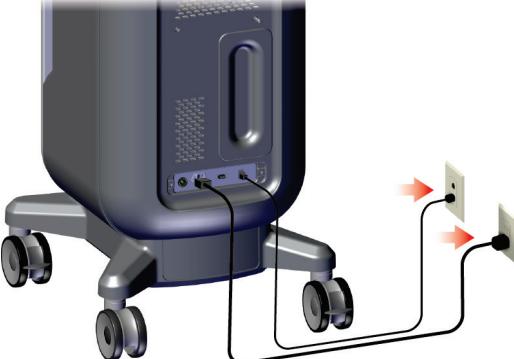Steg	Var denna åtgärd utförs
Flytta konsolen till korrekt position. Lås hjulen.	
Anslut systemet till ström och nätverket.	

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser




Starta systemet och logga in.

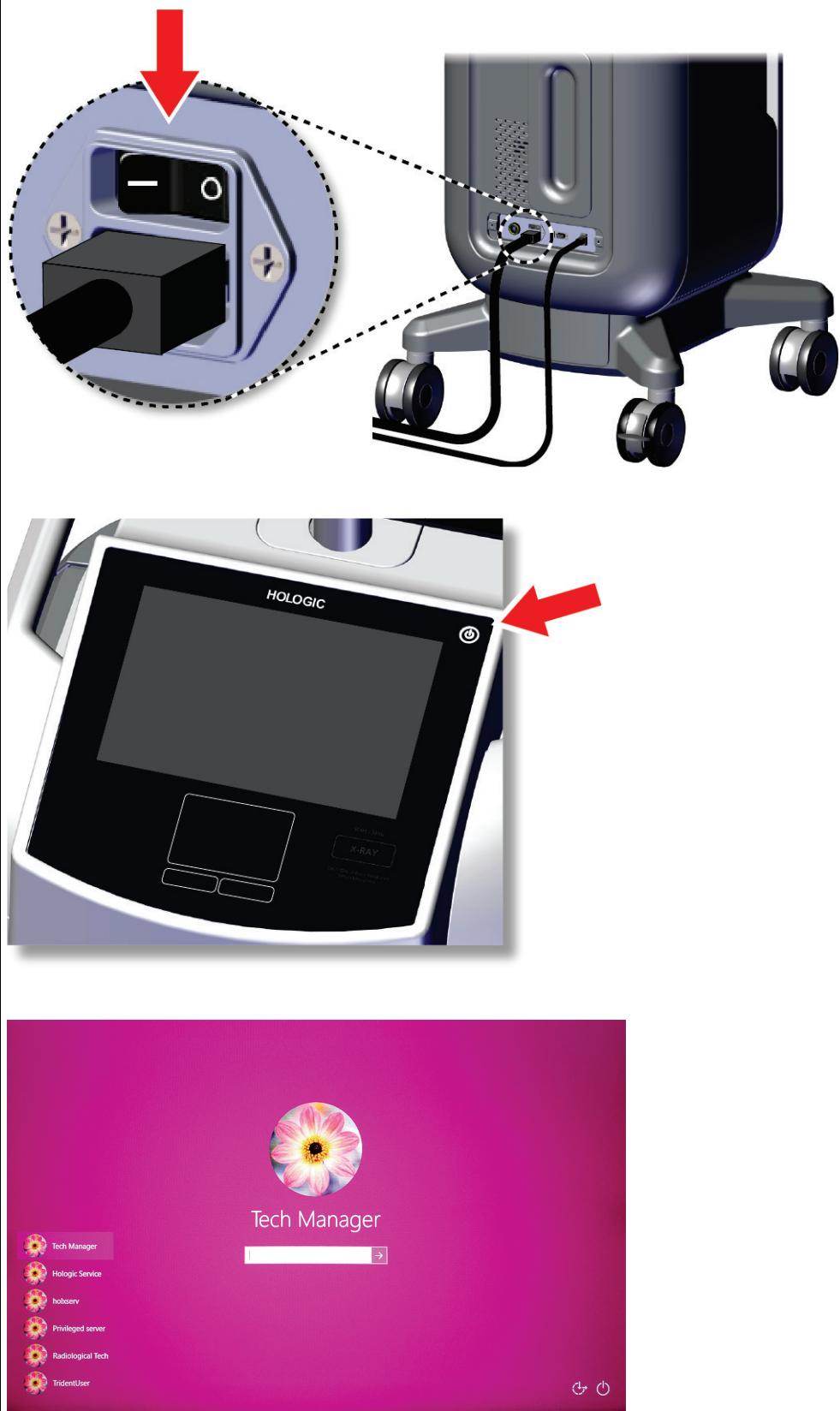


Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser



Välj patient och procedur.

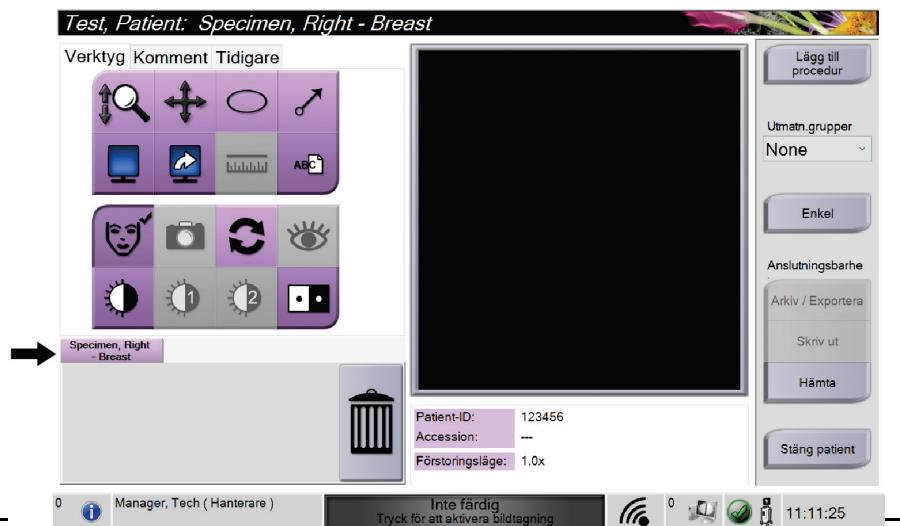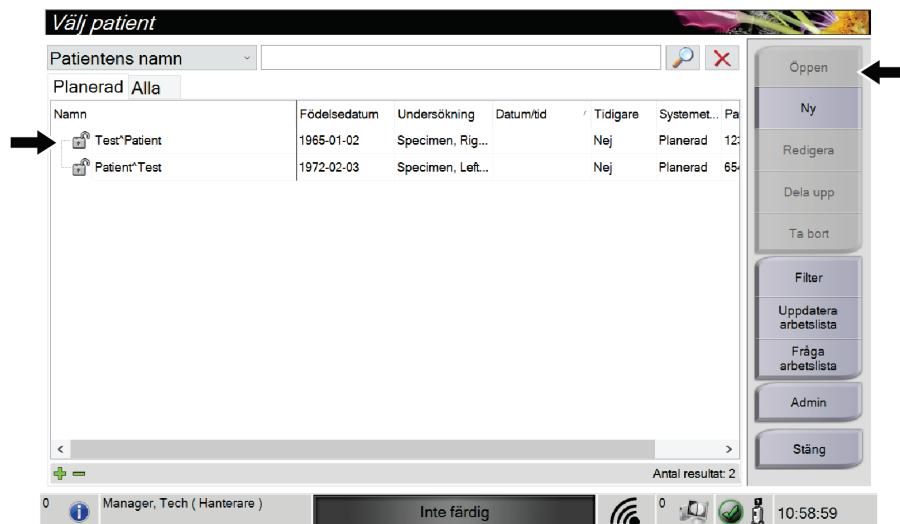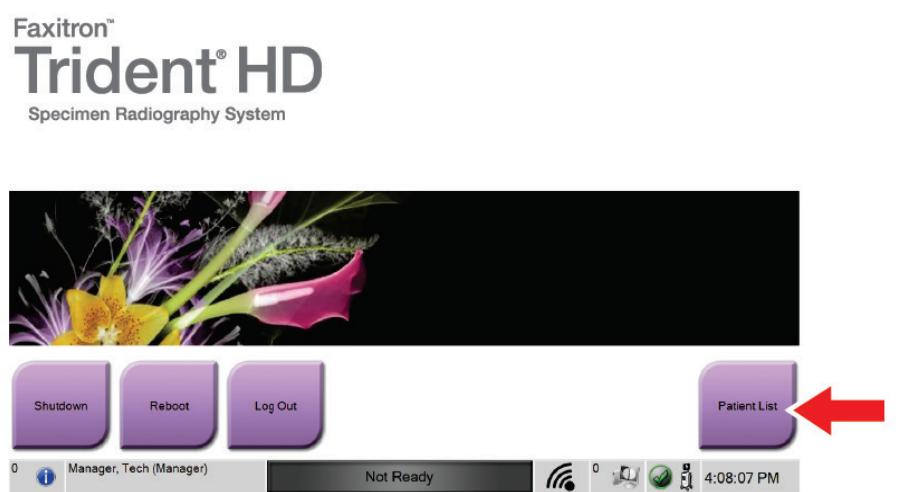

Förbered provet per anläggningspolicy och centrum på provbrickan.

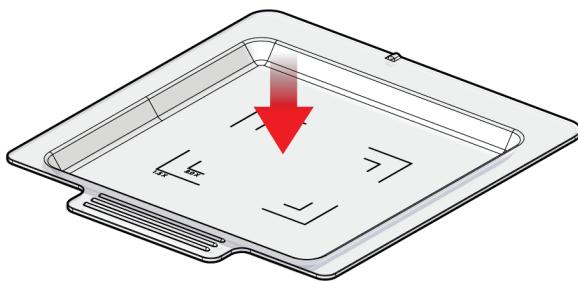


Placera provbrickan i bildskåpet för den önskade förstoringsnivån. Stäng dörren.

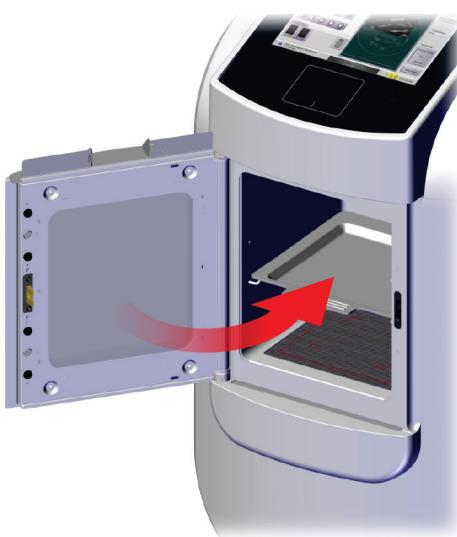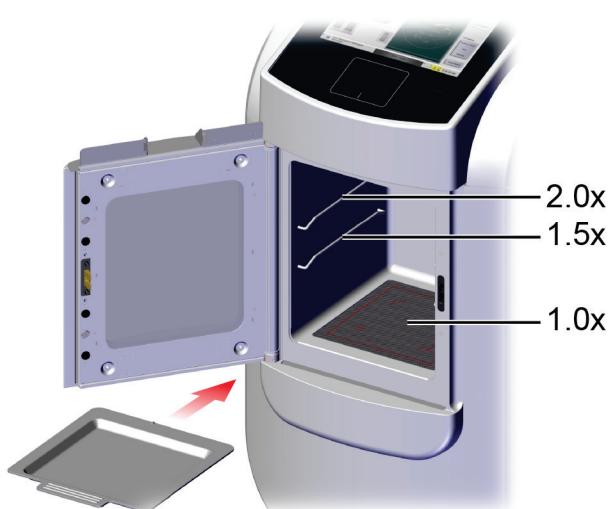

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser



Ta bilden.

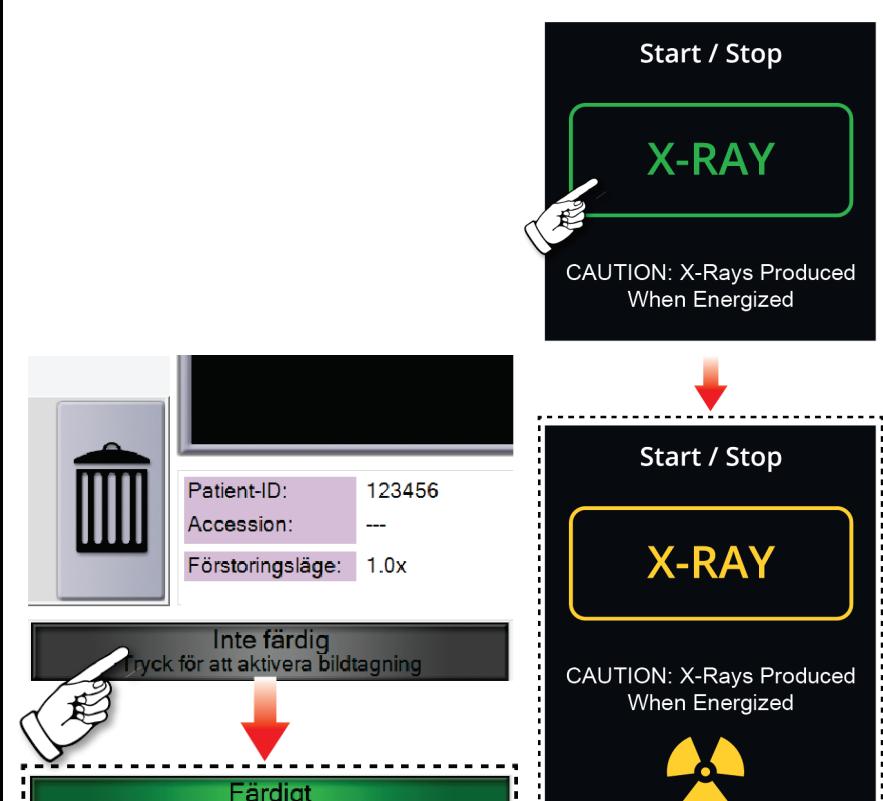

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser

Förhandsgranska bilden.

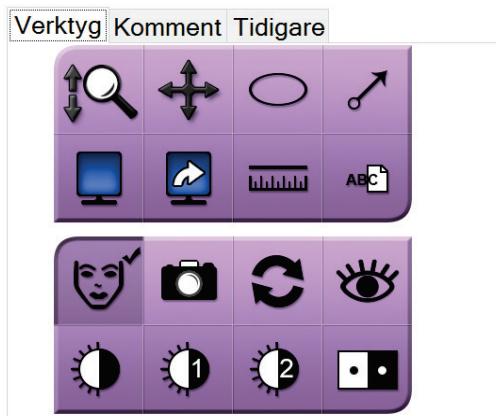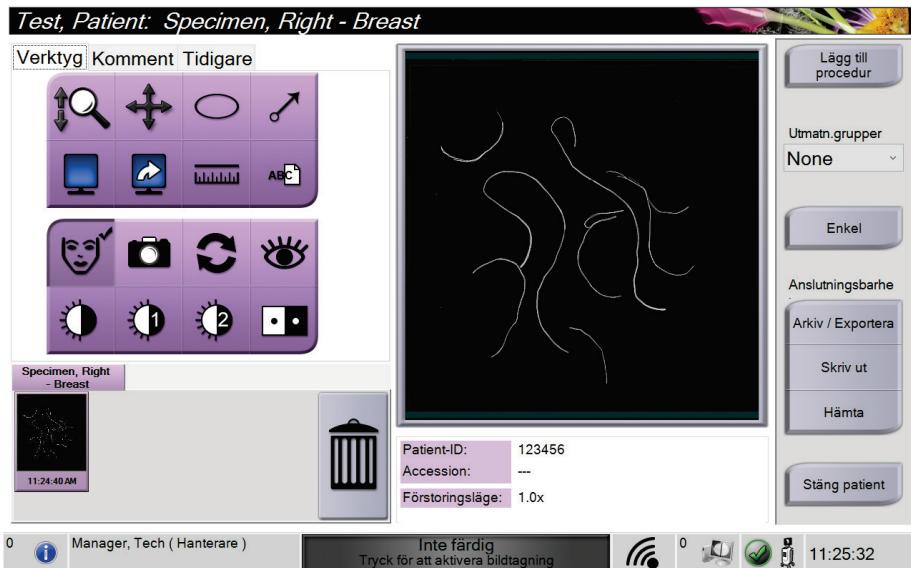


Arkivera eller exportera bilderna och stäng sedan patienten.



Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 6: Exempel på kliniska sekvenser


Ta bort provbrickan från bildskåpet. Följ anvisningarna för provhantering.

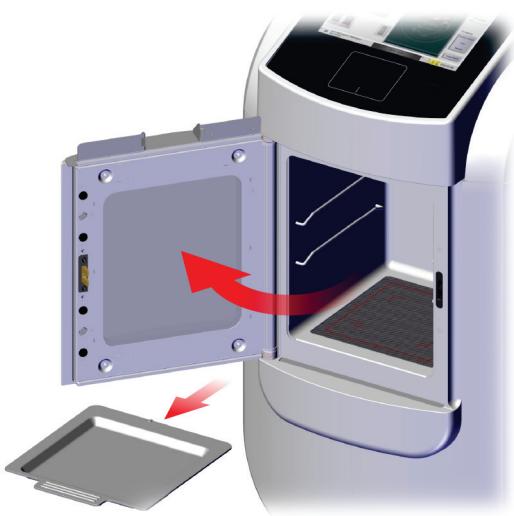

Stäng av systemet.



Rengör systemet.

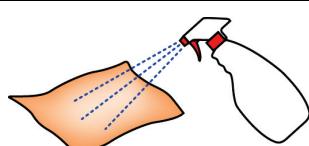

Kapitel 7 Kvalitetskontroll

7.1 Kvalitetskontrollprocedurer som krävs

Följande procedurer krävs för korrekt systemdrift.

Tabell 5: Procedurer som krävs

Test	Frekvens
Förstärkningskalibrering	Månadsvis

7.2 Så här gör man för att öppna kvalitetskontrolluppgifterna

På skärmen *Admin* (Administration), välj en av följande knappar:

Förstärkningskalibrering eller **Testmönster**. Alla kvalitetskontrolluppgifter kan öppnas på detta sätt när som helst.



7.2.1 Förstärkningskalibrering

Gör vinstkalibreringen varje månad och när artefakter ses.



Obs

När systemet visar vinstkalibrerings-meddelandet, gör proceduren innan man stänger av systemet. Om man gör vinstkalibreringen vid en annan tid, gå till proceduren genom *Admin* skärmen.

1. Markera **Ja** för att göra kalibreringen nu.
 2. Om man väljer att göra kalibreringen nu uppmanas du att välja vinstkalibreringsläget (*Automatisk*, *Automatisk med avstängning*, eller *Manuell*).
 3. Välj läget Förstärkningskalibrering.
 4. Se till att akrylblocket och kontaktytan (botten) på bildskåpet är rena. När meddelandet för att infoga provsteg visas, ta bort provbrickan och placera akrylblocket i bildskåpet.
-



Obs

Artefakter som finns på akrylblocket från tillverkaren får inte förbises. Sådana artefakter kommer att påverka detektorkalibrering.

5. Se till att det inte finns några andra föremål i bildskåpet och stäng skåpdörren.
6. Bilderna tas på följande sätt:
 - *Automatisk förstärkningskalibrering*: Systemet tar sex bilder och gör förstärkningskalibreringen automatiskt och loggar sedan ut användaren.
 - *Automatisk med avstängning Förstärkningskalibrering*: Systemet tar sex bilder och gör förstärkningskalibrering automatiskt och stänger sedan av systemet.
 - *Manuell förstärkningskalibrering*:
 - a. Tryck på knappen **RÖNTGEN**.
 - b. Vänta tills systemet återgår till läget **KLAR**, tryck sedan på knappen **RÖNTGEN**.
 - c. Upprepa steg b tills man får sex bilder.
7. När förstärkningskalibrering är klar visas ett meddelande om framgångsrikt slutförande.

Kapitel 8 Underhåll, rengöring, och desinfektion

8.1 Allmän information

8.1.1 För allmän rengöring

Denna procedur omfattar rengöring av enheten och de ytor som proverna inte kommer i kontakt med.

Använd en luddfri trasa och applicera en utspädd rengöringsvätska för att rengöra komponenter och ytor.



Försiktig:

Använd minsta möjliga mängd rengöringsvätskor. Vätskorna får inte flöda eller rinna.

8.1.2 För desinfektion

För att desinficera systemets komponenter och ytor rekommenderar Hologic följande desinfektionslösningar:

- 10 % klorinlösning och vatten med en del kommersiellt tillgängligt klorin (normalt 5,25 % klorin och 94,75 % vatten) och nio delar vatten. Blanda denna lösning dagligen för bästa resultat.
- Kommerciellt tillgänglig isopropylalkohollösning (70 % isopropylalkohol efter volym, inte utspätt)
- Högst 3 % koncentration av väte peroxidlösning

När du har tillämpat någon av ovanstående lösningar, använd en ren trasa för att rengöra systemet, följ lämpliga kontakt (våt) tider.



Försiktig:

För att undvika skada på de elektroniska komponenterna, använd inte desinfektionsmedel i sprayform på systemet.

8.1.3 Gör så här för att undvika möjlig skada på person eller utrustning

Använd inte korroderande lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller polish. Välj ett rengörings-/desinfektionsmedel som inte skadar plast, aluminium eller kolfiber.

Använd inte starka rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, hög alkoholkoncentration eller metanol av någon koncentration.

Utsätt inte utrustningens delar för ånga eller sterilisering i hög temperatur.

Låt inte vätska tränga in i utrustningens inre delar. Spraya inte rengöringsmedel eller vätskor på utrustningen. Använd alltid en ren trasa och applicera sprayen eller vätskan på trasan. Om vätska tränger in i systemet ska du koppla ifrån strömförsörjningen och undersöka systemet innan du tar det i bruk igen.

**Försiktig:**

Felaktiga rengöringsmetoder kan skada utrustningen, minska bildtagningsprestandan eller öka risken för elektrisk stöt.

Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av den produkt du använder för rengöring. Dessa anvisningar omfattar instruktioner och försiktighetsåtgärder för applicering och kontakttid, förvaring, krav på sköljning, skyddsklädsel, hållbarhet och kassering. Följ instruktionerna och använd produkten med den säkraste och mest effektiva metoden.

8.2 Komponent specifiskötsel

8.2.1 Så här rengör man bildvisningsmonitorn

- Vindrör inte skärmen när man arbetar med prover.
- Var försiktig när man rengör den yttre ytan på displayområdet.
- Använd alltid ren, mjuk, luddfri trasa för att rengöra skärmområdet. Microfiberdukar, som är tillgängliga i de flesta butiker, rekommenderas.
- Starka kemikalier och slipmedel kan skada bildskärmen och ska aldrig användas.
- Använd aldrig en spray eller flytande vätska på displayen.
- Tryck aldrig på displayområdet.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller fluorider, ammoniak, alkohol eller ämnen med slipverkan.
- Använd aldrig blekmedel.
- Använd aldrig stålull.
- Använd aldrig en svamp med skrubbyta.

Det finns många kommersiellt tillgängliga produkter för rengöring av LCD-skärmar. En produkt som är fri från ingredienser eller slipmedel som beskrivs ovan och används enligt tillverkarens anvisningar kan användas säkert.

8.2.2 Nätsladd

Så här kontrollerar man nätkabeln

1. Inspektera nätsladden en gång per kvartal, skada på locket eller dragavlastning.
2. Om nätkabeln är skadad, kontakta Hologic för att byta ut nätsladden.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 8: Underhåll, rengöring, och desinfektion

8.3 Underhåll

8.3.1 Schema för förebyggande underhåll

Tabell 6: Användarens förebyggande underhåll

Åtgärd	Rekommenderad frekvens			
	Varje användningstillfälle	Varje vecka	Varje månad	Som krävs
Rengör och desinficera provbrickan	✓			
Rengör och desinficera kontaktytan	✓			
Utför förstärkningskalibrering			✓	
Rengör och desinficera bildskåpet				✓
Rengör och desinficera handtaget				✓
Rengör och desinficera displaytan				✓

Tabell 7: Service för förebyggande underhåll

Åtgärd	Klar varje år
Utför kontrollsensorstatus	✓
Villkor röntgenkällan	✓
Utför kV verifiering	✓
Utför mAs verifiering	✓
Utför plattfält utvärdering av artefakt	✓
Utföra Röntgenstråle Tub justeringsutvärdering	✓
Utför systemupplösningstest	✓
Utför AEC funktionstest	✓
Utför ACR fantomtest	✓
Utför röntgenstråle läckagestest	✓
Ändra bild detektorfilter	✓
Kontrollera mekanisk integritet och saknad maskinvara	✓
Kontrollera kablarna för effekt och jordintegritet	✓

8.3.2 Om regenerering

Regenerering är en automatisk funktion som frigör diskutrymme för lagring av nyligen tagna bilder. Konfigurerbara parametrar låter ett givet antal bilder inhämtas innan regenerering påbörjas och äldre bilder tas bort från systemet.


Kapitel 9 Systemadministrationsgränssnitt

9.1 Skärmen Admin

I detta avsnitt berättar om de funktioner som finns på skärmen *Admin*. För att komma åt den här skärmen välj knappen **Admin** i skärmen *Välj patient*.

Obs

En chef och en Hologic Service användare har tillgång till alla funktioner på Admin-skärmen. En primärprov-användare har tillgång till vissa funktioner.

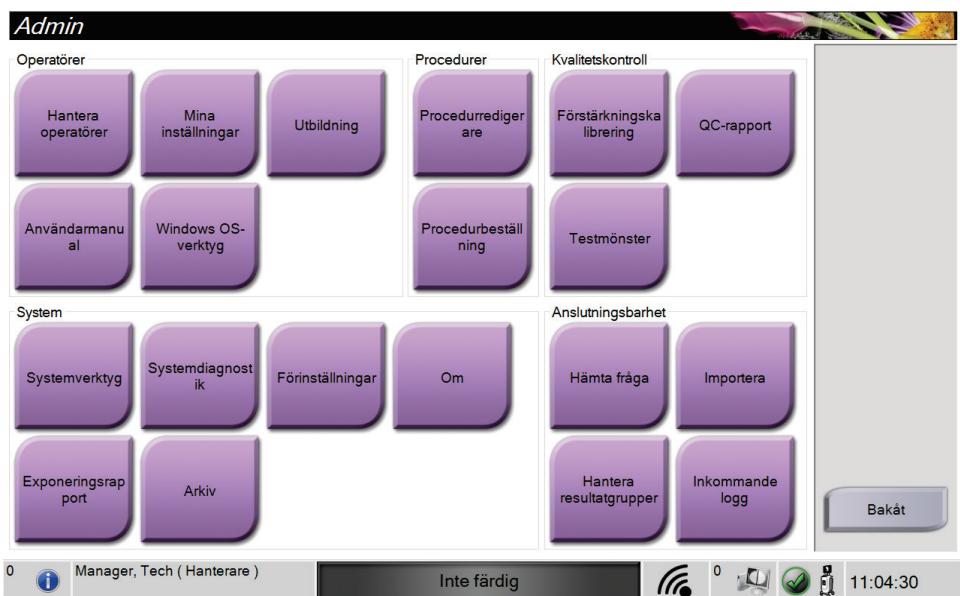

Figur 33: Skärmen Admin

Tabel 8: Funktioner på skärmen Admin

Avsnitt	Knapp	Funktion på skärmen
Operatörer	Hantera operatörer	Lägg till, radera eller ändra operatörsinformation.
	Mina inställningar	Ändra informationen för aktuell operatör.
	Utbildning	Åtkomst utbildningsvideor.
	Användarmanual	Åtkomst till <i>Användarguiden</i> och andra användardokument.
	Windows OS-verktyg	Få tillgång till lokala användare och grupper, säkerhetspolicy och gruppolicy.
Procedurer	Procedurredigerare	Lägg till, redigera eller ta bort procedurerna.
	Procedurbeställning	Ändra ordning i procedurlistan.

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 9: Systemadministrationsgränssnitt

Tabell 8: Funktioner på skärmen Admin

Avsnitt	Knapp	Funktion på skärmen
Kvalitetskontroll	Förstärkningskalibrering	Utför proceduren för förstärkningskalibreringen.
	QC-rapport	Skapa en kvalitetskontrollrapport.
	Testmönster	Välj och skicka testmönstret till resultatenheter.
System	Systemverktyg	Servicegränssnittet för konfiguration av och identifiering av problem.
	Systemdiagnostik	Visar status på samtliga undersystem.
	Förinställningar	Ställa in systempreferenser.
	Om	Visar systeminformation.
	Exponeringsrapport	Skapa en rapport av antalet exponeringar.
	Arkiv	Skicka lokala studier till lagring i nätverket eller exportera dem till flyttbara mediaenheter.
Anslutningsalternativ	Sök och hämta	Sök i konfigurerade enheter.
	Importera	Importera bilder och data.
	Hantera resultatgrupper	Lägg till, radera eller redigera resultatgrupper.
	Inkommande logg	Visa loggposter för bilder som inte importerats under manuell import eller DICOM-lagring.
Man måste ha tillstånd att få åtkomst till samtliga funktioner. Behörighetsnivån styr vilka funktioner du kan ändra.		

9.2 Skärmen Om

Om skärmen ger information om maskinen, exempelvis systemnivå, IP-adress samt serienummer. Den här typen av data kan vara användbar när man arbetar tillsammans med Hologic för att konfigurera systemet eller lösa ett systemproblem.

Skärmen kan öppnas på två sätt:

- Från skärmen *Välj patient*, välj **Systemstatus** ikonen [] på aktivitetsfältet, och välj sedan **Om**.
- Från skärmen *Admin* väljknappen **Om** i systemgruppen.



Figur 34: Systemfliken på *Om*-skärmen

Det finns fyra flikar på *Om* skärmen:

- **Systemfliken** listar systemkonfigurationsinformation.
- Fliken **Institution** innehåller namn och adress för de företag som är kopplade till den här maskinen.
- Fliken **Copyright** (Upphovsrätt) innehåller upphovsrätter för Hologic och tredje parts programvaror som finns installerade på den här maskinen.
- Fliken **UDI** (Unikt enhets-ID) innehåller den här maskinens unika enhetsidentifierare.

9.3 Ändra preferens för användarspråk

Användare kan ange att språket för användargränssnittet automatiskt ändras till deras individuella preferenser när de loggar in.

1. På skärmen *Välj patient*, välj knappen **Admin**.

Obs



Man kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

2. I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska man välja knappen **Mina inställningar**. Skärmen *Redigera operatör* öppnas.
3. Använd knappen **Höger pil** för att gå till fjärde sidan på skärmen *Redigera operatör*. (Man kan också använda de runda knapparna ovanför det virtuella tangentbordet för att välja den fjärde sidan.)
4. Markera språket i rullgardinslistan i det lokala fältet.
5. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*. Användargränssnittet ändras till valt språk.

9.4 Ställa in procedurflikar med flera rader

Man kan redigera operatörsinställningarna för att visa mer av procedurnamnet högst upp på procedurflikarna. För att ändra procedurflikarna från en enkel textrad till flera textrader:

1. På skärmen *Välj patient*, välj knappen **Admin**.

Obs



Man kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

2. I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska man välja knappen **Mina inställningar**. Skärmen *Redigera operatör* öppnas.
3. Använd knappen **Höger pil** för att gå till fjärde sidan på skärmen *Redigera operatör*. (Man kan också använda de runda knapparna ovanför det virtuella tangentbordet för att välja den fjärde sidan.)
4. Välj **Använd procedurflikar med flera rader**. Ett kryssrutan visas när alternativet **Flera rader** är valt.
5. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*. **Procedur** flikar ändras till den valda mängden linjer.

9.5 Systemverktyg

Chefer och användare med servicetillstånd kan komma åt verktyget Systemverktyg. Verktyget Systemverktyg innehåller konfigurationsinformation om systemet. Öppna verktyget genom att välja **Systemverktyg** från systemgruppen på skärmen *Admin*.




Figur 35: Knappen Systemverktyg

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 9: Systemadministrationsgränssnitt

9.5.1 Systemverktyg för Chefsröntgentekniker

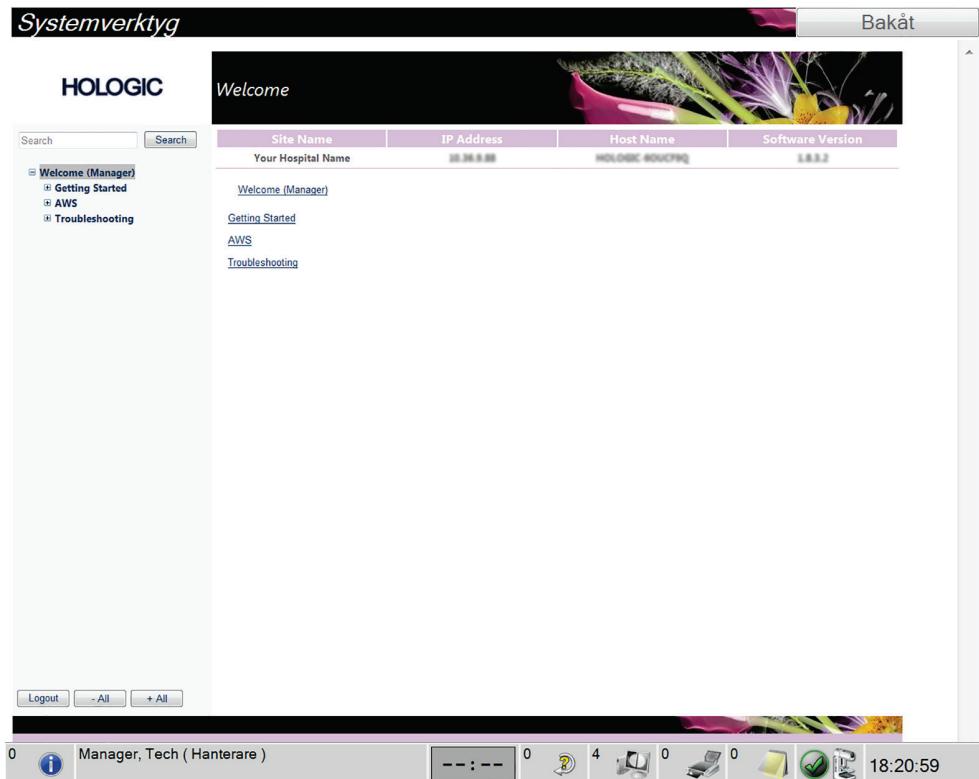

Figur 36: Skärmen Systemverktyg

Tabell 9: Chefsröntgentekniker – funktioner i Systemverktyg

Avsnitt	Funktioner på skärmen
Komma igång	Om: Introduktion till serviceverktyget. FAQ (Vanliga frågor): Förteckning över vanliga frågor. Ordlista: Förteckning över begrepp och beskrivningar. Plattform: Förteckning över kataloger, programversionsnummer och systemprogramstatistik. Genvägar: Förteckning över Windows-genvägar.
AWS	Anslutningar: Förteckning över installerade enheter. Film- och bildinformation: Skapa en exponeringsrapport eller en QC-rapport. Användargränssnitt: Ändra alternativen för programmet. Internationalisering: Välj lokalt språk och kultur.
Felsökning	AWS: Möjliggör nedladdning av bilder. Computer (Dator): Systemhantering och nätverksinformation. Log (Logg): Ändra alternativ för händelseregistrering. Backups (Säkerhetskopiering): Styr säkerhetskopieringen av systemet.

9.6 Arkiveringsverktyg

Med hjälp av arkiveringsfunktionen på skärmen *Admin* kan man:

- Skicka lokala studier till ett arkiv.
- Exportera studier till flyttbara media.



Figur 37: Knappen Arkiv

1. Från gruppen på skärmen Systemverktyg *Admin*, välj knappen **Arkiv**. Skärmen *Arkiv för flera patienter på begäran* öppnas.
2. För att söka efter en patient ska man ange minst två tecken i området Sökparametrar och välja förstoringsglaset.

En lista över patienter som motsvarar sökkriterierna visas.

Rubrik	Patient-ID	Studiedatum	Studietid	Undersökningsnummer
Test^Patient	123456			
Specimen, Right - Breast	123456	20190709	112231	
Specimen, Left - Breast	123456	20190709	113858	
Patient^Test	654321			
Specimen, Left - Breast	654321	20190709	115019	

Namn	Patient-ID	Födelsedatum
Test, Patient	123456	1965-01-02

Figurförklaring

1. Sökparametrar
2. Patientlistområde
3. Området Patienter som ska arkiveras
4. Lägg till valda patienter från patientlistan till området Patienter som ska arkiveras
5. Ta bort valda patienter från området Patienter som ska arkiveras

Figur 38: Skärmen Arkiv för flera patienter på begäran

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Kapitel 9: Systemadministrationsgränssnitt

Gör så här för att arkivera:

1. Välj de patienter och procedurer som ska arkiveras.
 - Välj patienter i patientlistan eller gör en sökning med sökparametrarna (punkt 1) och välj patienter från sökresultaten.

Obs



Knappen **Välj allt** (i den högra panelen på skärmen) väljer alla patienter i patientlistan. Knappen **Rensa** (på höger sida av skärmen) tar bort valen.

- Välj procedurer för varje patient.
 - Tryck på **nedåtpilen** (punkt 4) på skärmen för att flytta de valda patienterna till området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
 - Tryck på **uppåtpilen** (punkt 5) på skärmen för att flytta de valda patienterna från området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
2. Välj en lagringsenhet.
 - Välj ett alternativ i nedrullningsmenylistan.
-ELLER-
 - Välj knappen **Grupplista** och välj sedan ett alternativ.
 3. Välj knappen **Arkiv**. Listan i området Patienter som ska arkiveras kopieras till valda arkivenheter.

Obs



Använd funktionen Manage Queue (Hantera kö) i aktivitetsfältet för att granska arkivstatus.


För att exportera:

1. Välj de patienter och procedurer som ska exporteras.
 - Välj patienter i patientlistan eller gör en sökning med en av sökparametrarna (punkt 1) och välj patienter från sökresultaten.

Obs

Knappen **Välj allt** (i den högra panelen på skärmen) väljer alla patienter i patientlistan. Knappen **Rensa** (på höger sida av skärmen) tar bort valen.

- Välj procedurer för varje patient.
 - Tryck på **nedåtpilen** (punkt 4) på skärmen för att flytta de valda patienterna till området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
 - Tryck på **uppåtpilen** (punkt 5) på skärmen för att flytta de valda patienterna från området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
2. Välj knappen **Exportera**.
 3. I dialogrutan *Exportera* väljer man målet i rullgardinsmenyn med mediaenheter.

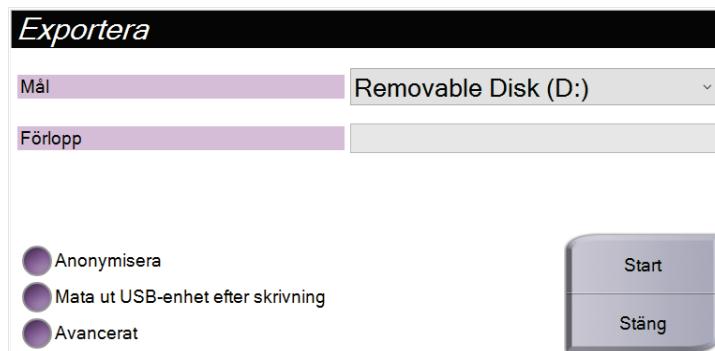

Figur 39: Skärmen Exportera

4. Välj andra alternativ om det behövs:
 - **Anonymisera**: för att anonymisera patientdata.
 - **Mata ut USB-enhet efter skrivning**: för att mata ut USB-enheten efter att patientdata har exporterats.
 - **Avancerat**: för att välja en katalog i ditt lokala system för att behålla valen och även för att välja exporttyper.
5. Välj knappen **Start** för att kopiera valda bilder till vald enhet.


9.7 Så här ändrar man standardlåsningstiden

Efter en viss inaktivitetstid kommer systemet att "läsa ute" användaren. Användaren måste sedan logga in igen innan man återvänder till sin plats i proceduren. Mängden tid av inaktivitet är konfigurerbar. Standardtiden är 60 minuter.

1. Välj Windows-ikonen för att öppna Windows Start-menyn.
2. Hitta "Lokal säkerhetspolicy".
3. Navigera till **Säkerhetsinställningar > Lokala policyer > Säkerhetsalternativ**.
4. Hitta "Interaktiva inloggning: Maskinens inaktivitetsgräns".
5. Justera tiden efter önskemål.

Bilaga A Systemspecifikationer

A.1 Produktens mått

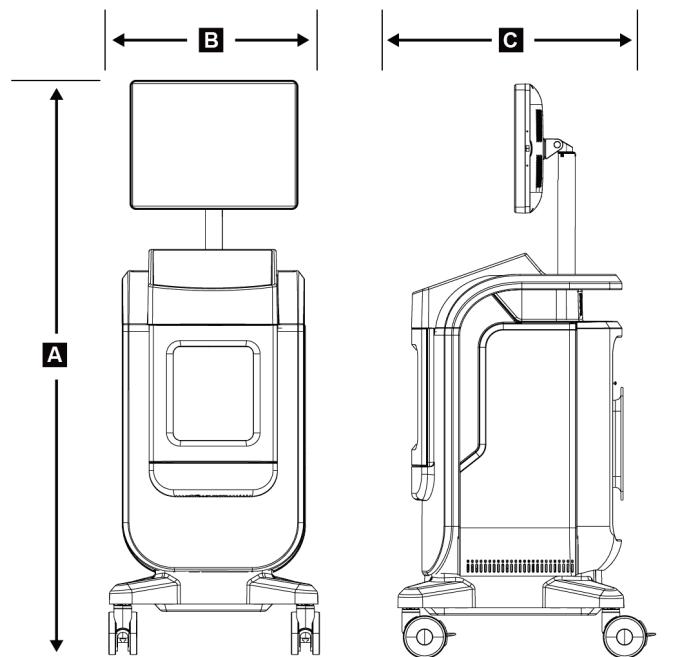

Figur 40: Konsol mått

A.	Höjd	maximal 169 cm (66,5 tum)
B.	Bredd	61 cm (24 tum)
C.	Djup	66,1 cm (26 tum)
	Vikt	132,2 kg (291 pund)

A.2 Miljö vid drift och förvaring

A.2.1 Allmänna villkor för användning

Denna utrustning är konstruerad för säker och effektiv drift under följande förutsättningar för inomhusbruk:

Höjd över havet	Till 3 048 m (10 000 fot)
Förureningsgrad	Förureningsgrad 2
Temperaturområde	15 °C (59 °F) till 30 °C (86 °F)
Område för relativ luftfuktighet	20 % till 80 % luftfuktighet (icke-kondenserande)

A.2.2 Allmänna förhållanden för transport och förvaring

Konsol

Temperaturområde	-10 °C (14 °F) till 40 °C (104 °F) efter att ha förvarats i 48 timmar 10 °C (50 °F) till 35 °C (95 °F) för upp till 12 timmar
Högsta temperaturförändringshastighet	Högst 10 °C per timme
Område för relativ luftfuktighet	20 % till 90 % luftfuktighet (icke-kondenserande)

Röntgendetektor

Temperaturområde	10 °C (50 °F) till 30 °C (86 °F) efter att ha förvarats i 48 timmar 10 °C (50 °F) till 35 °C (95 °F) i upp till 12 timmar
Högsta temperaturförändringshastighet	Högst 10 °C per timme
Område för relativ luftfuktighet	20 % till 90 % luftfuktighet (icke-kondenserande)

(Placera i emballage vid förvaring i en byggnad.)

A.3 Konsol teknisk information

A.3.1 Allmän information

<i>Operativsystem</i>	<i>Windows 10</i>
<i>Solid state-hårddiskskapacitet</i>	<i>512 GB</i>
<i>Minne</i>	<i>8 GB RAM</i>
<i>Förvaringsmedia</i>	<i>USB 3.0</i>
<i>Bildmonitor</i>	<i>inte mindre än 1 600 x 1 200 pixel upplösning</i>
<i>Kontrolldisplay</i>	<i>pekskärm</i>

A.3.2 Nätverksmiljö

<i>Nätverksgränssnitt</i>	<i>10/100/1000 BASE-T Ethernet</i>
<i>Wi-Fi</i>	<i>a/b/g/n/ac 2.4 och 5 GHz band</i>

A.4 Nätspänning

<i>Linjespänningssområde</i>	<i>100/120/208/230/240 VAC</i>
<i>Nätspänningsfluktuationer</i>	<i>±10 % av nominell spänning</i>
<i>Övergående överspänningar</i>	<i>Till nivåerna av överspänningsskategori II</i>
<i>Operativfrekvens</i>	<i>50/60 Hz ± 2 %</i>
<i>Högsta ledningsströmstyrka</i>	<i>< 6 ampere</i>
<i>Strömförbrukning</i>	<i>700 watts maximalt</i>
<i>Linjeanslutning</i>	<i>Standardlinje och plugg – medicinsk klass</i>

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Bilaga A: Systemspecifikationer

A.5 Röntgenrörs teknisk information

<i>Avstånd källa till bild (SID)</i>	<i>43 cm ±0,5 cm (16,9 tum ±0,2 tum)</i>
<i>Fokuspunkt</i>	<i>inte mer än 55 micron</i>
<i>Röntgenrörsspänning</i>	<i>20 kV till 50 kV</i>
<i>Driftcykel</i>	<i>16 %; 20 sekunders exponering var 125:e sekund</i>
<i>Anodmaterial</i>	<i>Volfram</i>
<i>Röntgenfönster</i>	<i>Beryllium 200 µm</i>

A.5.1 Röntgengenerator

<i>kV-område</i>	<i>20 kV till 50 kV</i>
<i>mA</i>	<i>1 mA</i>
<i>mAs</i>	<i>20 mAs maximalt</i>

A.6 Teknisk information om bildtagningssystemet

A.6.1 Bildmottagare

<i>Vätskeintrång</i>	<i>Bildmottagaren är skyddad mot oavsiktligt spill på skåpets golv.</i>
<i>Aktiv bildtagningsarea</i>	<i>Fullfältdetektor: 16 cm x 18 cm nominal</i>
<i>Dynamiskt område och linjäritet</i>	<i>Detektorundersystemets respons är linjärt med en linjäritet på 0,999 över ett dynamiskt område på 400:1 i röntgenexponering.</i>
<i>Enhetlighet</i>	<i>Detektorundersystemet kan korrigera variationer i förstärkningen pixel för pixel.</i>
<i>Bild pixelstorlek</i>	<i>70 µm</i>
<i>Digital bildmottagare MTF</i>	<i>Modulöverföringsfunktion (MTF) inte mindre än 40 % vid 7,1 lp/mm</i>

Bilaga B Systemmeddelanden och varningar

B.1 Felkorrigering och felsökning

De flesta fel och varningsmeddelanden åtgärdas utan att påverka ditt arbetsflöde. Följ anvisningarna på skärmen eller åtgärda tillståndet och ta sedan bort felstatusen från aktivitetsfältet. Vissa tillstånd kräver omstart av systemet eller anger att fler åtgärder krävs (t.ex. att ringa Hologics tekniska support.) I detta kapitel beskrivs de olika meddelandekategorier och dina åtgärder för att återställa systemet till normal drift. Kontakta Hologics tekniska support om felet återkommer.

B.2 Typer av meddelanden och varningsmeddelanden

B.2.1 Felnivåer

Det finns fem fevnivåer: Varning, mindre, större, kritisk, och varningar.

Felvarningar

Felvarningarna visas inte för användaren. Dessa fel registreras i loggfilerna.

Felvarningsdesign:

- Släpps genom program- eller kommunikationskommandon.
- Avbryt inte en exponering som pågår.
- Förhindra inte starten på en ny exponering.

Mindre fel

Mindre fel design:

- Släpps genom program- eller kommunikationskommandon.
- Avbryt inte en exponering som pågår.
- Kräver ett svar innan en ny exponering kan börja.

Större fel

Större fel design:

- Släpps genom program- eller kommunikationskommandon.
- Avbryt en exponering som pågår.
- Förhindra starten på en ny exponering.

Kritiska fel

Kritiska fel design:

- Släpps inte genom program eller kommunikationskommandon.
- Avbryt en exponering som pågår.
- Förhindra starten på en ny exponering.

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden är rutinmässiga meddelanden som kan förhindra exponering. Ett varningsmeddelande förblir aktivt tills den önskade åtgärden är klar eller villkoret inte existerar.

B.2.2 Systemmeddelanden

Välj systemstatusikonen i Aktivitetsfältet för att få information om orsaken till och korrigeringen av ett systemproblem. När man åtgärdar problemet visar Systemstatusfältet en klar status.

B.3 Felsökning

- För att starta om systemet efter ett kritiskt fel, välj knappen **Start** som visas på skrivbordet.
- Om man väljer Avsluta-knappen, meddelar ett meddelande om att detta alternativ stänger av datorn.

Ordlista över termer

AEC

Automatisk exponeringskontroll (Automatic Exposure Control).

DICOM

(Digital Imaging and Communications in Medicine) Protokoll för digital medicinsk bildtagning och kommunikation

Kommentarer

Markeringar på en bild för att indikera ett område av intresse.

PACS

System för bildarkivering och -kommunikation (Picture Archiving and Communications System). Ett dator- och nätverkssystem som överför och arkiverar digitala medicinska bilder.

ROI

(Region of Interest) Intresseområde

SID

(Source to Image Distance) Avstånd källa till bild

Sakregister

A

- access
 - kvalitetskontroll • 2, 61
- add
 - lägg till patient • 28
 - lägg till procedur • 37
- aktivitetsfält • 25
- användargränssnitt • 25
- arbetsflöde • 53
- arbetslista • 35
 - söki arbetslistan • 35
 - uppdatera arbetslistan • 35
- arkiv • 40, 73
- avancerat • 38
- avsedd användning • 1
- användarprofiler • 2

B

- behörigheter, per användargrupp • 2
- bilder • 43
 - resultatalternativ • 51
 - skriv ut • 41
- bricka • 19
- bryt all ström • 24

C

- connections
 - anslutningar • 20
 - nätverksanslutning • 25
 - USB-anslutning • 17, 20
 - Wi-Fi-anslutning • 20, 25

D

- dataförlust • 8
- dekalernas placering • 15
- dela upp patientjournaler • 30
- display
 - fönsternivå • 48

E

- efterlevnad • 13
 - efterlevnadskrav • 13
 - överensstämmelsebevis • 14
- enkel • 38
- exportera, bilder • 40

F

- fel • 81, 82
- filter för patienter • 33
 - fliken filter • 34
 - fliken Kolumner • 35
- flervalsprocedursflik • 70
- fönsternivå • 48
- förreglingar • 13
- förstärkningskalibrering • 62

G

- garantibevis • 3

H

- hjul • 21
- hämta • 39

I

- indikatorer, system • 17

K

- kalibrering, ökning • 62
- klagomål, produkt • 3
- komponenter • 17
 - provbricka • 19
 - skåp • 18
- kontroller, system • 17
- kvalitetskontroll • 2, 61

L

- logga in • 21
- logga ut • 24
- lås, hjul • 21

Trident HD Provradiografisystemet användarhandbok

Sakregister

M

maintenance
 allmänt • 63
meddelanden och varningar • 81, 82
mina inställningar • 25, 70

N

nätverksanslutning • 25

O

output devices
 ikoner • 25
 resultatinställning • 51

P

patient
 dela upp patientjournaler • 30
 filter för patienter • 33
 lägg till patient • 28
 radera patient • 33
 redigera patient • 29
 öppna patientprocedur • 28
procedure
 lägg till procedur • 37
 skärmen procedur • 36
 avancerat • 38
 enkel • 38
 stäng patientprocedur • 39
provskåp • 18
provbricka • 19

R

radera patient • 33
reglage och indikatorer • 17
rengöringslösningar och metoder • 63
requirements
 efterlevnadskrav • 13
 kvalitetskontroll • 2, 61
resultat på begäran • 40
resultatgrupper, hantera • 51
resultatinställningar • 39

S

safety
 allmän information • 8
screen
 filter för patienter • 33
 lägg till patient • 28
 lägg till procedur • 37
 skriv ut • 41
 skärmen admin • 67
 skärmen om • 69
 skärmen procedur • 36
 sök i arbetslistan • 35
select
 patient • 27
 resultatinställningar • 39
skicka bilder till resultat • 51
skriv ut • 41
skåp • 18
skärmen admin • 67
skärmen om • 69
slå på systemet • 21
specifikationer • 77
språk • 70
start • 21
statement
 garantibevis • 3
 uttalande om webbsäkerhet • 3
 överensstämmelsebevis • 14
strömkontroller • 17
stäng av systemet • 24
stäng patientprocedur • 39
symboler • 4

system

- administration • 67
- anslutningar • 20
- funktioner • 1
- indikatorer, system • 17
- komponenter • 17
- kontroller, system • 17
- logga in • 21
- logga ut • 24
- meddelanden • 82
- slå på systemet • 21
- specifikationer • 77
- start • 21
- strömkontroller • 17
- stäng av systemet • 24
- verktyg, system • 71
- Windows 10 • 23
- översikt • 7
- söki arbetslistan • 35

T

- ta bilder • 44

U

- uppdatera arbetslistan • 35
- USB-anslutning • 17, 20
- utläsningstid • 76
- uttalande om webbsäkerhet • 3

V,W

- varningar • 81, 82
- varningar och försiktighetsåtgärder • 8
- varningar, försiktighetsåtgärder och
 - observationer, definierad • 5
- verktyg, system • 71
- Wi-Fi-anslutning • 20, 25
- Windows 10 • 23
- workstation
 - reglage och indikatorer • 17

X

- x-ray
 - indikatorer • 18
 - rengöringslösningar och metoder • 63
 - ta bilder • 44

Ö

- öppna patientprocedur • 28



Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com

Brazilian Contact: **Imex Medical Group do Brasil**
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br



Hologic BVBA
Da Vincielaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

