


10 Revise a imagem.




11


Arquive ou exporte as imagens, em seguida encerre o paciente.

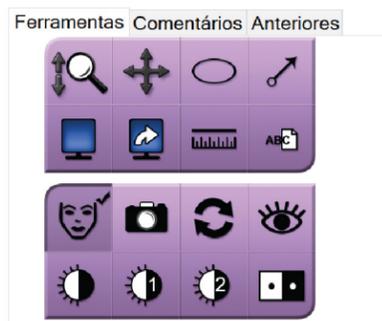

12 Remova a bandeja de amostras da cabine de imagem. Siga a política da instalação para manuseio de amostras.

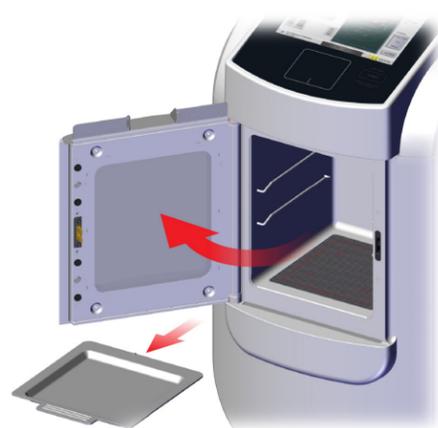

13 Desligue o sistema.

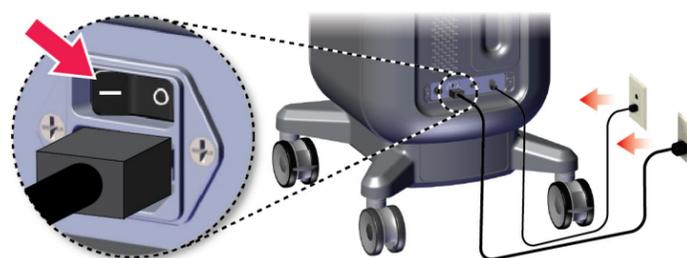

Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

Guia de referência rápida



- 1 Monitor de exibição de imagem
- 2 Monitor de controle com Touch pad integrado e Botão de ativação de RAIOS X
- 3 Cabine de imagem

⚠️ Consulte o Guia do Usuário para informações de segurança y instruções completas.


- 1 Mova o console para a posição correta.



- 2 Trave os rodízios.



- 3 Conecte o sistema à energia e à rede.

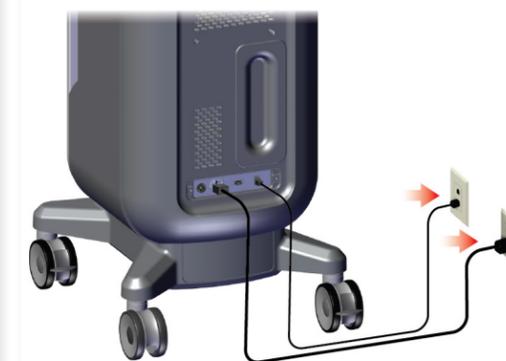

Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Tel: +1.877.371.4372



Contacto Imex Medical Group do Brasil
do Brasil: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda
Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

HOLOGIC®


Visite o nosso website para obter informações sobre as nossas filiais no mundo todo.
© 2019 Hologic, Inc. Impresso nos EUA. Este manual foi originalmente escrito em inglês.

Hologic, Faxitron, Trident e os logotipos associados são marcas e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas, marcas registradas e nomes de produto são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA ou estrangeiras, conforme identificado em www.Hologic.com/patents.

4 Inicie o sistema e conecte-se.

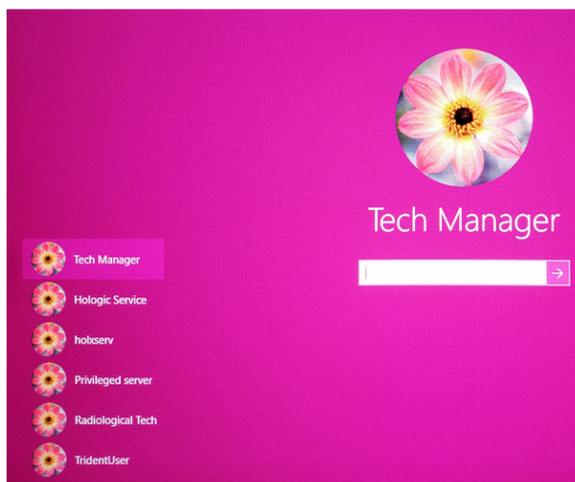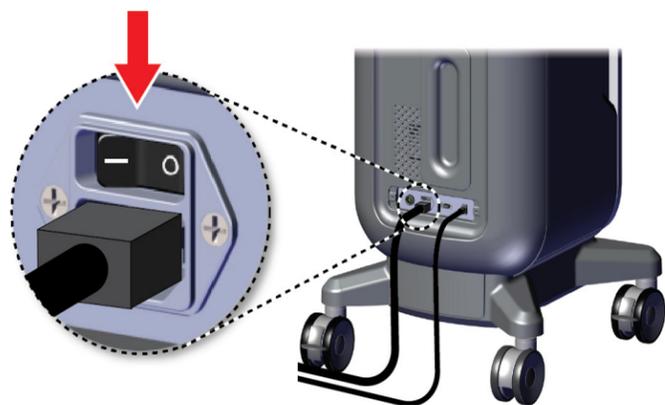


5 Seleccione o paciente e o procedimento.

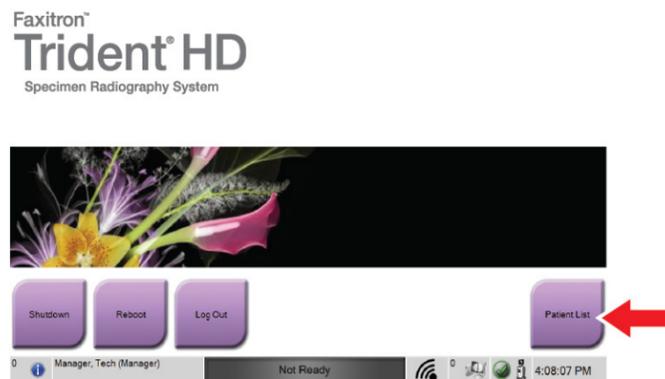


| Nome | Data de nasci... | Exame |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Patient^Test | 04/02/1979 | Specimen, Rig... |
| Test test^Patient | 06/03/1972 | Specimen, Left... |
| Patient patient^Test | 08/04/1962 | Specimen, Rig... |
| Test^Patient | 02/01/1965 | Múltiplo |



6 Prepare a amostra de acordo com a política da instalação e centralize a bandeja de amostras.

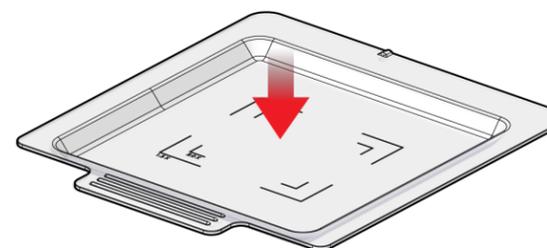

7 Posicione a bandeja de amostras na cabine de imagem para o nível de ampliação necessário.

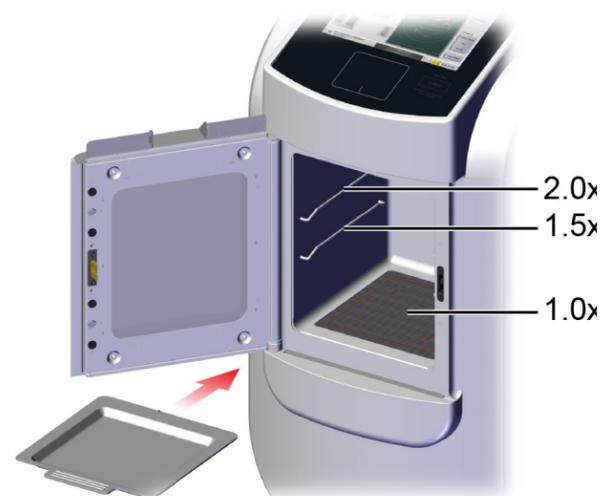

8 Feche a porta.



9 Adquira a imagem.

