

## 1.1 MammoPad-rintapehmusteen käyttöohjeet

MammoPad®-rintapehmusteet ovat kertakäyttöisiä sairaanhoitotuotteita. Ne ovat röntgenpositiivisia ja lateksittomia. Ota uusi tyyny jokaiselle potilaalle. Toimi seuraavasti, jotta pehmuste asettuu kunnolla.

1. Avaa MammoPad-rintapehmusteiden pussi, ota esiin yksi pehmuste ja sulje pussi uudelleen.



### Huomautus

Pehmusteita on säilytettävä tiiviisti suljetussa muovipussissa, jotta vältetään kontaminoitumiselta, joka voisi vaikuttaa kuvanlaatuun. Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta ja sulje pussi, kun tuotetta ei käytetä.


2. Irrota pehmusteesta taustapaperi ja hävitä se.
3. Liimapuoli tulee kuvausalustalle seuraavan huomautuskohdan ohjeiden mukaisesti järjestelmän tyyppin mukaan. Älä aseta pehmustetta maalattujen merkkien päälle.



### Huomautus

Selenia® ja useimmat muut FFDM-järjestelmät: kohdista pyörästetty kulma tunnistimen vasempaan alakulmaan. Tasoita pehmuste kuvausalustan takaosasta eteenpäin.

Dimensions® ja GE-järjestelmät: kohdista pyörästetty kulma tunnistimen oikeaan alakulmaan. Tasoita pehmuste kuvausalustan etuosasta taaksepäin.

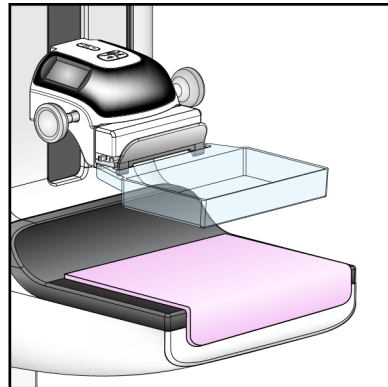

Kuva 1: MammoPad kuvausalustalla

4. Noudata normaalia asentorutiinia kaikkien seulontanäkymien suhteen.
5. Kun tutkimus on tehty, poista pehmuste kuvausalustalta ja hävitä se.



### Huomautus

Jos pehmusteeseen osuu verta tai ruumiinnesteitä, noudata yksikkösi biovaarallisia materiaaleja koskevaa menettelytapaa.

Jos tarvitset apua MammoPad-tuotteen käyttämiseen, ota yhteyttä tuotetukeen numerossa 1-877-371-4372.

Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella:



**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Puh.: +32 2 711 46 80  
Faksi: +32 2 725 20 87



## 1.2 Symbolit

Symboli	Kuvaus	Standardi
	Vain lääkärin määräyksestä	FDA 21 CFR 801.109
	Valmistaja	ISO 15223-1:2021, viite 5.1.1
	Euroopan yhteisössä toimiva valtuutettu edustaja	ISO 15223-1:2021, viite 5.1.2
	Käytettävä viimeistään	ISO 15223-1:2021, viite 5.1.4
	Eräkoodi	ISO 15223-1:2021, viite 5.1.5
	Luettelonumero	ISO 15223-1:2021, viite 5.1.6
	Määrä	Hologic
	Ei steriili	ISO 15223-1:2021, viite 5.2.7
	Ei saa käyttää uudelleen	ISO 15223-1:2021, viite 5.4.2
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Lue käyttöohjeet	ISO 15223-1:2021, viite 5.4.3
	CE-merkintä EU-vaatimustenmukaisuus	MDR-asetus (EU) 2017/745

Symboli	Kuvaus	Standardi
	Ei sisällä luonnonkumilateksia	Ei ole
	Kierrätettävän symboli	Unicode, viite U+267C
	Lääkinnällinen laite	ISO 15223-1:2021, viite 5.7.7

© 2023 Hologic Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Hologic ja MammoPad ovat Hologic, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämä tuote on suojattu yhdellä tai useammalla yhdysvaltalaisella patentilla tai patenttihakemuksella. Katso lisätietoja osoitteesta [www.hologic.com/patent-information](http://www.hologic.com/patent-information).