

1.1 Упутства за примену MammoPad Breast меке подлоге

МаммоПад® меке подлоге су медицински производи за једнократну употребу. Радиопропусни су и не садрже латекс. Користите нову меку подлогу за сваког пацијента. Пратите ову процедуру да бисте се постарали за то да мека подлога буде правилно постављена.

1. Отворите кесу у којој се налазе MammoPad меке подлоге, извуците једну и поново затворите кесу.



Напомена

Меке подлоге морају бити у заптивеној пластичној кеси како би се спречила контаминација, која може да утиче на квалитет снимка. Чувати ван директне сунчеве светлости и заптивати кесу када није у употреби.

2. Скините папирни део са меке подлоге и баците је.
3. Лепљиву страну ставите на платформу за снимање, у складу са упутствима у следећој напомени за ваш тип система. Немојте стављати меку подлогу преко одштампаних ознака.



Напомена

Selenia® и већина других FFDM система – окрените заобљени ћошак ка нижој, левој страни детектора. Поравнајте подлогу од задњег ка предњем делу платформе за снимање.

Dimensions® и GE системи – окрените заобљени ћошак ка нижој, десној страни детектора. Поравнајте подлогу од предњег ка задњем делу платформе за снимање.

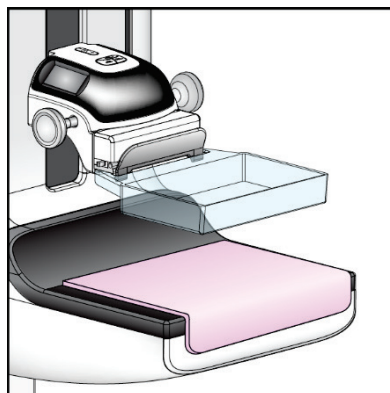


Figure 1: МаммоПад мека подлога постављена на платформи за снимање

4. За све приказе скрининга пратите стандардну рутину за позиционирање.

5. Када се преглед заврши, скините меку подлогу са платформе за снимање и баците је.



Напомена

Ако је мека подлога била изложена крви или телесним течностима, пратите процедуру установе за одлагање биолошки опасних материјала.

Помоћ при коришћењу МаммоПад производа можете затражити од корисничке подршке, путем телефона: 1-877-371-4372.

Овлашћени представник за ЕУ:








Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Белгија
Тел: +32 2 711 46 80
Факс: +32 2 725 20 87



1.2 Симболи

Симбол	Опис	Стандард
	Само на рецепт	FDA 21 CFR 801.109
	Произвођач	ISO 15223-1:2021, референца 5.1.1
	Овлашћени представник у Европској заједници	ISO 15223-1:2021, референца 5.1.2
	Рок употребе	ISO 15223-1:2021, референца 5.1.4
	Шифра серије	ISO 15223-1:2021, референца 5.1.5
	Каталогски број	ISO 15223-1:2021, референца 5.1.6
	Количина	Hologic
	Није стерилно	ISO 15223-1:2021, референца 5.2.7
	Немојте поново користити	ISO 15223-1:2021, референца 5.4.2

Симбол	Опис	Стандард
 www.hologic.com/package-inserts	Погледати упутство за употребу	ISO 15223-1:2021, референца 5.4.3
	ЦЕ ознака Европска усаглашеност	Уредба о медицинским средствима (ЕУ) 2017/745
	Не садржи латекс од природне гуме	Није применљиво
	Симбол који се може рециклирати	Unicode, референца U+267C
	Медицинско средство	ISO 15223-1:2021, референца 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Сва права задржана. Hologic и МаммоПад су жигови и/или регистровани жигови компаније Hologic, Inc. и/или њених подређених компанија у Сједињеним Државама и/или другим земљама. Овај производ је обухваћен једним или више америчких патената или патентних пријава. Детаље потражите на адреси www.hologic.com/patent-information.