

Installatiegids

Faxitron® Core Specimen Radiography System



Faxitron® Core

Specimen Radiography System

CONTROLEER DE INHOUD

Het **Faxitron Core**-systeem wordt in **1 DOOS** geleverd:

INHOUD

Faxitron Core-kast

Faxitron Core-snelstartgids

1 x systeemmonitor met standaard

1 x computer

1 x monitorkabel

1 x toetsenbord

1 x muis

25 x **Faxitron Core**-specimentrays

2 x sleutels

2 x USB Vision-kabel

1 x netwerkkabel

3 x netsnoeren


1 x flashstation voor systeeminstallatie
(bevat handleiding)

Controleer of u de onderdelen in de doos zonder aanzienlijke zichtbare beschadigingen hebt ontvangen.

In het geval van beschadigingen, belt u het ondersteuningsteam van **Hologic** op:

+1-800-447-1856

1

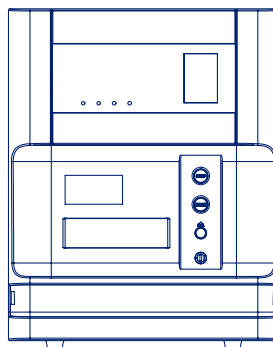


STAP EEN

Open de **DOOS** en verwijder de bovenste laag van de verpakking zodat u de **Faxitron Core** er veilig uit kunt tillen.

Controleer de **Faxitron Core** op beschadigingen (gescheurde of gebroken kunststof, beschadigd LCD-scherm enzovoorts).

Het systeem weegt bijna 50 lbs (23 kilo). Vraag om assistentie bij het uit de doos tillen en op de gewenste locatie plaatsen van de Faxitron Core.

4

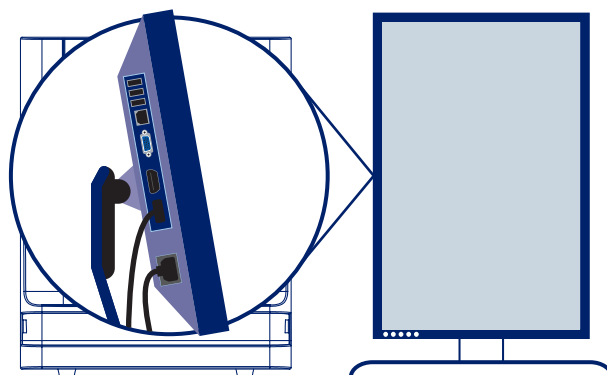


STAP VIER

Haal het documentenpakket, de specimentrays, het toetsenbord en de muis uit de doos en leg deze terzijde. Haal alle snoeren en kabels uit de doos. Haal de computer uit de doos en plaats deze bij de **Faxitron Core**-kast en monitor.

Sluit het netsnoer en de monitorkabel op de monitor aan. De afbeelding is slechts een benadering en kan er iets anders dan het werkelijke product uitzien.


2

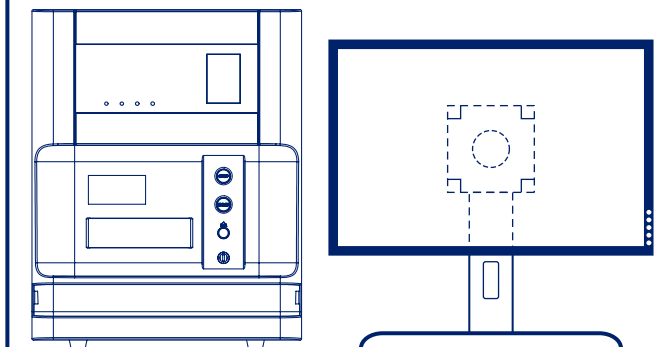

STAP TWEE

Haal de monitor en standaard uit de doos. Verwijder de beschermzak van de monitor en leg deze ter zijde.


3

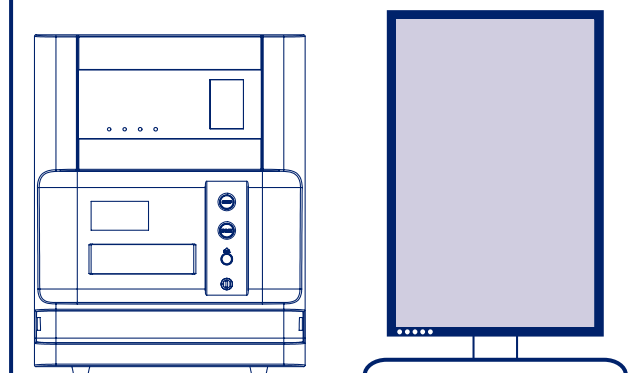

STAP DRIE

Draai de monitor 90° naar rechts. De knoppen bevinden zich nu aan de onderzijde, zoals weergegeven.


5

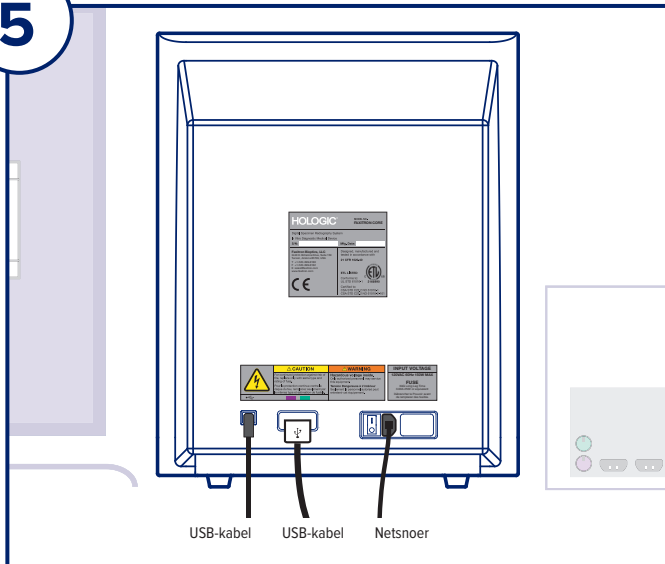

STAP VIJF

Pak de USB-kabels en het netsnoer en sluit deze aan de achterzijde van de **Faxitron Core**-kast aan, zoals afgebeeld.


6

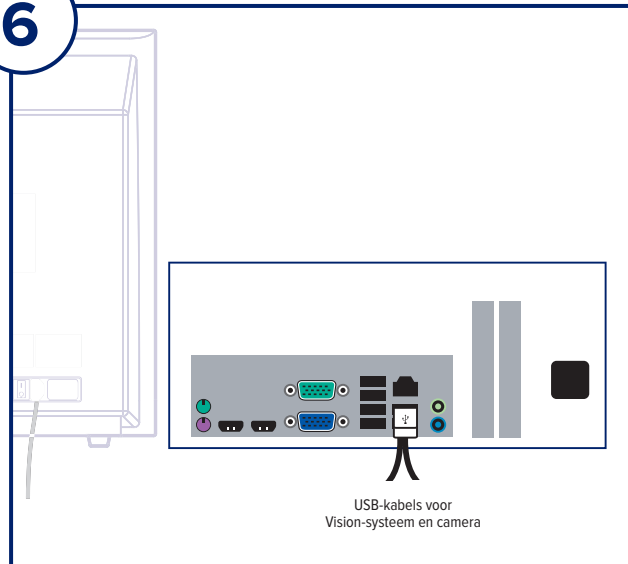

STAP ZES

Sluit de andere uiteinden van de USB-kabels op de computer aan, zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat u de USB Vision-kabel op de poort met de tekst **“Vision USB”** aansluit.

7

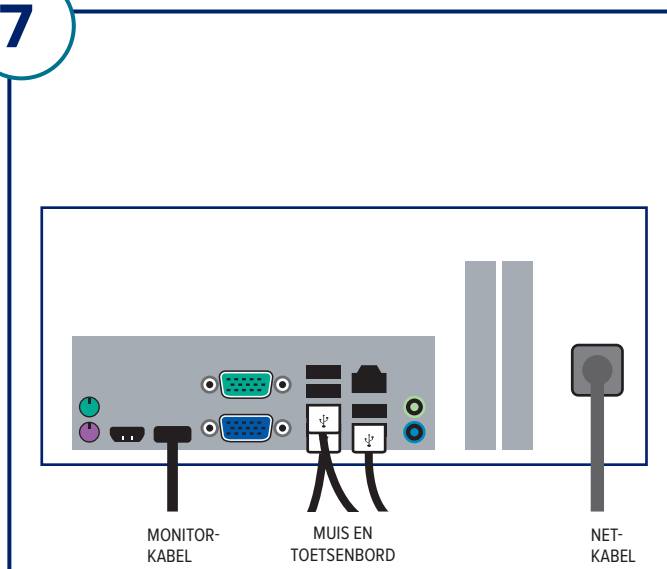


STAP ZEVEN

Sluit de monitorkabel en het netsnoer op de achterzijde van de computer aan, zoals afgebeeld.

Pak het toetsenbord en de muis uit en sluit deze op de achterzijde van de computer aan, zoals afgebeeld.

Sluit het netsnoer op de achterzijde van de computer aan, zoals afgebeeld. Sluit de netsnoeren van de computer, monitor en röntgenkast op een stopcontact aan.

8

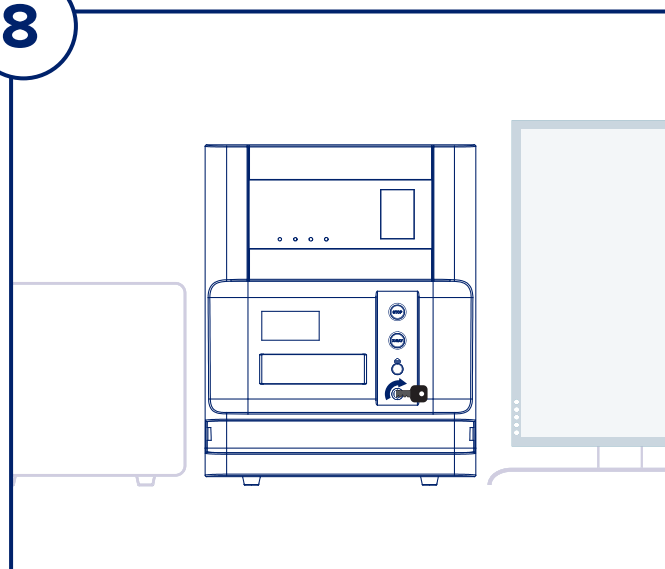

STAP ACHT

Pak de **Faxitron Core**-sleutel en steek deze in het contactslot aan de voorzijde van de kast.

Schakel de computer en monitor in en wacht tot Windows opgestart is.

Schakel de voedingsschakelaar aan de achterzijde van de **Faxitron Core**-kast in.

Draai de sleutel rechtstreeks naar de stand **AAN**.

Dubbelklik op het pictogram **Core**.

Het systeem detecteert de **Faxitron Core**-kast en start automatisch met de kalibratie.

Raadpleeg de snelstartgids voor de bediening van het systeem.

Faxitron Core-systeem, ook bekend als het CoreVision™-systeem.



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810, VS
1.800.477.1856
www.Hologic.com

EC REP

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
België
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87



AU-SPONSOR

Hologic (Australië en Nieuw-Zeeland) Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



www.hologic.com/package-inserts