

1.1 Upute za primjenu podloge za dojke MammoPad

Podloge za dojke MammoPad® jednokratni su medicinski proizvodi za uporabu na jednom pacijentu. Propusne su za rendgensko zračenje i ne sadržavaju lateks. Upotrijebite novu podlogu za svakog pacijenta. Za pravilno postavljanje podloge pridržavajte se ovog postupka.

1. Otvorite vrećicu koja sadržava podloge za dojke MammoPad, izvadite jednu podlogu i ponovno zatvorite vrećicu.



Napomena

Podloge se moraju čuvati u zatvorenoj plastičnoj vrećici da bi se spriječila kontaminacija koja bi mogla narušiti kvalitetu snimanja.


2. Odljepite papirnati donji dio s podloge i odložite ga u otpad.
3. Postavite ljepljivu stranu podloge na platformu za snimanje u skladu s uputama u sljedećoj napomeni za vašu vrstu sustava. Nemojte postavljati podlogu na naljepnice u boji.



Napomena

Za sustav Selenia® i većinu drugih sustava za FFDM: okrenite zaobljeni kraj podloge prema donjoj lijevoj strani detektora. Zagladite podlogu tako da prijedete rukom od stražnje do prednje strane platforme za snimanje.

Za sustav Dimensions® i druge sustave GE: okrenite zaobljeni kraj podloge prema donjoj desnoj strani detektora. Zagladite podlogu tako da prijedete rukom od prednje do stražnje strane platforme za snimanje.

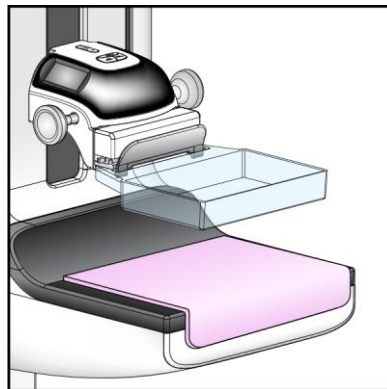

Slika 1: Podloga MammoPad postavljena na platformu za snimanje

4. Pridržavajte se uobičajenih ustaljenih postupaka za pozicioniranje za sve preglede u svrhu probira.
5. Kada završite pregled, uklonite podlogu s platforme za snimanje i odložite ju u otpad.



Napomena

Ako je podloga bila izložena krvi ili tjelesnim tekućinama, pridržavajte se postupka za odlaganje biološki opasnih materijala u otpad koji primjenjuje vaša ustanova.

Za pomoć u vezi s proizvodom MammoPad obratite se odjelu za podršku za proizvode na broj telefona 1-877-371-4372.

Ovlašteni predstavnik za EU:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgija

