

1.1 Pokyny k aplikaci podložek pod prsy MammoPad

Podložky pod prsy MammoPad® jsou jednorázové zdravotnické výrobky. Jsou radiolucenční a neobsahují latex. Pro každého pacienta použijte novou podložku. Podle tohoto postupu zajistíte správnou instalaci podložky.

1. Otevřete sáček s podložkami pod prsy MammoPad, vyjměte jednu podložku a sáček znovu uzavřete.

**Poznámka**


Podložky je třeba skladovat v uzavřeném plastovém sáčku, aby se zabránilo kontaminaci, která by mohla ovlivnit kvalitu snímku.

2. Odlepte z podložky papírovou fólii a zlikvidujte ji.
3. Přiložte lepicí stranu ke snímací plošině podle pokynů uvedených v následující poznámce pro váš typ systému. Podložku nepokládejte na lakované etikety.

**Poznámka**

Selenia® a většina ostatních systémů FFDM – Orientujte zaoblený roh do levé dolní části detektoru. Vyhladte podložku ze zadní strany k přední straně snímací plošiny.

Systémy Dimensions® a GE – orientujte zaoblený roh do pravé dolní strany detektoru. Vyhladte podložku z přední strany k zadní straně snímací plošiny.

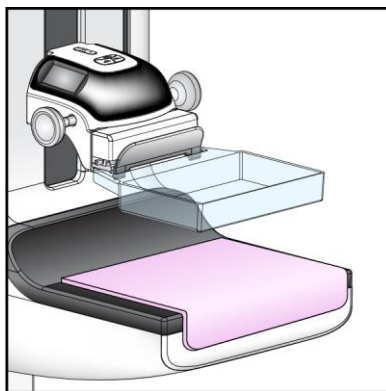

Obrázek 1: Podložka MammoPad nainstalovaná na snímací plošině

4. Při všech screeningových zobrazeních nastavte polohu běžným postupem.
5. Po dokončení vyšetření vyjměte podložku ze snímací plošiny a zlikvidujte ji.

**Poznámka**

Pokud byla podložka vystavena kontaktu s krví nebo tělními tekutinami, postupujte podle postupu likvidace biologicky nebezpečných materiálů platného ve vašem zařízení.

Pro pomoc s produktem MammoPad kontaktujte produktovou podporu na čísle 1-877-371-4372.

Zplnomocněný zástupce pro EU:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgie

