

1.1 Instrucțiuni de aplicare a suportului pentru sân MammoPad

Suportul pentru sân MammoPad® este un produs medical de unică folosință. Acesta este radiotransparent și nu conține latex. Utilizați câte un suport nou pentru fiecare pacientă. Urmați această procedură pentru a vă asigura că suportul este instalat corespunzător.

1. Deschideți punga care conține două suporturi pentru sân MammoPad, scoateți un suport și resigilați punga.



Observație

Suporturile trebuie depozitate într-o pungă de plastic sigilată pentru a preveni contaminarea care poate afecta calitatea imaginii.

2. Desprindeți folia de hârtie de pe spatele suportului și aruncați-o.
3. Aplicați partea adezivă pe platforma sistemului de imagistică în conformitate cu instrucțiunile din următoarea observație aferente tipului dvs. de sistem. Nu aplicați suportul peste autocolanți colorați.



Observație

Pentru sistemele Selenia® și majoritatea celorlalte sisteme FFDM – orientați colțul rotunjit spre partea stângă de jos a detectorului. Lipiți suportul dinspre partea din spate spre fața platformei sistemului de imagistică.

Pentru sistemele Dimensions® și GE – orientați colțul rotunjit spre partea dreaptă de jos a detectorului. Lipiți suportul dinspre partea din față spre spatele platformei sistemului de imagistică.

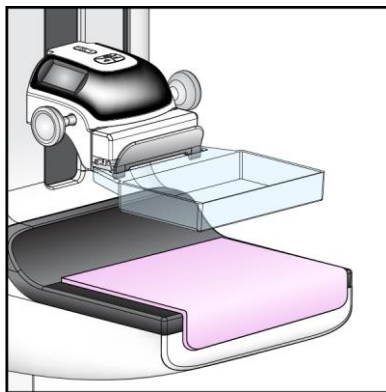


Figura 1: Suport MammoPad instalat pe platforma unui sistem de imagistică

4. Urmați procedura de poziționare normală pentru toate vizualizările de examinare.
5. La finalizarea examinării, scoateți suportul de pe platforma sistemului de imagistică și aruncați-l.



Observație

Dacă suportul a fost expus la sânge sau lichide corporale, respectați procedura de eliminare a materialelor cu risc biologic din cadrul unității dvs.

Pentru asistență referitoare la produsul MammoPad, contactați serviciul de Asistență privind produsele la numărul de telefon 1-877-371-4372.

Reprezentant autorizat UE:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

