

1.1 Navodila za namestitev blazine za dojke MammoPad

Blazine za dojke MammoPad® so medicinski pripomočki za enkratno uporabo. So radiotransparentne in brez lateksa. Pri vsaki bolnici uporabite svežo blazino. Da zagotovite pravilno namestitev blazine, upoštevajte ta postopek.

1. Odprite vrečo, ki vsebuje blazine za dojke MammoPad, odstranite eno blazino in ponovno zaprite vrečo.



Opomba

Blazine je treba shranjevati v zatesnjeni plastični vreči, da preprečite kontaminacijo, ki bi lahko vplivala na kakovost slikanja.


2. Odlepite papirnato podlago z blazine in jo zavržite.
3. Lepilno stran namestite na platformo za slikanje skladno z navodili v naslednji opombi za vašo vrsto sistema. Blazine ne namestite čez naslikane nalepke.



Opomba

Selenia® in večina drugih sistemov FFDM – zaobljen rob usmerite proti spodnji levi strani detektorja. Blazino pogladite od zadnjega dela platforme za slikanje proti njenemu sprednjemu delu.

Dimensions® in večina drugih sistemov GE – zaobljen rob usmerite proti spodnji desni strani detektorja. Blazino pogladite od sprednjega dela platforme za slikanje proti njenemu zadnjemu delu.

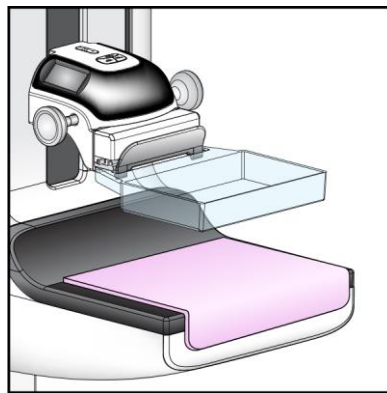

Slika 1: Blazina MammoPad nameščena na platformi za slikanje

4. Pri vseh pogledih slikanja upoštevajte normalen postopek določanja položaja.
5. Ko je preiskava končana, odstranite blazino s platforme za slikanje in jo zavržite.



Opomba

Če je bila blazina izpostavljena krvi ali telesnim tekočinam, upoštevajte postopek za odstranjevanje biološko nevarnih materialov v vaši ustanovi.

Za pomoč pri izdelku MammoPad se obrnite na službo za podporo za izdelek na telefonski številki 1-877-371-4372.

Pooblaščen zastopnik EU:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgija

