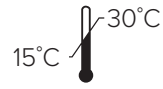


ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ Çözeltisi

Kullanım Talimatları

**KULLANIM AMACI**

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ Çözeltisi, idrar numuneleri için taşıma amaçlı ve koruyucu bir ortamdır ve ThinPrep™ Sisteminin parçası olarak bir ThinPrep™ cihaz kullanarak sitoloji slaytlarını hazırlamak için kullanılır. Profesyonel kullanım içindir.

ÖZET VE AÇIKLAMA

PreservCyt Çözeltisi, idrarın taşınmasına ve korunmasına olanak sağlar.

PROSEDÜR İLKELERİ

PreservCyt Çözeltisi, idrar numunelerinin hücrelerini ve DNA'sını korumak için kullanılan bir ortamdır.

BİLEŞİM

Metanol bazlı, tamponlanmış koruyucu çözelti. %35-55 Metanol. CAS 67-56-1

UYARILAR

Tehlike. Yanıcı. Metanol içerir.

H301. Yutulması halinde toksiktir.

H311. Ciltle teması halinde toksiktir.

H370. Organ hasarına yol açar.

H331. Solunması halinde toksiktir.

H226. Yanıcı sıvı ve buhar.

İn Vitro Tanı Amaçlı kullanım içindir.

İnsanlarda veya hayvanlarda harici veya dahili kullanıma yönelik değildir.

Zehirsiz hale getirilemez.

ÖNLEMLER

Kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

Tüm içeriği hasar açısından inceleyin.

P210. Isıdan/kıvılcıklardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.

P260. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P280. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301 + P310. YUTULMASI HALİNDE: Derhal bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir doktoru/hekimi arayın.

P303 + P361 + P353. CİLTLE (veya saçla) TEMAS ETMESİ HALİNDE: Kontamine olmuş tüm giysilerinizi derhal çıkarın/uzaklaştırın. Cildi suyla/duşla durulayın.

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ Çözeltisi

P305 + P351 + P338. GÖZLE TEMAS ETMESİ HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P308 + P311. Maruz kalınması veya kaygılanılması HALİNDE: Bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.

P370 + P378. Yangın durumunda: Söndürmek için kuru kum, kuru kimyasal veya alkole dayanıklı köpük kullanın.

P403 + P233. İyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kabi sıkıca kapalı tutun.

P501. İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Tüm laboratuvar prosedürlerinde olduğu gibi, genel önlemlere uyulmalıdır.

Kurcalamaya karşı korumalı mühür bozulmuşsa kullanmayın.

İyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Doğrudan temastan kaçının.

ÖN İŞLEME

Sulandırma, karıştırma veya seyreltme gerekmez.

SAKLAMA VE İŞLEME

Kullanılmamış PreservCyt Çözeltisini 15°C-30°C'de saklayın. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. PreservCyt Çözeltisi flakonunu ve numune toplama kabını kullanıma hazır olana kadar kapalı tutun.

PreservCyt Çözeltisini idrar numunesiyle birlikte 4°C ile 30°C arasında saklayın. Numuneyi 48 saat içinde işleyin.

GÖRÜNÜM VE BÜTÜNLÜK

Berrak, steril olmayan çözelti.

GÜVENLİK VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

PreservCyt Çözeltisi bakteriyostatik özellikler gösterir ve 4°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda 2:1 oranında idrar ile PreservCyt Çözeltisi kullanıldığında idrar numunelerindeki organizmaların çoğalmasını önler. Ek bilgiler için ThinPrep cihazının kullanım kılavuzuna başvurun.

Bu cihazla veya bu cihazla birlikte kullanılan herhangi bir bileşenle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu Hologic Teknik Destek birimine ve hastanın ve/veya kullanıcının yerel yetkili makamına bildirin.

İŞLEME TALİMATLARI

Not: Vysis UroVysion Mesane Kanseri Kiti için rutin bir şekilde toplanmış en az 33 cc idrar gereklidir.

1. PreservCyt Çözeltisi flakonunun tüm içeriğini idrar içeren numune kabına dikkatlice dökün. Sızıntıyı önlemek için numune kabını sıkıca kapatın.
2. PreservCyt Çözeltisini 4°C ile 30°C arasında saklayın. Önerilen saklama ve sevkiyat koşulları buz torbalarının (örn. Straforlu mavi buz) üzerindedir.
3. Numuneyi 48 saat içinde ThinPrep cihazı kullanım kılavuzundaki talimatlara veya Vysis UroVysion Mesane Kanseri Kitine ait üretici kullanım talimatlarına göre işleyin.

BERTARAF BİLGİLERİ

Kullanılmış numune toplama kabını, emici pedi, taşıma çantasını ve kalan numuneyi biyolojik tehlike olarak bertaraf edin. Yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ Çözeltisi

PROSEDÜR KISITLAMALARI

Numuneleri toplamak, hazırlamak ve işlemek için PreservCyt Çözeltisi dışında herhangi bir çözelti kullanılamaz. Numune alımından önce kayganlaştırıcı (örn. KY® Jel) kullanımını en aza indirin, çünkü bu tür maddeler hücre transferini engelleyebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Güvenlik Veri Sayfasının tamamı için www.hologicsds.com adresini ziyaret edin.

Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Tanım
AW-22938-3602 Rev. 001	3-2021	Talimatlar netleştirildi. Ciddi olayların bildirilmesiyle ilgili talimatlar eklendi.



İmalatçı



Kullanım talimatlarına bakın



In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci



Katalog numarası



Son kullanma tarihi




Parti kodu



Sıcaklık sınırlaması



Tekrar kullanmayın

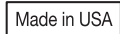

ABD'de üretilmiştir



Yanıcı



Akut Toksikite

Solunum Hassaslaştırıcı,
Hedef Organ Toksisitesi

Miktar



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 ABD
Tel: +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belçika • Tel: +32 2 711 46 80

Avustralya Sponsoru: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Avustralya • Tel: +02 9888 8000