



Användarhandbok

MAN-10435-1602 Revidering 002

HOLOGIC®

Selenia® Dimensions®

Digitalt mammografisystem

Digitalt tomosyntessystem

Användarhandbok

för programversion 1.10

Artikelnummer MAN-10435-1602

Revidering 002

Oktober 2024

HOLOGIC®

Teknisk support

USA: +1.877.371.4372

Europa: +32 2 711 4690

Asien: +852 37487700

Australien: +1 800 264 073

Övriga: +1 781 999 7750

E-post: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2024 Hologic, Inc. Tryckt i USA. Denna handbok skrevs ursprungligen på engelska.

Hologic, 3D, 3D Mammography, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, och associerade logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt kan vara skyddad genom ett eller flera amerikanska eller utländska patent som identifierats på www.Hologic.com/patents.

Innehållsförteckning

Förteckning över figurer xi

Förteckning över tabeller xv

1: Inledning 1

1.1	Avsedd användning.....	1
1.1.1	Kontraindikationer.....	2
1.2	Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden.....	2
1.3	Mammografisystems potentiella negativa effekter på hälsan.....	2
1.4	Systemfunktioner	2
1.5	Om Genius 3D Mammography-undersökning.....	3
1.6	Mer information om tomosyntes.....	3
1.7	Om C-View och Intelligent 2D	5
1.7.1	C-View- och Intelligent 2D-programvara	5
1.7.2	C-View- och Intelligent 2D-varningar.....	5
1.7.3	C-View- och Intelligent 2D – funktionsprincip	6
1.8	Användarprofiler	7
1.8.1	Mammografitekniker	7
1.8.2	Radiolog.....	7
1.8.3	Medicinsk fysiker	7
1.9	Patientmålgrupp	7
1.10	Utbildningskrav	7
1.11	Krav på kvalitetskontroller.....	8
1.12	Här hittar du installationsanvisningarna	8
1.13	Var man kan hitta information om teknisk beskrivning	8
1.14	Garantiuttalande	8
1.15	Teknisk support	9
1.16	Produktklagomål.....	9
1.17	Hologics uttalande om webbsäkerhet	9
1.18	Symboler	10
1.19	Dokumentkonventioner	11

2: Allmän information 13

2.1	Systemöversikt	13
2.1.1	Översikt av röntgenstativ.....	13
2.1.2	Översikt av C-armen	14
2.1.3	Översikt av bildtagningsstationen	15
2.2	Säkerhetsinformation.....	16
2.3	Varningar och försiktighet.....	16
2.4	Nödstoppsbrytare	21
2.5	Förreglingar.....	21
2.6	Efterlevnad	21

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Innehållsförteckning

2.6.1	Efterlevnadskrav	21
2.6.2	Meddelande om efterlevnad.....	23
2.7	Dekalernas placering	25
3: Systemkontroller och indikatorer		27
3.1	Systemeffektkontroller	27
3.2	Kontroller och indikatorer på röntgenstativet	28
3.2.1	Röntgenrör, display.....	29
3.2.2	Kompressionsenhetens kontroller och displayr.....	29
3.2.3	C-armens kontrollpaneler.....	30
3.2.4	Fotpedal med dubbel funktion.....	30
3.3	Kontroller och indikatorer på bildtagningsstationen	31
3.3.1	Kontroller och displayr på universalbildtagningsstationen	31
3.3.2	Kontroller och indikatorer på Premium bildtagningsstation	32
3.3.3	Kontroller och displayr på standardbildtagningsstationen.....	33
3.3.4	Tangentbord	34
3.3.5	Streckkodsläsare.....	34
3.3.6	Universalbildtagningsstationens display	34
3.3.7	Pekskärmsdisplay på Premium bildtagningsstation	34
3.3.8	Standardbildtagningsstationens display	34
3.3.9	Bildmonitor.....	34
4: Systemstart, funktionstester och avstängning		35
4.1	Så här startar du systemet	35
4.1.1	Förberedelser	35
4.1.2	Start	35
4.1.3	Logga in	38
4.2	Utföra funktionstester.....	40
4.2.1	Funktionstester av kompression	41
4.2.2	Funktionskontroller av C-armens rörelser	42
4.3	Nödstoppsbrytarnas funktioner	49
4.4	Så här slår du av systemet.....	50
4.5	Så här bryter du all ström till systemet.....	50
5: Användargränssnitt		51
5.1	Skärmen "Välj funktion att utföra".....	51
5.2	Om aktivitetsfältet	52
5.3	Välj patientskärm.....	54
5.3.1	Om fliken Meddelanden.....	56
5.3.2	Öppna en patient.....	56
5.3.3	Lägga till en ny patient	56
5.3.4	Redigera patientinformation	57
5.3.5	Dela patientjournaler	57
5.3.6	Radera en patient	60
5.3.7	Filter för patienter	60

5.3.8	Uppdatera arbetslistan.....	62
5.3.9	Sök i arbetslistan.....	62
5.3.10	Admin	62
5.3.11	Logga ut	63
5.3.12	Advanced Workflow Manager	63
5.4	Skärmen Procedur.....	63
5.4.1	Så här använder du knappen Implant Present (Implantat finns).....	65
5.4.2	Så här använder du funktionen Flytta paddel.....	65
5.4.3	Dialogrutan Procedurinformation.....	66
5.4.4	Lägg till en undersökning.....	67
5.4.5	Lägga till (eller ta bort) en vy.....	69
5.4.6	Redigera en vy	70
5.4.7	Hämta.....	70
5.4.8	Stäng en patient	71
5.5	Så här öppnar du bildgranskningsfunktionerna.....	71
5.6	Resultatgrupper	72
5.6.1	Välj en resultatgrupp.....	72
5.6.2	Lägg till eller redigera en resultatgrupp	72
5.6.3	Anpassat resultat.....	73
5.7	Resultat på begäran.....	74
5.7.1	Archive (Arkivera)	74
5.7.2	Exportera.....	75
5.7.3	Skriv ut.....	76

6: Bilder **79**

6.1	Skärmen Bildvisning.....	79
6.2	Så här ställer du in exponeringsparametrarna	80
6.2.1	Välj Bildtagningsläge (tomosyntestillval)	80
6.2.2	Välj exponeringsläge	80
6.2.3	Så här använder du AEC-sensorn	80
6.3	Så här tar du en bild	81
6.3.1	Händelsesekvens vid konventionell bildtagning	82
6.3.2	Händelsesekvens vid tomosyntesbildtagning	82
6.3.3	Så här accepterar du en avisad bild	83
6.3.4	Så här accepterar du eller avisar en vilande bild	83
6.4	Så här korrigeras och ombearbetas bilder med implantat	83
6.4.1	Om bilden inte accepteras	83
6.4.2	Om bilden accepteras	83
6.5	Så här granskas bilderna	84
6.5.1	Fliken Bildgranskningsverktyg	85
6.5.2	Kommentarflik	86
6.5.3	Andra bildgranskningsverktyg	87
6.5.4	Slice Indicator (Snittindikator)	88
6.6	Gör så här för att skicka bilderna till resultatenheter	88
6.7	Så här använder du I-View 2D-kontrast	89

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Innehållsförteckning

6.7.1	Så här konfigureras kontrastinställningarna	92
6.8	Provbildtagning	93
7: Tillbehör		95
7.1	Så här installerar du tillbehör på C-armen.....	95
7.2	Patientansiktsskydd.....	96
7.2.1	Så här installerar och tar du bort det indragbara ansiktsskyddet.....	96
7.2.2	Så här använder du det indragbara ansiktsskyddet	97
7.2.3	Så här installerar och tar du bort det konventionella ansiktsskyddet	99
7.3	Kompressionspaddlar	99
7.3.1	Paddlar för rutinscreening.....	101
7.3.2	Kontakt- och punktkomprimeringspaddlar	102
7.3.3	Förstoringspaddlar.....	102
7.3.4	Lokaliseringspaddlar	103
7.3.5	Stor ultraljudspaddel	103
7.3.6	Så här installerar och tar du bort en kompressionspaddel	104
7.3.7	Underhåll och rengöring av paddlarna	105
7.3.8	Paddelförflyttning	105
7.3.9	FAST-komprimeringsläge	105
7.4	Förstoringsstativ	107
7.4.1	Så här installerar eller tar du bort det förstoringsstativet.....	107
7.5	Hårkorsenheter	108
7.5.1	Så här installerar du eller tar bort lokaliseringshårkorsenheten	108
7.5.2	Så här använder du lokaliseringshårkorsenheten.....	109
7.5.3	Så här installerar du eller tar bort det förstoringshårkorsenheten	110
7.5.4	Så här riktar du in lokaliseringshårkorsenheten	111
8: Kliniska ingrepp		113
8.1	Standardarbetsflöde.....	113
8.1.1	Förberedelser	113
8.1.2	Vid gantryt.....	114
8.1.3	Vid bildtagningsstationen.....	114
8.2	Exempel på screeningprocedur.....	115
8.2.1	Placera patienten	115
8.2.2	Ställa in exponeringsteknik	116
8.2.3	Utför exponeringen	116
8.3	Procedur för näillokalisering vid tomosyntes.....	118
9: Underhåll och rengöring		121
9.1	Rengöring	121
9.1.1	Allmän information om rengöring.....	121
9.1.2	För allmän rengöring	121
9.1.3	Gör så här för att undvika möjlig skada på person eller utrustning.....	122
9.1.4	Bildtagningsstation	122
9.2	Underhåll.....	124

9.2.1	Schema för förebyggande underhåll.....	124
9.2.2	Om regenerering.....	126
10:	Systemadministrationsgränssnitt	127
10.1	Skärmen Admin	127
10.2	Skärmen Om.....	129
10.2.1	Fliken Licensiering:	130
10.3	Ändra preferens för användarspråk	130
10.4	Ställa in autoupphängning och autoparning.....	131
10.5	Ställa in procedurflikar med flera rader	132
10.6	Aktivera och ställ in höjDMINNET.....	133
10.7	Ställ in systemet så att det automatiskt accepterar eller gör bilder till vilande.....	135
10.8	Ställa in kontraststandarder	136
10.9	Aktivera och ställ in standardHÖJD.....	137
10.10	Systemverktyg.....	139
10.10.1	Systemverktyg för Radiologic Technologist Manager (Chefsröntgentekniker)	139
10.10.2	Fjärråtkomst till bildrapporter.....	141
10.11	Arkiveringsverktyg.....	144
Appendix A Specifikationer		147
A.1	Produktens mått.....	147
A.1.1	Röntgenstav (gantry med C-arm)	147
A.1.2	Bildtagningsstationer	148
A.2	Miljö vid drift och förvaring.....	152
A.2.1	Allmänna villkor för användning.....	152
A.2.2	Förvaringsmiljö.....	152
A.3	Strålskydd.....	153
A.4	Inkommande elektricitet.....	153
A.4.1	Röntgenstav	153
A.4.2	Bildtagningsstation	153
A.5	Teknisk information om röntgenstavet.....	154
A.5.1	C-arm.....	154
A.5.2	Kompression.....	155
A.5.3	Röntgenrör	156
A.5.4	Filtrering av och utmatning från röntgenstrålfältet	156
A.5.5	Röntgeninbländning	158
A.5.6	Ljusfältsindikation	158
A.5.7	Röntgengenerator	158
A.6	Teknisk information om bildtagningssystemet.....	159
A.6.1	Bildmottagare	159
Appendix B Systemmeddelanden och varningsmeddelanden		161
B.1	Felkorrigering och felsökning	161
B.2	Olika typer av meddelanden	161
B.2.1	Felnivåer	161

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Innehållsförteckning

B.2.2	Systemmeddelanden.....	162
B.3	Meddelanden som rör aggregatet för avbrott strömförsörjning.....	164
Appendix C Användning av mobilt system		165
C.1	Säkerhetsvillkor och andra försiktighetsuppmannaingar.....	165
C.2	Specifikationer för mobil användning.....	166
C.2.1	Gränsvärden för stötar och vibrationer	166
C.2.2	Miljö i bussen.....	166
C.3	Inkommande elektricitet	167
C.3.1	Gantry	167
C.3.2	Bildtagningsstation	167
C.4	Förbereda systemet för förflyttning.....	168
C.5	Förbereda systemet för användning.....	170
C.6	Testa systemet efter förflyttning	171
C.6.1	Mobila systemkontroller och funktionstester.....	171
C.6.2	Kvalitetskontroll för mobila system.....	171
Appendix D Dosinformation		173
D.1	EUREF dostabeller.....	173
D.2	EUREF CNR-tabell.....	174
Ordlista över termer		175
Sakregister		177

Förteckning över figurer

Figur 1: Röntgenstaviv för Selenia® Dimensions® System	13
Figur 2: Översikt av C-armen	14
Figur 3: Bildtagningsstationer.....	15
Figur 4: Nödstoppsbrytarnas funktioner.....	21
Figur 5: Dekalernas placering.....	25
Figur 6: Systemeffektkontroller	27
Figur 7: Kontroller och indikatorer på röntgenstavivet	28
Figur 8: Röntgenrör, display	29
Figur 9: Kompressionsenhet	29
Figur 10: Kompressionsenhetens skärm	29
Figur 11: C-armens kontrollpanel.....	30
Figur 12: Fotpedal med dubbel funktion	30
Figur 13: Kontroller och displayer på universalbildtagningsstationen.....	31
Figur 14: Kontroller och indikatorer på Premium bildtagningsstation	32
Figur 15: Kontroller och displayer på standardbildtagningsstationen	33
Figur 16: Vrid för att återställa nödstoppsbrytarna.....	35
Figur 17: Strömknappar på universalbildtagningsstation	35
Figur 18: Strömknappar på premiumbildtagningsstation	35
Figur 19: Strömknappar på standardbildtagningsstation.....	35
Figur 20: Inloggningsskärmen för Windows 10	36
Figur 21: Startskärm	37
Figur 22: Skärmen Systeminloggning	38
Figur 23: C-armens kontrollpanel (vänster sida visas).....	40
Figur 24: Nödstoppsbrytarnas funktioner	49
Figur 25: Strömknappar på universalbildtagningsstation	50
Figur 26: Strömknappar på premiumbildtagningsstation	50
Figur 27: Strömknappar på standardbildtagningsstation.....	50
Figur 28: Ett exempel på skärmen Välj funktion att utföra.....	51
Figur 29: Aktivitetsfältet	52
Figur 30: Välj patientskärm.....	54
Figur 31: Fliken Företag	55
Figur 32: Skärmen Lägg till patient	56
Figur 33: Skärmen Dela patientjournaler	57
Figur 34: Välj tillämplig undersökning för att dela patientjournaler	59
Figur 35: Fliken Filter på skärmen Patientfilter	60
Figur 36: Skärmen Procedur	63
Figur 37: Knappar för paddelförflyttning.....	65
Figur 38: Dialogrutan Procedurinfo	66
Figur 39: Dialogrutan Lägg till procedur	67
Figur 40: Skärmen Lägg till vy.....	69
Figur 41: Skärmen Redigera vy	70
Figur 42: Fältet Utmatn.grupper.....	72

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Innehållsförteckning

Figur 43: Exempel på en Output Group (Resultatgrupp) av typen Custom (Special).....	73
Figur 44: Välj bilder för export	75
Figur 45: Dialogrutan Exportera.....	75
Figur 46: Skärmen Skriv ut	77
Figur 47: Skärmen Bildvisning	79
Figur 48: Exponering pågår	81
Figur 49: Exponeringen är klar.....	81
Figur 50: Markerade bilder i en undersökning.....	82
Figur 51: Fliken Verktyg (tomasystestillval) visas.....	84
Figur 52: Bildgranskningsverktyg.....	85
Figur 53: Verktyg på fliken Meddelanden.....	86
Figur 54: Exponeringsindex.....	87
Figur 55: Visningssätt.....	87
Figur 56: Slice Indicator (Snittindikator).....	88
Figur 57: Skärmen 2D Contrast i I-View	89
Figur 58: Väntetid på skärmen 2D Contrast (2D-kontrast) i I-View	90
Figur 59: Skärmen 2D Contrast med optimal bildtagningsperiod i I-View.....	91
Figur 60: I-View 2D-kontrastinställningar	92
Figur 61: Procedurskärm för prover	93
Figur 62: Skärmen Provbildtagning	94
Figur 63: Tillbehör till C-armen.....	95
Figur 64: Rikta in det indragbara ansiktsskyddet på C-armen.....	97
Figur 65: Installation av ansiktsskyddet	98
Figur 66: Användning av ansiktsskyddet.....	98
Figur 67: Så här installerar du det konventionella ansiktsskyddet.....	99
Figur 68: Så här installerar du komprimeringspaddel.....	104
Figur 69: Så här tar du bort en kompressionspaddel.....	104
Figur 70: Regeln för FAST-kompressionsläget	106
Figur 71: Installera förstoringsstativet	107
Figur 72: Installation av lokaliseringshårkorsenheten	108
Figur 73: Så här installerar du eller tar bort det förstoringshårkorsenheten	110
Figur 74: Exempel på en screeningprocedurskärm.....	115
Figur 75: Exponering pågår	116
Figur 76: Exponeringen är klar	117
Figur 77: Beräkna näldjupet.....	119
Figur 78: Skärmen Admin.....	127
Figur 79: Systemflik på skärmen Om (bildtagningsstationen)	129
Figur 80: Fliken Licensiering på skärmen Om	130
Figur 81: Aktivera Autoupphängning och Autoparning	131
Figur 82: Aktivera procedurflikar med flera rader	132
Figur 83: Knappen Mina inställningar på skärmen Admin	133
Figur 84: Fliken Konsol på skärmen Redigera operatör	133
Figur 85: Kontrollpanel för höjdjustering	134
Figur 86: Fälten Önskad konsolhöjd och Aktuell konsolhöjd	134
Figur 87: Ställ in automatisk bilddisposition.....	135

Figur 88: I-View 2D standardkontrastinställningar	136
Figur 89: Knappen Föriställningar på skärmen Admin.....	137
Figur 90: Fliken Konsol på skärmen Systempreferenser.....	137
Figur 91: Kontrollpanel för höjdjustering	138
Figur 92: Fälten Önskad konsolhöjd och Aktuell konsolhöjd.....	138
Figur 93: Knappen Systemverktyg.....	139
Figur 94: Skärmen Systemverktyg.....	139
Figur 95: Skärmen Inloggning till systemverktyg	141
Figur 96: Skärmen Välkommen till systemverktyg.....	142
Figur 97: Parametrar för Create Image Report (Skapa bildrapport)	142
Figur 98: Hämta bildrapporten.....	143
Figur 99: Knappen Arkiv	144
Figur 100: Skärmen Arkiv för flera patienter på begäran	144
Figur 101: Skärmen Exportera	146
Figur 102: Mått på röntgenstativ (gantry med C-arm).....	147
Figur 103: Mått på universalbildtagningsstation.....	148
Figur 104: Mått på premium bildtagningsstation.....	149
Figur 105: Mått på standard bildtagningsstation	150
Figur 106: Mått på mobil universalbildtagningsstation.....	151
Figur 107: Mått på mobil premium bildtagningsstation.....	152
Figur 108: LCD-displayen på aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning.....	164
Figur 109: Låsvred för tangentbordsbrickan, höger eller vänster sida (universalbildtagningsstation).....	168
Figur 110: Låsvred för tangentbordsbrickan (premiumarbetsstation).....	168
Figur 111: Tangentbordsbrickans låsvred från låst (A) till olåst (D)	168
Figur 112: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie I).....	169
Figur 113: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie II).....	169
Figur 114: Tangentbordsbrickans låsvred från låst (A) till olåst (D)	170
Figur 115: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie I).....	170
Figur 116: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie II).....	170

Förteckning över tabeller

Tabell 1: Systemdekaler.....	26
Tabell 2: Kompressionstester	41
Tabell 3: C-arm upp och ned.....	42
Tabell 4: Moturs rotation av C-armen.....	44
Tabell 5: Medurs rotation av C-armen	45
Tabell 6: C-armens rotationsbrytare	46
Tabell 7: Automatisk moturs rotation av C-armen.....	47
Tabell 8: Automatisk medurs rotation av C-armen.	47
Tabell 9: Kollimering av C-armen	48
Tabell 10: Flytta paddel.....	49
Tabell 11: Menyer i aktivitetsfältet	52
Tabell 12: Skärmen Välj patient	54
Tabell 13: Alternativ på fliken Filter (kräver åtkomsträttigheter)	61
Tabell 14: Skärmen Procedur	64
Tabell 15: Undersökningsgrupper.....	68
Tabell 16: Tillgängliga tillbehör	100
Tabell 17: Användarens förebyggande underhåll.....	124
Tabell 18: Förebyggande underhåll av en servicetekniker	125
Tabell 19: Funktioner på skärmen Admin	127
Tabell 20: Radiologic Technologist Manager (Chefsröntgentekniker) – funktioner i Systemverktyg	140
Tabell 21: Högsta mA-inställning som funktion av kV.....	156
Tabell 22: Systemmeddelanden	162
Tabell 23: 2D-dos (EUREF).....	173
Tabell 24: BT-dos (EUREF).....	173
Tabell 25: CEDM-dos (EUREF).....	174

Kapitel 1 Inledning

Läs all denna information noga innan man använder systemet. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna handbok. Förvara denna handbok så att den är tillgänglig under ingreppen. Läkare bör berätta för patienterna om alla potentiella risker och biverkningar med hänsyn till användningen av systemet som beskrivs i denna handbok.

**OBS!**

Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

1.1 Avsedd användning

Rx Only

Försiktig! Enligt USA:s federala lagstiftning får denna enhet endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Hologic® Selenia® Dimensions®-system genererar digitala mammografibilder som kan användas för screening och diagnos av bröstcancer. Selenia Dimensions-systemet (2D eller 3D) är avsett att användas i samma kliniska tillämpningar som 2D-mammografisystem för screeningmammogram. Mer specifikt kan Selenia Dimensions-systemet användas för att skapa digitala mammogram i 2D samt 3D-mammogram. Varje screeningundersökning kan bestå av följande:

En 2D FFDM-bilduppsättning eller

En 2D- och 3D-bilduppsättning, där 2D-bilden kan vara antingen en FFDM-bild eller en 2D-bild som genererats från 3D-bilduppsättningen. 3D-bilduppsättning kan visas som antingen 3D-snitt på 1 mm eller 3D-SmartSlices på 6 mm.

Selenia Dimensions-systemet kan också användas för ytterligare diagnostiska arbeten på brösten.

**OBS!**

I Kanada och Singapore är tomosyntes inte godkänt för screening, utan måste användas tillsammans med en 2D-bild (antingen en FFDM-bild eller en 2D-bild som genererats från 3D-bildsetet).

Kontrastförstärkt digital mammografi (Contrast Enhanced Digital Mammography)

Kontrastförstärkt digital mammografi (Contrast Enhanced Digital Mammography (CEDM)) är en vidareutveckling av den befintliga indikationen för diagnostisk mammografi med Selenia Dimensions-systemet. CEDM-tillämpningen ger en kontrastförstärkt bildtagning av brösten med hjälp av en dubbel energiteknik. Denna bildtagningsteknik kan användas som ett tillägg efter mammografi- och/eller ultraljudsundersökningar för att lokalisera en känd eller misstänkt lesion.

1.1.1 Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

1.2 Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden

Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden som används i denna handbok:



VARNING!

Procedurer som du måste följa exakt för att förhindra potentiellt farlig eller dödlig skada.



Varning:

Procedurer som du måste följa exakt för att förhindra personskada.



Var försiktig:

Procedurer som du måste följa exakt för att förhindra skada på utrustningen, dataförlust eller skada på programvarufiler.



Obs!

Anmärkningar visar ytterligare information.

1.3 Mammografisystems potentiella negativa effekter på hälsan

Nedan finns en lista över potentiella biverkningar (t.ex. komplikationer) som är förknippade med användningen av denna enhet (dessa risker är desamma som för andra mammografisystem, för film eller digitala):

- Överdriven bröstkomprimering
- För stor röntgenexponering
- Elektrisk stöt
- Infektion
- Hudirritation, abrasioner eller punktionssår

1.4 Systemfunktioner

Systemet tillhandahåller användargränssnitt för att utföra screening och diagnostiska mammogram:

- Konventionell mammografi med digital bildmottagare med en storlek som är likvärdig med stor mammografifilm.

- Tomosyntesscanning med digital bildmottagare med en storlek som är likvärdig med stor mammografifilm (tillvalet Tomosyntes).
- Konventionella digitala mammogram- och tomosyntesscanningar under en komprimering (tillvalet Tomosyntes).

1.5 Om Genius 3D Mammography-undersökning

Genius™ 3D Mammography™-undersökning (även kallad Genius™-undersökningen) utförs på ett Hologic® 3D Mammography™-system, och har ett 2D- och 3D™-bildset. En 2D-bild kan vara antingen en tagen 2D-bild eller en 2D-bild som genererats från 3D™-bildsetet. Genius™-undersökningen är endast tillgänglig på ett Hologic® 3D Mammography™-system.

Genius™ 3D Mammography™ är varumärket för en Hologic 3D Mammography™-undersökning, och är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader.

1.6 Mer information om tomosyntes

Systemet Hologic Selenia Dimensions gavs godkännande från FDA för alternativet Hologic tomosyntes den 11 feb 2011 (se PMA-nummer P080003). Detta FDA-godkännande gäller för screening och diagnostisk avbildning. Mer information finns på FDA:s webbplats på
<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

Alternativet genererad 2D-bild (C-View) tillsammans med tomosyntes erhöll godkännande från FDA den 16 maj 2013 (se PMA-nummer P080003 S001). Mer information finns på FDA:s webbplats på
<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

En lista över vetenskapliga publikationer om brösttomosyntes är tillgänglig från Hologics webbplats. Huvuddelen av studierna utfördes med det kommersiella systemet Hologic Selenia Dimensions för tomosyntes. Se publikationen på
<http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

På Hologics webbsida finns flera vitböcker och sammanfattningsar om olika bröstavbildningspublikationer. Se dokumenten på
<http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Oberoende publikationer har granskat systemet Hologic Selenia Dimensions för tomosyntes i populationsbaserade screeningsekvenser i Europa. Resultaten visar genomgående en betydande ökning av detekteringsfrekvensen för invasiv cancer samtidigt med en minskning av frekvensen falska positiva resultat. Följande publikationer rekommenderas.

Integration av digital mammografi i 3D med tomosyntes för populationsbaserad screening (STORM): en prospektiv jämförande studie.

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 1: Inledning

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

Prospektiv studie som jämför mammografi med direktdigital teknik (FFDM) med kombinerad FFDM och tomosyntes i ett populationsbaserat screeningprogram med oberoende dubbelgranskning och skiljeförfarande.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

Jämförelse av enbart digital mammografi och digital mammografi plus tomosyntes i ett populationsbaserat screeningprogram.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiologi. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

Digital bröstscrenning med tomosyntes och dubbel vy med syntetiskt rekonstruerade projektiionsbilder: jämförelse med digital brösttomosyntes med mammografibilder med direktdigital teknik.

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiologi. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

Bröstcancerscreening med tomosyntes i kombination med digital mammografi

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>



VIKTIGT:

Hologic rekommenderar att användarna gör sig väl bekanta med de lokala eller regionala bestämmelserna. Dessa föreskrifter kan medföra begränsningar för de olika typerna av klinisk användning. Eftersom föreskrifterna kan förändras med tiden rekommenderas en periodisk granskning.

1.7 Om C-View och Intelligent 2D

**OBS!**

Intelligent 2D™ avbildningsteknik är eventuellt inte tillgängligt i alla regioner.
Kontakta din försäljningsrepresentant för information

1.7.1 C-View- och Intelligent 2D-programvara

C-View™- och Intelligent 2D™-programvaran använder tillgängliga bilddata från en brösttomosyntesavbildning för att generera ett digitalt mammogram (2D) per brösttomosyntesavbildning. Den syntetiserade 2D-bilden skapas utan behov av ytterligare en digital mammografiexponering. Den syntetiserade 2D-bilden är designad för att likna och tjäna samma ändamål som ett digitalt mammogram (2D) när den används som en del av en screeningundersökning med tomosyntes. C-View- eller Intelligent 2D-bilden ska tolkas i kombination med ett brösttomosyntesbildset och är inte avsedd att användas utan medföljande brösttomosyntesbilder för att fatta kliniska beslut eller ställa diagnoser.

1.7.2 C-View- och Intelligent 2D-varningar

**Varning!**

Fatta inga kliniska beslut och ställa inga diagnoser från C-View- eller Intelligent 2D-bilder utan att granska det tillhörande tomosyntesbildsetet.

Använd de C-View- eller Intelligent 2D-syntetiserade 2D-bilderna på samma sätt som du skulle använda konventionell digital mammografi (2D) när du utför en screeningstudie med hjälp av tomosyntes.

- När du granskas C-View- eller Intelligent 2D-bilderna för punkter eller områden av intresse, jämför dem med ett tidigare digitalt mammogram (2D) om ett sådant finns och granska sedan tillhörande tomosyntesbilder mycket noga.
 - Undersök noga hela tomosyntesbildsetet innan du fattar något kliniskt beslut.
-

**Varning!**

Utseendemässigt kan en C-View- eller Intelligent 2D-syntetiserad 2D-bild skilja sig från en konventionell digital mammografibild (2D), precis som 2D-filmer och digitala mammografibilder (2D) från olika leverantörer kan se olika ut.

Användarna måste se till att de får adekvat utbildning och är väl införstådda med hur C-View- och Intelligent 2D-syntetiserade 2D-bilder ser ut innan de använder dem i kombination med tomosyntesbildset.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 1: Inledning

1.7.3 C-View- och Intelligent 2D – funktionsprincip

Översikt

C-View- och Intelligent 2D-programmet är ett bildbearbetningsprogram för efterbehandling av pixeldata från tomosyntesdata som inhämtats med hjälp av ett Hologic tomosyntesavbildagningssystem på en digital mammografibild (2D). Den C-View- och Intelligent 2D-syntetiserade 2D-bilden kan användas istället för ett digitalt mammogram (2D) som en del av en screeningundersökning med användning av tomosyntes.

C-View- och Intelligent 2D-programmet bearbetar tomosyntesdata för att skapa 2D-bilder som är avsedda att likna och tjäna samma syfte som ett digitalt mammogram (2D) när de används som en del av en tomosyntesbaserad screeningundersökning.

Konfiguration

C-View- och Intelligent 2D-programmet har inga inställningar som kan konfigureras av användaren som påverkar utseende på resulterande syntetiserade 2D-bilder. C-View- och Intelligent 2D-bilderna produceras i antingen objektformatet DICOM Breast Tomosynthesis Image (Brösttomosyntesbild) som ett enskilt tjockt snitt eller i objektformatet DICOM Digital Mammography Image (Digital mammografibild). Klinikens PACS-administratör kan i samråd med Hologics anslutningstekniker välja det utdataformat som är mest lämpligt för klinikens IT-infrastruktur och arbetsstationer. DICOM-rubriken för varje C-View- eller Intelligent 2D-bild innehåller den information som behövs för att skilja den från eventuella medföljande konventionella 2D-bilder eller tomosyntesbildset i samma vy. En kommentar ("C-View" eller "Intelligent 2D") bränns också in på den syntetiserade 2D-bildens pixeldata.

Arbetsflöde

I likhet med alla bildtagningsstudier väljer teknikern patient och identifierar vilken typ av bildtagningsprocedur som ska utföras. För en undersökning med C-View- eller Intelligent 2D-bilder är processen att ta bilder av patienten och slutföra studien det enda som behövs. C-View- och eller Intelligent 2D-programmet sköter sig själv utan direkt mänskligt ingripande.

1.8 Användarprofiler

1.8.1 Mammografitekniker

- Uppfyller alla krav som gäller på den plats där mammografiteknikern arbetar.
- Har slutfört utbildning på mammografisystemet.
- Har utbildning i mammografipositioner.
- Vet hur man använder en dator och dess kringutrustning.

1.8.2 Radiolog

- Uppfyller alla krav som gäller på den plats där radiologen arbetar.
- Vet hur man använder en dator och dess kringutrustning.

1.8.3 Medicinsk fysiker

- Uppfyller alla krav som gäller på den plats där den medicinska fysikern arbetar.
- Känner till mammografi.
- Har erfarenhet av digital bildtagning.
- Vet hur man använder en dator och dess kringutrustning.

1.9 Patientmålgrupp

Asymptomatiska patienter som löper genomsnittlig risk eller högre risk än genomsnittet att drabbas av bröstcancer behöver genomgå screening för bröstcancer. Patienter som kan ha symptom relaterade till bröstcancer eller har onormala fynd vid en screeningundersökning behöver också bilddiagnostik med samma eller liknande metoder. Kvalificerad, medicinskt utbildad personal avgör, baserat på delat beslutsfattande med patienten och i vissa fall vårdgivaren, om en radiografisk undersökning är indicerad baserat på patientens ålder, hälsa och fysiska tillstånd.

1.10 Utbildningskrav

I USA måste användarna vara registrerade röntgentekniker och uppfylla särskilda kriterier för att utföra mammografi. Mammografianvändare måste uppfylla alla tillämpliga krav på MQSA-personal enligt FDA:s riktlinjer för konventionell och digital mammografi.

Det finns olika alternativ för användarutbildning, vilka inkluderar men inte begränsas till:

- Applikationsutbildning på plats av en klinisk servicespecialist från Hologic
- Utbildning på arbetsplatsen, även kallat medarbetarutbildning

Dessutom fungerar bruksanvisningen som vägledning om hur systemet används.

Alla användare måste se till att de får utbildning om korrekt drift av systemet innan de används på patienter.

Hologic tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning av systemet.

1.11 Krav på kvalitetskontroller

Anläggningar i USA måste använda kvalitetskontrollhandboken för att skapa ett program för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Anläggningen måste skapa programmet så att det uppfyller kraven i lagen om kvalitetsstandard vid mammografi eller ackrediteras av ACR eller något annat ackrediteringsinstitut.

Anläggningar utanför USA kan använda kvalitetskontrollhandboken som vägledning för att skapa ett program som uppfyller lokala standarder och bestämmelser.

1.12 Här hittar du installationsanvisningarna

Installationsanvisningarna finns i *servicehandboken*.

1.13 Var man kan hitta information om teknisk beskrivning

Information om teknisk beskrivning finns i *servicehandboken*.

1.14 Garantiuttalande

Utöver det som uttryckligen i övrigt anges i överenskommelsen gäller följande: i) utrustning tillverkad av Hologic garanteras för den ursprungliga kunden fungerar i allt väsentligt i enlighet med publicerade produktspecifikationer under ett (1) år med början från datumet för leverans eller, om installation krävs, från datumet för installation ("garantiperioden"); ii) röntgenrör för mammografi med digital bildbehandling garanteras i tjugofyra (24) månader, under vilken tid röntgenrören omfattas av en fullständig garanti under de första tolv (12) månaderna och sedan omfattas av en rätlinjig pro rata-garanti under månad 13–24; iii) reservdelar och ombearbetade delar garanteras under återstoden av garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans, beroende på vilken period som är längst; iv) förbrukningsartiklar garanteras uppfylla publicerade specifikationer under en period som avslutas på det utgångsdatum som anges på respektive förpackning; v) licensierad programvara garanteras fungera i enlighet med publicerade specifikationer; vi) tjänster garanteras tillhandahållas på ett yrkesmässigt sätt; vii) utrustning som inte tillverkats av Hologic garanteras av tillverkaren och respektive tillverkares garantier ska gälla för Hologics kunder i den utsträckning som detta tillåts av tillverkare av sådan icke Hologic-tillverkad utrustning. Hologic garanterar inte avbrots- eller felfri användning av produkterna eller att de fungerar tillsammans med andra tillverkares produkter som inte godkänts av Hologic. Dessa garantier gäller inte för artiklar som: a) reparerats, flyttats eller ändrats, förutom av servicepersonal som auktoriseras av Hologic; b) utsatts för miss bruk (inklusive termisk eller elektrisk), påfrestning eller felaktig användning; c) förvarats, underhållits eller används på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga specifikationer eller anvisningar från Hologic,

inklusive kundens vägran att tillåta programuppdateringar som rekommenderas av Hologic eller d) betecknas som levererade utan garanti från Hologic eller på förlanseringsbasis eller i befintligt skick.

1.15 Teknisk support

Se handbokens sida med upphovsrättssida för kontaktinformation för produktsupport.

1.16 Produktklagomål

Eventuella klagomål eller problem som rör denna produkts kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet eller prestanda ska rapporteras till Hologic. Om produkten har orsakat eller ökat en patientskada ska incidenten omedelbart rapporteras till Hologic. (Se upphovsrättssidan för kontaktinformation.)

1.17 Hologics uttalande om webbsäkerhet

Hologic testar kontinuerligt datorns aktuella status och nätverkssäkerhet för att utvärdera eventuella säkerhetsproblem. När det behövs tillhandahåller Hologic uppdateringar av produkten.

För dokument rörande bästa praxis för webbsäkerhet för Hologics produkter, se Hologics webbplats www.Hologic.com.



Varning:

Adekvat dator- och nätverkssäkerhet kräver att alla cybersäkerhetsuppdateringar från Hologic installeras.
Installera inte ej godkänd programvara i systemet.

1.18 Symboler

I detta avsnitt beskrivs symbolerna på detta system.

Symbol	Beskrivning
	Patientkontaktdel, typ B
	Potentialutjämningsterminal
	Skyddsjordsterminal
	AV (ström)
	PÅ (ström)
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta en servicerepresentant.
	Varning för elektricitet
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Detta system avger icke-joniserande, radiofrekvens (RF) energi
	Varning för strålning
	Följ bruksanvisningen
	Försiktighet!
	Katalognummer
	Serienummer
	Artikelnummer


1.19 Dokumentkonventioner

När du uppmanas att skriva in text ska du ange den text som är tryckt med typsnitt med fast teckenmellanrum exakt som det står.

Kapitel 2 Allmän information

2.1 Systemöversikt

2.1.1 Översikt av röntgenstativ

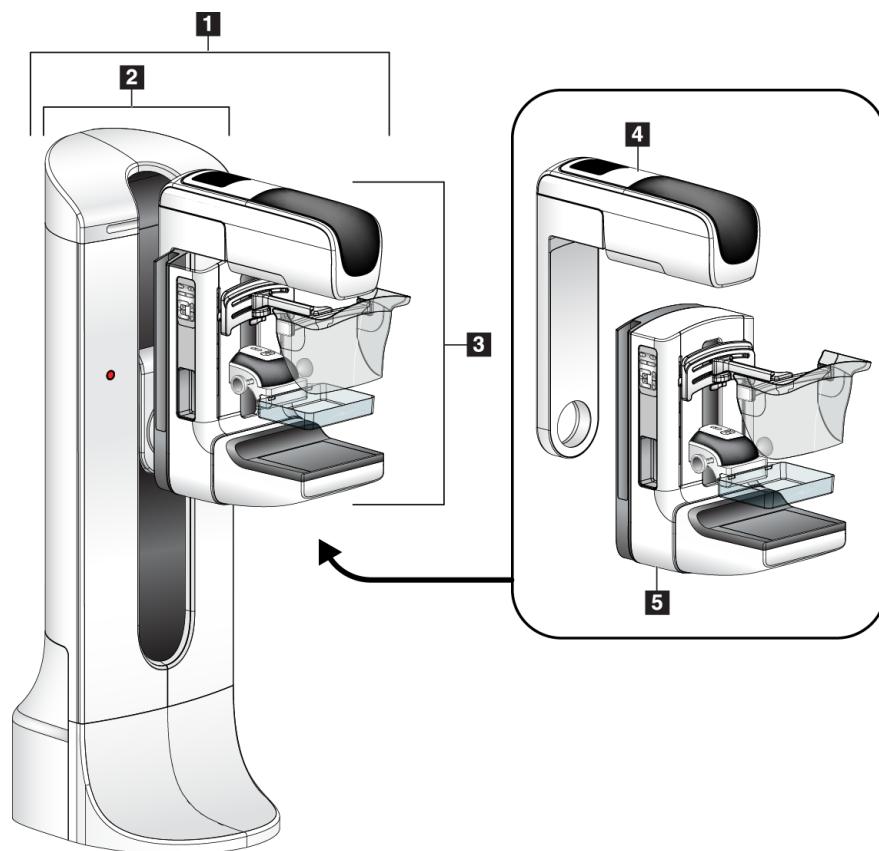


Figur 1: Röntgenstativ för Selenia® Dimensions® System

Figurförklaring

1. Röntgenstativ (gantry och C-arm)
2. Gantry
3. C-arm (röntgenarm och kompressionsarm)
4. Röntgenrörssarm
5. Kompressionsarm

2.1.2 Översikt av C-armen

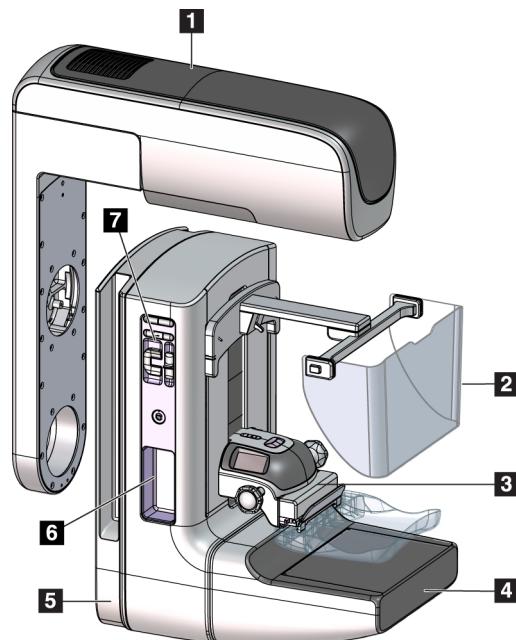


Figurförklaring

1. Röntgenrörssarm
2. Patientansiktsskydd
3. Kompressionsenhet
4. Bildmottagare
5. Kompressionsarm
6. Patienthandtag
7. C-armens kontrollpanel

Figur 2: Översikt av C-armen

2.1.3 Översikt av bildtagningsstationen

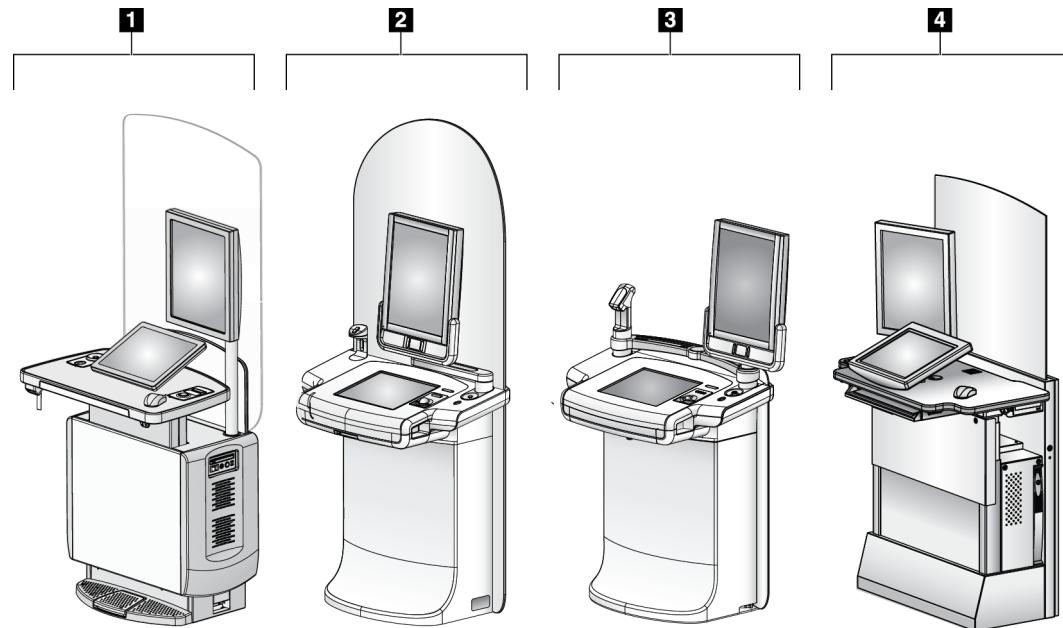

Figur 3: Bildtagningsstationer

Figurförklaring

1. Universal bildtagningsstation
2. Premium bildtagningsstation
3. Mobil bildtagningsstation
4. Standard bildtagningsstation

2.2 Säkerhetsinformation

Läs och se till att du har förstått denna handbok innan du använder systemet. Håll handboken tillgänglig under systemdrift.

Följ alltid alla anvisningar i handboken. Hologic tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning av systemet. För träningsalternativ, kontakta din Hologic-representant.

Systemet har skyddsutrustning, men användaren måste vara införstådd med hur systemet används på ett säkert sätt. Användaren måste också förstå hälsoriskerna hos röntgenstrålning.

2.3 Varningar och försiktighet



Detta system är klassifierat som KLASS I, ANVÄND DEL TYP B, IPX0, permanent ansluten utrustning, kontinuerlig drift med kortvarig laddning enligt IEC 60601-1. Inga särskilda åtgärder har vidtagits för att skydda systemet mot lättantändliga narkosmedel eller vätskeintrång.



VARNING!

Risk för elektrisk stöt. Anslut endast denna utrustning till jordade elnät.



VARNING!

Enligt nordamerikanska krav för elektrisk säkerhet måste ett uttag av sjukhusgrad användas för att tillhandahålla korrekt jordning.



VARNING!

**Elektrisk utrustning som används i närheten av lättantändliga narkosmedel kan orsaka explosion.
Systemet är inte avsett att användas i explosionsfarliga miljöer (till exempel i närheten av brandfarliga anestesiblandningar med luft, syre eller kväveoxid (lustgas)).**



VARNING!

Vidrör inte systemet om det brinner. Lämna området. Använd endast brandsläckare som är godkända för elektriska bränder.

**VARNING!**

För korrekt isolering av systemet får endast godkända tillbehör eller tillval anslutas till systemet. Endast godkänd personal får ändra anslutningarna.

**VARNING!**

Håll 1,5 meters säkerhetsavstånd mellan patienten och eventuella anordningar som inte är avsedda för patienten.

Installera inte systemkomponenter som inte är avsedda för patienten (t.ex. Workflow manager, den diagnostiska granskningsstationen eller skrivaren) i patientområdet.

**VARNING!**

Endast utbildade serviceingenjörer som auktoriseras av Hologic får öppna någon av panelerna. Systemet innehåller dödlig spänning.

**VARNING!**

Användaren måste korrigera problemen innan systemet används.

Kontakta en godkänd servicerepresentant för förebyggande underhåll.

**VARNING!**

Efter strömbrott ska patienten avlägsnas från systemet innan strömmen slås till.

**Varng:**

Elektriska kretsar i systemet kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Höljena får endast tas bort eller modifieras av auktoriserad servicepersonal. Om strömkabeln till portalen eller AWS är skadad bör systemet stängas av och repareras före användning.

**Varng!**

Denna anordning innehåller farliga material. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant.

**Varng!**

C-armens rörelser är motordrivna.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information



Varng!

Du ökar patientdosen till höga nivåer när du ökar inställningen för AEC-exponering. Du ökar bildbruset eller minskar bildkvaliteten när du minskar inställningen för AEC-exponering.



Varng!

Kontrollera åtkomsten till utrustningen enligt lokala strålskyddsbestämmelser.



Varng!

De diskenheter som installerats i detta system är en laserprodukt, klass I. Förhindra direkt exponering för strålen. Dold laserstrålning förekommer om luckan till en diskenhet är öppen.



Varng!

Den streckkodsläsare som installerats i detta system är en laserprodukt, klass II. Förhindra direkt exponering för strålen. Dold laserstrålning föreligger om höljet öppnas.



Varng:

Systemet alstrar joniserande strålning som kan vara farlig för patienter och användare om säkerhets- och användningsinstruktionerna i den här handboken inte följs.



Varng:

Elektriska kretsar i systemet kan generera elektromagnetisk strålning som kan störa annan utrustning eller implanterade enheter.



Varng!

Håll hela kroppen bakom strålskyddet under exponeringen. Slå inte eller tryck inte på strålskyddet eftersom det kan leda till att det går sönder. Ett trasigt strålskydd kan ha vassa kanter.



Varng!

Flytta inte C-armen medan systemet hämtar bilden.



Varng:

När du sätter på eller tar bort paddeln ska du hålla fingrarna borta från paddelns klämöppning för att undvika personsakador.

**Varning!**

Kontakta din representant för infektionskontroll för att avlägsna kontamination från paddeln om en paddel vidrör potentiellt smittsamma material.

**Varning!**

Lämna inte patienten under proceduren.

**Varning!**

Håll alltid patientens händer borta från alla knappar och brytare.

**Varning!**

Placera respektive fotpedal på en plats så att nödstoppsbrytarna fortfarande finns inom räckhåll när pedalen används.

**Varning!**

Placera båda fotpedalerna på avstånd från patienten och C-armsområdet för att förhindra oavsiktlig användning av fotpedalen. Om patienten sitter i rullstol ska fotpedalerna placeras på avstånd från området.

**Varning!**

För att förhindra en högre stråldos till patienten får endast godkända material placeras i röntgenstrålens bana.

**Varning!**

Detta system kan vara farligt för patient och användare. Följ alltid säkerhetsanvisningarna för röntgenexponering.

**Varning!**

Använd alltid ansiktsskyddet för alla exponeringar utom fallstudier med förstoring.

**Varning!**

Ansiktsskyddet skyddar inte patienten mot strålning.

**Varning!**

Risk för att fastna. Se till att C-armen har 50 cm fritt utrymme till alla föremål under rotation av C-armen. Använd inte autorotation när det fria utrymmet runt C-armen är mindre än 50 cm.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information



Försiktig:

Systemet är en medicinsk anordning och inte en vanlig dator. Gör endast godkända förändringar av hård- eller mjukvara. Installera denna anordning bakom en brandvägg för nätverkssäkerhet. Datorvirusskydd eller nätverkssäkerhet för denna medicinska anordning tillhandahålls ej (t.ex. datorbrandvägg). Nätverkssäkerhet och antivirusskydd är användarens ansvar.



Försiktig:

Stäng inte av bildtagningsstationens kretsbrytare annat än i en akutsituation. Kretsbrytaren kan stänga av den kontinuerliga strömförsörjningen (UPS) och riska dataförlust.



Försiktig:

Risk för dataförlust. Placera inte några magnetiska medier i närheten eller ovanpå anordningar som bildar magnetfält.



Försiktig:

Använd inte någon värmekälla (som t.ex. en värmmedyna) på bildmottagaren.



Försiktig:

För att minimera risken för skada på den digitala bildmottagaren på grund av värmechock, följ rekommenderad procedur för att stänga av utrustningen.



Försiktig:

Displayen kalibreras för att uppfylla DICOM-standarder. Gör inga justeringar av ljusstyrka eller kontrast på displayen.



Försiktig:

Använd minsta möjliga mängd rengöringsvätskor. Vätskorna får inte flöda eller rinna.



Försiktig:

För att undvika skada på de elektroniska komponenterna, använd inte desinfektionsmedel i sprayform på systemet.




Obs!

Hologic tillhandahåller inte någon strömkabel till gantryt för vissa länder. Om strömkabel inte medföljer måste den kabel som installeras uppfylla följande krav och alla lokala bestämmelser som gäller: 3 ledningar, 8 AWG (10 mm²) av koppar och högst 7,62 m lång.

2.4 Nödstoppsbrytare

Nödstoppsbrytarna bryter strömmen till gantryt och bildtagningsstationens lyftmekanism (på arbetsstationer som inkluderar detta alternativ). Använd inte nödstoppsbrytarna rutinmässigt för att stänga av systemet.

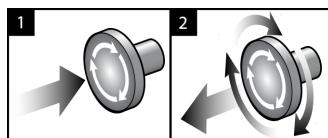

Figur 4: Nödstoppsbrytarnas funktioner

Det finns tre nödstoppsbrytare, en på vardera sidan av gantryt och en på bildtagningsstationen.

1. Tryck på någon av nödstoppsbrytarna för att stänga av gantryt och inaktivera bildtagningsstationens lyftmekanism.
2. Återställ nödstoppsbrytaren genom att vrida medurs ca en fjärdedels varv tills brytaren kommer ut igen.

2.5 Förreglingar

Systemet är försett med säkerhetsförreglingar:

- Vertikal förflyttning och rotation av C-armen inaktiveras när kompressionkraft appliceras. En servicetekniker kan konfigurera spärrkraften från 22 N (2,3 kg) till 45 N (4,5 kg).
- Om röntgenknappen och/eller röntgenfotpedalen släpps upp innan exponeringen är klar avbryts exponeringen och ett larmmeddelande visas.
* (Röntgenfotpedalalternativet är endast tillgängligt på konsolen för den universella bildtagningsstationen).
- I Tomo-läge tillåter inte systemet en exponering om rastret är i röntgenfältet (tomasystestillval).
- Spegel- och filterpositionsflaggor förhindrar även strålning när ljusfältsspeglarna eller filteraggregatet inte är korrekt placerade.

2.6 Efterlevnad

I detta avsnitt beskrivs efterlevnadskraven på mammografisystemet och tillverkarens ansvar.

2.6.1 Efterlevnadskrav

Tillverkaren ansvarar för denna utrustnings säkerhet, tillförlitlighet och prestanda under följande förutsättningar:

- Den elektriska installationen i rummet uppfyller alla krav.
- Utrustningen används i enlighet med *Användarguiden*.
- Handhavande, utbyggnad, justeringar, förändringar eller reparationer av systemet får endast utföras av auktoriserade personer.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information

- Nätverks- och kommunikationsutrustningen har installerats så att det uppfyller IEC-standarderna. Hela systemet (nätverks- och kommunikationsutrustningen samt mammografisystemet) måste uppfylla IEC 60601-1.



Försiktig!

Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder vad gäller EMC och måste installeras, tas i drift och användas enligt medföljande EMC-information.



Försiktig!

Bärbar och mobil RF-kommunikation kan påverka medicinsk elektrisk utrustning.



Försiktig!

Användning av icke godkända tillbehör och kablar kan leda till ökade emissioner eller minskad immunitet. För att bibehålla systemets isoleringskvalitet får endast godkända tillbehör eller tillval från Hologic anslutas till systemet.



Försiktig!

Den medicinska elektriska (ME-) utrustningen eller ME-systemet får inte användas intill eller placerad ovanpå annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda den intill eller placerad ovanpå annan utrustning måste man kontrollera att ME-utrustningen eller ME-systemet fungerar på korrekt sätt i denna konfiguration.



Försiktig!

Systemet är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal. Detta system kan orsaka radiostörningar eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta korrigeringar, t.ex. att vända eller flytta på utrustningen eller skärma av platsen.



Försiktig!

Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåtts av Hologic kan göra din rätt att använda utrustningen ogiltig.



Försiktig!

Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränsvärdena för digital utrustning av klass A enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har fastställts för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder sig av och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar, i vilket fall användaren kan bli tvungen att korrigera störningen på egen bekostnad.

**Försiktig!**

Baserat på testnivån för HÖLJESPORTENS IMMUNITET mot TRÅDLÖS RF-KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING i IEC 60601-1-2, uppl. 4, uppvisar denna enhet känslighet för GMRS 460 MHz- och FRS 460 MHz-sändningsfrekvens. Säkerställ ett minsta separationsavstånd på minst 30 cm mellan GMRS- och FRS-radioutrustning och systemet.

2.6.2 Meddelande om efterlevnad

Tillverkaren uppger att denna enhet är avsedd att uppfylla följande krav:



Medicinskt – Tillämpad elektromagnetisk strålning på utrustning med hänsyn till elstötar, brand och mekaniska risker i enlighet med ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) och CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2008)


- CAN/CSA – ISO 13485-03 medicinteknisk utrustning – kvalitetsledningssystem – tillsynskrav (antagen i ISO 13485:2003 andra utgåvan, 2003-07-15)
- CAN/CSA C22.2-NR 60601-1-08, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda (antagen i IEC 60601-1:2005, tredje utgåvan, 2005-12), inklusive rättelse 1:2011
- SS-EN 60601-1:2006, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda
- ETSI SS-EN 300 330-1: V1.3.1 och ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 – Elektromagnetisk kompatibilitet och frågor angående radiospektra (ERM), utrustning med kort räckvidd (Short Range Devices, SRD), radioutrustning inom frekvensområdet 9 kHz till 25 MHz och induktiva kretssystem inom frekvensområdet 9 kHz till 30 MHz
- ETSI SS-EN 301 489-1: V1.6.1 och ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 – Elektromagnetisk kompatibilitet och frågor angående radiospektra (ERM), elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard för radioutrustning och tjänster
- FCC, 47 CFR del 15, sektion C, avsnitt 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [del 820, 900 och 1020]
- IEC 60601-1 utg. 3.0:2005, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda
- IEC 60601-1-2 utg. 3.0:2007, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-2: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda – Tilläggsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav och tester
- IEC 60601-1-2 utg. 4:2015 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-2: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda – Tilläggsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav och tester
- IEC 60601-1-3 utg. 2.0:2008, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-3: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda – Tilläggsstandard: Strålskydd i diagnostisk röntgenutrustning

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 2: Allmän information

- IEC 60601-2-28 utg. 2.0:2010, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-28: Särskilda säkerhetskrav och grundläggande prestanda för röntgenrörsheter för elektrisk utrustning för medicinsk utrustning
- IEC 60601-2-45 utg. 3.0:2011, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-45: Särskilda säkerhetskrav grundläggande prestanda för röntgenutrustning för mammografi och stereotaktisk utrustning för mammografi
- RSS-210: Utgåva 7, 2007, Specifikation av radiostandarder för radiokommunikationsutrustning med låg effekt som inte kräver licens: Utrustning kategori I
- ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (IEC 60601-1:2005, MOD), Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, Del 1: Allmänna säkerhetskrav och grundläggande prestanda, inklusive tillägg (2010)

2.7 Dekalernas placering

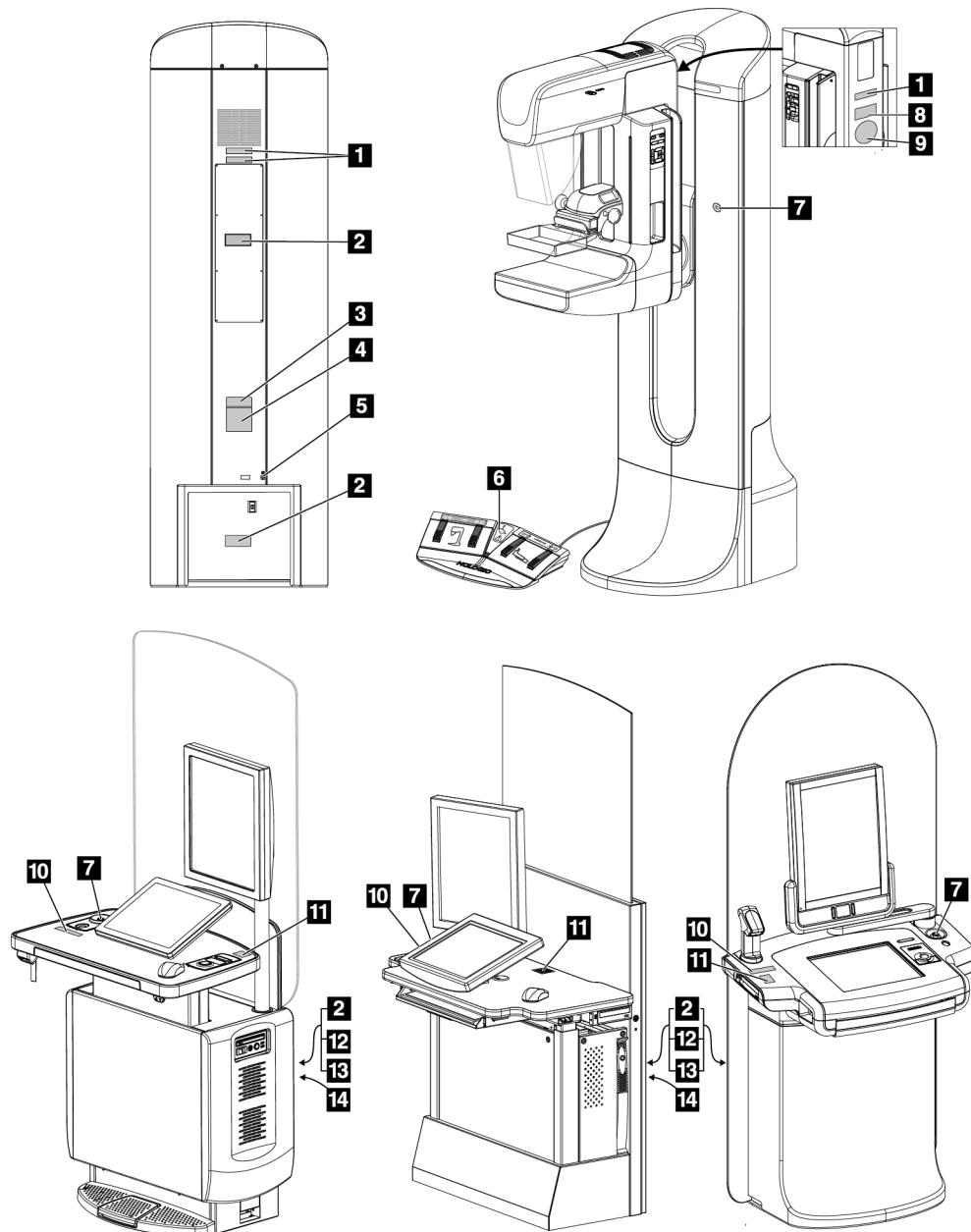

Figur 5: Dekalernas placering

Selenia Dimensions System – användarhandbok


Kapitel 2: Allmän information

Tabell 1: Systemdekaler

<p>1</p> <p>Hologic, Inc. 600 Technology Drive Newark, DE 19702 USA REF SN R ONLY COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21 CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE LBL-11686 Rev. 001</p> <p>Serialiseringsenhet</p>	<p>2</p> <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> <p>LBL-05990</p> <p>Varning för elstöt</p>	<p>3</p> <p>HOLOGIC REF SN R ONLY Hologic, Inc. 600 Technology Drive Newark, DE 19702 USA LBL-11602 Rev. 001</p> <p>Systemmodell</p>
<p>4</p> <p>Hologic, Inc. 600 Technology Drive, Newark, DE 19702 USA REF SN R ONLY MD ~ 50-60Hz 200V/208V/220V/230V/240V 4A (55A max. for 5 sec.) COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE PER 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. Contains FCC ID: YUJ-PCB01673 / Contains IC: 9281A-PCB01673 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Translations in Box EC REP Hologic BV, Da Vincielaan 5, 1930 Zaventem, Belgium Patents http://hologic.com/patent-information LBL-11658 Rev. 001</p> <p>Systemets märkplåt</p>	<p>5</p> <p>Potentialutjämningsterminal</p>	<p>8</p> <p>HOLOGIC Model FFDM-SD Full Field Tomographic Mammography Detector REV 00X SFW SHIPPED X.X.XX xxx-xx-xx SN XM86XXXX Barcode Hologic • 600 Technology Drive • Newark, DE 19702 • USA Patents: http://hologic.com/patent-information Made in USA</p> <p>Tomografisk mammografidetektor</p>
<p>6</p> <p>Rullstolsvarning för fotpedal</p>	<p>7</p> <p>Nödstoppsbrytare</p>	
<p>9</p> <p>Röntgenrörets serienummer (tillhandahålls av leverantören)</p>	<p>10</p> <p>WARNING This X-Ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.</p> <p>LBL-05042</p> <p>Varning för röntgenenhet</p>	<p>11</p> <p>HOLOGIC Customer Support 24/7 877-371-4372 (USA) 32.2.711.4690 (Int'l) SN P/N LBL-05203</p> <p>Kontakt för teknisk support</p>
<p>12</p> <p>Hologic, Inc., 600 Technology Drive, Newark, DE 19702 USA REF SN R ONLY ~ 50-60Hz 100V/120V/200V/208V/220V/230V/240V 8A COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE PER 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. Translations in Box LBL-11721 Rev. 001</p> <p>Bildtagningsstationens märkplåt</p>	<p>13</p> <p>CE 0044 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Selenia Dimensions System (Selenia Dimensions Gantry) (Selenia Dimensions AWS) TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> <p>Medical-Applied Electromagnetic Radiation Equipment ANSI/AAMI ES60601-1 (20XX) CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (20XX) UL Classified ES4794 LBL-06583</p> <p>Efterlevnad</p>	<p>14</p> <p>LIFT MECHANISM IS NOT RATED FOR CONTINUOUS OPERATION</p> <p>LBL-01652</p> <p>Bildtagningsstationens lyftgräns</p>

Kapitel 3 Systemkontroller och indikatorer

3.1 Systemeffektkontroller

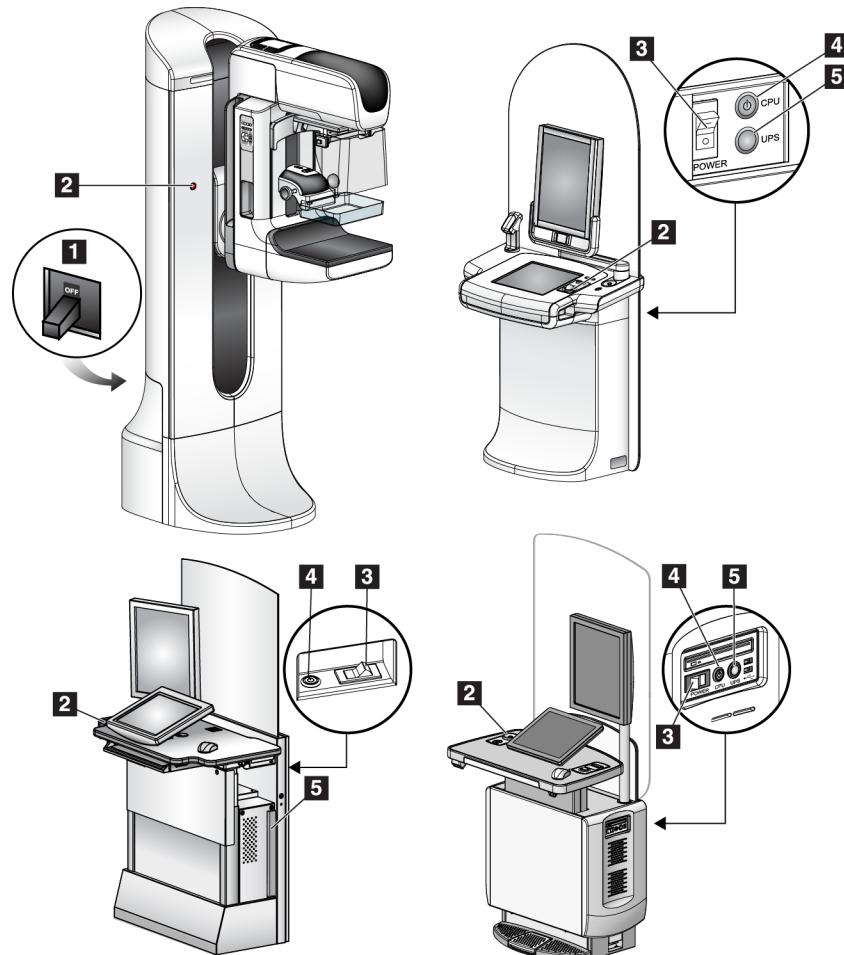


Figur 6: Systemeffektkontroller

Figurförklaring

1. Gantryts kretsbrytare
2. Nödstoppsbrytare (två på gantryt, en på bildtagningsstationen)
3. Bildtagningsstationens strömbrytare
4. Datorns strömbrytare/återställningsknapp
5. Strömbrytare för avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

3.2 Kontroller och indikatorer på röntgenstativet

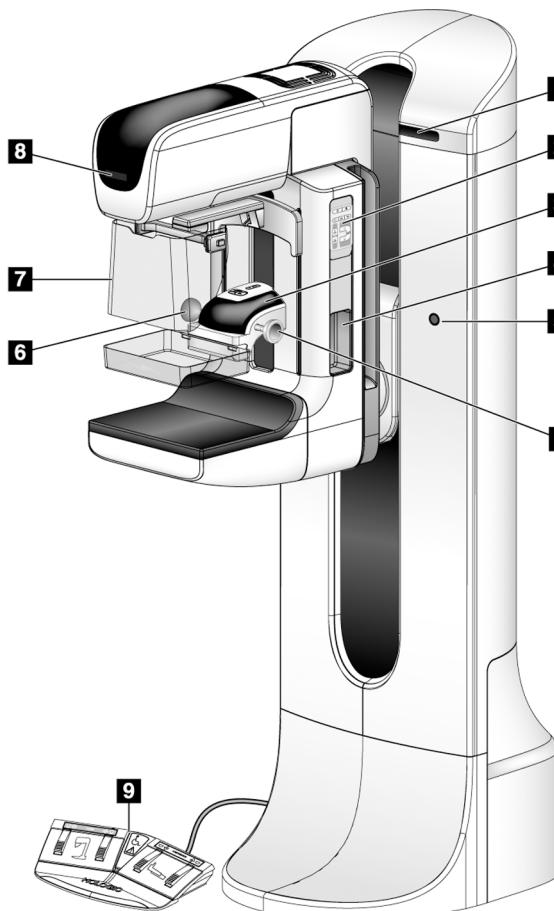

Figurförklaring


1. Visning av rotationsvinkel (på vardera sidan)
2. C-armens kontrollpaneler (ömse sidor)
3. Kompressionsenhet
4. Patienthandtag (på vardera sidan)
5. Nödstoppsbrytare (ömse sidor)
6. Kompressionshandrattar
7. Patientansiktsskydd
8. Röntgenrör, display
9. Fotpedaler

Figur 7: Kontroller och indikatorer på röntgenstativet

3.2.1 Röntgenrör, display

Röntgenrörets display visar:

- SID
- Filtertyp
- Kollimatorinställning
- Paddelposition

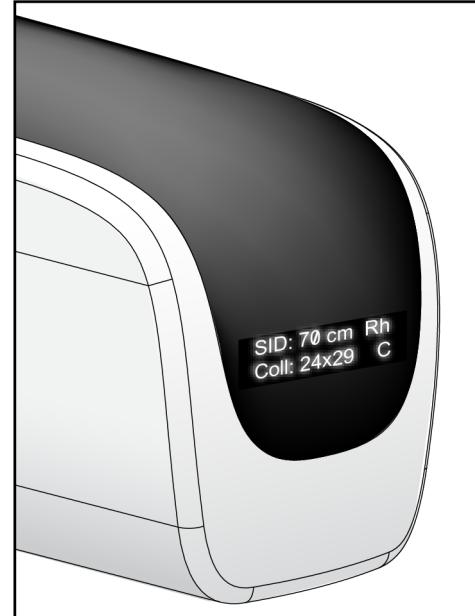


Figur 8: Röntgenrör, display

3.2.2 Kompressionsenhetens kontroller och display

Figurförklaring


1. Manuella kompressionshandrattar
2. Knappar för paddelförflyttning
3. AEC-sensorknappar
4. Kompressionsenhetens skärm
5. Regel för FAST-kompressionsläge
6. Padelklämma

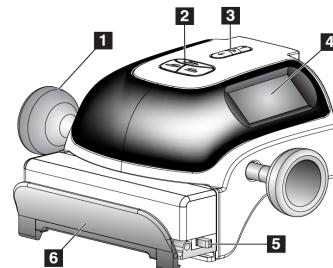

Figur 9: Kompressionsenhet

Kompressionsenhetens skärm visar:


- AEC-sensorposition
- Kompressionskraft (0,0 visas när kraften är mindre än 1,8 kg)
- Kompressionstjocklek
- C-armens vinkel efter rotation (i 5 sekunder)

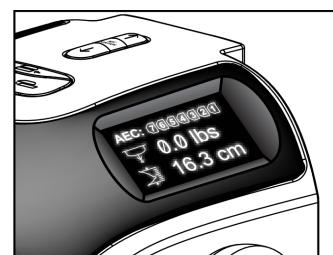

Figur 10: Kompressionsenhetens skärm

3.2.3 C-armens kontrollpaneler

C-armskontrollpanelerna tillhandahåller kollimatorns och C-armens funktioner. Se avsnittet [Utföra funktionstester](#) på sidan 40.

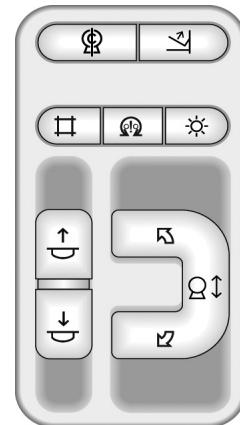

Figur 11: C-armens kontrollpanel

3.2.4 Fotpedal med dubbel funktion



Varng!

Placera respektive fotpedal på en plats så att nödstoppsbrytarna fortfarande finns inom räckhåll när pedalen används.



Varng!

Placera båda fotpedalerna på avstånd från patienten och C-armsområdet för att förhindra oavsiktlig användning av fotpedalen. Om patienten sitter i rullstol ska fotpedalerna placeras på avstånd från området.



Varng:


För att undvika snubbelrisk eller oavsiktlig aktivering bör patienter och operatörer av systemet vara medvetna om var fotomkopplare och tillhörande kablar finns.

Så här används fotpedalen:

- Tryck ned fotpedalen för att aktivera.
- Släpp fotomkopplaren för att avbryta rörelsen.

Figurförklaring

1. C-arm ned
2. C-arm upp
3. Kompression ned
4. Kompression upp

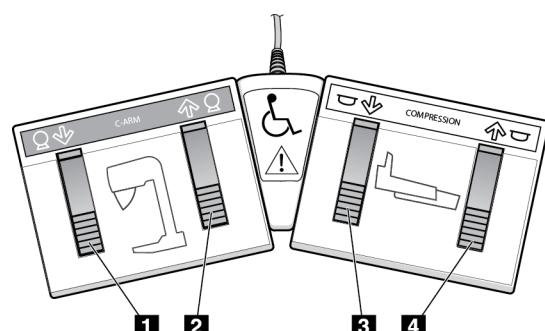

Figur 12: Fotpedal med dubbel funktion


3.3 Kontroller och indikatorer på bildtagningsstationen



OBS!

Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

3.3.1 Kontroller och displayer på universalbildtagningsstationen

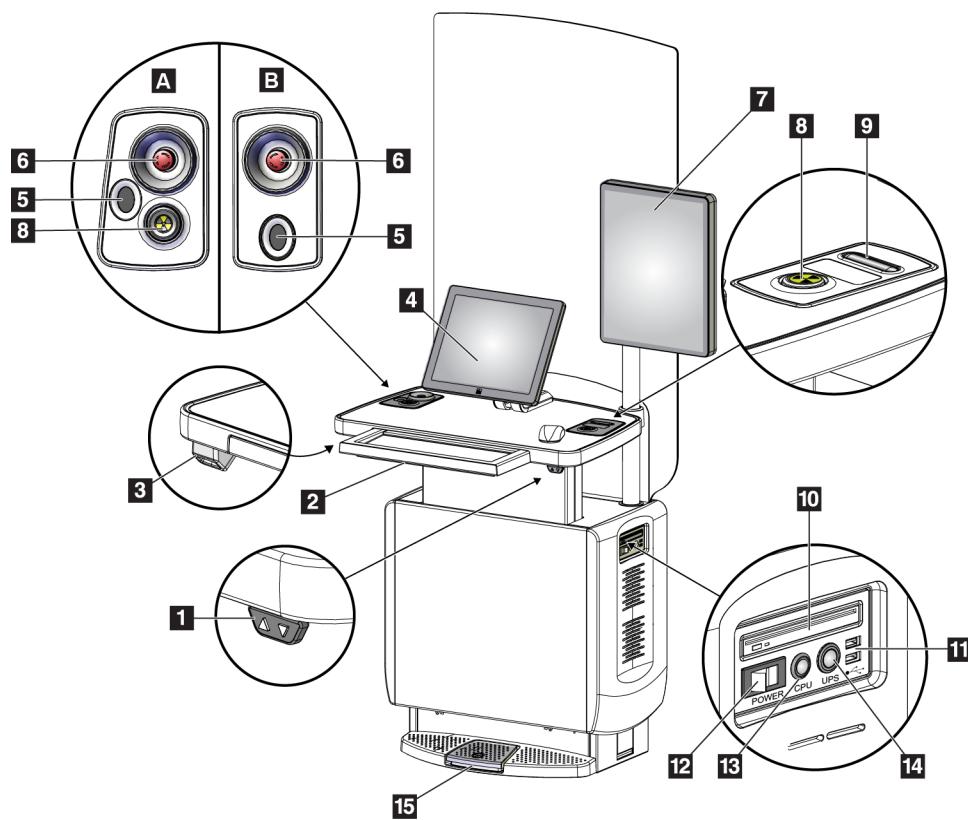

Figur 13: Kontroller och displayer på universalbildtagningsstationen

Figurförklaring

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Höjdunderstyrningsbrytare | 10. CD/DVD-enhet |
| 2. Tangentbord (i lådan) | 11. USB-portar |
| 3. Streckkodsläsare | 12. Bildtagningsstationens strömbrytare |
| 4. Kontrollmonitor | 13. Datorns
strömbrytare/återställningsknapp |
| 5. Fingeravtrycksläsare* | 14. Strömbrytare för avbrottsfri
strömförsörjning (UPS) |
| 6. Nödstoppsbrytare* | 15. Fotpedal för röntgen |
| 7. Bildmonitor | |
| 8. Knapp för röntgenaktivering* | |
| 9. Knapp för kompressionsfrikoppling | |

*A = layout för universalbildtagningsstation i serie II;
B = layout för universalbildtagningsstation i serie I

Selenia Dimensions System – användarhandbok


Kapitel 3: Systemkontroller och indikatorer



OBS!

Kontrollerna för universalbildtagningsstationen installerad i en mobil miljö är desamma som kontrollerna för universalbildtagningsstationen.

3.3.2 Kontroller och indikatorer på Premium bildtagningsstation

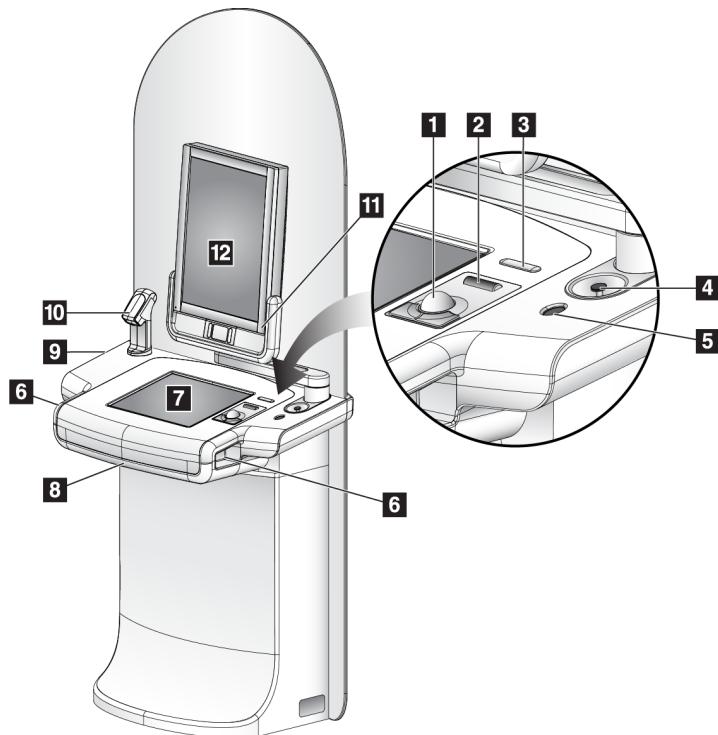

Figurförklaring

1. Styrkula
2. Rullhjul
3. Kompressionfrikoppling
4. Nödstoppsbrytare
5. Fingeravtrycksläsare
6. Exponeringsknapp (en på vardera sidan)
7. Pekskärmsdisplay
8. Tangentbord (i lådan)
9. CD/DVD-enhet
10. Strekkodsläsare
11. Lysdiod för bildvisningsmonitorn
(lampan släcks efter den inledande startprocessen)
12. Bildmonitor


Figur 14: Kontroller och indikatorer på Premium bildtagningsstation



OBS!

Kontrollerna för premiumbildtagningsstationen installerad i mobil miljö är desamma som kontrollerna för Premium bildtagningsstation.

3.3.3 Kontroller och displayer på standardbildtagningsstationen

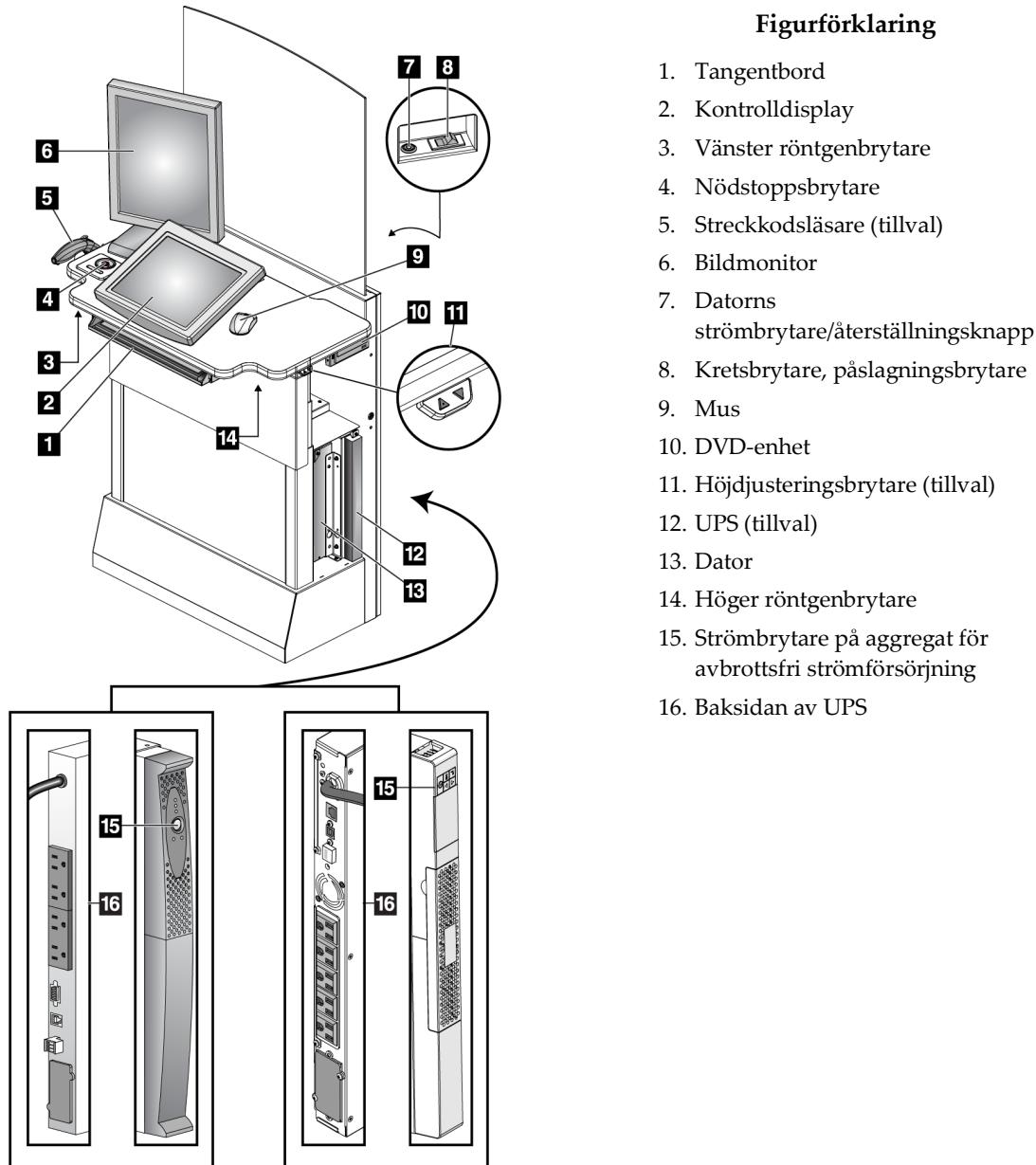

Figur 15: Kontroller och displayer på standardbildtagningsstationen

3.3.4 Tangentbord

Använd tangentbordet i den främre lådan på bildtagningsstationen för att mata in data.

3.3.5 Streckkodsläsare

Använd denna anordning för datainmatning från streckkod för patient- eller procedurjurnaler.

3.3.6 Universalbildtagningsstationens display

Använd musen eller pekskärmen (tillval) för att välja olika objekt.

3.3.7 Pekskärmsdisplay på Premium bildtagningsstation

Använd pekskärmen eller styrkulan för att välja olika objekt.

3.3.8 Standardbildtagningsstationens display

Använd musen för att välja olika objekt.

3.3.9 Bildmonitor

Se bilderna på bildvisningsmonitorn.



OBS!

Din bildvisningsmonitor kan se annorlunda ut än de bildvisningsmonitorer som visas i denna handbok, men funktionen är identisk.

Kapitel 4 Systemstart, funktionstester och avstängning


4.1 Så här startar du systemet

**OBS!**

Om systemet får vara på över natten bör du starta om systemet varje dag för att garantera bästa prestanda.

4.1.1 Förberedelser


1. Säkerställ att det inte finns några hinder för C-armens rörelse eller användarens sikt.
2. Kontrollera att alla tre nödstoppsbrytarna är i återställningsläge (ej nedtryckta).

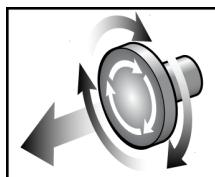


Figur 16: Vrid för att återställa nödstoppsbrytarna

3. Se till att gantryts strömbrytare är i läget On (På).


4.1.2 Start

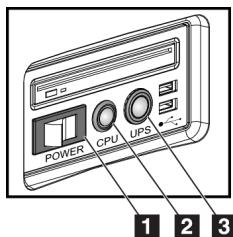

Figur 17: Strömknappar på universalbildtagningsstation

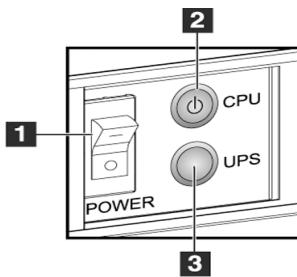

Figur 18: Strömknappar på premiumbildtagningsstation

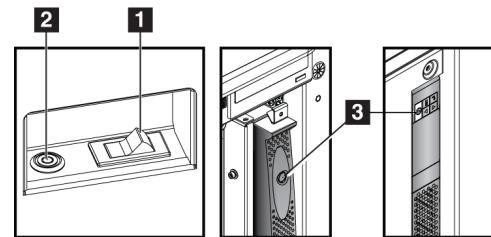

Figur 19: Strömknappar på standardbildtagningsstation

Figurförklaring


1. Bildtagningsstationens strömbrytare
2. Datorns strömbrytare/återställningsknapp
3. UPS-strömbrytare (tillval)

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 4: Systemstart, funktionstester och avstängning

Gör så här för att starta systemet:

1. Om aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning har stängts AV ska du trycka på knappen för aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning för att slå på det (se föregående figurer).
2. Slå PÅ bildtagningsstationens strömbrytare (se föregående figurer).
3. Tryck på datorns strömbrytare (se föregående figurer). Datorn startar och inloggningsskärmen för Windows 10 visas på bildtagningsstationens kontrollmonitor.

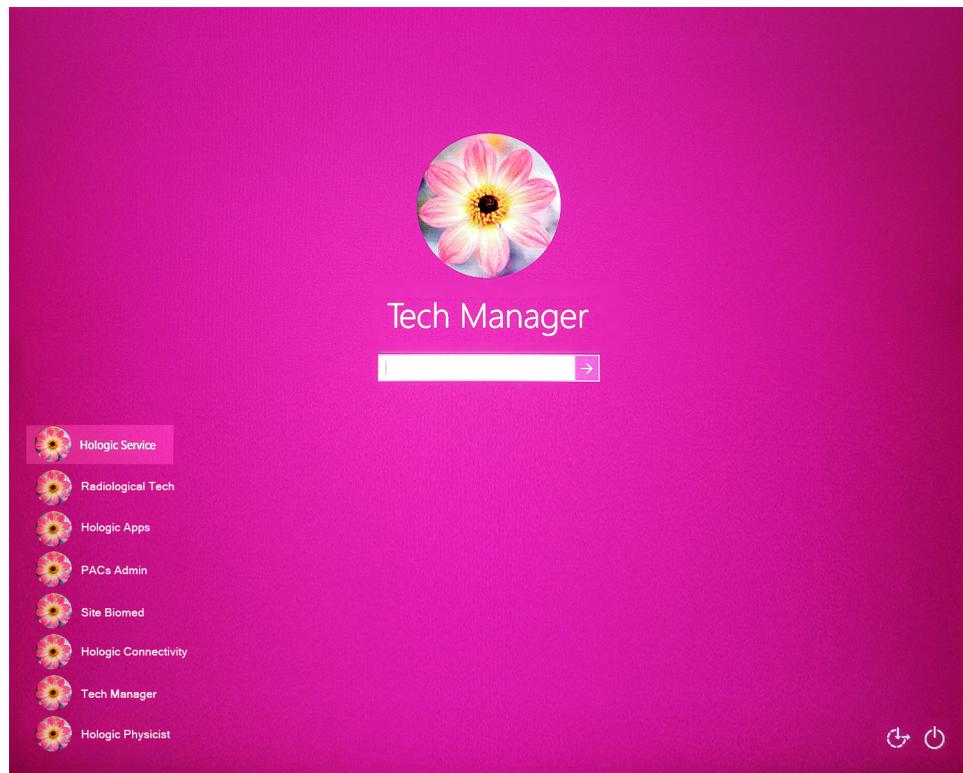

Figur 20: Inloggningsskärmen för Windows 10

4. Välj ett användarnamn och ange ditt lösenord.

5. *Startskärmen* för Selenia Dimensions-systemet öppnas på bildtagningsstationens kontrollmonitor. Gantryt startar sedan automatiskt.

Selenia Dimensions



Figur 21: Startskärm



OBS!

För att logga ut från operativsystemet Windows 10 väljer du knappen **Logga ut**.



OBS!

På skärmen *Startup* (Systemstart) finns en knapp **Shutdown** (Stäng av) som stänger av systemet och en knapp **Reboot** (Starta om) som startar om systemet.




OBS!

Förberedelserna av systemet för bildtagning tar 5–15 minuter. Väntetiden beror på detektorns effektkonfiguration. En timer i aktivitetsfältet visar väntetiden tills systemet är redo. Ta inga kliniska eller QC-bilder förrän ikonen för systemstatus visar att systemet är redo.

4.1.3 Logga in

1. Tryck på knappen **Log In** (Logga in) på skärmen *Startup* (Start).
2. Skärmen *Välj en operatör* (Systeminloggning) öppnas och anger en lista över chefens och teknikerns användarnamn. Välj vid behov knappen **Visa alla** för att ange användarnamn för Service, Program och Fysiker.

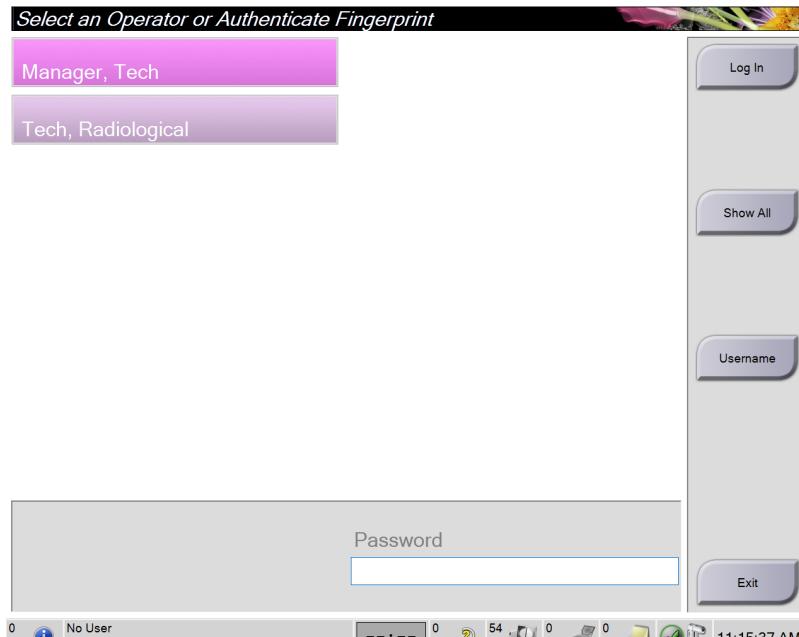

Figur 22: Skärmen Systeminloggning

3. Använd en av följande metoder för att logga in på systemet:

- Välj tillämplig användarnamnsknapp. Skriv in ditt lösenord och välj sedan knappen **Logga in**.
 - Välj knappen **Användarnamn**. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, välj sedan knappen **Logga in**.
 - Bekräfta ditt fingeravtryck genom att trycka fingret på fingeravtrycksläsaren.
-



OBS!

Det mesta av den unika, repeterbara fingeravtrycksinformationen finns på fingerblomman, inte på fingerspetsen. Plan fingerplacering, som på den vänstra bilden visar, ger snabb och exakt identifiering av fingeravtryck.



Korrekt



Felaktigt




OBS!

Om det är dags för kvalitetskontroll öppnas skärmen *Välj funktion att utföra*. Du kan utföra kvalitetskontroller eller välja **Hoppa över**.

4.2 Utföra funktionstester

Se till att kontrollerna fungerar korrekt genom att utföra funktionstesterna som en del av den månatliga visuella checklistan. Kontrollera att alla knappar fungerar korrekt (C-armens kontrollpaneler, på vänster och höger sida).

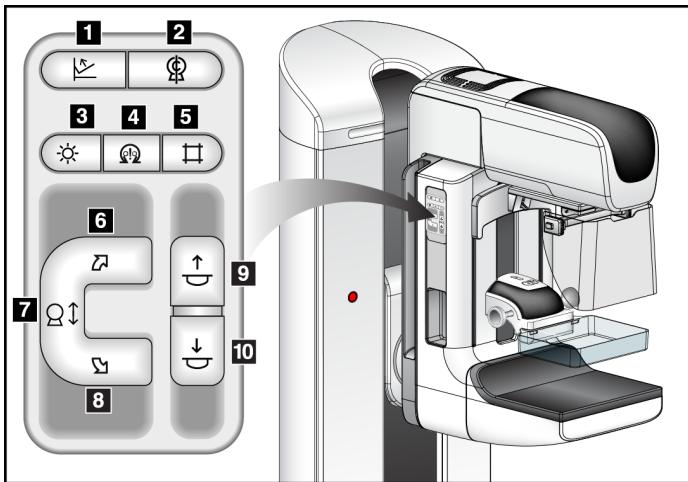

Figurförklaring

1. Kompressionfrikoppling
2. Nollställning av C-armen
3. Ljusfältslampa
4. Aktivera motor
5. Åsidosätta kollimatorn
6. Medurs rotation av C-armen
7. C-arm upp/ned
8. Moturs rotation av C-armen
9. Kompression upp
10. Kompression ned





Figur 23: C-armens kontrollpanel (vänster sida visas)

**OBS!**

Vertikal förflyttning och rotation av C-armen inaktiveras när kompressionskraft appliceras. En servicetekniker kan konfigurera spärrkraften från 22 Newton (2,3 kg) till 45 Newton (4,5 kg).

4.2.1 Funktionstester av kompression



Tabell 2: Kompressionstester

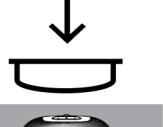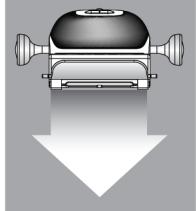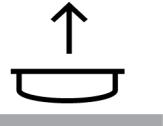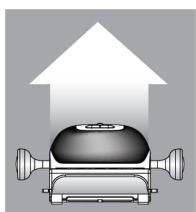Funktion	Funktionstest
Kompression ned  	<p>Tryck på en Kompression ned-knapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompressionsbromsen aktiveras. • Ljusfältslampen tänds. • Kompressionsenheten sänks. <p><i>Obs! När du trycker på knappen Kompression ned aktiveras kompressionsbromsen tills du trycker på knappen Kompressionsfrikoppling.</i></p> <p>Kompression ned-rörelsen stoppas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • När du släpper knappen. • När du når den nedre kraftgränsen. • När du når den nedre förflyttningsgränsen.
Kompression upp  	<p>Tryck på en Kompression upp-knapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompressionsenheten rör sig uppåt. <p><i>Obs! Knappen Kompression upp frikopplar INTE kompressionsbromsen.</i></p> <p>Kompression upp-rörelsen stoppas automatskt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • När du släpper knappen. • När du når den övre förflyttningsgränsen.
Kompressionsfrikoppling 	<p>Tryck på knappen Komprimeringsfrikoppling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komprimeringsmotorbromsen frikopplas. • Komprimeringenheten höjs.


4.2.2 Funktionskontroller av C-armens rörelser

C-arm upp/ned

Tabell 3: C-arm upp och ned

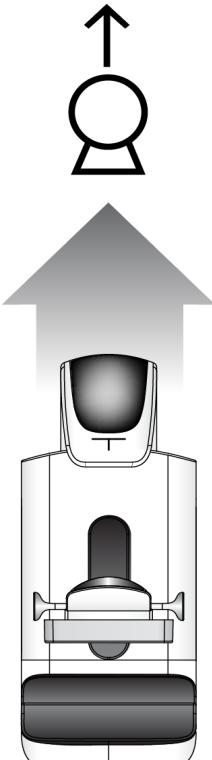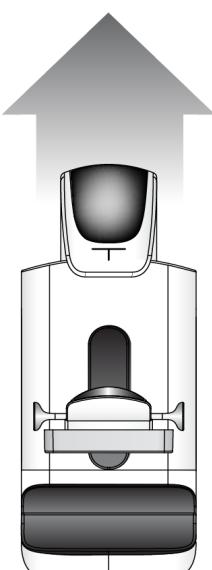Funktion	Funktionstest
C-arm upp  	Tryck på knappen C-arm upp : <ul style="list-style-type: none">• C-armens rörelse avbryts när du släpper upp knappen.• C-armens rörelse avbryts när-C-armen når den övre förflyttningsgränsen.• Vertikal förflyttning och rotation av C-armen inaktiveras när kompressionskraft appliceras. En servicetekniker kan konfigurera spärrkraften från 22 N (2,3 kg) till 45 N (4,5 kg).

Tabell 3: C-arm upp och ned

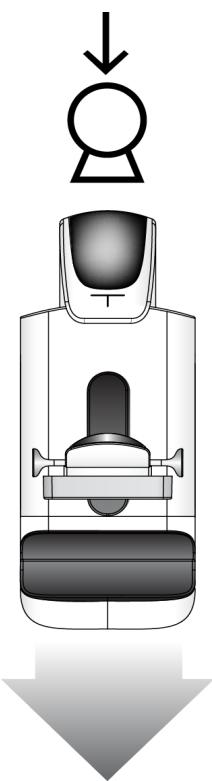Funktion	Funktionstest
C-arm ned 	Tryck på knappen C-arm ned : <ul style="list-style-type: none">• C-armens rörelse avbryts när du släpper upp knappen.• C-armens rörelse avbryts när C-armen når den undre förflyttningsgränsen.• Vertikal förflyttning och rotation av C-armen inaktiveras när kompressionskraft appliceras. En servicetekniker kan konfigurera spärrkraften från 22 N (2,3 kg) till 45 N (4,5 kg).


Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 4: Systemstart, funktionstester och avstängning

Rotation av C-armen


Tabell 4: Moturs rotation av C-armen

Funktion	Funktionstest
Moturs rotation av C-armen	Tryck på knappen Moturs rotation av C-armen (punkt 1) för att starta moturs rotation av C-armen. C-armens rörelse avbryts när du släpper upp brytaren. För att finjustera C-armens rotation i steg om en grad ska du hålla knappen intryckt i en sekund och sedan släppa den snabbt. Upprepa efter behov.

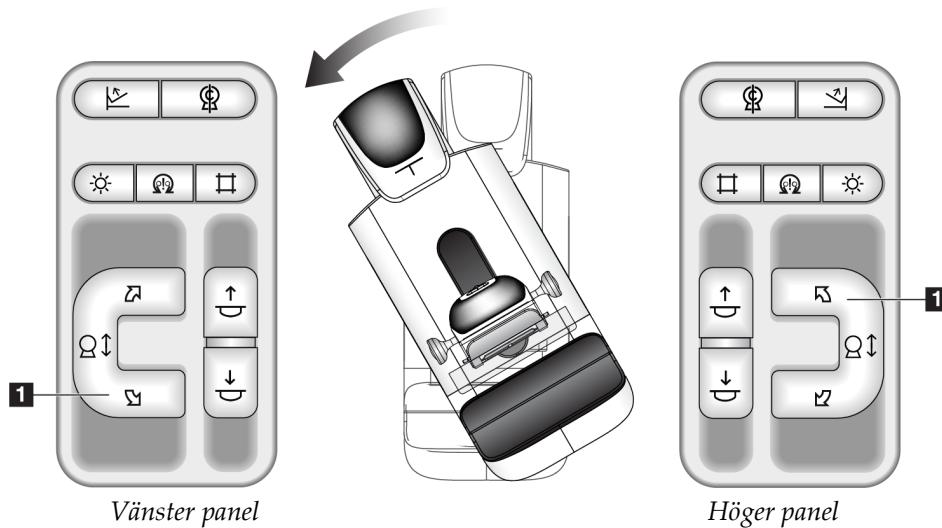

Tabell 5: Medurs rotation av C-armen

Funktion	Funktionstest
Medurs rotation av C-armen	Tryck på knappen Medurs rotation av C-armen (punkt 1) för att starta medurs rotation av C-armen. C-armens rörelse avbryts när du släpper upp brytaren. För att finjustera C-armens rotation i steg om en grad ska du hålla knappen intryckt i en sekund och sedan släppa den snabbt. Upprepa efter behov.




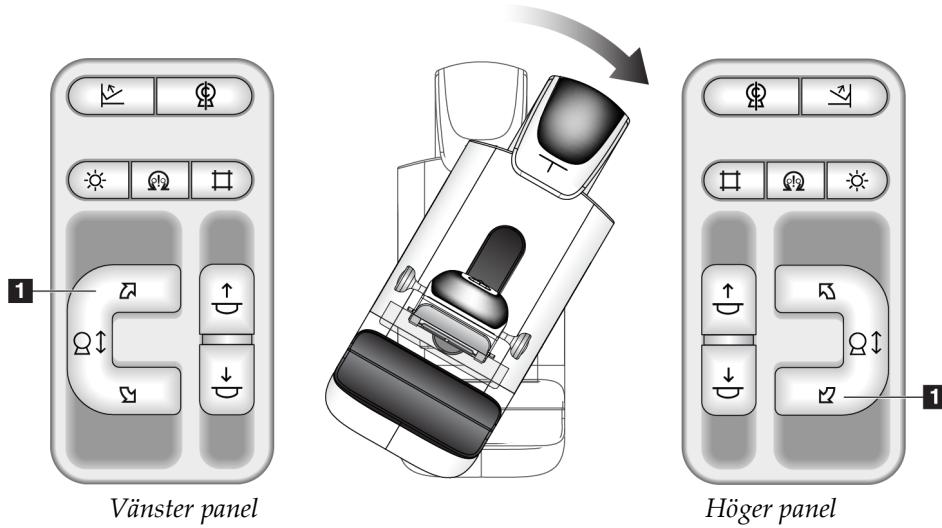


Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 4: Systemstart, funktionstester och avstängning

Tabell 6: C-armens rotationsbrytare

Funktion	Funktionstest
C-armens rotationsbrytare	Skjut bort C-armens rotationsbrytare från dig för att flytta C-armen mot dig. Dra C-armens rotationsbrytare mot dig för att flytta C-armen från dig. C-armens rörelse avbryts när du släpper upp brytaren.

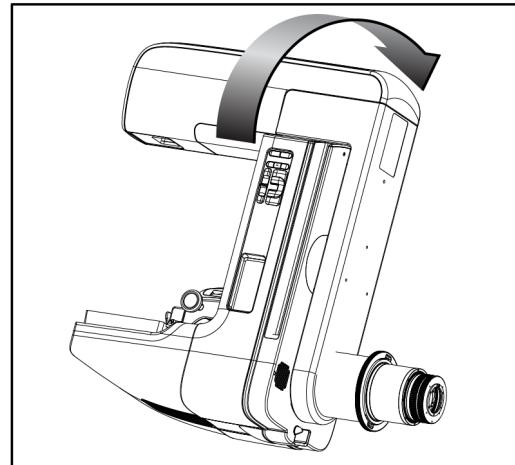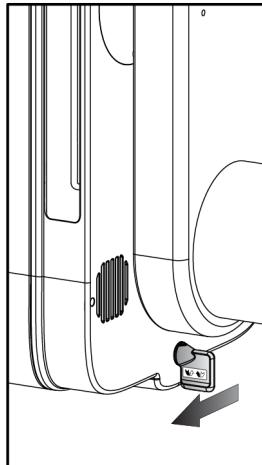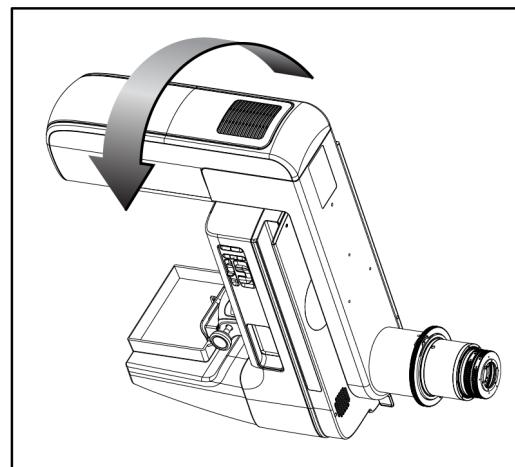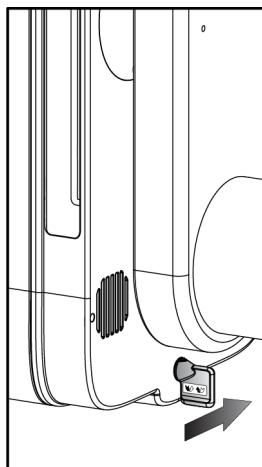

Automatisk rotation av C-armen (Autorotation)



Varning!

Risk för att fastna. Se till att C-armen har 50 cm fritt utrymme till alla föremål under rotation av C-armen. Använd inte autorotation när det fria utrymmet runt C-armen är mindre än 50 cm.




OBS!

För att stoppa C-armens automatiska rotationsrörelse trycker du på valfri knappen eller på nödstopp.

Aktivera motor 	Tryck på knapparna Aktivera motor och Rotation samtidigt för att aktivera automatisk rotationsrörelse medurs eller moturs.
Nollställning av C-armen 	Tryck på knappen Aktivera motor och knappen Nollställning av C-armen samtidigt. Släpp upp knapparna. Maskinen piper och C-armen återgår automatiskt till nollpositionen.

Tabell 7: Automatisk moturs rotation av C-armen

Funktion	Funktionstest
Automatisk moturs rotation av C-armen	Tryck på knappen Aktivera motor (punkt 1) och knappen Moturs rotation av C-armen (punkt 2) samtidigt. Släpp upp knapparna. Maskinen piper och C-armen flyttar sig automatiskt moturs.

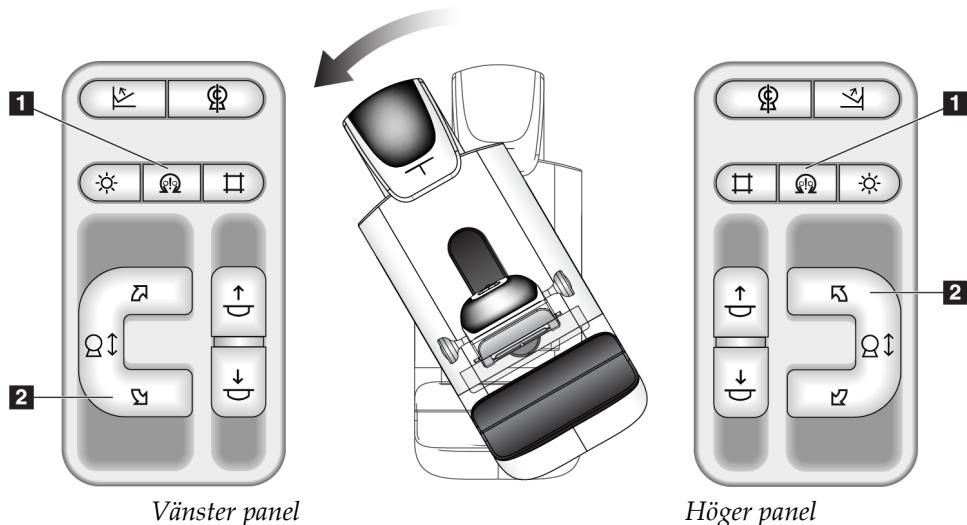

Tabell 8: Automatisk medurs rotation av C-armen

Funktion	Funktionstest

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 4: Systemstart, funktionstester och avstängning

Automatisk medurs rotation av C-armen	Tryck på knappen Aktivera motor (punkt 1) och knappen Medurs rotation av C-armen (punkt 2) samtidigt. Släpp upp knapparna. Maskinen piper och C-armen flyttar sig automatiskt medurs.
<p>Vänster panel</p> <p>Höger panel</p>	

Kollimering

Tabell 9: Kollimering av C-armen

Funktion	Funktionstest
Åsidosätta kollimatorn 	Knappen Åsidosätt kollimator ändrar kollimeringen genom de olika röntgenfälten. Tryck på knappen Ljusfältslampa för att visa röntgenfältet och tryck sedan på knappen Åsidosätt kollimator för att välja ett röntgenfält.
Ljusfältslampa 	För kompressionspaddlar: Tryck på knappen Ljusfältslampa för att se röntgenfältet i två minuter. För lokaliseringsspaddlar: Tryck på knappen Ljusfältslampa för att se röntgenfältet den konfigurerade tidsperioden. Standardtiden för biopsi- eller näallokaliseringspaddlar är tio minuter. Tryck på knappen Ljusfältslampa igen för att stänga av ljusfältslampen. Ljusfältslampan tänds automatiskt när rörelsen Kompression ned startas.


Flytta paddlar

**OBS!**


De flesta paddlar kan användas med funktionen flytta Shifting Paddle (Flytta paddel). Den stora (24 x 29 cm) screeningpaddeln utan ram, den stora (24 x 29 cm) SmartCurve™-systemets paddel och förstoringspaddlarna är inte kompatibla med funktionen Flytta paddel.

Använd 18 x 24 cm-screeningpaddeln utan ram för att testa funktionen Flytta paddel.

Tabell 10: Flytta paddel

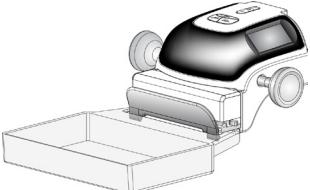Funktion	Funktionstest
Paddelförflyttning 	<p>Screeningpaddeln på 18 x 24 cm rör sig cirka 2,5 cm till vänster, mitten eller höger position. När kompression har skett går det inte att flytta paddeln. Kollimatorn är programmerad att följa paddelns position.</p> <p>Gör så här för att testa denna funktion:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installera 18 x 24 cm paddeln på komprimeringenheten. 2. Välj en vy. 3. Använd knapparna Flytta paddel på skärmen <i>Procedur</i> för att åsidosätta positionen. 4. Kontrollera att paddeln automatiskt flyttas till den nya positionen. 5. Vrid upp ljusfältslampan. 6. Bekräfta att kollimators position motsvarar paddelns position. 7. Upprepa denna procedur för övriga paddelpositioner.

4.3 Nödstoppsbrytarnas funktioner

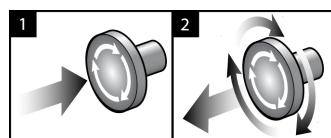

Figur 24: Nödstoppsbrytarnas funktioner

Det finns tre nødstoppsbrytare, en på vardera sidan av gantryt och en på bildtagningsstationen.


1. Tryck på någon av nødstoppsbrytarna för att stänga av gantryt och inaktivera bildtagningsstationens lyftmekanism.
2. Återställ nødstoppsbrytaren genom att vrida medurs ca en fjärdedels varv tills brytaren kommer ut igen.

4.4 Så här slår du av systemet


1. Avsluta eventuella öppna patientprocedurer. Se avsnittet [Stäng en patient](#) på sidan 71.
2. Välj knappen **Logga ut** på skärmen *Välj patient*.
3. Välj knappen **Shutdown** (Stäng av) på skärmen *Startup* (Start).
4. Välj **Ja** i bekräftelsedialogrutan.

4.5 Så här bryter du all ström till systemet


Se följande figurer för att se bilder på de knappar och brytare som följande procedurer hänvisar till.

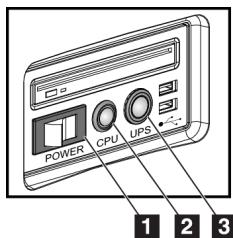

Figur 25: Strömknappar på universalbildtagningsstation

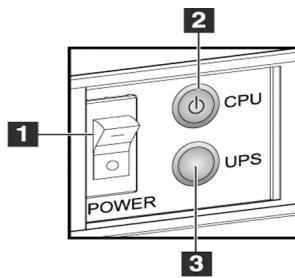

Figur 26: Strömknappar på premiumbildtagningsstation

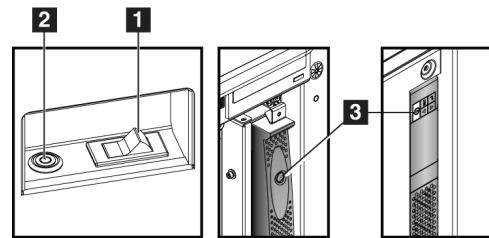

Figur 27: Strömknappar på standardbildtagningsstation

Figurförklaring

1. Bildtagningsstationens strömbrytare
2. Datorns strömbrytare/återställningsknapp
3. UPS-strömbrytare (tillval)

Så här bryter du all ström till systemet:

1. Stäng av systemet.
2. Om ditt system inkluderar ett aggregat för avbrottsfri strömförsörjning ska du trycka på UPS-knappen (punkt 3).
3. Stäng AV arbetsstationens strömbrytare (punkt 1).
4. Dra ut arbetsstationens nätsladd ur vägguttaget.
5. Stäng AV gantryts strömbrytare.
6. Stäng AV strömbrytaren till institutionens nätström.

Kapitel 5 Användargränssnitt

5.1 Skärmen ”Välj funktion att utföra”

När du har loggat in öppnas skärmen *Välj funktion att utföra*. Denna skärm visar kvalitetskontrolluppgifter som ska utföras.



OBS!

Skärmen *Välj patient* öppnas när inga kvalitetskontrolluppgifter är schemalagda att utföras.

Välj funktion att utföra		
Namn	Senast utförd	Förfallodatum
Kvalitetskontroll av DICOM-skrivare		2015-08-18
Viewboxes och visningsvillkor		2015-08-18
Diagnostisk granskning arbetsstation kvalitetskontroll		2015-08-18
Förstärkningskalibrering	2015-01-21	2015-01-26
CEDM Gain Calibration	2015-01-21	2015-01-26
Utvärdering av artefakt		2015-08-18
Fantombildskvalitet		2015-08-18
SNR/CNR		2015-08-18
Indikator för komprimeringstjocklek		2015-08-18
Visuell checklista		2015-08-18
Komprimeringstest		2015-08-18
Avvisa analys		2015-08-18
Upprepa analys		2015-08-18

Hoppa över

Start

Markera som färdig

Admin

Logga ut

Antal resultat: 13

0
Manager, Tech (Hanterare)
-- : --
0
?
4
0
0
0
✓
17:50:18

Figur 28: Ett exempel på skärmen *Välj funktion att utföra*

Gör så här för att avsluta en schemalagd kvalitetskontrolluppgift:

1. Välj en kvalitetskontrolluppgift i listan.
2. Välj knappen **Start**. Följ meddelandena för att slutföra proceduren. (Knappen **Start** [Starta] är inte tillgänglig för alla typer av tester.)
– ELLER –
Välj knappen **Markera som färdig** för att markera statusen av ingreppet som slutfört.
Välj **Ja** för att bekräfta att den valda proceduren har slutförts.
3. Välj **Avsluta kvalitetskontroll**.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 5: Användargränssnitt

Gör så här för att fortsätta utan att slutföra alla schemalagda kvalitetskontrolluppgifter:

Om inte alla kvalitetskontrolluppgifter har slutförts vid detta tillfälle ska du välja knappen **Hoppa över**.



OBS!

Om du väljer knappen **Hoppa över** öppnas skärmen *Välj patient*. Se avsnittet [Välj patientskärm](#) på sidan 54 för information om denna skärm.

Om du väljer knappen **Admin** öppnas skärmen *Admin*. Se avsnittet [Skärmen Admin](#) på sidan 127 för information om denna skärm.



OBS!

Kvalitetskontrolluppgifter är tillgängliga att utföra när som helst. Välj knappen **Admin** och sedan knappen **Kvalitetskontroll** för att öppna listan över kvalitetskontrolluppgifter.

5.2 Om aktivitetsfältet

I aktivitetsfältet längst ned på skärmen visas fler iconer. Välj ikonen för att få information eller utföra systemuppgifter.



Figur 29: Aktivitetsfältet


Tabell 11: Menyer i aktivitetsfältet

	Beskrivning	Meny
1	Informationsikon Välj ikonen Information för att visa larmmenyn. Denna del av aktivitetsfältet blinkar med gul färg när ett larm föreligger. Välj Bekräfta alla för att stoppa den blinkande indikeringen. Välj Hantera larm för att visa och stänga eventuella öppna larm.	Inga larm Bekräfta alla Hantera larm ...
2	Aktuellt användarnamn Välj användarnamnavsnittet på aktivitetsfältet för att visa en användarmeny. Med Logga ut kommer du tillbaka till skärmen <i>Startup</i> (Start). Med Mina inställningar kan du välja användarinställningar och preferenser för arbetsflödet. Skriv ut skickar den patientlista som visas till en ansluten skrivare.	Användarmeny Logga ut ... Mina inställningar ... Skriv ut ...

Tabell 11: Menyer i aktivitetsfältet

	Beskrivning	Meny								
3 0 	Ikoner för utdataenheter Välj ikonen för valfri resultatenhet för att visa skärmen <i>Köhanteraren</i> . På denna skärm visas status på jobb i kön, jobbinformation för vald resultatenhet, och det finns också möjlighet att filtrera kövisningen. Siffran på ikonen visar antalet jobb som är kvar i kön.  									
4 	Meddelandeikon Välj ikonen Meddelanden för att visa skärmen <i>Patienter med meddelanden som inte granskats</i> . Siffran på ikonen visar antalet patienter som har meddelanden som inte granskats.									
5   	Ikoner för systemstatus Om ikonen Systemstatus (rörhuvud) har ett grönt bockmärke bredvid sig är systemet klart att användas. Välj ikonen Systemstatus för att visa felmenyn. Om ikonen Systemstatus är röd med en siffra bredvid sig, behöver systemet vänta det angivna antalet minuter innan nästa bild kan tas på ett säkert sätt. Om ikonen Systemstatus har ett gult utropstecken bredvid sig och den här delen av aktivitetsfältet blinkar gult finns det ett fel. Välj ikonen Systemstatus för mer information om felet. Rensa alla fel tar bort alla felmeddelanden. Röntgenrör, 0 grader placeras röntgenröret vid noll graders rotation för nästa exponering. Röntgenrör, -15 grader placeras röntgenröret vid -15 graders rotation för en exponering. Röntgenrör, +15 grader placeras röntgenröret vid +15 graders rotation för en exponering. Med Systemdiagnostik kommer du till inställningarna för undersystem. Systemstandarder öppnar skärmen <i>Standardinställningar för gantryt</i> där du kan ställa in standardvärdet för kompression och generatorn. Om visar information om bildtagningsstationen (se avsnittet Skärmen Om på sidan 129).	<table border="1"> <tr><td>Inga fel</td></tr> <tr><td>Rensa alla fel</td></tr> <tr><td>Röntgenrör: 0 grader</td></tr> <tr><td>Röntgenrör: -15 grader</td></tr> <tr><td>Röntgenrör: +15 grader</td></tr> <tr><td>Systemdiagnostik ...</td></tr> <tr><td>Systemstandarder ...</td></tr> <tr><td>Om ...</td></tr> </table>	Inga fel	Rensa alla fel	Röntgenrör: 0 grader	Röntgenrör: -15 grader	Röntgenrör: +15 grader	Systemdiagnostik ...	Systemstandarder ...	Om ...
Inga fel										
Rensa alla fel										
Röntgenrör: 0 grader										
Röntgenrör: -15 grader										
Röntgenrör: +15 grader										
Systemdiagnostik ...										
Systemstandarder ...										
Om ...										

5.3 Välj patientskärm

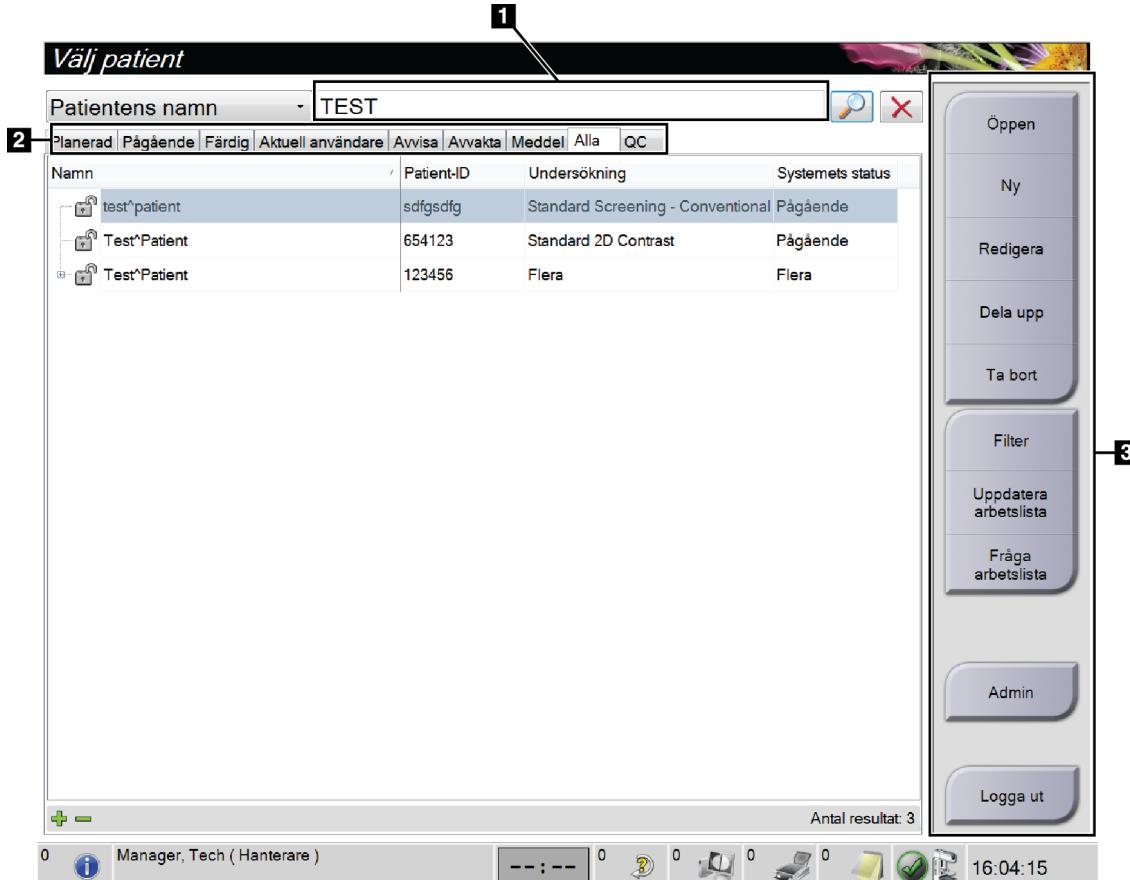

Figur 30: Välj patientskärm

Tabell 12: Skärmen Välj patient

Punkt	Beskrivning
1. Snabbsökning	Sök i den valda fliken efter patientnamn, patient-ID eller undersöknings-nr.
2. Flikar	<p>Flikarna högst upp på skärmen går att konfigurera. En användare med korrekt behörighet kan radera flikar och skapa nya flikar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På fliken Planerad visas schemalagda undersökningar. • På fliken Pågående visas undersökningar som inte är slutförda. • På fliken Färdig visas slutförda undersökningar. • På fliken Aktuell användare visas undersökningar som tillhör aktuell operatör. • På fliken Avvisa visas alla undersökningar med avvisade vyer. • På fliken Avvakta visas alla undersökningar med vyer där beslutet skjutits upp.

Tabell 12: Skärmen Välj patient

Punkt	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> På fliken Alla visas alla undersökningar för samtliga användare. På fliken Meddelanden visas som standard patienter med meddelanden som inte granskats. Se Om fliken Meddelanden på sidan 56 för fullständig information. På fliken QC visas kvalitetskontrollprocedurerna. Fliken Företag visas om du har Advanced Workflow Manager på sidan 63. Denna flik visar alla studier tagna på system inom ett Advanced Workflow Manager-kluster. Distributionen av studierna hanteras från denna flik. 
3. Knappar	<p>Många funktioner är tillgängliga från detta fönster genom att välja en specifik knapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> Öppen: Öppna den valda patienten. Ny: Lägga till en ny patient, se avsnittet Lägga till en ny patient på sidan 56. Redigera: Redigera patientinformation – se avsnittet Redigera patientinformation på sidan 57. Dela upp: Ta bort bilderna från en procedur eller en patient och flytta bilderna till en annan procedur eller patient – se avsnittet Dela patientjournaler på sidan 57. Ta bort: Radera den valda patienten – se avsnittet Radera en patient på sidan 60. Filter: Använda ett patientfilter, se avsnittet Filter för patienter på sidan 60. Uppdatera arbetslista: Uppdatera informationen om den schemalagda patientarbetslistan, se avsnittet Uppdatera arbetslistan på sidan 62. Sök i arbetslista: Söka efter en patient i Modality Worklist – se avsnittet Sök i arbetslistan på sidan 62. Admin: Öppna skärmen Admin – se Skärmen Admin på sidan 127. Logga ut: Avsluta systemet – se Logga ut på sidan 63.

5.3.1 Om fliken Meddelanden

- När du har valt fliken **Meddelanden** från skärmen *Välj patient* visas en lista över patienter med meddelanden.
- Standardvärdet för listan är patienter med granskade respektive icke granskade meddelanden.
- Du kan ändra värdet till att visa patienter med meddelanden som har granskats eller patienter med icke granskade meddelanden.
- Välj **Öppen** för att öppna skärmen *Undersökning* för den valda patienten.

5.3.2 Öppna en patient

1. Välj en flik för att visa den önskade listan över patienter.
2. Välj en patient från listan. Knappen **Öppen** aktiveras.
3. Välj **Öppen** för att öppna skärmen *Undersökning* för denna patient.

5.3.3 Lägga till en ny patient

1. Välj knappen *Ny* på skärmen *Välj patient*. Skärmen *Lägg till patient* öppnas.

Figur 32: Skärmen *Lägg till patient*

2. Ange den nya patientinformationen och välj en procedur.
3. Välj knappen **Öppen**. Skärmen *Undersökning* för den nya patienten öppnas.

5.3.4 Redigera patientinformation

1. På skärmen *Välj patient* väljer du patientens namn och väljer sedan knappen **Redigera**.
2. På skärmen *Redigera patient* gör du ändringarna och väljer sedan knappen **Spara**.
3. Välj **OK** för meddelandet *Uppdatering genomförd*.

5.3.5 Dela patientjournaler

Med hjälp av funktionen Dela upp kan du flytta bilder om bilderna togs i en felaktig undersökning eller för en felaktig patient.




OBS!

Du kan inte dela bilder för skyddade patienter.



OBS!

Arkiverade patientjournaler måste fortfarande korrigeras i PACS eller andra arkivsystem efter att funktionen Dela upp använts.

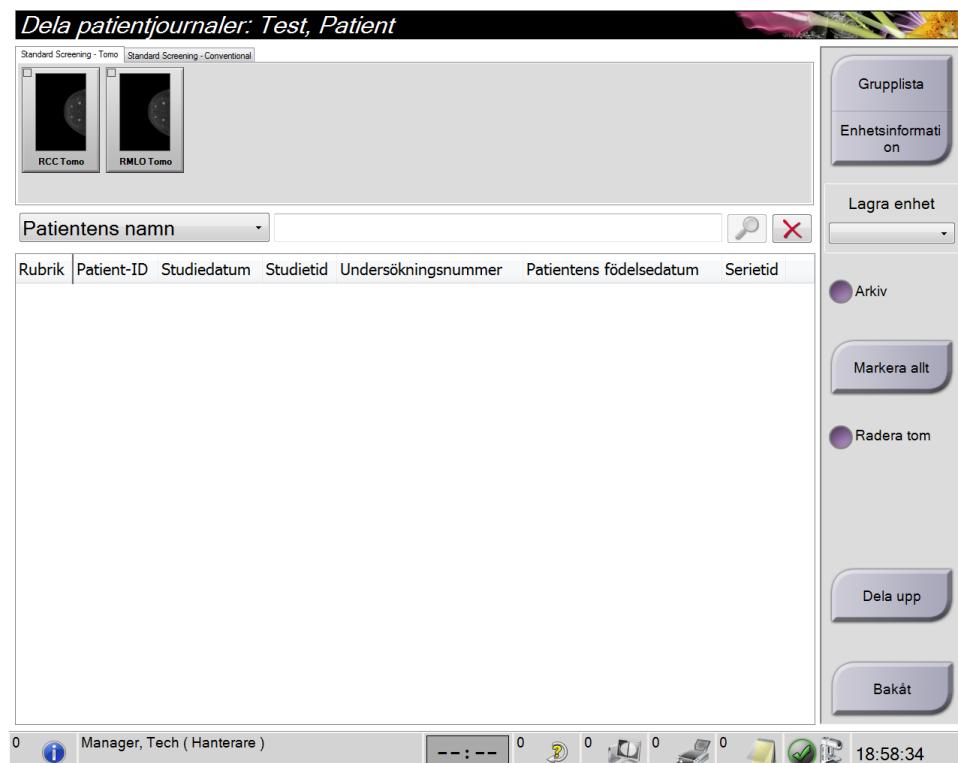


Figur 33: Skärmen *Dela patientjournaler*

Bilder togs i fel procedur

1. Välj patienten på skärmen *Välj patient*.
2. Välj knappen **Dela upp**. Skärmen *Dela patientjournaler* öppnas.
3. Välj de bilder som ska flyttas. Om alla bilder flyttas, ska du välja **Markera allt**.
4. Välj sökkriterier (till exempel Patientens namn eller Remissnummer) från rullgardinslistan nedanför bilderna.
5. Ange samma patientinformation och klicka på knappen **Sök** (förstoringsglaset).
6. När patientnamnet visas ska du välja tillämplig undersökning för bilderna.
7. Om ALLA bilderna flyttas och du vill ta bort den felaktiga proceduren, välj **Radera tom**.
8. Om du vill arkivera bilderna eller spara dem på en lagringenhet, välj **Arkivera**. Bekräfta att rätt resultat har valts.
9. Välj **Dela upp** och sedan **OK** i meddelandet *Delningen har genomförts*.

Bilder tagna under fel patient

1. På skärmen *Välj patient* ska du välja den patient som har bilderna som måste flyttas.
2. Välj knappen **Dela upp**. Skärmen *Dela patientjournaler* öppnas.
3. Välj de bilder som ska flyttas. Om alla bilder flyttas, ska du välja **Markera allt**.
4. Välj sökkriterier (till exempel Patientens namn eller Remissnummer) från rullgardinslistan nedanför bilderna.
5. Ange samma sökkriterier och välj knappen **Sök** (förstoringsglaset).
6. När patientnamnet visas, ska du välja den korrekta proceduren.

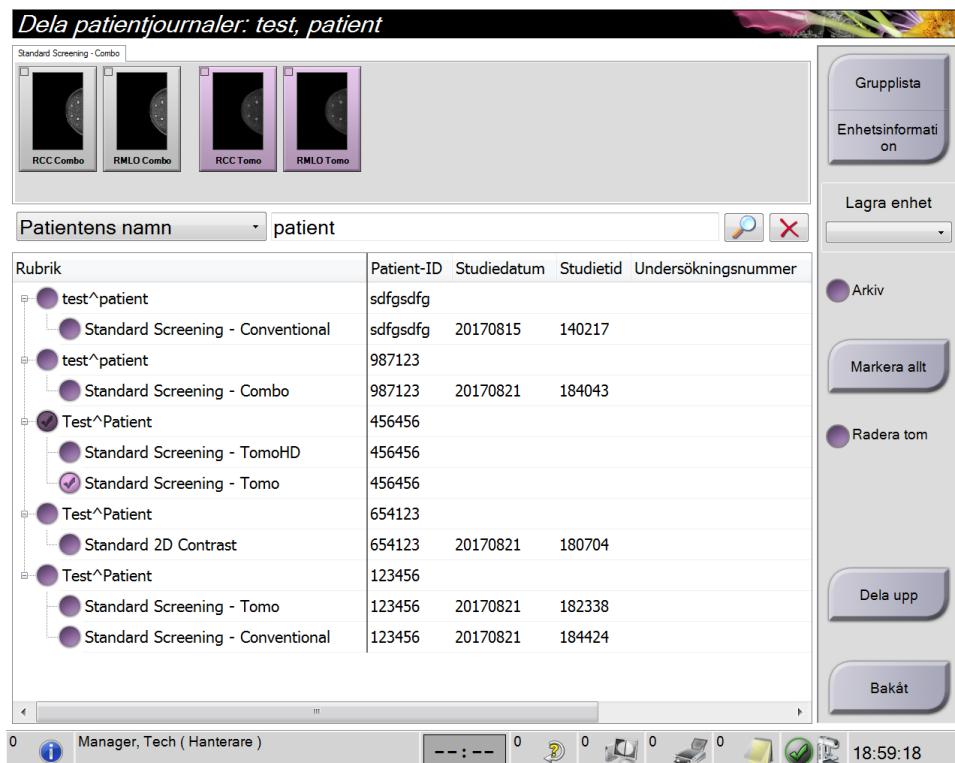

Figur 34: Välj tillämplig undersökning för att dela patientjournaler

7. Om ALLA bilderna flyttas och du vill ta bort den felaktiga patienten från patientlistan, välj **Radera tom**.
8. Om du vill arkivera bilderna eller spara dem på en lagringsenhet, välj **Arkivera**. Bekräfта att rätt resultat har valts.
9. Välj **Dela upp** och sedan **OK** i meddelandet *Delningen har genomförts*.

5.3.6 Radera en patient



OBS!

Reklamation消除) eliminerar vanligtvis behovet av att radera patienter manuellt. Se avsnittet [Om regenerering](#) på sidan 126.

1. Välj en eller flera patienter på skärmen *Välj patient*.
2. Välj knappen **Radera**.
3. När bekräftelsefönstret visas ska du välja **Ja**.



OBS!

Tekniker har inte rätt att radera patienter.

5.3.7 Filter för patienter

Efter att du valt knappen **Filter** på skärmen *Välj patient*, öppnas skärmen *Patientfilter* för den valda patientlistan.

The screenshot shows the 'Patientfilter: Scheduled' window. On the left, there is a 'Filter' tab with several dropdown menus and checkboxes. The 'Område' dropdown is set to 'Idag'. The 'Disposition' dropdown has 'Accepterade' checked. The 'Roll' dropdown is set to 'Jag'. The 'Källa' dropdown has 'Arbetslista' and 'Lokal' checked. The 'Meddelandetillstånd' dropdown is set to 'Ej visad'. To the right of the filter section is a 'Resultat' table with columns: Namn, Födelsedatum, Undersökning, Datum/tid, Tidigare, Systemet..., and Patient. Below the table is a status bar showing 'Antal resultat: 0'. On the far right, there is a vertical toolbar with buttons for 'Öppen', 'Uppdatera arbetslista', 'Fråga arbetslista', 'Spara', 'Spara som', 'Ta bort fil', 'Sortera filkar', and 'Bakåt'.

Figur 35: Fliken *Filter* på skärmen *Patientfilter*

Fliken Filter

Använd fliken **Filter** för att ändra filteralternativen för patientlistan. När du markerar eller avmarkerar ett alternativ visas ändringen i området Resultat på skärmen.



OBS!

Du måste ha behörighet på chefsnivå för att spara dessa nya filter på den valda fliken på skärmen *Välj patient*. (Se avsnittet [Övriga funktioner på fliken Filter](#) på sidan 61.)



OBS!

När man väljer en rad i resultatlistan och sedan väljer knappen **Öppen** öppnas skärmen *Undersökning* för vald patient.

Övriga funktioner på fliken Filter

På fliken **Filter** kan användare med tillämplig behörighet lägga till, ändra eller radera flikar på skärmen *Välj patient*. Se tabellen nedan.

Tabell 13: Alternativ på fliken Filter (kräver åtkomsträttigheter)

Ändra aktuella parametrar för patientfiltrering.	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj filtreringsalternativ.Tryck på knappen Spara.Kontrollera att namnet på den flik du valde visas i namnrutan.Välj OK.
Skapa en ny flik på skärmen <i>Välj patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj filtreringsalternativ för fliken.Välj knappen Spara som.Ange ett nytt namn för fliken.Välj OK.
Radera en flik från skärmen <i>Välj patient</i> .	<ol style="list-style-type: none">Välj en flik på skärmen <i>Välj patient</i>.Välj knappen Filter.Välj knappen Radera.Välj Ja i bekräftelsedialogrutan.

Fliken Kolumner

Använd fliken **Kolumner** för att lägga till fler sökalternativ (t.ex. Ålder, Kön, Meddelanden) till den filtrerade listan. Alternativen visas som kolumner i resultatområdet. För att lägga till fler kolumner till en filtrerad lista väljer du fliken **Kolumner** och väljer sedan önskade alternativ.



OBS!

Du måste ha systemåtkomst på chefsnivå för att spara dessa nya kolumner i patientfiltret.



OBS!

När man väljer en rad i resultatlistan och sedan väljer knappen **Öppen** öppnas skärmen *Undersökning* för vald patient.

Knappen Sortera flikar

Välj knappen **Sortera flikar** för att ändra sorteringen av flikarna i patientlistan

5.3.8 Uppdatera arbetslistan

Välj knappen **Uppdatera arbetslista** för att uppdatera listan över schemalagda patienter från Modality Worklist Provider.

5.3.9 Sök i arbetslistan

Välj knappen **Sök i arbetslistan** för att söka i Modality Worklist Provider efter en patient eller en lista över patienter.

Det finns två sätt att ange sökinformation:

- **Tangentbord** – skriv in frågeinformationen i ett eller flera fält. Den schemalagda proceduren visas och patienten läggs till i den lokala databasen. Alla fält som går att söka i kan konfigureras. Standardfälten är Patientens namn, Patient-ID, Undersökningsnummer, ID för begärd undersökning och Planerat undersökningsdatum.
- **Streckkodsläsare** – skanna streckkoden för det konfigurerade frågefältet. Den schemalagda proceduren visas och patienten läggs till i den lokala databasen. Det fält som streckkodsläsaren ska avläsa går att konfigurera. Standardfrågefältet kan vara patient-ID, undersökningsnummer eller begärt procedur-ID.

5.3.10 Admin

Välj knappen **Admin** för att öppna skärmen *Admin* och systemadministrationsfunktionerna. Se avsnittet [Systemadministrationsgränssnitt](#) på sidan 127 för ytterligare information.

5.3.11 Logga ut


Välj knappen **Logga ut** för att avsluta systemet. Och komma tillbaka till skärmen *Startup* (Start).

5.3.12 Advanced Workflow Manager

Advanced Workflow Manager är en arbetsflödesmotor som gör att många kompatibla Hologic-system kan kommunicera och utbyta bilder med varandra. Advanced Workflow Manager håller reda på alla patienter, procedurer och bilder som tas på alla system inom ett Advanced Workflow Manager-kluster. Dessutom synkroniseras Advanced Workflow Manager meddelanden och tillhandahåller bilder till alla system inom klustret.

System med Advanced Workflow Manager visar fliken **Företag** på skärmen [Välj patientskärm](#) på sidan 54. Denna flik visar procedurer tagna på alla system inom ett Advanced Workflow Manager-kluster.

5.4 Skärmen Procedur

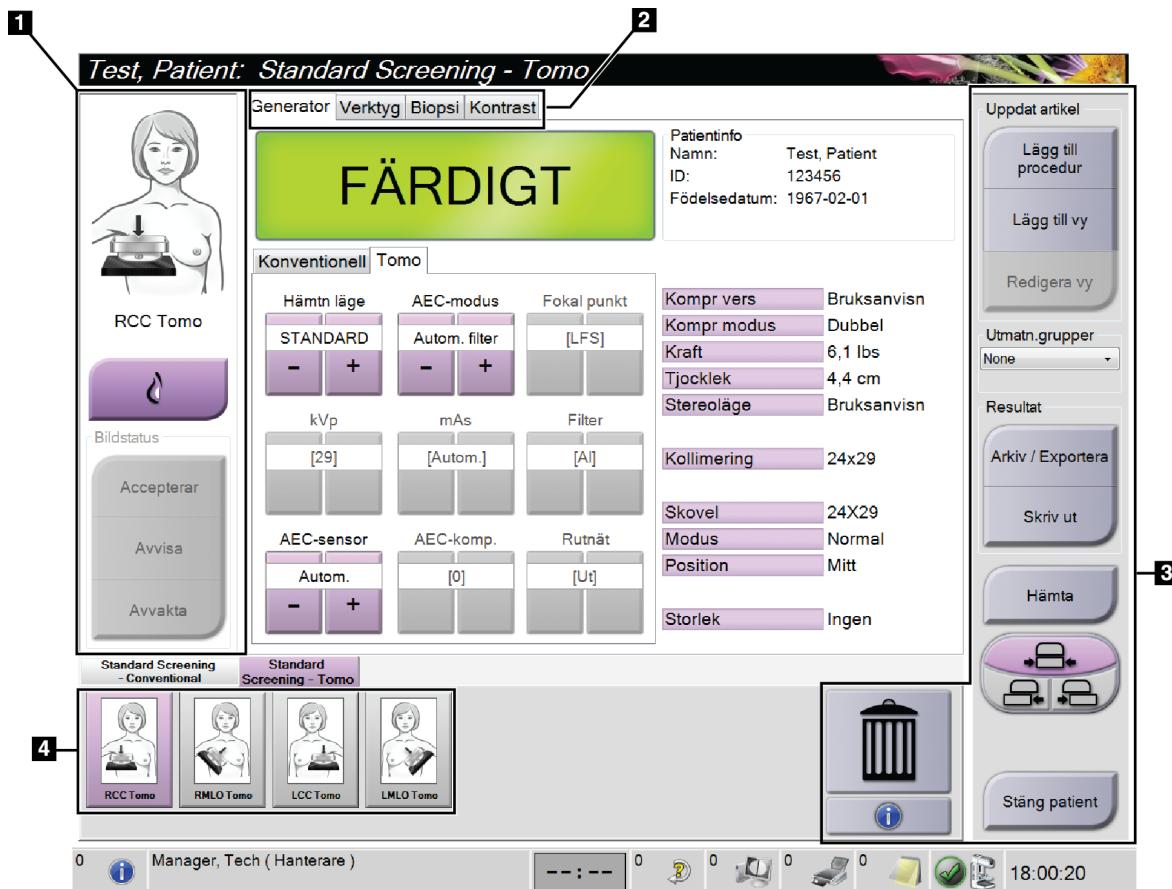

Figur 36: Skärmen Procedur

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 5: Användargränssnitt

Tabell 14: Skärmen Procedur

Punkt	Beskrivning
1. Bildstatus	Visningsikonen visar den vy som för närvarande valts. Knappen Implantat finns – välj när patienten har ett implantat. Knappen Accepterar – välj för att acceptera bilden. Knappen Avvisa – välj för att avvisa bilden. Knappen Avvakta – välj för att spara bilden för framtida visning.
2. Flikar	Välj fliken Generator för att justera exponeringsteknikerna för proceduren. Välj fliken Verktyg för att granska bilderna. Välj fliken Biopsi för att skapa mål. Välj fliken Kontrast för att utföra I-View™ 2D-kontrastundersökningar.
3. Knappar	Många funktioner är tillgängliga från detta fönster genom att välja en specifik knapp: Lägg till procedur: Lägga till en ny patient. Lägg till vy: Lägg till en ny vy. Redigera vy: Tilldela en annan vy till en bild. Arkiv/Exportera: Skicka bilder till en resultatenhet. Skriv ut: Skriva ut bilder. Hämta: Fråga de konfigurerade enheterna om den nuvarande patientinformationen. Flytta paddel: Åsidosätt standardpaddelpositionen för vald vy. Stäng patient: Avsluta patienten och undersökningen. Soptunnan: Radera en vy.
4. Miniatyrbilder	Välj en flik för att visa miniatyrvyer eller miniatyrbilder för denna procedur.

5.4.1 Så här använder du knappen **Implant Present** (Implantat finns)

Knappen **Implant Present** (Implantat finns) sitter ovanför knappen **Accept** (Acceptera) på skärmen *Procedure* (Procedur). Denna knapp applicerar en särskild implantatbearbetning på implantatyver och vyer med förskjutet implantat och ändrar DICOM-taggen "Implant Present" (Implantat finns) i bildrubriken. När den här knappen väljs visas en bock på knappen.



Välj knappen **Implant Present** (Implantat finns) för både implantatyver och vyer med förskjutna implantat innan du tar bilden.




Anm.

Knappen **Implant Present** (Implantat finns) väljs automatiskt om några öppna procedurflikar innehåller en ID-vy.

5.4.2 Så här använder du funktionen **Flytta paddel**

Se [Paddelförflyttning](#) på sidan 105 för information om funktionen Flytta paddel.

1. På skärmen *Procedur* ska du välja en oexponerad miniatyrbildvy. Paddeln flyttas till standardpositionen för den vyn.
2. Välj en paddelförflyttningsknapp för att åsidosätta standardpaddelpositionen för vald vy. Paddeln flyttas till den nya positionen.

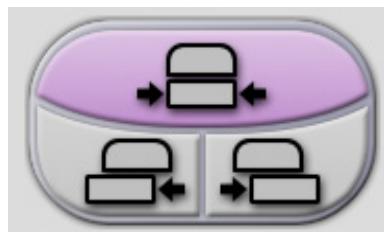


Figur 37: Knappar för paddelförflyttning

5.4.3 Dialogrutan Procedurinformation

Om du vill visa undersökningsinformation ska du trycka på knappen **Procedurinfo** som finns under knappen **Radera vy** (soptunnan). Dialogrutan Procedurinfo visas med följande information:

- Procedurens namn:
- Undersökningsnummer
- Procedurens status
- Undersökningens start- och slutdatum samt tid
- Dosinformation (varje bröst och ackumulerat)

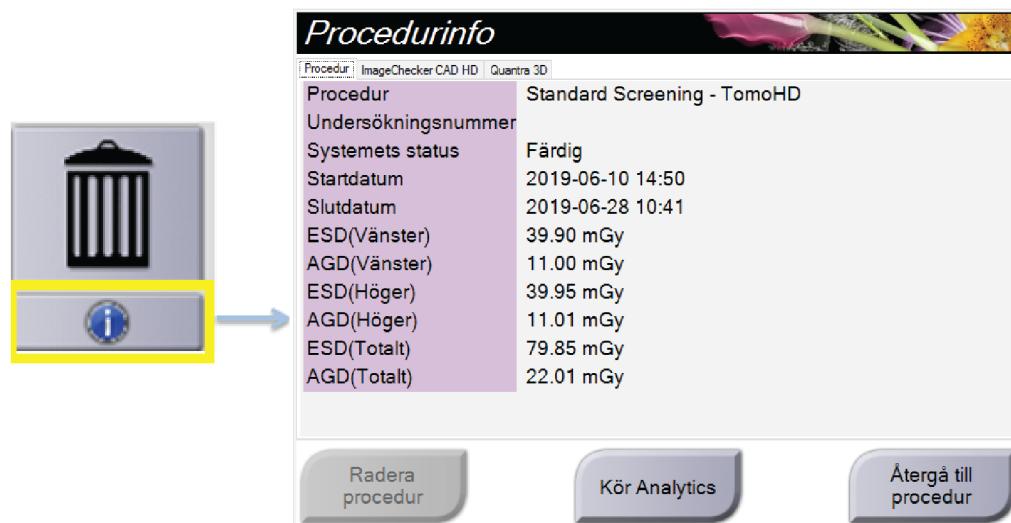

Figur 38: Dialogrutan Procedurinfo

För undersökningar som inte innehåller några exponerade vyer ska du välja knappen **Radera procedur** för att ta bort den markerade proceduren från patienten.

Om du vill köra bildanalysen manuellt väljer du knappen **Kör analys**.



OBS!

Knappen **Kör analys** visas endast om du har en licens för ImageChecker® CAD- eller Quantra™-programvara.

Välj **Återgå till procedur** för att avsluta dialogrutan.

Om knappen Kör analys


ImageChecker® CAD och Quantra™ programvara för volymetrisk bedömning av bröstdensitet finns på Selenia Dimensions- och 3Dimensions-system.

När du är licensierad för en av dessa funktioner:

- Bildanalyser körs automatiskt när du väljer knappen **Procedurstängning slutförd** för att stänga en patient efter att ha samlat in nya bilder. Bildanalyser körs automatiskt efter att du har redigerat en patient, redigerat en vy eller lagt till en vy när du väljer knappen **Procedurstängning slutförd** för att stänga en patient.
- Bildanalyser kan köras manuellt genom att välja knappen **Kör analys** i dialogrutan Procedurinfo. Kör bildanalys manuellt efter behov på bilder som tas emot eller importeras från en extern källa.
- Bildanalyser körs endast på bilder som togs med samma programvaruversion som bildtagningsstationen.
- Dialogrutan Procedurinfo innehåller flikar som visar statusen för lyckad eller misslyckad bildanalys.
- Miniatyrbilder för bildanalysresultat visas i miniatyrbildsavsnittet på skärmen *Procedur*.

5.4.4 Lägg till en undersökning

1. För att lägga till en ny undersökning ska du välja knappen **Lägg till procedur** på skärmen *Procedur* för att öppna dialogrutan **Lägg till procedur**.

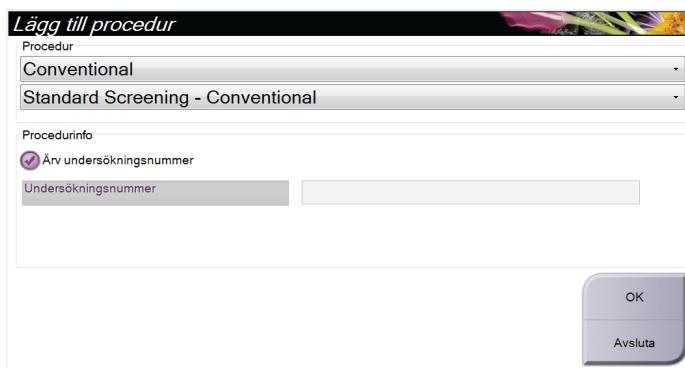

Figur 39: Dialogrutan *Lägg till procedur*

2. Använd rullgardinsmenyerna för att välja den typ av undersökning som ska läggas till.
3. Det aktuella undersökningsnumret används automatiskt. Använd ett annat remissnummer genom att avmarkera kryssrutan "Ärv undersökningsnummer" och ange önskat nummer.
4. Välj knappen **OK**. En ny flik läggs till miniatyrvyerna från den procedur som valdes.

Tillgängliga procedurer

I följande tabell visas huvudgrupperna med procedurer som är tillgängliga i systemet.



OBS!

Vissa procedurer i listan visas endast om systemet har licens för den proceduren.

Tabell 15: Undersökningsgrupper

Undersökning	Beskrivning
Konventionell	Endast digital mammografibildtagning (2D)
Kombinerad	Digital mammografi- (2D) och brösttomosyntesbildtagning
Tomo	Endast brösttomosyntesbildtagning
TomoHD	Brösttomosyntesbildtagning och en genererad 2D-bild
ComboHD	Digital mammografi- (2D) och brösttomosyntesbildtagning och en genererad 2D-bild
Stereobiopsi	Biopsi med stereotaktisk målinriktning
Guidad tomobiopsi	Biopsi med tomosyntes-målinriktning
Prov	Specialiserad provbildtagning
2D-kontrast	Kontrastförstärkt digital bildtagning

5.4.5 Lägga till (eller ta bort) en vy

Lägga till en vy

- Välj knappen **Lägg till vy** för att komma till skärmen *Lägg till vy*.

OBS!

Beroende på vilka licensinställningar ditt system har kan du se olika flikar.



Visa modifierare

ID = Implantatet förskjutet

RL = Rullat lateralt

RM = Rullat medialt

RI = Rullat inferiort

RS = Rullat superiort

TAN = Tangentiell

NP = Bröstvärta i profil

AC = Anterior kompression

IMF = Inframammärt veck

AX = Axillär vävnad

Figur 40: Skärmen *Lägg till vy*

- Välj fliken, och välj sedan vyn. Du kan välja högst tre vymodifierare från höger panel på skärmen.
- Tryck på knappen **Lägg till**. En miniatyrbild av varje vald vy läggs till längst ned på skärmen.

Ta bort en vy


- För att ta bort en enstaka vy från den tillagda listan väljer du vyn och sedan soptunneikonen.
- För att ta bort alla vyer från den tillagda listan väljer du knappen **Rensa**.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 5: Användargränssnitt

5.4.6 Redigera en vy

Använd skärmen **Redigera vy** för att tilldela en bild en annan vy.

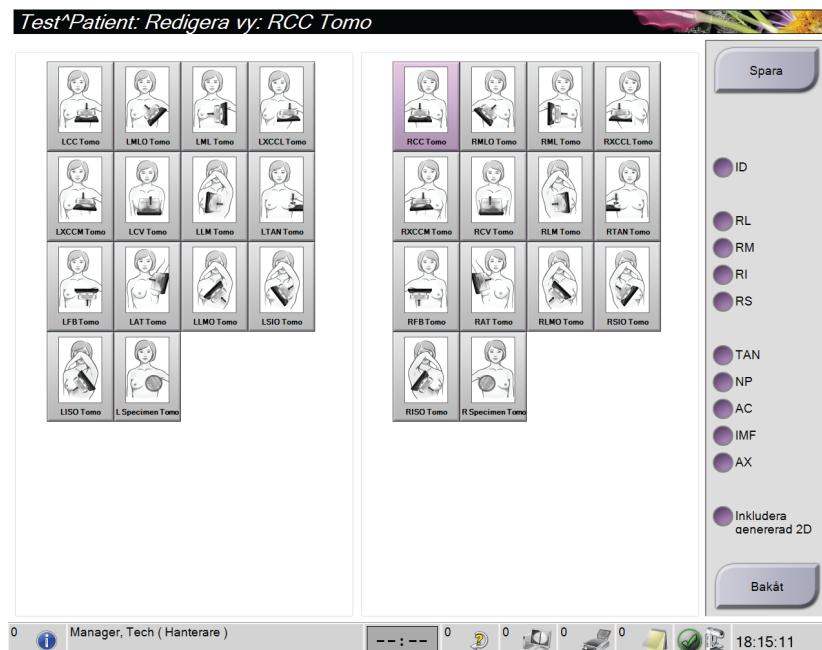

Figur 41: Skärmen *Redigera vy*

1. På skärmen *Procedur* väljer du en exponerad miniatyrbildvy.
2. Tryck på knappen **Redigera vy**.
3. Välj vyn på skärmen. Du kan välja högst tre vymodifierare. Se figuren [Skärmen Lägg till vy](#) på sidan 69 för en beskrivning av vymodifierare.
4. Välj **Spara**, och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdatering genomförd*.



OBS!

På skärmen *Redigera vy* för biopsiundersökningar visas andra vymodifierare. Se [användarhandboken till Affirm® vägledningssystem för bröstbiopsi](#).

5.4.7 Hämta

Välj knappen **Hämta** för att fråga de konfigurerade enheterna om den nuvarande patientinformationen. Knappen **Hämta** utför samma funktion som knappen **Sök och hämta** på skärmen *Admin*.

5.4.8 Stäng en patient

Välj knappen **Stäng patient**. Om bilder togs öppnas dialogrutan Stäng procedur. Välj ett av följande alternativ:

<i>Stäng procedur</i>	
	Procedurstängning slutförd: Stänger proceduren och placerar proceduren på fliken Färdig .
	Procedurstängning pågår: Stänger proceduren och placerar proceduren på fliken Pågående .
	Procedurstängning avbryts: Stänger proceduren och placerar proceduren på fliken Alla . En dialogruta öppnas där du måste välja orsaken till att proceduren avbrutits från en lista, eller lägga till en ny orsak.
	Återgå till procedur: Återgår till undersökningen.

Om det finns bilder markerade med Avvakta öppnas en dialogruta med följande alternativ:

- Acceptera alla och Stäng färdiga
- Stäng pågående procedur
- Återgå till procedur

Om MPPS har aktiverats skickas statusinformation om procedurer till resultatenheterna när du väljer **Slutför** eller **Avbryt**. Du kan också klicka och hålla på fliken ovanför miniatyrbilderna för att skicka om ett meddelande om undersökningsstatus under undersökningen. En dialogruta, Proceduråtgärd, öppnas med knappar för att sända om en status eller återgå till undersökningen.



OBS!

När du är licensierad för ImageChecker® CAD- eller Quantra™-programvara körs bildanalys automatiskt när du väljer knappen **Procedurstängning slutförd** efter att ha samlat in nya bilder. Resultaten skickas automatiskt till resultatenheterna. När du öppnar patienten igen visas miniatyrbilder för resultaten på skärmen *Procedur* och statusflikarna i dialogrutan *Procedurinfo*.

5.5 Så här öppnar du bildgranskningsfunktionerna

Välj fliken **Verktyg** på skärmen *Procedur* för att öppna bildgranskningsfunktionerna. Se [Fliken Bildgranskningsverktyg](#) på sidan 85 för information.

5.6 Resultatgrupper


Godtagna bilder skickas automatiskt till utdataenheterna i den valda resultatgruppen. Systemkonfigurationen kontrollerar om bilderna har skickats efter att en patient har stängs eller efter att bilden har godtagits.



OBS!

Tomosyntesbilder skickas inte till en skrivare i vald resultatgrupp. Du kan skriva ut valda tomosyntesbilder från skärmen *Skriv ut*.

5.6.1 Välj en resultatgrupp

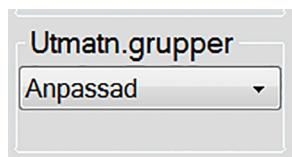

Figur 42: Fältet Utmattn.grupper

Välj en resultatgrupp, t.ex. PACS, diagnostiska arbetsstationer, CAD-enheter och skrivare i rullgardinslistan Utmatn.grupper på skärmen *Procedur*.



OBS!

Bilderna skickas inte om ingen resultatgrupp har valts.

5.6.2 Lägg till eller redigera en resultatgrupp



OBS!

Konfigurationen av resultatgrupper görs under installationen, men du kan redigera befintliga grupper eller lägga till nya.

Gör så här för att lägga till en ny resultatgrupp:

1. Gå till skärmen *Admin*.
2. Välj knappen **Hantera utmatn.grupper**.
3. Välj knappen **Ny**, ange information och välj sedan resultatenhet(er).
4. Välj **Lägg till**, och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdateringen lyckades*.
5. Du kan ställa in valfri grupp som standard.

Så här redigerar du en resultatgrupp:


1. Gå till skärmen *Admin*.
2. Välj knappen **Hantera utmatn.grupper**.
3. Välj knappen **Redigera** och gör sedan ändringarna.
4. Välj **Spara** och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdatering genomförd*.

5.6.3 Anpassat resultat

Alternativet Anpassad resultatgrupp gör att du kan skapa en resultatgrupp på skärmen *Procedur*. Den anpassade resultatgrupp du skapar ligger kvar som anpassat alternativ tills en annan anpassad resultatgrupp skapas.

Så här skapar du en anpassad resultatgrupp från skärmen *Procedur*:

1. På skärmen *Procedur* ska du välja **Anpassat** från rullgardinslistan för resultatgruppen.
2. I dialogrutan *Resultatgrupp* väljer du i listan över tillgängliga enheter och väljer sedan **OK**.

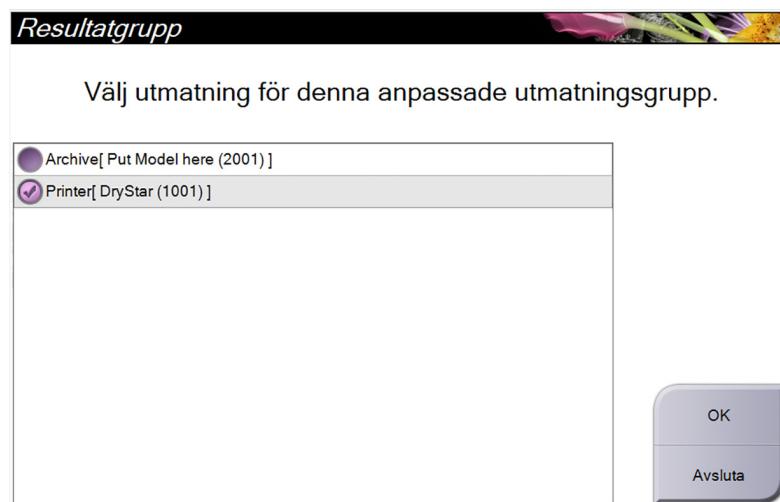

Figur 43: Exempel på en Output Group (Resultatgrupp) av typen Custom (Special)

5.7 Resultat på begäran

Utdata på begäran är **Arkiv/Exportera** eller **Skriv ut**. Du kan arkivera, exportera eller skriva ut aktuell öppnad patient manuellt tills proceduren stängs.

När du trycker på en knapp för **Resultat på begäran** har du möjlighet att skicka bilder från den patient som är öppnad till valfri konfigurerad resultatenhet.

5.7.1 Archive (Arkivera)

1. Välj knappen **Arkivera/exportera**.
2. Välj proceduren eller vyerna på skärmen *Arkiv på begäran*:
 - Med knappen **Markera allt** väljer du samtliga poster som visas på denna skärm.
 - Med knappen **Rensa** avmarkerar du poster som är valda på denna skärm.
 - Knappen **Tidigare** visar tidigare procedurer och vyer för denna patient.
 - Knappen **Avvisade** visar avvisade vyer för denna patient.
3. Välj en lagringsenhet:
 - Välj knappen **Enhetslista** och gör ditt val bland alterniven i nedrullningsmenyn *Lagringsenhet*.
 - ELLER-
 - Välj en resultatgrupp i rullgardinslistan *Resultatgrupp*.
4. Välj knappen **Arkivera** för att skicka valda bilder till valt arkiv.




OBS!

Använd funktionen **Manage Queue** (**Hantera kö**) i aktivitetsfältet för att granska arkivstatus.


5.7.2 Exportera

1. Välj knappen **Arkiv/exportera** på höger sida på skärmen *Procedur*.
2. Välj de bilder som ska exporteras, och välj sedan knappen **Exportera**.

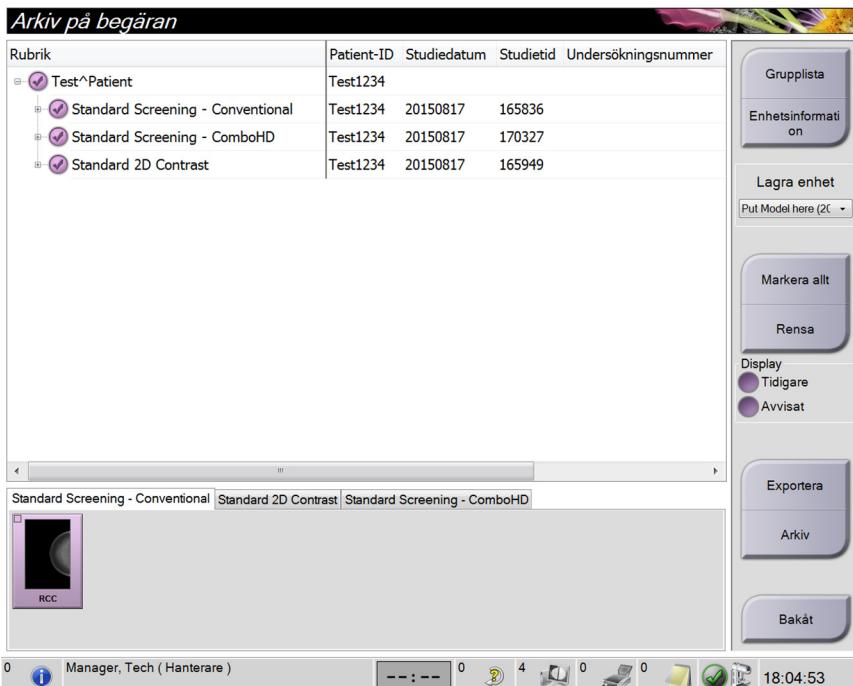

Figur 44: Välj bilder för export

3. I dialogrutan Exportera väljer du målet i rullgardinslistan med medieenheter.

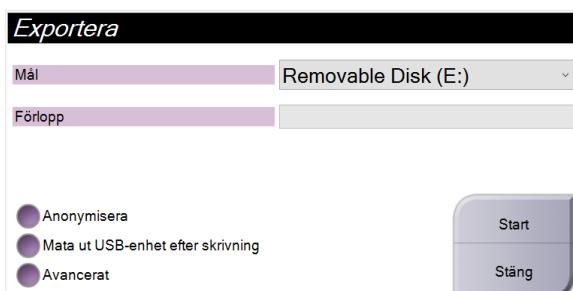


Figur 45: Dialogrutan Exportera

- För att anonymisera patientdata väljer du **Anonymisera**.
 - Om du vill mata ut lagringenheten för uttagbara medier automatiskt när exporten är klar väljer du **Mata ut USB-enhet efter skrivning**.
 - För att välja en katalog i dina lokala system för lagring av dina val samt för att välja exporttyper för bilden väljer du **Avancerat**.
4. Välj knappen **Start** för att skicka valda bilder till vald enhet.

5.7.3 Skriv ut

1. På skärmen *Procedur* väljer du knappen **Skriv ut** för att visa skärmen *Skriv ut*. Se figuren [Skärmen Skriv ut](#) på sidan 77 för att förbereda dina utskriftsdata.
2. Välj filmformat i filmformatsområdet på skärmen.
3. Välj en miniatyrbild.
4. Välj bildläge (Conventional [Konventionellt], Projection [Projektion] eller Reconstruction [Rekonstruktion]). Knappen C-View visar om systemet har licens för C-View-bildtagning.
5. Välj området för förhandsgranskning av utskrift (punkt 16) på skärmen *Skriv ut*. Bilden som visas i detta område är den bild som kommer att skrivas ut på filmen.
6. För att placera andra bilder på samma flerformatsfilm upprepar du steg 3 till 5.
7. För att skriva ut samma bilder i ett annat filmformat väljer du knappen **New Film** (Ny film) (punkt 12) och genomför steg 2 till 6.
8. Använd knapparna i det övre vänstra området på skärmen *Skriv ut* (punkt 1 till 6) för att dölja eller visa patientdata, markeringar och kommentarer samt för att ändra orientering på bilden.
9. Välj knappen **Skriv ut** för att skriva ut dina filmer.

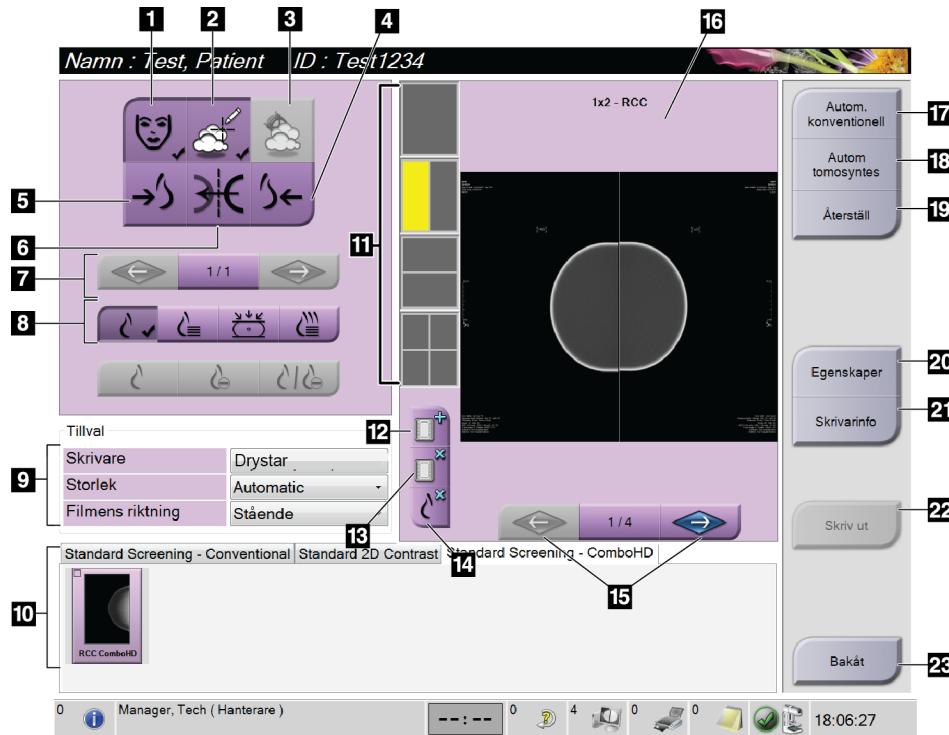

Figur 46: Skärmen Skriv ut

Figurförklaring

1. Visa eller dölja patientdata.
2. Visa eller dölja markeringar och kommentarer.
3. Visa eller dölja mål på bilder från en biopsi.
4. Skriva ut bilden från ett dorsalt perspektiv.
5. Skriva ut bilden från ett ventralt perspektiv.
6. Spegelvända bilden.
7. Gå till föregående eller nästa tomosyntessnitt eller -projektion (tomosyntestillval).
8. Välj Conventional- (Konventionellt), Projection- (Projektion) eller Reconstruction-vyer (Rekonstruktion) (tomosyntestillval). Knappen C-View visar om systemet har licens för C-View-bildtagning.
9. Välj skrivaralternativ.
10. Visa miniatyrbilder.
11. Välj filmformat (antal rutor).
12. Skapa en ny film.
13. Ta bort en film.
14. Radera en bild från en film.
15. Bläddra igenom filmsidorna.
16. Område för förhandsgranskning av utskrift.
17. Skriva ut konventionella (och C-View-bilder, om systemet har licens) med standardinställningen.
18. Skriva ut tomosyntesbilder (snitt eller projektioner), märkta för utskrift (alternativet Tomosynthesis [Tomosyntes]).
19. Återställ skärmen *Skriv ut* till standardinställningarna.
20. Öppna skärmen *Egenskaper*.
21. Visa skrivarens IP-adress, AE-titel, port och kapacitet för utskrift i verlig storlek.
22. Starta utskriftsprocessen.
23. Återgå till skärmen *Procedur*.

Kapitel 6 Bilder

6.1 Skärmen Bildvisning

Efter att du tagit en exponering öppnas den tagna bilden på bildmonitorn. Patient- och procedurinformation kan visas på skärmen. Stäng av eller slå på informationen genom att gå till fliken **Verktyg** på skärmen *Procedur* och välj knappen **Patientinfo**.



Figur 47: Skärmen Bildvisning

Figurförklaring

1. Patientinformation och undersökningsdatum
2. Exponeringsinformation, inklusive:
 - Exponeringstekniker
 - Patientdos
 - C-armsvinkel
 - Komprimeringstjocklek och -kraft
 - Information om klinik och tekniker

6.2 Så här ställer du in exponeringsparametrarna

6.2.1 Välj Bildtagningsläge (tomosyntestillval)

- Standard För rutinscreening med tomosyntes
- Förstärkt För diagnostiska tomosyntesvyer



Varng!

Förstärkt bildtagningsläge med kombi-bildtagning (DM + BT) kan skapa en stråldos som är högre än MQSA:s gräns för screening på 3,0 mGy, och ska därför endast användas vid diagnostisk utvärdering.

6.2.2 Välj exponeringsläge

Använd läget för automatisk exponeringskontroll (AEC) för att låta systemet kontrollera exponeringsteknikerna. AEC-lägen är tillgängliga från 20–49 kV.

- Bruksanvisning Användaren väljer kV, mAs, fokus och filter.
- AEC: Autom. tid Användaren väljer kV, fokus och filter. Systemet väljer mAs.
- AEC: Auto-kV Användaren väljer fokus. Systemet väljer kV, mAs och filter (rodium).
- AEC: Autom. filter Användaren väljer fokus. Systemet väljer kV, mAs och filter.

6.2.3 Så här använder du AEC-sensorn

AEC-sensorn har sju manuella positioner och en automatisk position. De manuella positionerna börjar vid bröstväggens kant (position 1) och fortsätter till bröstvårtans kant (position 7). Den automatiska positionen väljer två områden med en area som sträcker sig från bröstväggen till bröstvårtan.

Använd tangenterna plus (+) och minus (-) på komprimeringsenheten eller i AEC-sensorområdet på skärmen för att ändra sensorns position. Du kan välja Auto-AEC för att låta systemet beräkna bästa exponering för brösten.


6.3 Så här tar du en bild

Se [Kliniska ingrepp](#) på sidan 113 för information om kliniska förfaranden.

1. Välj en vy bland miniatyrbilderna längst ned på skärmen *Procedur*.
2. Håll **röntgenknappen** och/eller **röntgenfotpedalen** intryckt/nedtrampad under hela exponeringen.


Under exponeringen:

- Systemstatusraden visar strålningssymbolen mot gul bakgrund (se följande figur).

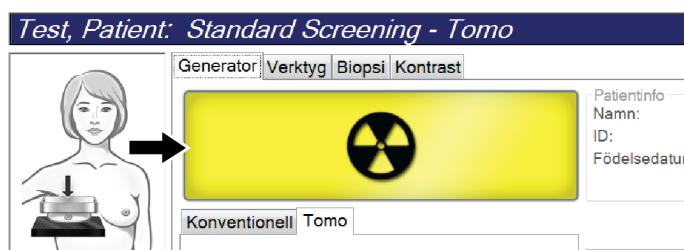

Figur 48: Exponering pågår

- En signal ljuder under hela exponeringen
Denna ljusignal är en kontinuerlig tonsekvens. Signalen ljuder under hela kombibildtagningen, från det att exponeringen inleds tills den konventionella vyn är avslutad. Ljusignalen avbryts inte mellan brösttomosyntesen och de konventionella digitala mammografiexponeringarna. Släpp inte exponeringskontakten under ljudtonen.
3. När ljusignalen tystnar och systemstatusraden visar meddelandet **Standby** visas (se följande figur) ska du släppa upp **röntgenknappen** och/eller **röntgenfotpedalen**.

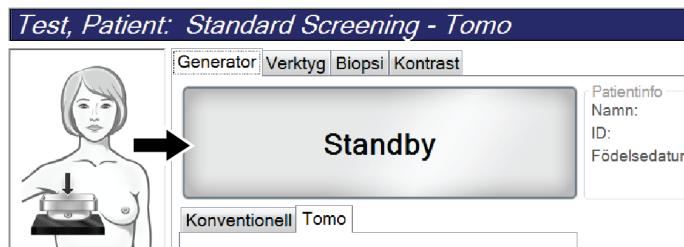


Figur 49: Exponeringen är klar

4. När röntgen är klar, visas bilden på bildvisningsskärmen. Skärmen *Procedur* ändras automatiskt till fliken **Verktyg**.

Välj ett av följande alternativ för att slutföra bildtagningen:

- **Acceptera** bilden. Bilden sänds till resultatenheterna med alla attribut.
- **Avvisa** bilden. När dialogrutan öppnas, välj orsaken till att bilden avvisades. Skärmen *Bildvisning* stängs. Du kan göra om den avvisade vyn eller välja en annan vy. Om du väljer **Avvisa** visas ett kryss (X) på miniatyrbilden.
- Välj **Avvakta** för bilden. Bilden sparas för framtida granskning och beslut. Om du väljer **Avvakta** visas ett frågestecken (?) på miniatyrbilden.

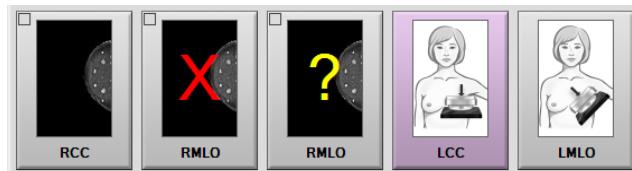

Figur 50: Markerade bilder i en undersökning

5. Upprepa steg 1 till 4 för varje vy.



OBS!

En chefsanvändare kan konfigurera systemet så att det automatiskt godtar nya bilder eller avvaktar beslut om dem.

6.3.1 Händelsesekvens vid konventionell bildtagning

1. Granska bilden efter exponeringen och lägg till en kommentar, om nödvändigt.
2. Välj **Acceptera**, **Avvisa** eller **Avvakta** för bilden. En miniatyrbild ersätter miniatyrbildvyn i fallstudieområdet på skärmen.



OBS!

En chefsanvändare kan konfigurera systemet så att det automatiskt godtar nya bilder eller avvaktar beslut om dem.

6.3.2 Händelsesekvens vid tomosyntesbildtagning

1. Vänta tills bildrekonstruktionen är klar.
2. Granska projektionsbilderna för att se om rörelse förekommit.
3. **Acceptera**, **avvisa** eller **avvakta** med beslut om bilderna. En miniatyrbild ersätter miniatyrbildvyn i fallstudieområdet på skärmen.



OBS!

En chefsanvändare kan konfigurera systemet så att det automatiskt godtar nya bilder eller avvaktar beslut om dem.

6.3.3 Så här accepterar du en avvisad bild

Om en avvisad bild är bättre än den nya bilden kan du hämta och använda den gamla bilden. Välj miniatyrbilden på skärmen *Procedur* för att granska bilden på nytt, och tryck sedan på **Acceptera** för att acceptera bilden.

6.3.4 Så här accepterar du eller avvisar en vilande bild

För att acceptera eller avvisa en vilande bild väljer du den vilande miniatyrbilden, och väljer sedan knappen **Acceptera** eller knappen **Avvisa**.



OBS!

En chefsanvändare kan konfigurera systemet så att det automatiskt godtar nya bilder eller avväktar beslut om dem.

6.4 Så här korrigeras och ombearbetas bilder med implantat

Du måste korrigera bilden om du tar en vy med ett implantat eller ett förskjutet implantat utan att knappen **Implant Present** (Implantat finns) har aktiverats.

6.4.1 Om bilden inte accepteras

Välj knappen **Implant Present** (Implantat finns) på skärmen *Procedure* (Ingrepp) för att ange att ett implantat finns. En bock visas på knappen och bilden ombehandles.



6.4.2 Om bilden accepteras

1. Välj bilden.
2. Välj knappen **Implant Present** (Implantat finns) på skärmen *Procedure* (Procedur) för att korrigera bilden. En bock visas på knappen och bilden ombehandles.
3. Välj knappen **Accept** (Acceptera) för att acceptera ändringarna.




OBS!

Den korrigeringade bilden skickas automatiskt till vald utmatningsanordning om systemet har ställts in på att skicka bilderna när man väljer knappen **Accept** (Acceptera).

6.5 Så här granskar du bilderna

Granskning av bilder innefattar användning av miniatyrbilder, bildgranskningsverktyg och olika visningssätt.

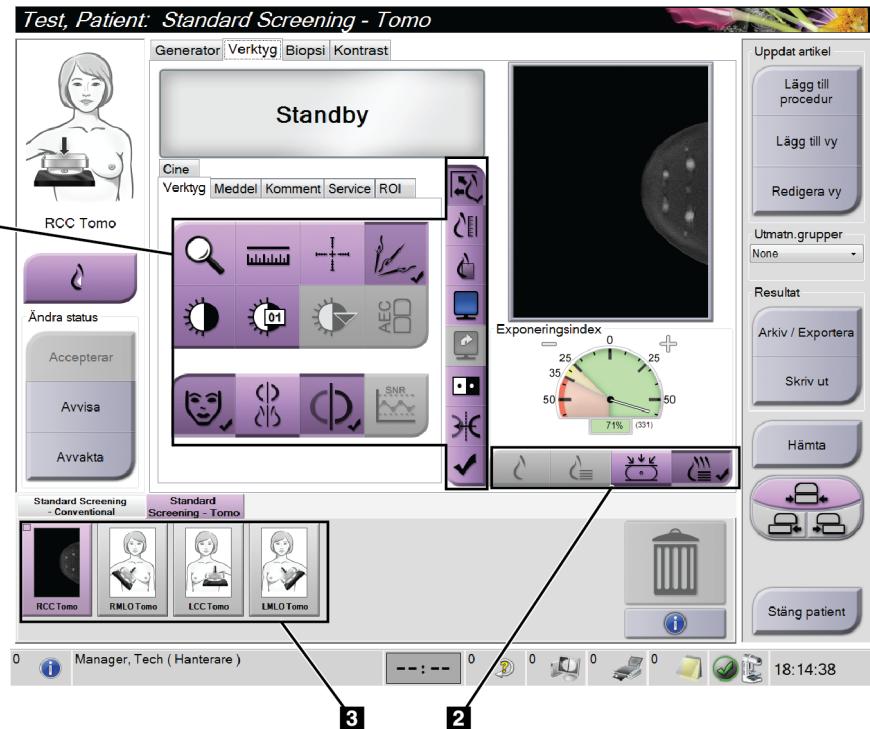


Figur 51: Fliken Verktyg (tomosyntestillval) visas

Figurförklaring

1. Bildgranskningsverktyg – se fliken [Fliken Bildgranskningsverktyg](#) på sidan 85 (Bildgranskningsverktyg).
2. Bildgranskningssätt – se [Visningssätt](#) på sidan 87.
3. Miniatyrbildvyer och miniatyrbilder. Välj en miniatyrbild för att visa den bilden på bildvisningsskärmen.

6.5.1 Fliken Bildgranskningsverktyg

På fliken **Verktyg** på skärmen *Procedur* finns bildgranskningsverktygen. En bock visas på ett aktivt verktyg.

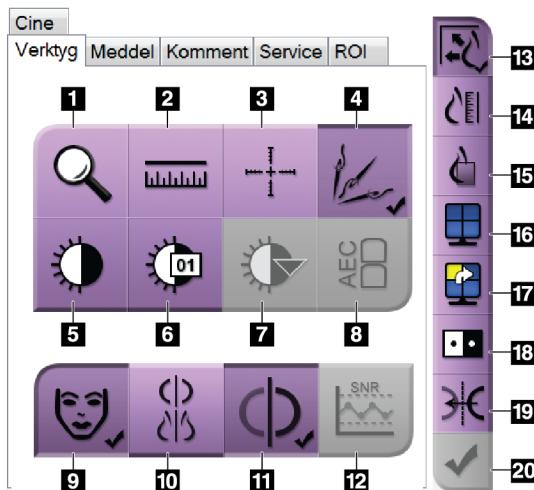


Figur 52: Bildgranskningsverktyg

Figurförklaring

1. Verktyget **Zoom** förstorar en del av bilden.
2. Verktyget **Ruler** (Linjal) mäter avståndet mellan två punkter.
3. Verktyget **Hårkors** visar ett hårkors på skärmen *Bildvisning*.
4. Verktyget **Demetalizer** (Avmetallisera) används för att bearbeta tomosyntesbilder som innehåller metallföremål.
5. Verktyget **Fönster/nivå** ändrar ljusstyrkan och kontrasten.
6. Verktyget **Finjustering av fönster/nivå** används för att mata in specifika fönster- och nivåvärden.
7. Verktyget **Val av LUT** bläddrar genom tillgängliga fönster-/nivåinställningar för en visad bild med LUT bifogad.
8. Knappen **AEC** visar de AEC-sensorområden som används för beräkning av exponeringen. Sensorområdena visas på skärmen *Bildvisning*.
9. Knappen **Patientinfo** aktiverar visning av patientinformationen.
10. Knappen **Automatisk upphängning** hänger automatiskt upp aktuell vald studie i konfigurationen 2 x 2.
11. Knappen **Automatisk parning** stänger av automatisk parning för den valda bilden i en konfiguration med flera bilder i samma vy.
12. Knappen **SNR/CNR** beräknar signal-brusförhållandet och kontrast-brusförhållandet på ACR-fantomet.
13. Knappen **Passa in i granskningssport** passar in bilden i bildrutan.
14. Knappen **Verlig storlek** visar bilden i bröstets verkliga storlek.
15. Knappen **Visa faktiska pixlar** visar bilden med full upplösning.
16. Knappen **Visning med flera-upp** väljer antalet bildrutor som ska visas.
17. Knappen **Bildruta framåt** ställer in aktiv Flera-upp-ruta.
18. Knappen **Invertera bild** ändrar svart till vitt och vitt till svart.
19. Knappen **Spegelvänd** vändar (spegelvänder) bilden.
20. Knappen **Markera för utskrift** markerar projektions- eller rekonstruktionsbilder från en tomosyntesbild för senare utskrift.

6.5.2 Kommentarflik

Du kan använda verktygen på fliken **Meddelanden** för att markera och lägga till kommentarer på bilder och skicka meddelanden om visad bild eller procedur. Med rullgardinsmenyn Utmatn.grupper för meddelanden längst ned på fliken kan du välja mottagare för dessa meddelanden.

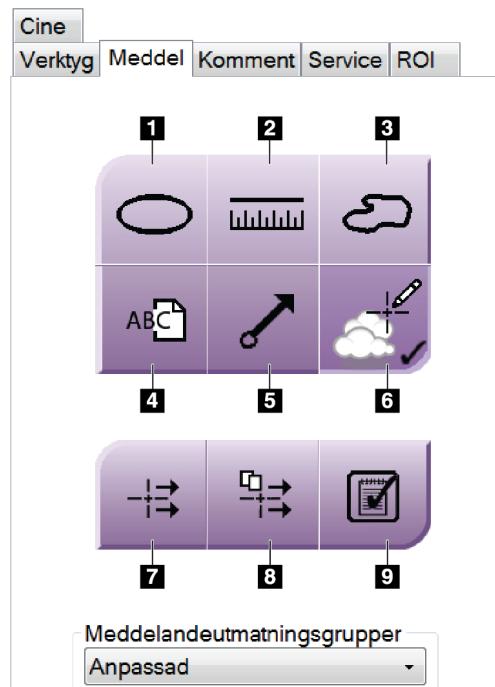

Figur 53: Verktyg på fliken Meddelanden

Figurförklaring

1. Verktyget **Oval** ritar en oval markering på bilden.
2. Verktyget **Linjal** mäter avståndet mellan två punkter.
3. Verktyget **Frihand** ritar en frihandsmarkering på bilden.
4. Verktyget **Text** lägger till en textanmärkning på bilden utan markering.
5. Verktyget **Pil** ritar en pilmarkering på bilden.
6. Verktyget **Markeringar** visar eller döljer markeringar och kommentarer på en bild.
7. Verktyget **Skicka meddelande** skickar ett meddelande om aktuell bild till vald destination.
8. Verktyget **Skicka alla meddelanden** skickar alla meddelanden om samtliga bilder i den öppnade proceduren till vald destination.
9. Verktyget **Granskad** ändrar patientens meddelandestatus till granskad.


6.5.3 Andra bildgranskningsverktyg

Övriga flikar

- Kommentarer:** Lägg till kommentarer till en bild.
- Service:** Markera en bild för servicebruk.
- ROI:** Rita ett intresseområde på bildvisningsmonitorn.
- Cine:** Visar en serie bilder som en film (tomosyntestillval)

Exponeringsindex


Exponeringsindexet är en bildkvalitetsguide. När exponeringsindexet visar det röda eller gula området ska den valda bilden granskas för brus, och beslut fattas om eventuell omtagning.

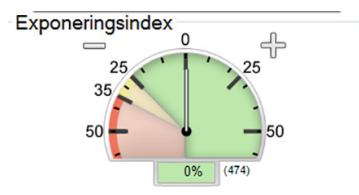

Figur 54: Exponeringsindex

Visningssätt

Använd knapparna i området Visningssätt på skärmen för att välja vilken typ av vy som ska visas på bildvisningsskärmen. Du kan ändra mellan konventionella bilder, genererad 2D, projektioner och rekonstruktioner för att visa kombinationsbilderna.

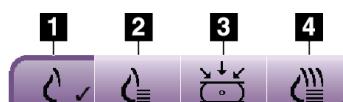


Figur 55: Visningssätt

Figurförklaring

- Knappen **Konventionella** visar konventionella bilder.
- Knappen **Genererad 2D** visar en konventionell 2D-bild som genereras från den tagna tomografiska bilden.
- Knappen **Projektioner** visar 15°-projektionsbilder.
- Knappen **Rekonstruktioner** visar rekonstruerade snitt.

6.5.4 Slice Indicator (Snittindikator)

Snittindikatorn på bildvisningsskärmen visar endast tomosyntesrekonstruktioner.

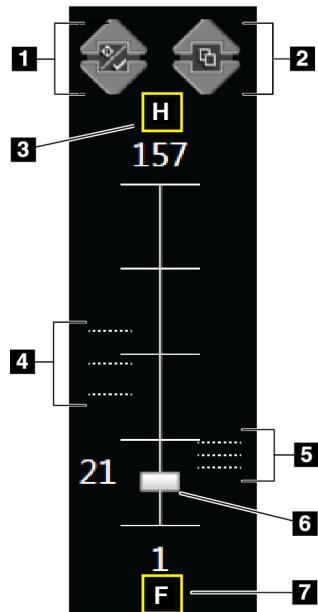

Figurförklaring

1. Uppåt- och nedåtpilarna kan användas för att växla mellan snitt som innehåller en mållesion och snitt som inte är markerade för utskrift.
2. Uppåt- och nedåtpilarna kan användas för att växla mellan snitt som innehåller kommentarer.
3. "H" (anatomisk referens till huvudriktning)
4. Snitt som innehåller mål eller som är markerade för utskrift.
5. Snitt som innehåller kommentarer.
6. Rullisterna används för att förflytta sig genom snitten i rekonstruktionen.
7. "F" (anatomisk referens till fotriktning)

Figur 56: Slice Indicator
(Snittindikator)

6.6 Gör så här för att skicka bilderna till resultatenheter

Du kan skicka bilderna till resultatenheter eller använda funktionen Arkiv/Exportera för att kopiera bilderna till tillfälliga lagringsmedier. Se avsnitten [Resultatgrupper](#) på sidan 72 och [Resultat på begäran](#) på sidan 74 för anvisningar.


6.7 Så här använder du I-View 2D-kontrast



OBS!

Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

- Välj fliken **Kontrast** för att komma åt funktionen I-View™ 2D-kontrast (CEDM).

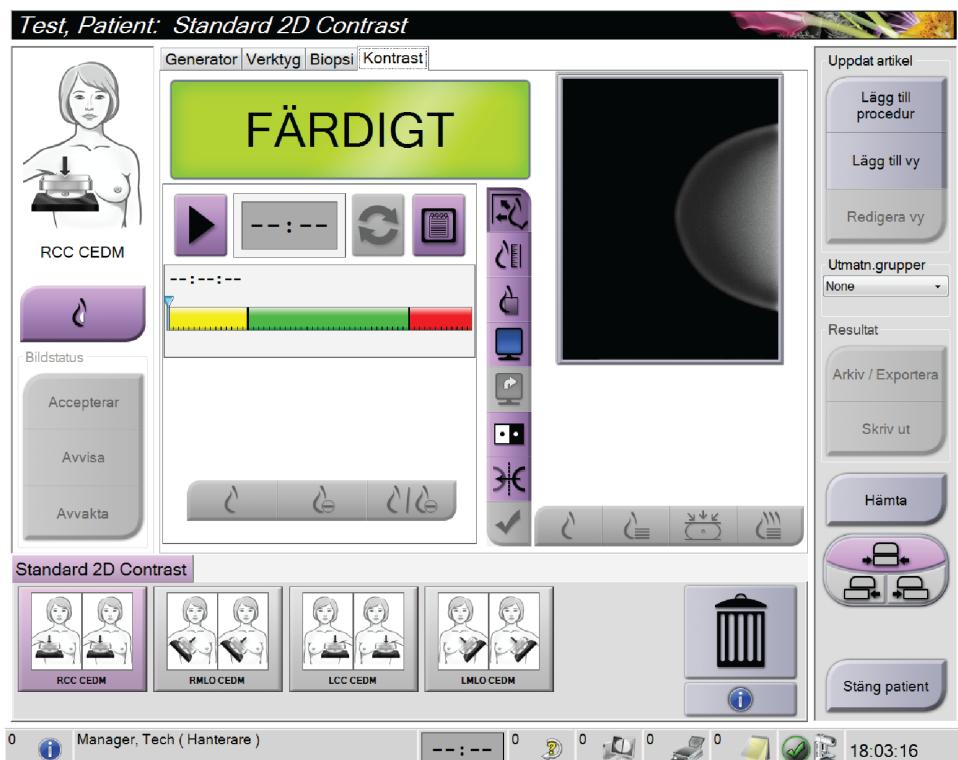

Figur 57: Skärmen 2D Contrast i I-View

- Utför kontrastinställningarna. Mer information finns under [Så här konfigureras kontrastinställningarna](#) på sidan 92.



OBS!

Kontrastinformation ingår i DICOM-rubriken på I-View-bilder.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 6: Bilder


- Välj knappen **Start** (pilen) för att påbörja kontrastdosen och starta timern.

Timern startar i **Väntetid**, vilken visas med gul bakgrund.



OBS!

Du kan justera standardlängden för timerfaserna **Väntetid** och **Optimal bildtagningsperiod**. Se avsnittet Så här ställer du in kontraststandarder.

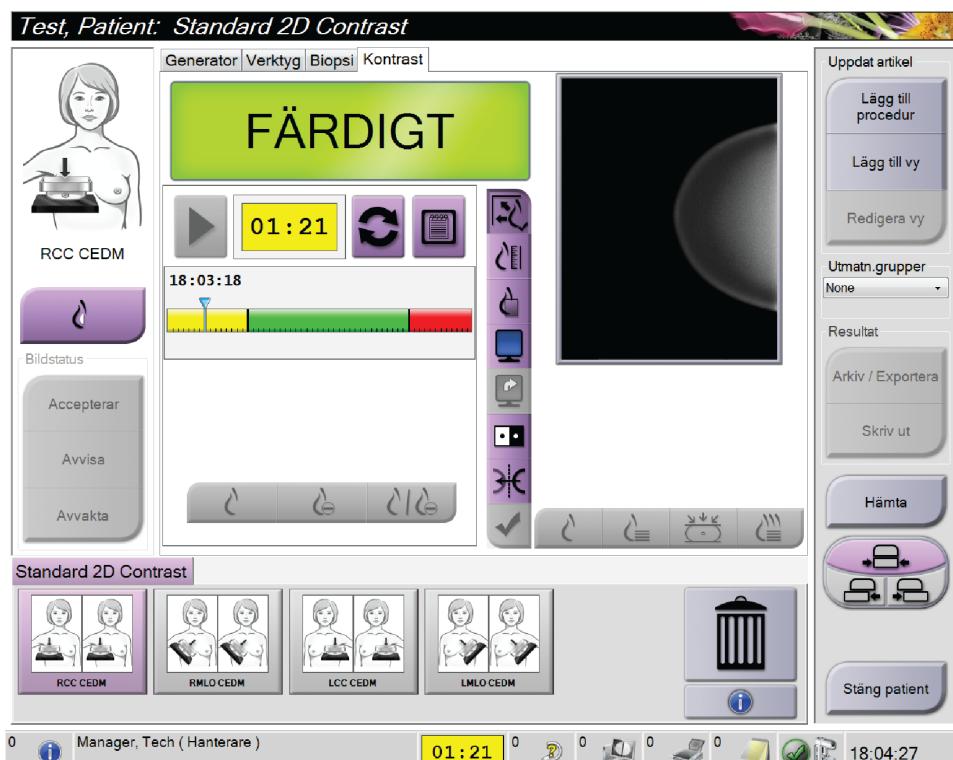

Figur 58: Väntetid på skärmen 2D Contrast (2D-kontrast) i I-View




OBS!

Timerfunktionen tillåter inte att du stoppar timern, endast att du startar och nollställer den. Timern stannar endast när du avslutar patientproceduren.

Efter **Väntetid** inleder timern **Optimal bildtagningsperiod**, som visas med grön bakgrund.

4. Ta bilderna under **Optimal bildtagningsperiod**.

När du tagit en bild visas en markering under timern.

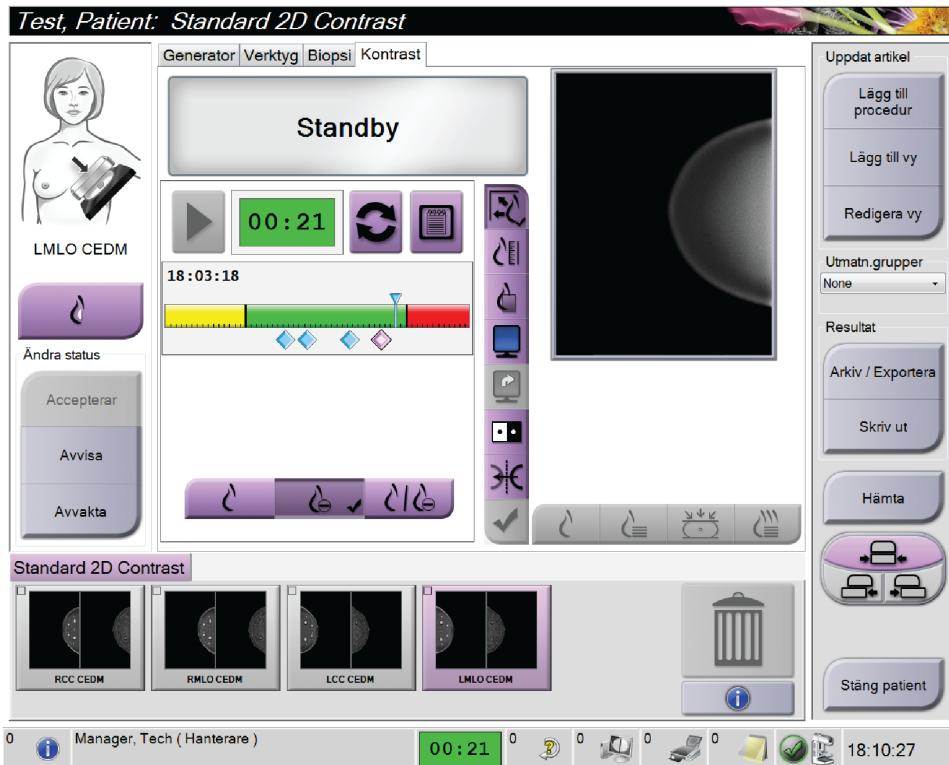

Figur 59: Skärmen 2D Contrast med optimal bildtagningsperiod i I-View

5. Välj knapparna för låg och hög exponering för att ta både låg- och högnergibilder.

- **Låg:** Konventionell lågnergibild
- **Reducerad:** Kontrasterad, reducerad bild
- **Låg och reducerad:** Visar både lågenergi- och reduktionsbilder sida vid sida på en delad skärm.



Försiktig!

Utförande av en I-View 2D Contrast-procedur ökar den tid som maskinen behöver för att återhämta sig innan fler bilder kan tas. När ikonen Systemstatus är röd




, visas en rekommenderad väntetid. Denna väntetid ger röntgenröret möjlighet att svalna, för att undvika skador som kan ogiltigförklara röntgenrörets

garanti. Se till att ikonen Systemstatus alltid är grön innan en I-View 2D-kontrastprocedur inleds. Om ikonen Systemstatus blir röd under en pågående procedur ska proceduren slutföras snabbt med ett minimalt antal exponeringar.

6.7.1 Så här konfigureras kontrastinställningarna

1. Från fliken **Kontrast**, välj knappen **Konfigurera kontrast** för att redigera kontrastinställningarna. Dialogrutan Kontrastinformation öppnas.

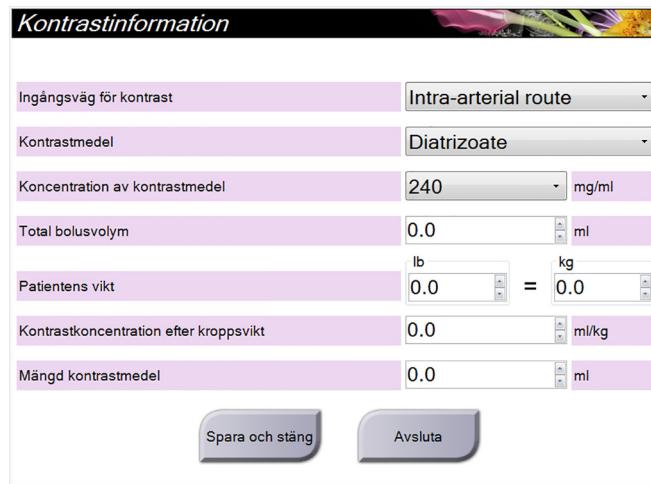

Figur 60: I-View 2D-kontrastinställningar


2. Använd rullgardinslistorna för att välja passande inställningar.
3. Mata in information i fältet **Kontrastkoncentration efter kroppsvikt** eller **Mängd kontrastmedel**. Det andra fältet fylls i automatiskt med korrekt information.
4. Välj **Spara och stäng**.

6.8 Provbildtagning

Systemet kan också användas för att ta bilder av biopsiprover.

Så här tar du bilder av prover:

1. Välj en patient i arbetslistan eller lägg till en ny patient manuellt.
2. Lägg till eller välj den önskade provbildtagningsproceduren.

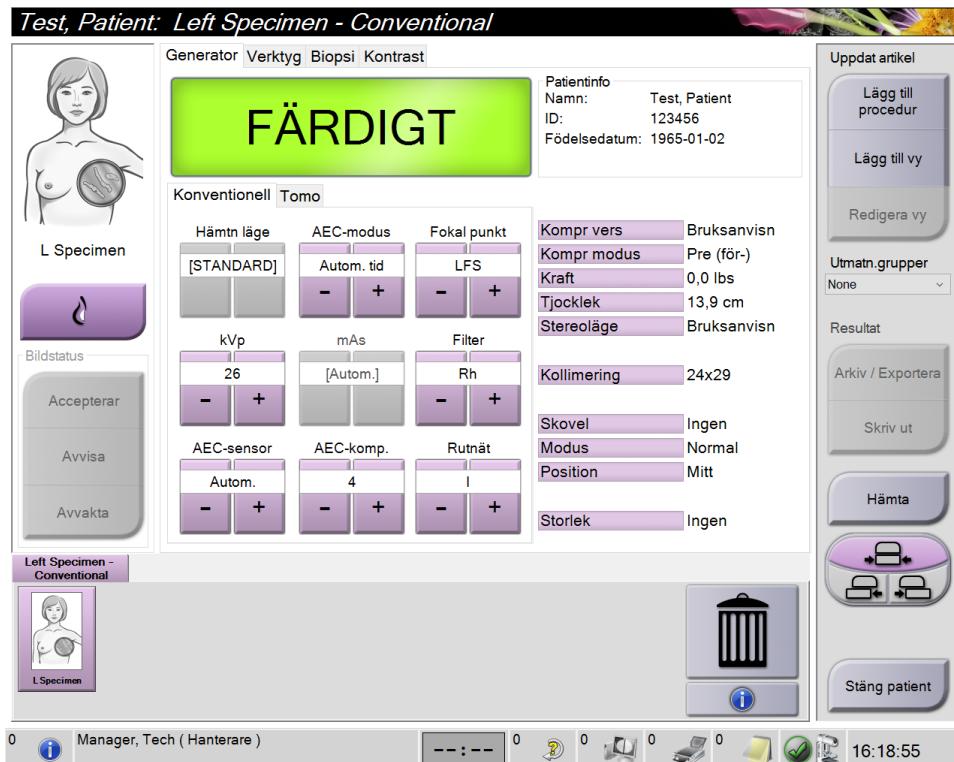


Figur 61: Procedurskärm för prover

3. Se till att C-armen är inställd på 0 grader.
4. Förbered provet och placera det på bilddetektorn.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 6: Bilder

5. Ta bilderna. För mer information om hur man tar bilder, se [Så här tar du en bild](#) på sidan 81.

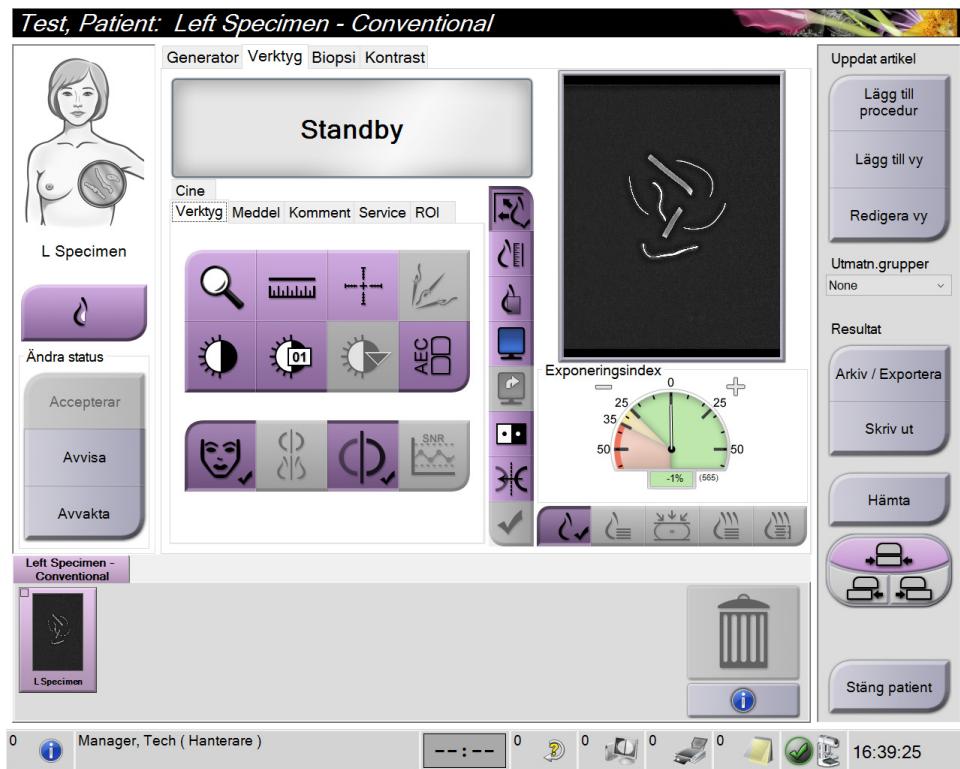

Figur 62: Skärmen Provbildtagning

6. Granska bilderna efter behov.

Kapitel 7 Tillbehör

Systemet kan utföra screening eller diagnostiska undersökningar med specifierade tillbehör. I detta kapitel beskrivs hur man använder samtliga tillgängliga systemtillbehör.




OBS!

Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

7.1 Så här installerar du tillbehör på C-armen

Det indragbara ansiktsskyddet, förstoringsstativet och lokaliseringshårvorsen har installerats i uttag på C-armen. Uttagen är märkta med iconer som visar vilket tillbehör som anslutits i uttaget. Varje tillbehör har två linjer. Rikta in tillbehör mot motsvarande linje på C-armen. När tillbehörskroken sitter vid korrekt djup kommer den andra, tunnare linjen att vara inriktad mot linjen på C-armen. I följande avsnitt finns installationsanvisningar för varje tillbehör.

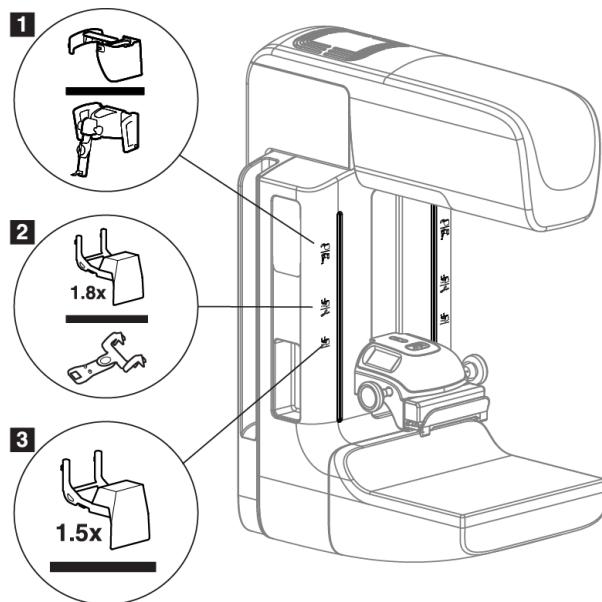

Figur 63: Tillbehör till C-armen

Figurförklaring

1. Uttag för indragbart ansiktsskydd (tomosyntestillval) eller ®-vägledningssystemet för bröstbiopsi (biopsitillval)
2. Uttag för 1,8x förstoringsstativ och lokaliseringshårvor
3. Uttag för 1,5x förstoringsstativ

7.2 Patientansiktsskydd

Ansiktsskyddet håller patientens huvud och ansikte på avstånd från strålfältet under undersökningen. Inspektera skyddet varje dag innan det används.



Varning!

Ansiktsskyddet måste vara anslutet vid alla exponeringar utom fallstudier med förstoring.



Varning:

Se till att ansiktsskyddet är helt inkopplat på C-armen. Felaktig installation av ansiktsskyddet kan leda till skada på patienten och användaren.




Varning!

Ansiktsskyddet skyddar inte patienten mot strålning.

7.2.1 Så här installerar och tar du bort det indragbara ansiktsskyddet

Så här installerar du det indragbara ansiktsskyddet:

1. Dra ut ansiktsskyddet helt till den yttre positionen.
2. Rikta in krokarna på ansiktsskyddet mot de monteringsuttag på C-armen som är markerade med en ikon för ansiktsskyddet.
3. Placera krokarna på båda sidorna om ansiktsskyddet i monteringsuttagen på C-armen. Upplåsningsspärren (se punkt 1 i följande figur) är i positionen Upp.
4. Tryck ned ansiktsskyddet till den nedre och låsta positionen. Upplåsningsspärren är i den nedre positionen när ansiktsskyddet är låst.

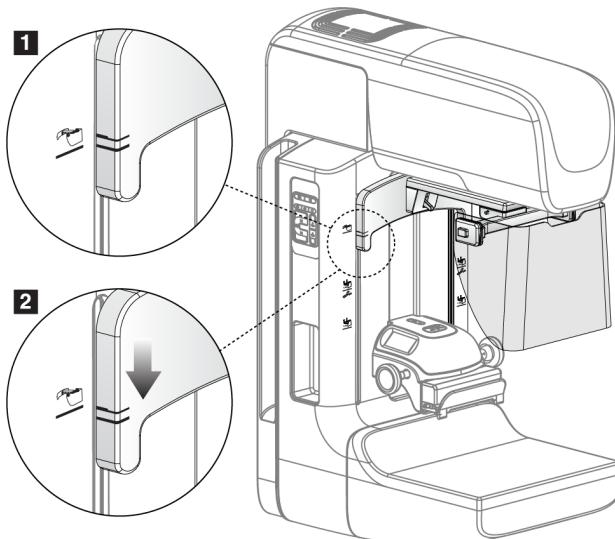

Figur 64: Rikta in det indragbara ansiktsskyddet på C-armen

Så här tar du bort det indragbara ansiktsskyddet:

1. Tryck och håll upplåsningsspärren (se punkt 1 i föregående figur) i positionen Upp.
2. Lyft upp ansiktsskyddet från skårorna och avlägsna det från C-armen.

7.2.2 Så här använder du det indragbara ansiktsskyddet



OBS!

Innan du kan göra en exponering måste du se till att ansiktsskyddet är helt utdraget eller helt indraget.


För att dra ut ansiktsskyddet drar du ut ansiktsskyddet från C-armen tills det spärras i den yttre positionen.

Så här drar du in ansiktsskyddet:


1. Tryck på en spärrfrikoppling (se punkt 2 i figur 58 [Användning av ansiktsskyddet](#) på sidan 98 – en på vardera sidan).
2. Tryck ansiktsskyddet mot C-armen tills det tar stopp.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 7: Tillbehör

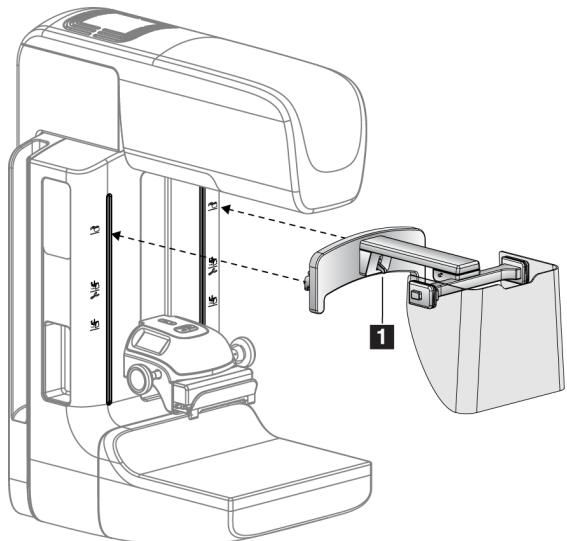


Figur 65: Installation av ansiktsskyddet

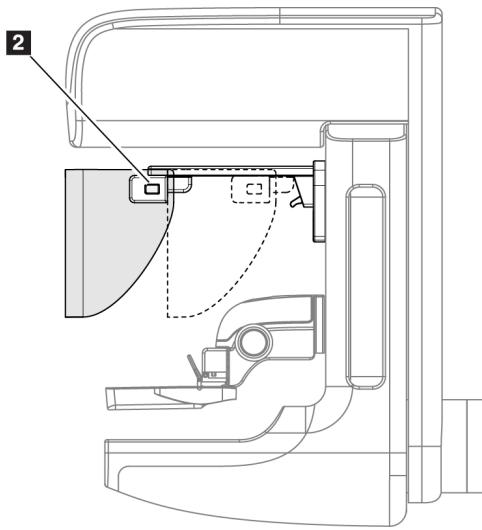

Figur 66: Användning av ansiktsskyddet

7.2.3 Så här installerar och tar du bort det konventionella ansiktsskyddet

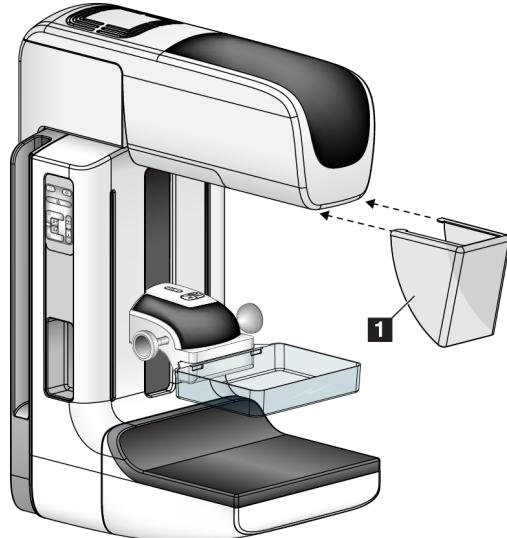

Figur 67: Så här installerar du det konventionella ansiktsskyddet

Så här installerar du det konventionella ansiktsskyddet:

1. Placera försiktigt flikändarna av ansiktsskyddet (punkt 1 på föregående figur) i uttagen på framsidan av röntgenstativet.
2. Skjut in ansiktsskyddet på röntgenstativet tills ansiktsskyddet läses fast.

Så här tar du bort det konventionella ansiktsskyddet:

1. Dra ansiktsskyddets sidor i vågrät riktning (bort från röntgenstativet).
2. Ta bort ansiktsskyddet.

7.3 Kompressionpaddlar



Anm.

Vissa paddlar är tillval och medföljer kanske inte ditt system.

Systemet kan identifiera varje paddel och automatiskt justera kollimatorn.

Vilka tillbehör som är tillgängliga beror på hur ditt system har konfigurerats.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 7: Tillbehör

Tabell 16: Tillgängliga tillbehör

Tillbehör		2D/BT	2D-screening
Paddlar för rutinscreening	18 x 24 cm	*	*
	24 x 29 cm	*	*
	Litet bröst	*	*
	18 x 24 cm SmartCurve™	*	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*	*
Kontakt- och punktkompressionpaddlar	10 cm kontakt	*	
	15 cm kontakt	*	
	7,5 cm punktkontakt	*	Se obs-meddelande.
	Punktkontakt utan ram	*	
Förstoringspaddlar	7,5 cm punktförstoring	*	
	10 cm förstoring	*	
	15 cm förstoring	*	
Lokaliseringsspaddlar	10 cm rektangulär, öppen	*	
	15 cm rektangulär, öppen	*	
	10 cm perforerad	*	
	15 cm perforerad	*	
	10 cm förstoringslokalisering, perforerad	*	
	10 cm förstoringslokalisering	*	
Ultraljudspaddel	15 cm stor ultraljud	*	
Patientansiktsskydd		*	*
Förstoringsstativ		*	
Hårkorsenhet för lokalisering		*	
Hårkorsenhet för förstoring		*	



OBS!


På 2D screeningsystemet får du endast använda 7,5 cm punktkontaktpaddel för kalibrering av kompressionstjocklek.




OBS!

Screeningpaddeln (24 x 29 cm) utan ram, SmartCurve-systemets paddel (24 x 29 cm), förstoringspaddlarna och lokaliseringsspaddlarna är INTE kompatibla med funktionen Flytta paddel.


7.3.1 Paddlar för rutinscreening

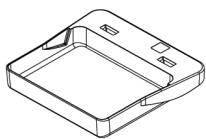

18 x 24 cm ramlös
screeningpaddel

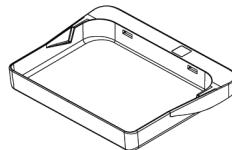

24 x 29 cm ramlös
screeningpaddel

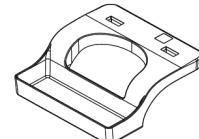

Ramlös paddel för
små bröst

SmartCurve-systemets paddlar



Varning!

SmartCurve™-systemets paddlar lever inte upp standarderna i IEC 60601-2-45 för minsta rörelseräckvidd som kräver att paddeln komprimeras till 10 mm. För att garantera tillräcklig kompression hos mycket små eller mycket tunna bröst, använd den vanliga platta screeningpaddeln.



SmartCurve-systemets 18 x 24 cm
ramlös screeningpaddel



SmartCurve-systemets 24 x 29 cm
ramlös screeningpaddel



OBS!

SmartCurve-systemets paddlar är eventuellt inte lämpliga för patienter med mycket små bröst. Om brösten inte kan immobiliseras eller komprimeras korrekt på grund av paddlarnas krökning, använd de vanliga platta screeningpaddlarna.



OBS!

SmartCurve-systemets paddlar rekommenderas inte för visning av sulcus intermammarius, rullade vyer eller mosaikvyer av mycket stora bröst. Använd de vanliga platta screeningpaddlarna för dessa vyer.



OBS!



SmartCurve-systemets paddlar passar för de flesta bröststorlekar. På grund av paddlarnas krökning kan vissa patienter som skulle använda den vanliga mindre platta paddeln positioneras enklare med den större SmartCurve-paddeln.



OBS!

SmartCurve-systemets paddlar är inte kompatibla med FAST-kompressionsläge.


7.3.2 Kontakt- och punktkomprimeringspaddlar

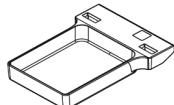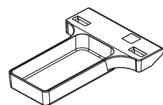

7,5 cm Punktkontaktpaddel
punktkontaktpaddel utan ram
 utan ram




7.3.3 Förstoringspaddlar

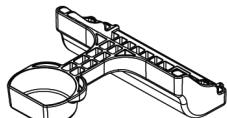

7,5 cm
punktförstoringspaddel




10 cm förstoringspaddel 15 cm förstoringspaddel

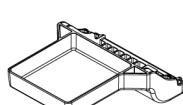


OBS!

Du kan inte ta tomosyntesbilder med förstoringspaddlarna.

7.3.4 Lokaliseringsspaddlar

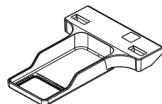

10 cm lokaliseringsspadel
med rektangulär öppning

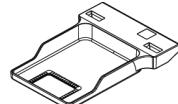


15 cm lokaliseringsspadel
med rektangulär öppning



10 cm lokaliseringsspadel
för förstoring



10 cm perforerad
lokaliseringsspadel

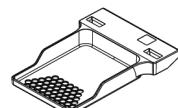


15 cm perforerad
lokaliseringsspadel



10 cm perforerad
lokaliseringsspadel för
förstoring

7.3.5 Stor ultraljudspadel

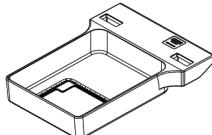


15 cm stor
ultraljudspadel

7.3.6 Så här installerar och tar du bort en kompressionspaddel

Se figur [Så här installerar du kompressionspaddeln](#) på sidan 104 för att se hur du installerar en kompressionspaddel:


1. Håll i paddelns framsida med ena handen framför kompressionsenheten.
2. Vinkla paddeln (mellan 30 och 45 grader) och placera sedan paddelns baksida i skåran på baksidan av kompressionsenheten (punkt 1).
3. Skjut paddeln längs skåran tills uttagen på paddelns ovansida befinner sig under spärrarna på paddelklämmen (punkt 2).
4. Tryck ihop paddelklämmen (punkt 3) med din lediga hand.
5. Vrid paddeln uppåt (punkt 4) och släpp sedan paddelklämmen så att paddeln läses fast.

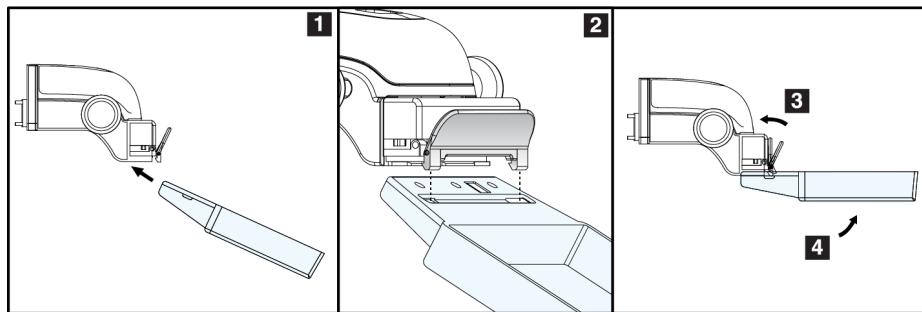

Figur 68: Så här installerar du komprimeringspaddel

Se figur 61 [Så här tar du bort komprimeringspaddeln](#) på sidan 104 för att se hur du tar bort komprimeringspaddeln:

1. Håll i paddeln med ena handen samtidigt som du använder den lediga handen för att trycka ihop paddelklämmen så att spärren släpper (punkt 1).
2. Sänk paddeln (punkt 2) och ta bort paddeln från komprimeringsanordningen (punkt 3) och släpp sedan paddelklämmen.

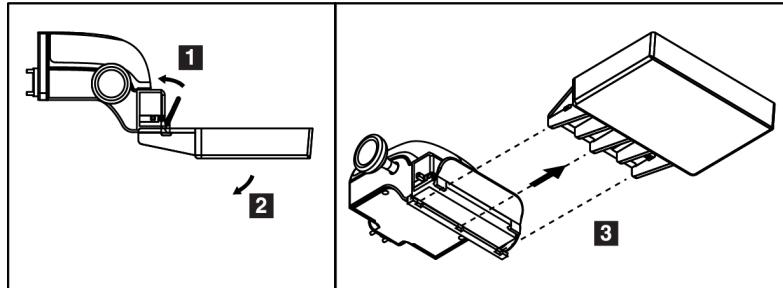

Figur 69: Så här tar du bort en kompressionspaddel

7.3.7 Underhåll och rengöring av paddlarna

Rengör paddlarna efter varje användningstillfälle. Se avsnittet [Underhåll och rengöring](#) på sidan 121 för rengöringsanvisningar.

7.3.8 Paddelförflyttning

Systemet tillåter att de flesta paddlar flyttas åt vänster eller höger från mittpositionen. Denna funktion underlättar undersökningar av små bröst med laterala vyer. När en lateral vy väljs flyttar systemet automatiskt kollimatorn för vald paddelposition.

**OBS!**

Den ramlösa screeningpaddeln på 24 x 29 cm, SmartCurve-systemets paddel på 24 x 29 cm och förstoringspaddlarna är INTE kompatibla med funktionen Flytta paddel.

7.3.9 FAST-komprimeringsläge

Om FAST-kompressionsläge

Kompressionsläget FAST (Fully Automatic Self-adjusting Tilt, helautomatisk självjusterande vinkling) ska användas när bröstvävnadens sammansättning inte medger enhetlig kompression över hela bröstet med en platt kompressionspaddel. För sådana patienter kan otillräcklig kompression leda till att en bild verkar vara ofokuserad i den främre regionen, både på grund av ofrivillig rörelse och otillräcklig kompression.

Kompressionsläget FAST som används för denna typ av bröst ger följande egenskaper:

- Minskade rörelseartefakter eftersom kompressionen blir mer effektiv
- Mer enhetlig kompression, från bröstväggen till bröstvårtan.
- Högsta patientkomfort eftersom överkompression vid bröstväggen förhindras

När kompressionsläget FAST är valt vinklas paddeln automatiskt när kompressionen sker. Paddeln börjar i plan position tills en viss kompressionskraft har applicerats. Sedan vinklas paddeln tills maximal vinkel nås.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 7: Tillbehör

Komprimeringsläget FAST kräver inte alltför kraftig komprimering, men du måste använda tillräcklig komprimering för att förhindra att bröstet rör sig. Du bör använda en konsekvent komprimeringskraft, särskilt för relaterade vänster och höger vyer.

Komprimeringsläget FAST är kanske inte det bästa för bröst som är lika eller symmetriska i tjocklek från bröstväggen till bröstets främre del.



OBS!

Endast den ramlösa screeningpaddeln på 18 x 24 cm och den ramlösa screeningpaddeln på 24 x 29 cm är kompatibla med FAST-kompressionsläge.




OBS!

Systemet piper när FAST-kompressionsläget är engagerat, men inte är kompatibelt med den aktuella paddeln.

Så här används gliddelen för FAST-kompressionsläge

Aktivera kompressionsläget FAST genom att trycka på gliddelen (från valfri sida) tills bokstaven F syns och regeln klickar på plats.

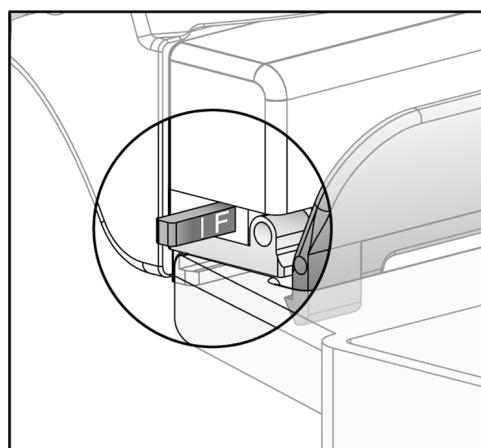


Figur 70: Regeln för FAST-kompressionsläget

7.4 Förstoringsstativ

Förstoringsstativet har en bröstplattform och ett bukskydd. När förstoringsstativet är installerat dras rastret automatiskt tillbaka och röntgenexponeringsteknikerna ställs in på standardvärdena för förstoring. Använd endast förstoringspaddlarna när förstoringsstativet är installerat (se avsnittet [Förstoringspaddlar](#) på sidan 102).

7.4.1 Så här installerar eller tar du bort det förstoringsstativet

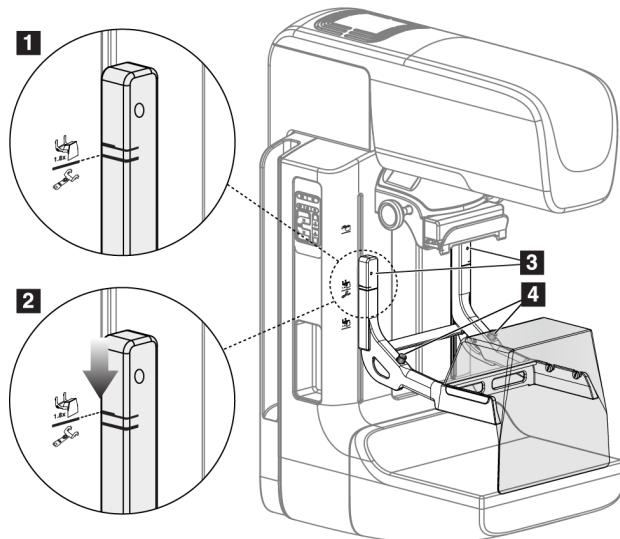

Figur 71: Installera förstoringsstativet

Så här installerar du förstoringsstativet

1. Ta bort ansiktsskyddet (se [Patientansiktsskydd](#) på sidan 96).
2. Ta bort kompressionspaddeln (se avsnittet [Så här tar du bort kompressionspaddeln](#) på sidan 104).
3. Höj kompressionsenheten så långt det går.
4. Håll stativet på vardera sidan precis nedanför de svarta knapparna, punkt 4. Tryck inte på de svarta knapparna.



OBS!

De svarta knapparna ska endast användas när förstoringsstativet tas bort.



OBS!

Det finns två uppsättningar monteringsuttag för förstoringsstativet – den ena är avsedd för 1,8x och den andra för 1,5x. Se nummer 2 och 3 i figur [Tillbehör till C-armen](#) på sidan 95.

5. Rikta in de tjocka svarta linjerna på förstoringsstativet mot de tjocka svarta linjerna på C-armen. När dessa linjer möts är krokarna på förstoringsstativet inriktade mot monteringsuttagen på C-armen. Se punkt 1 i föregående figur.
6. Placera krokarna på förstoringsstativet i uttagen på C-armen. Skjut förstoringsstativet nedåt tills de smala linjerna på förstoringsstativet möter den svarta linjen på C-armen. Se punkt 2 i föregående figur.
7. Låsstiften glider in i hålen och låser fast enheten. Det hörs ett ljudligt klick.



OBS!


Om förstoringsstativet inte installeras på korrekt sätt visas en indikator med ett rött utstickande skaft. Se punkt 3 i föregående figur. När stativet är korrekt installerat är denna indikator indragen.

Så här tar du bort förstoringsstativet

1. Ta bort förstoringspaddeln.
2. Håll i förstoringsstativets handtag och tryck på de svarta knapparna.
3. Lyft och ta bort enheten från C-armen.

7.5 Hårkorsenheter

7.5.1 Så här installerar du eller tar bort lokaliseringshårkorsenheten

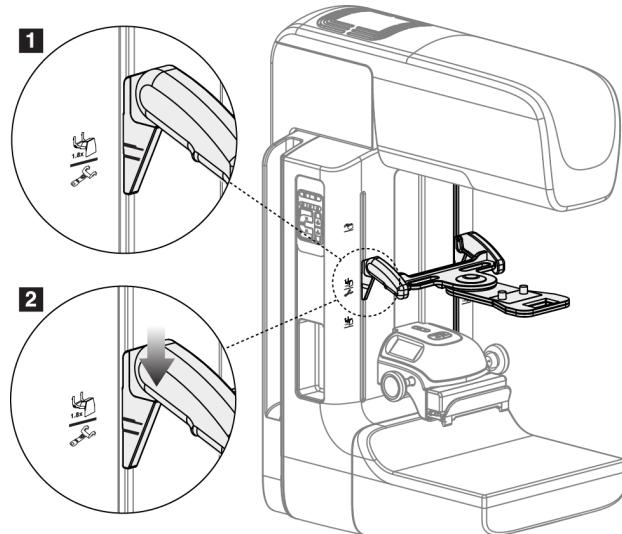

Figur 72: Installation av lokaliseringshårkorsenheten

Så här installerar du lokaliseringshårkorsenheten

1. Ta bort ansiktsskyddet (se [Patientansiktsskydd](#) på sidan 96).
2. Flytta kompressionsenheten nedanför monteringsuttagen, som är markerade med en hårkorsikon. Se nummer 2 i figuren [C-arm Accessories](#) på sidan 95 (Tillbehör till C-armen).
3. Håll hårkorsenheten i handtagen och rikta in de svarta linjerna på enheten mot linjen på C-armen. Tryck ihop frikopplingsspakan.
4. Placera krokarna i uttagen på C-armen.
5. Skjut krokarna nedåt tills de smala linjerna på hårkorset möter den svarta linjen på C-armen.
6. Släpp spakan. Låsstiften glider in i hålen och låser fast enheten på plats.


Så här tar du bort lokaliseringshårkorsenheten

1. Tryck ihop frikopplingsspakan.
2. Lyft upp ramen mot ovansidan och avlägsna krokarna från uttagen på C-armen.

7.5.2 Så här använder du lokaliseringshårkorsenheten

1. Hårkorsenheterna vrids åt vänster eller höger på röntgenrören. Vrid bort anordningen från röntgenstrålen under en exponering som görs med lokaliseringsspaddeln.
2. När du vrider tillbaka anordningen mot framsidan för att använda den måste du kontrollera att rotationen fortsätter tills anordningen klickar på plats.
3. Vrid upp ljusfältslampan.
4. Vrid på de båda hårkorsvreden tills bröstets skugga motsvarar hårkorsen på den bild som identifierar den misstänkta lesionen.

7.5.3 Så här installerar du eller tar bort det förstoringshårkorsenheten

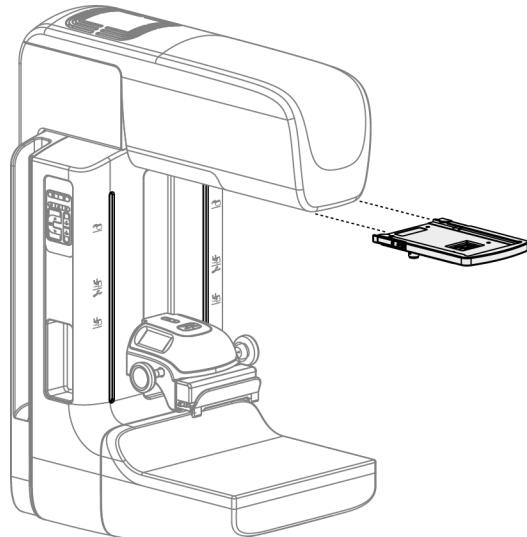

Figur 73: Så här installerar du eller tar bort det förstoringshårkorsenheten

Så här installerar du förstoringshårkorsenheten

1. Ta bort ansiktsskyddet (se avsnittet [Så här installerar och tar du bort det konventionella ansiktsskyddet](#) på sidan 99).
2. Rikta in förstoringshårkorsenheten mot röntgenröret.
3. Skjut in hårkorsenheten på de skenor på vardera sidan om röntgenröret som används av det konventionella ansiktsskyddet. Kontrollera att anordningen läses på plats.
4. Installera övriga förstoringsenheter.

Så här tar du bort förstoringshårkorsenheten

1. Håll i anordningens sidor.
2. Dra anordningen mot dig och ta bort den från röntgenröret.

7.5.4 Så här riktar du in lokaliseringshårkorsenheten

**OBS!**

Om hårkorslampans rektangel ser skev ut mot öppningen på paddeln, utför följande justeringsprocedur.

1. Installera den rektangulära lokaliseringsspaddeln.
2. Lossa justeringslässkruven på hårkorsenhetens undersida.
3. Placera ett vitt papper på bildmottagaren för att göra hårkorsens skuggor lättare att se.
4. Flytta lokaliseringsspaddeln cirka 6 cm ovanför bildmottagaren.
5. Slå på ljusfältet.
6. Vrid på hårkorsenheten tills ljusrektangeln är inriktad mot lokaliseringsspaddelns öppning.
7. Dra åt justeringsskruven.

Kapitel 8 Kliniska ingrepp



Varning:

Denna enhet är avsedd att fästas i golvet. Om du använder systemet utan att det är korrekt fäst vid golvet kan leda till en överbalanssituation som kan leda till skada eller dödsfall.



Varning!

C-armens rörelser är motordrivna.



Varning!

Håll alltid patientens händer borta från alla knappar och brytare.



Varning!

Placera respektive fotpedal på en plats så att nödstoppsbrytarna fortfarande finns inom räckhåll när pedalen används.

I händelse av en nödsituation kan vilken som helst av nödavstängningsknapparna användas för att omedelbart stänga av strömmen och stoppa utrustningens rörelse.



Varning:

Innan du inleder en rörelse av kompressionsarmen eller rörarmen ska du se till att rörelsebanan är fri från personer och hinder.



Varning!

Placera båda fotpedalerna på avstånd från patienten och C-armsområdet för att förhindra oavsiktlig användning av fotpedalen. Om patienten sitter i rullstol ska fotpedalerna placeras på avstånd från området.

8.1 Standardarbetsflöde

8.1.1 Förberedelser

1. Välj en patient i arbetslistan eller lägg till en ny patient manuellt.
2. Identifiera vilka procedurer som krävs.
3. Välj inställd resultatenhet om en annan eller ytterligare en enhet behövs.
4. Installera paddeln.
5. Välj den första vyn.


8.1.2 Vid gantryt

1. Ställ in C-armens höjd och rotationsvinkel.
2. Kontrollera att ljusfältet belyser korrekt område.
3. Positionera patienten och komprimera bröstet.

8.1.3 Vid bildtagningsstationen

1. Ställ in exponeringsteknik.
2. Ta bilden.
3. Släpp patienten.
4. Förhandsgranska bilden. Titta på exponeringsindex för att kontrollera att exponeringen ligger inom acceptabelt område.
5. Du kan använda verktyget för fönster/nivå eller andra bildgranskningsalternativ under förhandsgranskningen av bilden.
6. Acceptera, avvisa eller låt bilden vara vilande.
7. Utför bildtagningscykeln efter vad som krävs för de procedurer som begärts.
8. Lägg till ytterligare vyer eller procedurer om det behövs.
9. Se till att patienten befinner sig på säkert avstånd från systemet efter att du genomfört undersökningen.
10. Avsluta proceduren.

8.2 Exempel på screeningprocedur

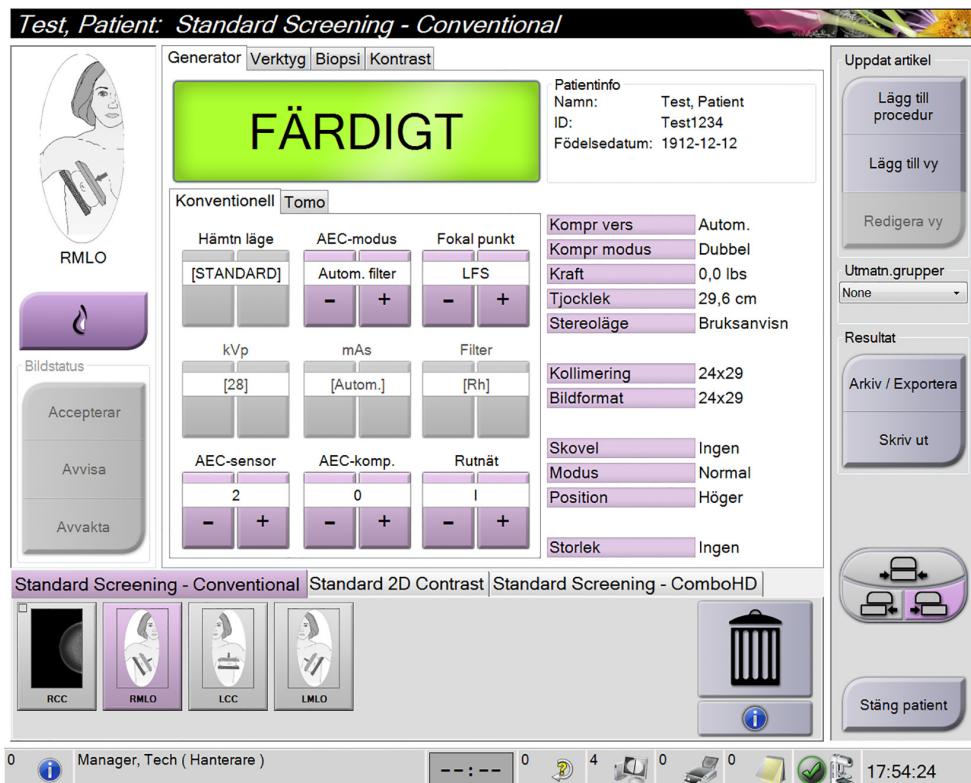

Figur 74: Exempel på en screeningprocedurskärm

8.2.1 Placera patienten

1. Lyft eller sänk bröstplattformen för patienten.
2. Flytta röntgenröret till projekionsvinkeln.
3. Flytta patienten till C-armen.
4. Positionera patienten efter behov.
5. Placera patientens arm eller hand på patienthandtaget eller mot kroppen sida.
6. Säg åt patienten att hålla sig borta från systemkontrollerna.
7. Komprimera brösten.
 - Använd om möjligt fotpedalskontrollerna för att kunna kontrollera kompressionen och justera C-armens höjd utan att använda händerna.
 - Använd ljusfältslampen om det behövs för att se röntgenfältet.
 - Applicera kompression långsamt. Stoppa och justera patientens position efter behov.
 - Använd handrattarna för slutlig kompression.

8.2.2 Ställa in exponeringsteknik

Välj exponeringsteknik för proceduren. Se [Så här ställer du in exponeringsparametrarna](#) på sidan 80 för information.

8.2.3 Utför exponeringen

1. Kontrollera att alla exponeringsfaktorer har korrekta inställningar.
2. Om systemet inte visar Klart inom 30 sekunder, kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och att paddeln är låst på plats. När generatorn visar status **Klart** är systemet klart för exponering.



Varng!


Detta system kan vara farligt för patient och användare. Följ alltid säkerhetsanvisningarna för röntgenexponering.

3. Håll **röntgenknappen** nedtryckt och/eller **röntgenfotpedalen** nedtrampad intryckt under hela exponeringen.

Under exponeringen:


- Ett systemmeddelande med strålningssymbolen och en gul bakgrund visas (se följande figur)
- En signal ljuder under hela exponeringen

Ljudsignalens funktion under kombiexponering har ändrats för att undvika att röntgenknappen och/eller röntgenfotpedalen släpps för tidigt av användarna. Ljudsignalen är nu en kontinuerlig tonsekvens. Signalen ljuder under hela kombibildtagningen, från det att exponeringen inleds tills den konventionella vyn är avslutad. Ljudsignalen avbryts inte mellan brösttomosyntesen och de konventionella digitala mammografiexponeringarna. Släpp inte exponeringskontakten under ljudtonen.

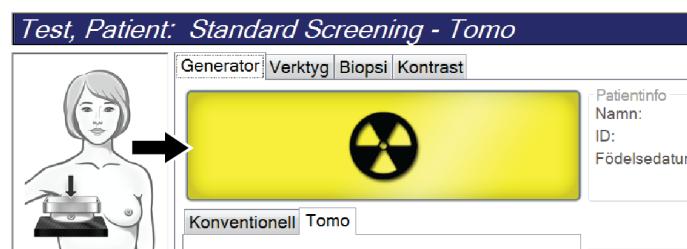

Figur 75: Exponering pågår

4. När ljudsignalen tystnar och systemmeddelandet **Standby** visas (se följande figur) kan du släppa upp **röntgenknappen** och/eller **röntgenfotpedalen**.

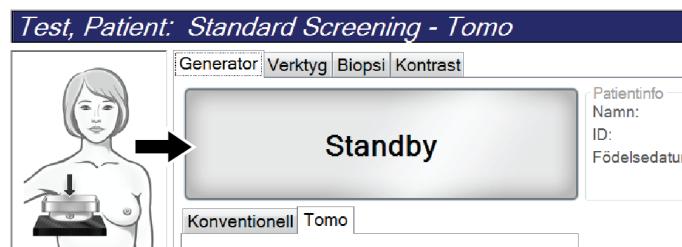

Figur 76: Exponeringen är klar

5. Frikoppla kompressionenheten. Om den automatiska frikopplingsfunktionen har ställts in höjs kompressionenheten automatiskt efter exponeringen.

8.3 Procedur för nällokalisering vid tomosyntes

1. Installera en lokaliseringsspadel och installera hårkorsenheten vid röntgenröret. Se till att hårkorsets guider är utanför röntgenfältet.
2. Öppna en ny procedur med en Tomo- eller TomoHD-vy för din inställning.
3. Placera patienten och komprimera.
4. Ta en tomoöversiktstbild. Se till att ROI syns inuti lokaliseringsspadelns öppning. Placera annars patienten på nytt och upprepa.
5. Observera kompressiontjocklek och notera tjockleken på överflödig vävnad genom lokaliseringsspadelns öppning.
6. Bläddra genom rektionstruktionssnitten för att identifiera var lesionen kan ses bäst. Notera snittets nummer (varje snitt är 1 mm tjockt).
7. Placera bildtagningsstationens hårkors på lesionen.
8. Hitta koordinaterna för gantryhårkorsenheten genom att bläddra igenom rekonstruktionerna tills du kan identifiera de alfanumeriska koordinaterna.
9. Beräkna näldjupet:


värde	Exempel
Bröstkompressiontjocklek	50 mm
(+) Tjocklek för vävnaden genom paddelns öppning	+ 7 mm
(-) Snittnummer där lesionen påträffades	-30 mm
(+) Valfritt avstånd förbi ROI för ledtråden	+5–15 mm
(=) Näldjupet för lokaliseringstråden	32–42 mm

10. Slå på kollimatoralampen och rikta in hårkorsenheten vid röntgenröret så att den matchar bildtagningsstationens hårkors.
11. Placera och för in nålen.
12. Flytta hårkorsenhetens guider utanför röntgenfältet.
13. Ta en ny tomografibild för att verifiera att nålen är på rätt plats. Beräkna om en korrigering är nödvändig genom att jämföra snittnumret vid nälnens spets och snittnumret för lesionen.
14. För in ledtråden genom nälen och avlägsna nälen, om så önskas, för att lämna ledtråden på plats.
15. Om så önskas kan följande steg utföras:
 - a. Ta en konventionell bild eller tomografibild för att verifiera korrekt ledtrådspelareng.
 - b. Ta en ortogonal vy för att dokumentera trådens eller nälnens placering (antingen som tomografibild eller konventionell bild).
16. Lägg endast till en vyikon åt gången för ortogonala vyer för att utesluta risken för att paddeln flyttas på grund av eventuell minimal kompression.

Exempel: Beräkna nåldjup med tomosyntes

I det här exemplet används värdena från tabellen på föregående sida och hänvisar till följande figur.

Beräkna nåldjupet från vävnadens hudlinje (nr 1) snarare än från lokaliseringsspaddeln (nr 9). Stick in nälen minst 27 mm (bröstkompresion + utbuktande vävnad).

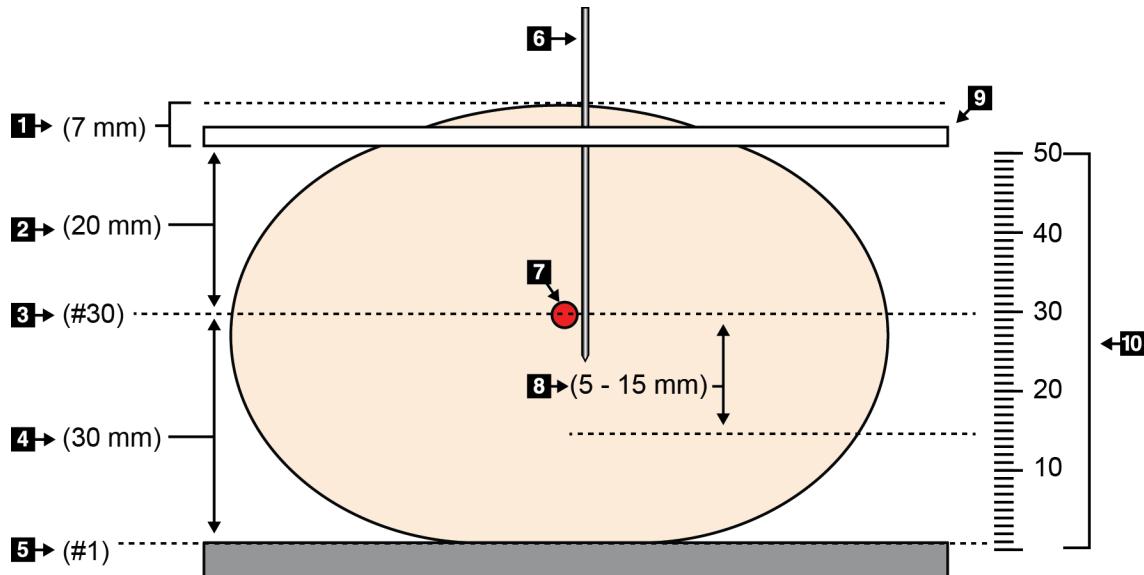

Figur 77: Beräkna nåldjupet

Punkt	Beskrivning	Exempel
1	Tjocklek för vävnaden genom lokaliseringsspadelns öppning	7 mm
2	Tjocklek uppmätt från lokaliseringsspadeln till lesionen	
3	Lesionens snittnummer (det snittnummer där lesionen kan ses bäst [tydligast])	30 mm
4	Tjocklek uppmätt från detektorn till lesionen	
5	Snittnummer 1	
6	Nål	
7	Lesion	
8	För in nälen 5–15 mm förbi lesionen (valfritt)	5–15 mm
9	Lokaliseringsspadel	
10	Tjocklek för bröstkompresionen från detektorn (0 mm) till lokaliseringsspadeln (50 mm i detta exempel)	50 mm

Kapitel 9 Underhåll och rengöring

9.1 Rengöring

9.1.1 Allmän information om rengöring

Före varje undersökning ska du rengöra och använda desinfektionsmedel på varje del av systemet som vidrör en patient. Ägna paddlarna och bildmottagaren särskild uppmärksamhet.

**Försiktig:**

Använd inte någon värmekälla (som en värmedyerna) på bildmottagaren.

Var försiktig med komprimeringspaddlarna. Inspektera paddlarna. Byt ut paddeln om du ser en skada.

9.1.2 För allmän rengöring

Använd en luddfri trasa eller duk och applicera utspätt diskmedel.

**Försiktig:**

Använd minsta möjliga mängd rengöringsvätskor. Vätskorna får inte flöda eller rinna.

Om mer än tvål och vatten behövs rekommenderar Hologic något av följande:

- 10 % klorinlösning och vatten med en del kommersiellt tillgänglig klorinlösning (normalt 5,25 % klorin och 94,75 % vatten) och nio delar vatten. Blanda denna lösning dagligen för bästa resultat.
- Kommerciellt tillgänglig isopropylalkohollösning (70 % isopropylalkohol efter volym, inte utspätt)
- Högst 3 % koncentration av väte peroxidlösning

Efter att ha applicerat någon av ovanstående lösningar använder du en duk och applicerar utspätt diskmedel för att rengöra alla delar som vidrör patienten.

**Varning!**

Kontakta din representant för infektionskontroll för att avlägsna kontamination från paddeln om en paddel vidrör potentiellt smittsamma material.

**Försiktig:**

För att undvika skada på de elektroniska komponenterna, använd inte desinfektionsmedel i sprayform på systemet.

9.1.3 Gör så här för att undvika möjlig skada på person eller utrustning

Använd inte korroderande lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller polish. Välj ett rengörings-/desinfektionsmedel som inte skadar plast, aluminium eller kolfiber.

Använd inte starka rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, hög alkoholkoncentration eller metanol av någon koncentration.

Utsätt inte utrustningens delar för ånga eller sterilisering i hög temperatur.

Låt inte vätska tränga in i utrustningens inre delar. Spraya inte rengöringsmedel eller vätskor på utrustningen. Använd alltid en ren trasa och applicera sprayen eller vätskan på trasan. Om vätska tränger in i systemet ska du koppla ifrån strömförseringen och undersöka systemet innan du tar det i bruk igen.



Försiktig:

Felaktiga rengöringsmetoder kan skada utrustningen, minska bildtagningsprestandan eller öka risken för elektrisk stöt.

Stäng omedelbart av systemet om det spills vätska på det. Sätt inte på systemet förrän vätskan har torkat helt och hållet. Stänk eller spruta inte rengöringslösning på systemet.

Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av den produkt du använder för rengöring. Dessa anvisningar omfattar instruktioner och försiktighetsåtgärder för applicering och kontakttid, förvaring, krav på sköljning, skyddsklädsel, hållbarhet och kassering. Följ instruktionerna och använd produkten med den säkraste och mest effektiva metoden.

9.1.4 Bildtagningsstation

Så här rengör du bildvisningsskärmen

Undvik att vidröra skärmen på bildvisningsmonitorn.

Var försiktig när du rengör utsidan av LCD-skärmen. Använd alltid en ren, mjuk, luddfri trasa för att rengöra skärmområdet. Mikrofibertrasor rekommenderas.

- Använd aldrig spray eller låt vätska rinna över skärmen.
- Applicera aldrig tryck på skärmområdet.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller fluorider, ammoniak, alkohol eller ämnen med slipverkan.
- Använd aldrig natriumhypoklorit.
- Använd aldrig stålull.
- Använd aldrig en svamp med skrubbyta.

Det finns många kommersiellt tillgängliga produkter för rengöring av LCD-skärmar. Vilken som helst av dessa produkter som inte innehåller de ingredienser som anges ovan och som används enligt tillverkarens anvisningar kan användas.

Så här rengör du pekskärmsdisplayen

Använd fönsterputs eller ett medel för glasrengöring för att rengöra pekskärmen.

Applicera rengöringsprodukten på en trasa och rengör sedan pekskärmen. Applicera inte rengöringsprodukten på skärmen utan trasa.

Så här rengör du tangentbordet

Torka av ytorna med en CRT-duk. Rengör tangentbordet med dammsugare om det behövs. Kontakta teknisk support för utbyte om vätska tränger in i tangentbordet.

Så här rengör du fingeravtrycksläsaren



Försiktig:

För att skydda fingeravtrycksläsaren:

- Applicera inte någon flytande produkt direkt på fingeravtrycksläsarens fönster.
 - Använd inte produkter som innehåller alkohol.
 - Placera aldrig fingeravtrycksläsaren under vätska.
 - Applicera aldrig något tryck på fingeravtrycksläsarens fönster med slipande material.
 - Tryck inte på fingeravtrycksläsarens fönster.
-

För att rengöra fingeravtrycksläsarens fönster gör du något av följande:

- Applicera vidhäftningssidan av självhäftande tejp och avlägsna sedan tejpen.
- Applicera en ammoniakbaserad produkt på en trasa och rengör fingeravtrycksläsarens fönster med den.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 9: Underhåll och rengöring

9.2 Underhåll

9.2.1 Schema för förebyggande underhåll

Tabell 17: Användarens förebyggande underhåll

Beskrivning av underhålluppgiften	Rekommenderad frekvens					
	Varje användningstillfälle	Veckovis	Varannan vecka	Månadsvis	Varannan månad	Varje halvår
Rengör och desinficera paddeln	✓					
Rengör och desinficera bröstplattformen	✓					
Inspektera alla paddlar för skada visuellt	✓					
Kalibrering av den platta detektorn*		✓				
Utvärdering av artefakt*		✓				
Fantombild*		✓				
Mätningar av signal-brus/kontrast-brus*		✓				
Geometrisk kalibrering (tomasystestillval)*						✓
Indikator för kompressionstjocklek*			✓			
Visuell checklista*				✓		
Kompression*						✓

* Se kvalitetskontrollhandboken

Tabell 18: Förebyggande underhåll av en servicetekniker

Beskrivning av underhålluppgiften	Rekommenderad frekvens	
	Varje halvår	Varje år
Rengör och inspektera gantryt och bildtagningsarbeitsstationen	✓	
Inspektera strålskyddet för spån, sprickor, brott och anslutningar som sitter hårt.	✓	
Kontrollera alla primära elanslutningar	✓	
Kontrollera förreglingar och säkerhets- och gränslägesbrytare	✓	
Inspektera/smörj C-armen	✓	
C-armen/Verifiera alla knappar på C-armen	✓	
Verifiera C-armen och rotationskalibrering	✓	
Byta bröstplattformsfilter	✓	
Verifiera kalibrering av kompressionskraften	✓	
Verifiera kalibrering av kompressionstjocklek	✓	
Inspektera LED-kollimatorlampa för damm och smuts	✓	
Rengör och smörj kollimatorn och snäckskruvar	✓	
Verifiera roterande broms	✓	
Verifiera kalibrering av röntgenfältet/ljusfältet	✓	
Verifiera kV-kalibrering och kalibrering av rörströmmen	✓	
Kontrollera HVL-utvärdering	✓	
Verifiera måldosverifiering	✓	
Verifiera AEC exponeringskompensation 2D	✓	
Utför systemupplösningstest*	✓	
Utför kvalitetsutvärdering av fantombild*	✓	
Utför utvärdering av bildartefakt*	✓	
Säkerhetskopiera bildtagningsarbeitsstationens filer	✓	
Utvärdera prestandastatus av UPS/batteristatus	✓	
Säkerhetskopiera alla kalibreringsdata	✓	
* Se kvalitetskontrollhandboken		

9.2.2 Om regenerering

Regenerering är en automatisk funktion som frigör diskutrymme för lagring av nyligen tagna bilder. Konfigurerbara parametrar låter ett givet antal bilder inhämtas innan regenerering påbörjas och äldre bilder tas bort från systemet.

Kapitel 10 Systemadministrationsgränssnitt

10.1 Skärmen Admin


I detta avsnitt beskrivs de funktioner som finns på skärmen *Admin*. För att få åtkomst till alla funktioner på denna skärm måste du logga in i systemet som en användare med administratörs-, chef- eller servicerättigheter.

Se tabellen på efterföljande sida för beskrivningar av funktioner på skärmen *Admin*.



OBS!

Beroende på vilka licensinställningar ditt system har kan du se olika knappar.

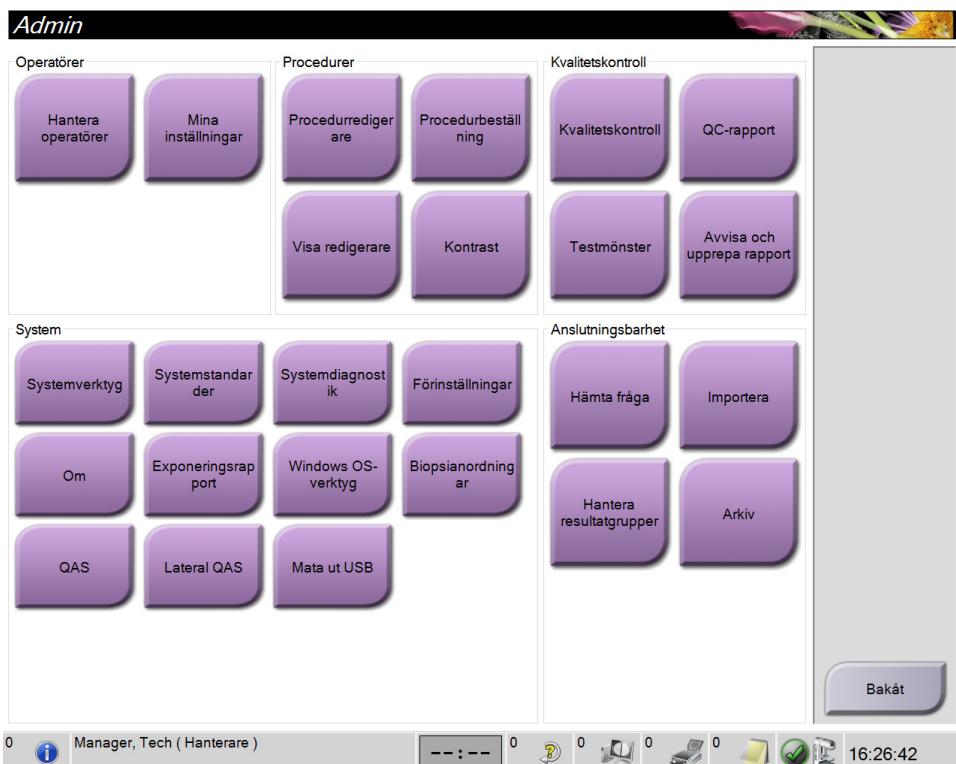

Figur 78: Skärmen Admin

Tabell 19: Funktioner på skärmen Admin

Grupp	Knapp	Funktion
Operatörer	Hantera operatörer	Lägg till, radera eller ändra operatörsinformation.
	Mina inställningar	Ändra informationen för aktuell operatör.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

Tabell 19: Funktioner på skärmen Admin

Grupp	Knapp	Funktion
Procedurer	Procedurredigerare	Lägg till eller redigera procedurer eller ändra granskningsordning för varje användare.
	Procedurbeställning	Visa eller ändra ordningen på procedurer inom en procedurgrupp.
	Vyredigerare	Ställ in standardvisningsordning för en procedur och redigera enskilda vyer.
	Kontrast	Gå till funktionen kontrastförstärkt digital mammografi och konfigurera standardinställningarna.
Kvalitetskontroll	Kvalitetskontroll	Välj en kvalitetskontrolluppgift att utföra eller markera som slutförd.
	QC-rapport	Skapa en kvalitetskontrollrapport.
	Testmönster	Välj och skicka testmönstret till resultatenheter.
	Avvisa och upprepa rapport	Skapa en Avvisa och upprepa-rapport.
System	Systemverktyg	Servicegränssnittet för konfiguration av eller identifiering av problem på bildtagningsstationen.
	Systemstandarder	Ställa in standardvärden för gantryt.
	Systemdiagnostik	Visar status på samtliga undersystem.
	Förinställningar	Ställa in systempreferenser.
	Om	Beskrivning av systemet. Se avsnittet Skärmen Om på sidan 129.
	Exponeringsrapport	Skapa en rapport över strålningsexponering
	Windows OS-verktyg	Tillgång till datorhantering, lokal säkerhetspolicy, lokala användare och grupper samt lokal gruppolicy i Windows OS
	Biopsienheter	Visa och konfigurera tillgängliga biopsienheter.
	Kvalitetssäkring	Gå till skärmen <i>Nålttest för kvalitetssäkring</i> .
	Lateral kvalitetssäkring	Gå till skärmen <i>Nålttest för lateral kvalitetssäkring</i> .
Anslutnings-alternativ	Mata ut USB	Mata ut en medielagringsenhett som är ansluten till USB-porten.
	Sök och hämta	Sök och hämta patientinformation från konfigurerade enheter.
	Importera	Importera data från en DICOM-källa.
	Hantera resultatgrupper	Lägg till, radera eller redigera resultatgrupper.
Du måste ha behörighet för samtliga funktioner. Behörighetsnivån styr vilka funktioner du kan komma åt och ändra.	Arkiv	Skicka lokala studier till lagring i nätverket eller exportera dem till flyttbara mediaenheter.

10.2 Skärmen Om

Skärmen *Om* ger information om maskinen, exempelvis systemnivå, IP-adress samt gantryserienummer. Den här typen av data kan vara användbar när du arbetar tillsammans med Hologic för att lösa ett systemproblem eller vid konfigurering av systemet.

Skärmen kan öppnas på två sätt:

- Från skärmen *Välj patient* väljer du ”**ikonen Systemstatus (rörhuvud)**” i **aktivitetsfältet > Om...**
- Från skärmen *Admin* väljer du knappen **Om** i systemgruppen



Figur 79: Systemflik på skärmen *Om* (bildtagningsstationen)

Det finns fem flikar på skärmen *Om*:

- Fliken **System** (standard) innehåller information om systemkonfiguration
- Fliken **Licensiering** innehåller de Hologic-licensierade tillval som finns installerade på den här maskinen
- Fliken **Institution** innehåller dels namn och adress för den organisation, dels stationsnamn som denna maskin är kopplad till.
- Fliken **Upphovsrätt** innehåller upphovsrätter för Hologic och tredje parts programvaror som finns installerade på den här maskinen
- Fliken **UDI** innehåller den här maskinens unika enhetsidentifierare


10.2.1 Fliken Licensiering:

Fliken **Licensiering** på skärmen *Om* visar alla licenser som är installerade på systemet.



OBS!

Hologic konfigurerar vissa system för att uppfylla specifika krav. Din systemkonfiguration har eventuellt inte alla de tillval och tillbehör som tas upp i denna handbok.

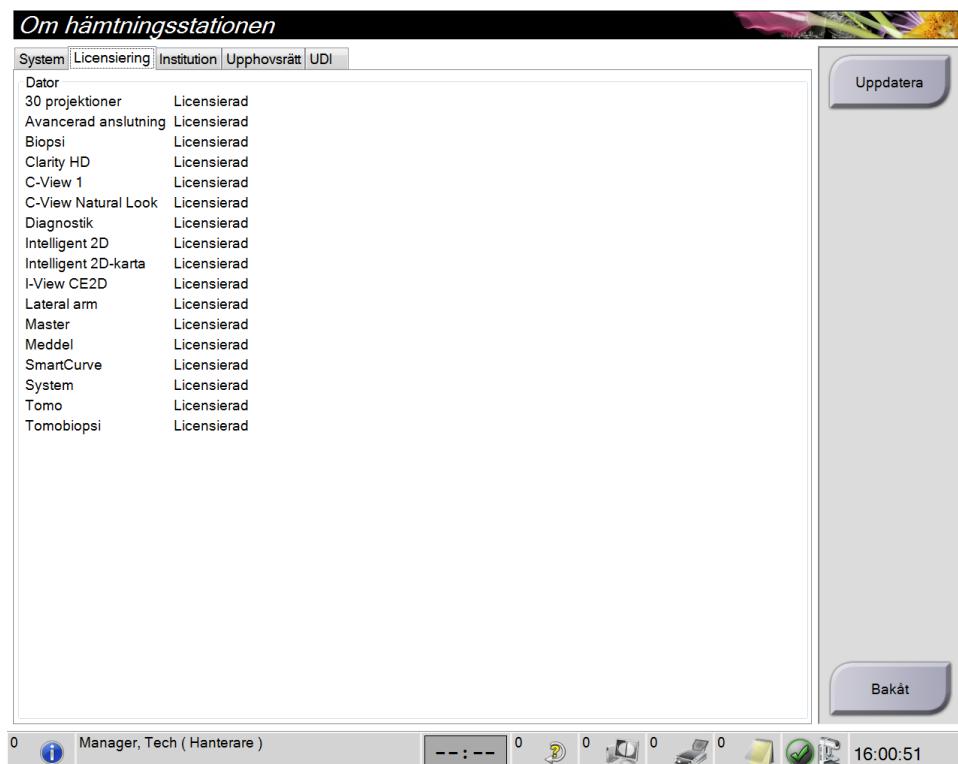

Figur 80: Fliken *Licensiering* på skärmen *Om*

10.3 Ändra preferens för användarspråk

Användare kan ange att språket för användargränssnittet automatiskt ändras till deras individuella preferenser när de loggar in.

- 1 I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Mina inställningar**.



OBS!

Du kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

- 2 Fliken **Användare** på skärmen *Redigera operatör* öppnas. I fältet Språk väljer du önskat språk från rullgardinslistan.
- 3 Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*. Användargränssnittet ändras till valt språk.

10.4 Ställa in autoupphängning och autoparning

Gör så här för att ställa in systemet för autoupphängning och autoparning av bilder:

1. I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Mina inställningar**.



OBS!

Du kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

2. Skärmen *Redigera operatör* öppnas. Välj fliken **Arbetsflöde**.

- Markera kryssrutan **Autoupphängning** för att automatiskt visa en tidigare studie i läget 2 x 2 bilder.
- Markera kryssrutan **Autoparning** för att automatiskt visa en tidigare vy i läget för flera bilder i en bredvid en nytagen bild.



Figur 81: Aktivera Autoupphängning och Autoparning

3. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*.

10.5 Ställa in procedurflikar med flera rader

Du kan redigera operatörsinställningarna för att visa mer av procedurnamnet högst upp på procedurflikarna. För att ändra procedurflikarna från en enkel textrad till flera textrader:

1. I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Mina inställningar**.



OBS!

Du kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

2. Skärmen *Redigera operatör* öppnas. Välj fliken **Arbetsflöde**.
3. Markera kryssrutan **Använd procedurflikar med flera rader**.




Figur 82: Aktivera procedurflikar med flera rader

4. Välj **Spara** och välj sedan **OK** i meddelandet *Uppdatering genomförd*.

10.6 Aktivera och ställ in höjdmynnet

Användare kan aktivera och ställa in bildtagningsstationens höjd att automatiskt ändras till deras individuella preferenser när de loggar in. Gör så här för att aktivera och ställa in höjdjusteringsminnet:

1. I operatörsgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Mina inställningar**.

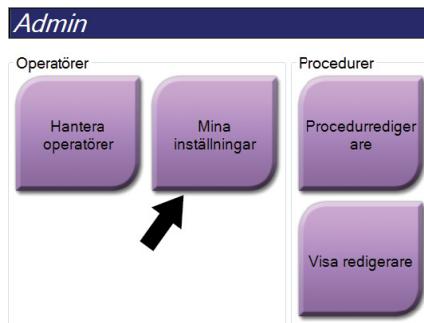


Figur 83: Knappen **Mina inställningar** på skärmen *Admin*

OBS!

Du kan även öppna skärmen **Mina inställningar** via aktivitetsfältet. Välj användarnamnområdet och välj sedan **Mina inställningar** i snabbmenyn.

2. På skärmen *Redigera operatör*, ska du välja fliken **Konsol**.
3. Aktivera höjdjusteringsminnet genom att välja alternativknappen till höger om fältet "Automatisk höjdjustering vid inloggning". En bock visas. (Du inaktiverar höjdjusteringsminnet genom att avmarkera alternativknappen.)

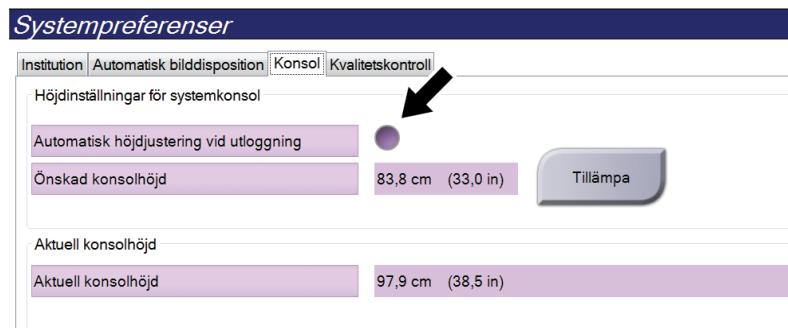


Figur 84: Fliken **Konsol** på skärmen *Redigera operatör*

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

4. Använd knapparna ▲ UPP och ▼ NED på kontrollpanelen för höjdjustering för att ställa in önskad höjd (se följande bild).

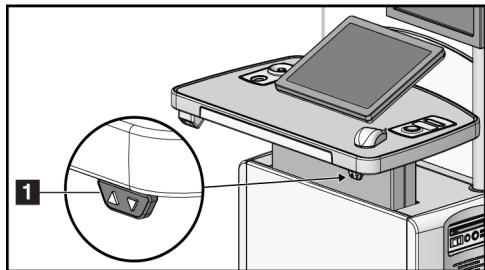

Figur 85: Kontrollpanel för höjdjustering

5. Fältet Önskad konsolhöjd visar höjden i nuvarande position. Fältet Aktuell konsolhöjd visar den senaste sparade höjden. (Se figuren nedan.) Spara inställningen för önskad höjd genom att välja Tillämpa.

The screenshot shows the 'Edit Operator' interface with the 'Console' tab selected. It displays two sections: 'User's desired console height' and 'Current console height'. In the first section, 'Auto-Height adjustment on login' is checked. Below it, 'Desired console height' is set to '83.8 cm (33.0 in)'. In the second section, 'Current console height' is shown as '99.8 cm (39.3 in)'. A large 'Apply' button is located to the right of the height fields.


Figur 86: Fälten Önskad konsolhöjd och Aktuell konsolhöjd

6. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*.

10.7 Ställ in systemet så att det automatiskt accepterar eller gör bilder till vilande

En chefsanvändare kan konfigurera systemet så att det automatiskt accepterar eller gör nya bilder till vilande.

1. I systemgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Förinställningar**. Skärmen *Systempreferenser* öppnas.
2. Välj fliken **Automatisk bilddisposition**.
3. Använd rullgardinsmenyerna för att välja automatisk disposition för varje typ av bild.
 - Välj **Manuellt** för att manuellt godta, avvisa eller avvakta beslut för varje nytagna bild.
 - Välj **Accepterar** för att automatiskt godta nytagna bilder.
 - Välj **Avvakta** för att automatiskt avvakta beslut för nytagna bilder.

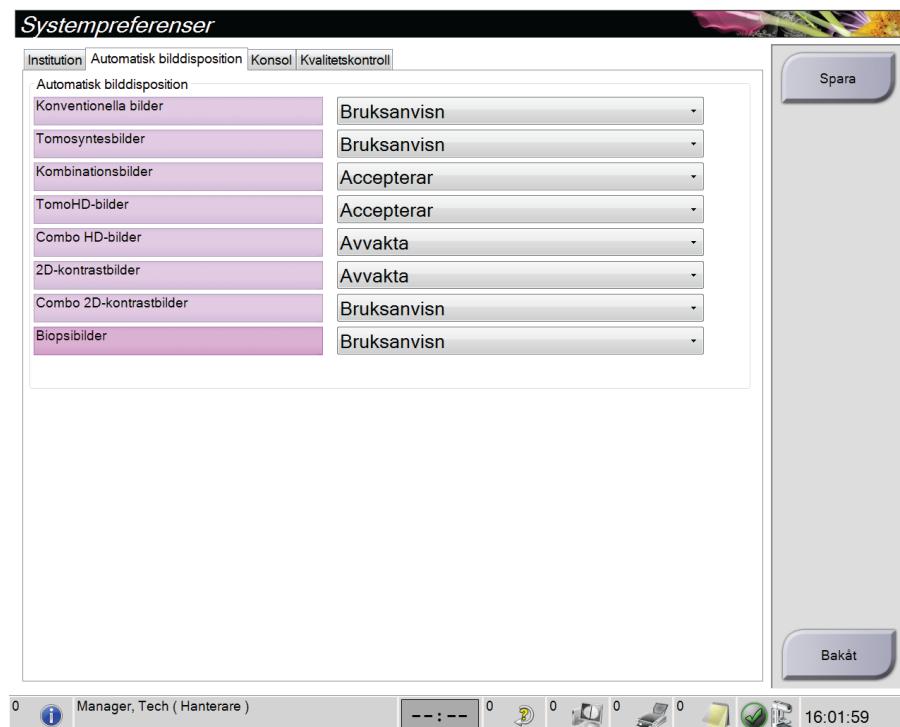

Figur 87: Ställ in automatisk bilddisposition


4. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*.

10.8 Ställa in kontraststandarder

En chefsanvändare kan konfigurera standardvärde för timerperiod och standardvärde för kontrastinformation.

Ställa in standardvärde för timerperioder

- Välj knappen **Kontrast** på skärmen *Admin* i procedurgrupperna.

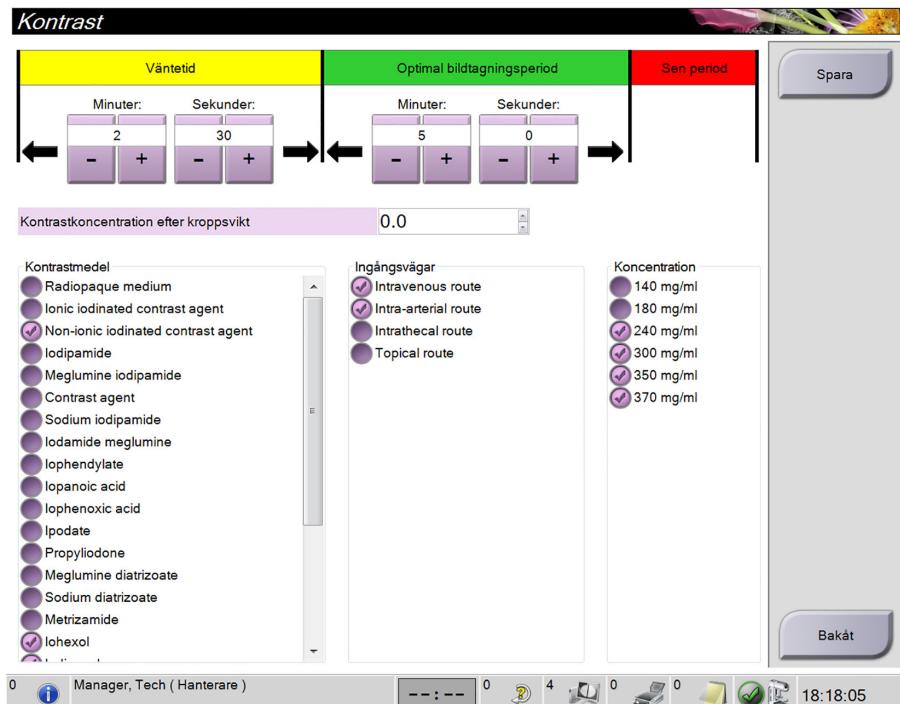

Figur 88: I-View 2D standardkontrastinställningar

- Använd knapparna för plus (+) eller minus (-) för att ändra minuter och sekunder för **Väntetid** och **Optimal bildtagningsperiod**.
- Välj **Spara**.

Dina val visas som standardvärden för timern på skärmen fliken **Kontrast**.

Ställa in standardvärde för kontrastinformation

- Välj knappen **Kontrast** på skärmen *Admin* i procedurgrupperna.
- Välj en eller flera **Kontrastmedel**, **Ingångsvägar** och **Koncentration**. Se föregående figur.
- Välj **Spara**.

De val du gjort visas automatiskt som standardvärden i dialogrutan för kontrastinformation.

10.9 Aktivera och ställ in standardhöjd


En chef kan ställa in bildtagningsstationen så att den automatiskt återgå till en standardhöjd när en användare loggar ut. Så här aktiverar och ställer du in standardhöden:

- I systemgruppen på skärmen *Admin* ska du välja **Förinställningar**.



Figur 89: Knappen Förfinställningar på skärmen Admin

- På skärmen *Systempreferenser* ska du välja fliken **Konsol**.
- Aktivera standardhölen genom att välja knappen till höger om fältet "Automatisk höjdjustering vid utloggning". En bock visas. (Du inaktiverar standardhöjd genom att avmarkera alternativknappen.)

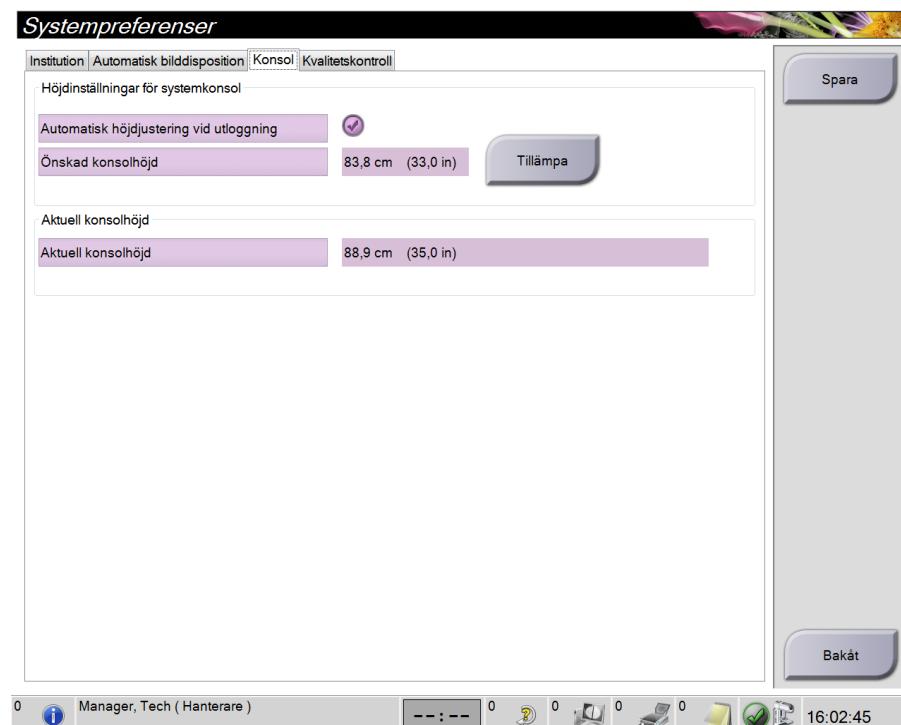


Figur 90: Fliken Konsol på skärmen Systempreferenser

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

4. Använd knapparna ▲ UPP och ▼ NED på kontrollpanelen för höjdjustering för att ställa in önskad höjd (se följande bild).

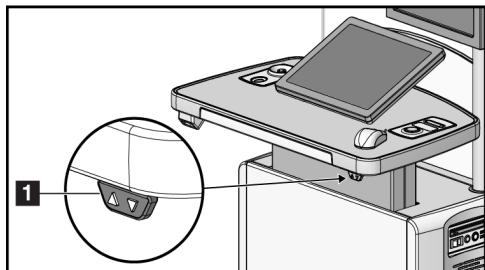

Figur 91: Kontrollpanel för höjdjustering

5. Fältet Önskad konsolhöjd visar höjden i nuvarande position. Fältet Aktuell konsolhöjd visar den senaste sparade höjden. (Se figuren nedan.) Spara inställningen för önskad höjd genom att välja Tillämpa.

Systempreferenser

Institution Automatisk bilddisposition Konsol Kvalitetskontroll

Höjdinställningar för systemkonsol


Automatisk höjdjustering vid utloggning	<input checked="" type="checkbox"/>
Önskad konsolhöjd	83,8 cm (33,0 in)
Tillämpa	
Aktuell konsolhöjd	
Aktuell konsolhöjd	97,9 cm (38,5 in)

Figur 92: Fälten Önskad konsolhöjd och Aktuell konsolhöjd

6. Välj **Spara** och välj sedan **OK** på meddelandet *Uppdatering genomförd*.


10.10 Systemverktyg

Röntgenteknikerchefer och användare med servicerättigheter har åtkomst till verktyget Systemverktyg. Verktyget Systemverktyg innehåller konfigurationsinformation om systemet. Öppna verktyget genom att välja **Systemverktyg** från systemgruppen på skärmen *Admin*.

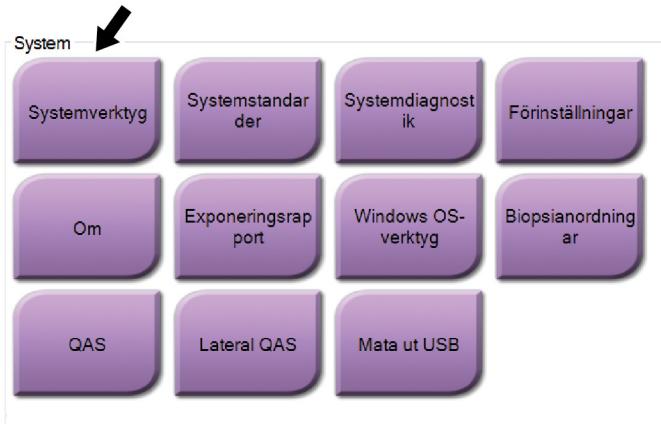

Figur 93: Knappen Systemverktyg

10.10.1 Systemverktyg för Radiologic Technologist Manager (Chefsröntgentekniker)

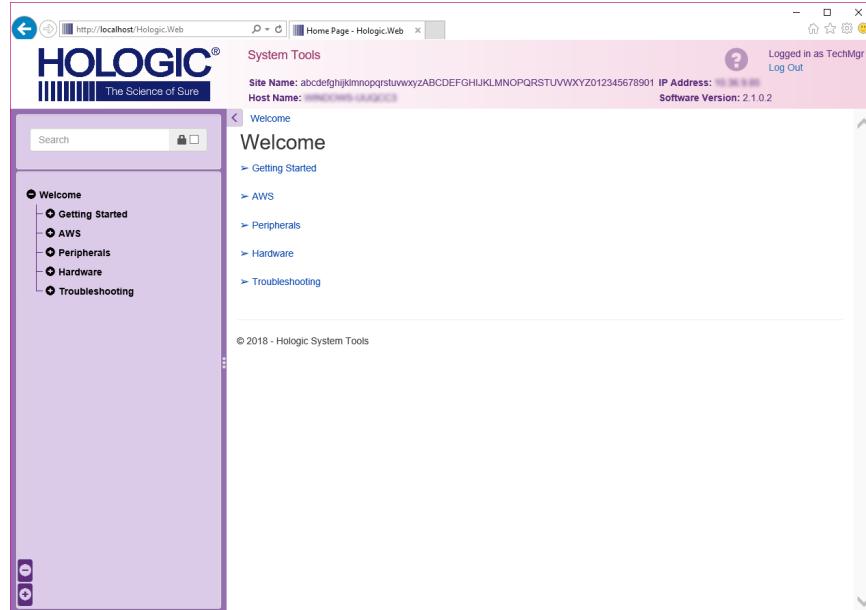

Figur 94: Skärmen Systemverktyg

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

Tabell 20: Radiologic Technologist Manager (Chefsröntgentekniker) – funktioner i Systemverktyg


Avsnitt	Funktioner på skärmen
Getting Started (Komma igång)	About (Om): Introduktion till serviceverktyget. FAQ (Vanliga frågor): Förteckning över vanliga frågor. Glossary (Ordlista): Förteckning över begrepp och beskrivningar. Platform (Plattform): Förteckning över kataloger, programversionsnummer och systemprogramstatistik. Shortcuts (Genvägar): Förteckning över Windows-genvägar.
AWS	Connectivity (Anslutningar): Förteckning över installerade enheter. Film & Image Information (Film- och bildinformation): Skapa en bildrapport.* Skapa en kvalitetskontrollrapport. (* Du kan också öppna denna rapport från en fjärransluten dator. Se avsnittet Fjärråtkomst till bildrapporter på sidan 141.) Licensing (Licensiering): Förteckning över installerade licenser. User Interface (Användargränssnitt): Ändra alternativen för programmet. Internationalization (Internationalisering): Välj lokalt språk och kultur.
Felsökning	AWS: Möjliggör nedladdning av bilder. Computer (Dator): Systemhantering och nätverksinformation. Log (Logg): Ändra alternativ för händelseregistrering. Backups (Säkerhetskopiering): Styr säkerhetskopieringen av systemet.

10.10.2 Fjärråtkomst till bildrapporter

Åtkomst till bildrapporter via en fjärransluten dator som är nätverksansluten till systemet. Denna funktion kan vara användbar för platser som inte tillåter att rapporter överförs till USB-minnen direkt från systemet.

Följ dessa steg för att komma åt bildrapporter från en fjärrdator. Du måste logga in i Systemverktyg som användare på chefsnivå för denna procedur.

1. Ta reda på IP-adressen för det system du vill ha åtkomst till. Du kan få IP-adressen från din IT-administratör eller från systemet. Från systemet går du till skärmen *Om* och väljer fliken **System**. Skriv ned IP-adressen.
2. Använd en webbläsare på din fjärranslutna dator för att gå till [http://\[IP-adress\]/Hologic.web/MainPage.aspx](http://[IP-adress]/Hologic.web/MainPage.aspx). Använd IP-adressen från steg 1.
3. Skärmen *Inloggning till systemverktyg* öppnas. Ange ett användarnamn för chefsnivå och lösenordet och välj sedan knappen **Logga in**.

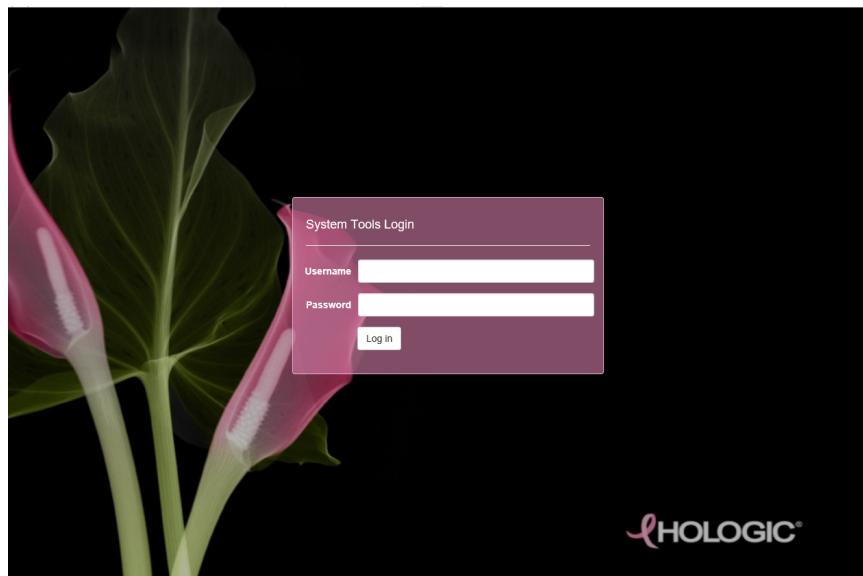


Figur 95: Skärmen Inloggning till systemverktyg

Selenia Dimensions System – användarhandbok


Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

4. Skärmen *Välkommen till systemverktyg* öppnas. Gå till **AWS > Film & Image Information (Film- och bildinformation) > Create Image Report (Skapa bildrapport)**.

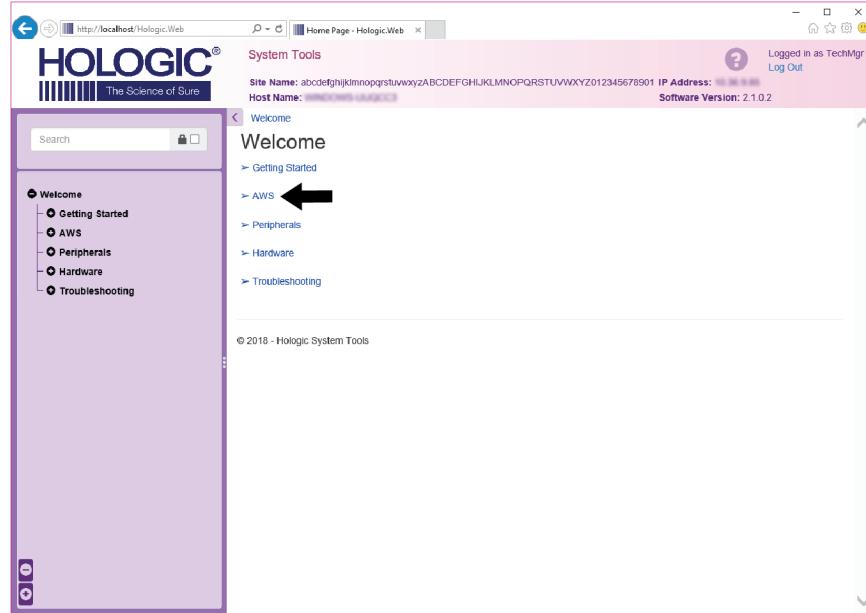

Figur 96: Skärmen Välkommen till systemverktyg

5. Välj parametrarna för rapporten och klicka på **Generate (Skapa)**.

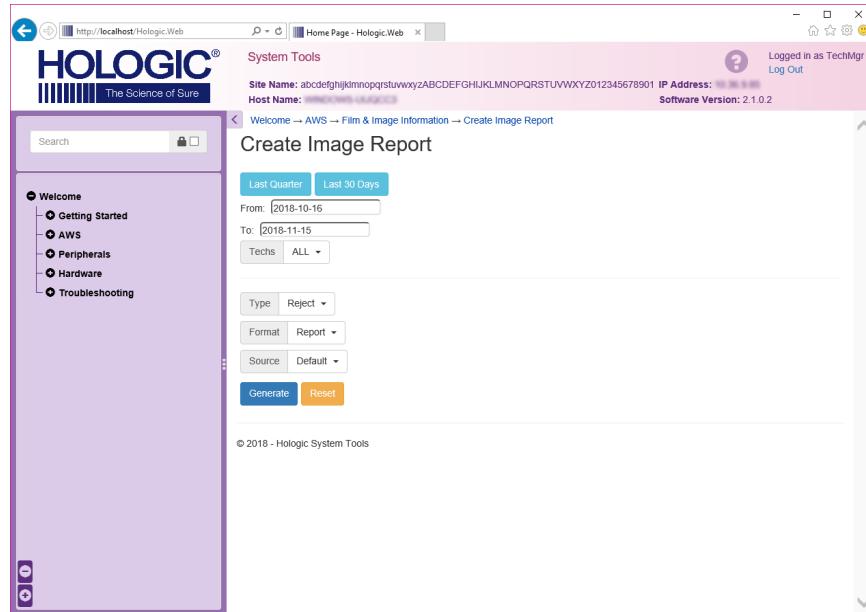

Figur 97: Parametrar för Create Image Report (Skapa bildrapport)

- Rapporten visas på skärmen. Rulla till slutet av rapporten och välj antingen **Hämta till (html)** eller **Hämta till (csv)** för filhämtningstypen. Klicka på **Save (Spara)** när du uppmanas till detta.

The screenshot shows a web-based application titled "HOLOGIC The Science of Sure". The top navigation bar includes a search field, a lock icon, and a user status message: "Logged in as TechMgr Log Out". Below the header, there's a "System Tools" section with site and host information: "Site Name: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ012345678901 IP Address: 10.0.0.100" and "Host Name: localhost.usa.com" along with "Software Version: 2.1.0.2".

The main content area displays a table of failure types and their counts:

	0	0	0	0	0	0	0%
6. Incorrect Patient ID	0	0	0	0	0	0	0%
7. X-ray Equipment Failure	0	0	0	0	0	0	0%
8. Software Failure	0	0	0	0	0	0	0%
9. Blank Image	0	0	0	0	0	0	0%
10. Wire Localization	0	0	0	0	0	0	0%
11. Aborted AEC Exposure	0	0	0	0	0	0	0%
12. Other	0	0	0	0	0	0	0%
				Totals:		0	100%

Below the table are summary statistics:

Total with Reasons:	0
Total Exposures:	0
Ratio (%):	0%

At the bottom of the report area, there are two download links:

- Download html (Right click to download)
- Download html (Right click to download)

Figur 98: Hämta bildrapporten

- Välj en mapp på datorn och klicka sedan på **Save (Spara)**.
- Logga ut** från Systemverktyg när du är klar.

10.11 Arkiveringsverktyg

Med hjälp av arkiveringsfunktionen på skärmen *Admin* kan du:

- Skicka lokala studier till ett arkiv.
- Exportera studier till flyttbara media.



Figur 99: Knappen Arkiv

1. Från anslutningsgruppen på skärmen *Admin* ska du välja knappen **Arkiv**. Skärmen *Arkiv för flera patienter på begäran* öppnas.
2. För att söka efter en patient ska du ange minst två tecken i området Sökparametrar och välja förstoringsglaset.

En lista över patienter som motsvarar sökkriterierna visas.

Figurförklaring

1. Sökparametrar
2. Patientlistområde
3. Området Patienter som ska arkiveras eller exporteras
4. Lägg till valda patienter från patientlistan till området Patienter som ska arkiveras eller exporteras
5. Ta bort valda patienter från området Patienter som ska arkiveras eller exporteras

Figur 100: Skärmen Arkiv för flera patienter på begäran

Gör så här för att arkivera:

1. Välj de patienter och procedurer som ska arkiveras.
 - Välj patienter i patientlistan eller gör en sökning med sökparametrarna (punkt 1) och välj patienter från sökresultaten.

OBS!

Knappen **Markera allt** på höger sida av skärmen väljer samtliga patienter i patientlistområdet. Knappen **Rensa** på höger sida av skärmen tar bort valen.

- Välj procedurer för varje patient.
 - Tryck på **nedåtpilen** (punkt 4) på skärmen för att flytta de valda patienterna till området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
 - Tryck på **uppåtpilen** (punkt 5) på skärmen för att flytta de valda patienterna från området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
2. Välj en lagringsenhet.
 - Välj ett alternativ i nedrullningsmenyn Lagringsenhet.
-ELLER-
 - Välj knappen **Grupplista** och välj sedan ett alternativ.
 3. Välj knappen **Arkiv**. Listan i området Patienter som ska arkiveras kopieras till valda arkivenheter.

OBS!

Använd funktionen Manage Queue (Hantera kö) i aktivitetsfältet för att granska arkivstatus.

För att exportera:

1. Välj de patienter och procedurer som ska exporteras.
 - Välj patienter i patientlistan eller gör en sökning med en av sökparametrarna (punkt 1) och välj patienter från sökresultaten.


OBS!

Knappen **Markera allt** på höger sida av skärmen väljer samtliga patienter i patientlistområdet. Knappen **Rensa** på höger sida av skärmen tar bort valen.

- Välj procedurer för varje patient.
 - Tryck på **nedåtpilen** (punkt 4) på skärmen för att flytta de valda patienterna till området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
 - Tryck på **uppåtpilen** (punkt 5) på skärmen för att flytta de valda patienterna från området Patienter som ska arkiveras (punkt 3).
2. Välj knappen **Exportera**.
 3. I dialogrutan *Exportera* väljer du målet i rullgardinslistan med medieenheter.

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Kapitel 10: Systemadministrationsgränssnitt

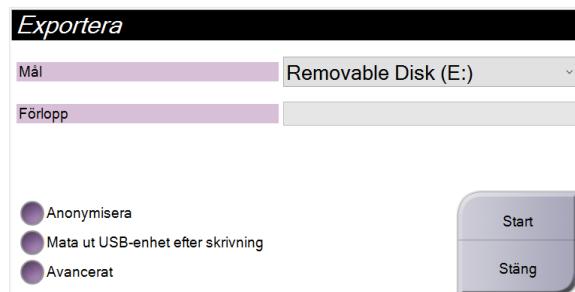


Figur 101: Skärmen Exportera

4. Välj andra alternativ om det behövs:
 - **Anonymisera:** för att anonymisera patientdata.
 - **Mata ut USB-enheten efter skrivning:** för att automatiskt mata ut lagringsenheten för uttagbara medier när exporten är klar.
 - **Avancerat:** för att välja en katalog i ditt lokala system för lagring av dina val och för att välja exporttyper för bilderna.
5. Välj knappen **Start** för att skicka valda bilder till vald enhet.

Bilaga A Specifikationer

A.1 Produktens mått

A.1.1 Röntgenstativ (gantry med C-arm)

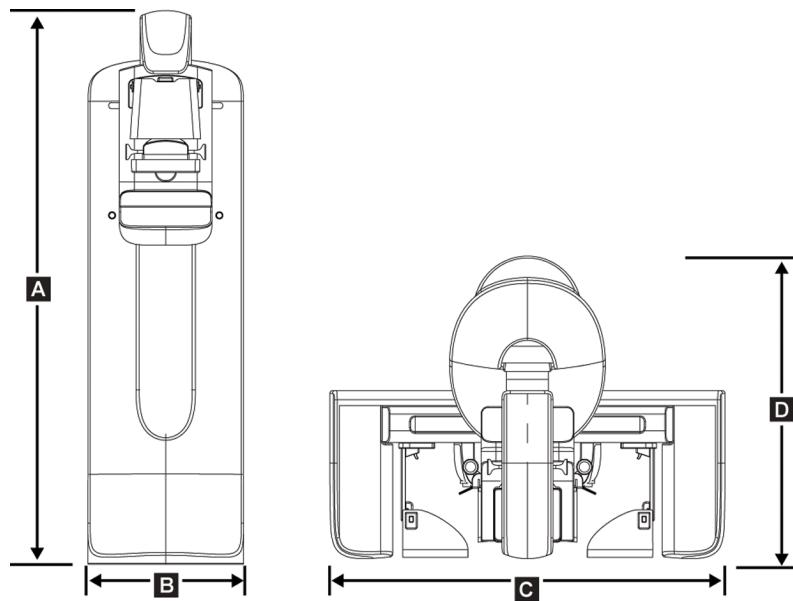


Figur 102: Mått på röntgenstativ (gantry med C-arm)

A. Höjd	223 cm
B. Bredd	66 cm
C. Bredd	173 cm
D. Djup	138 cm
Vikt	Högst 400 kg


A.1.2 Bildtagningsstationer

Universalbildtagningsstation

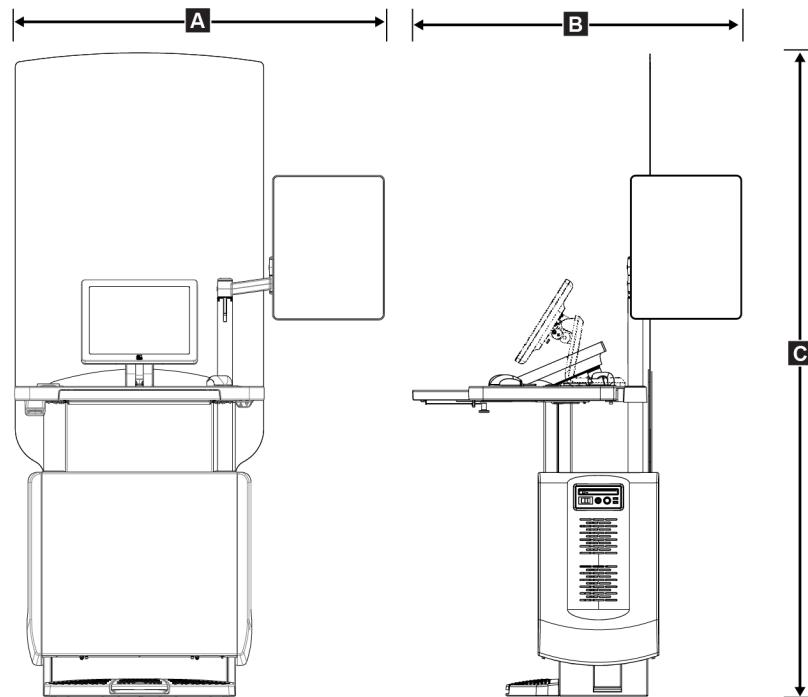

Figur 103: Mått på universalbildtagningsstation

A. Bredd (maximal) med förlängd ledad skärmarm (tillval)	136 cm - I-serien UAWS 128 cm - II-serien UAWS
Bredd (maximal) med skärmarm standard	94,0 cm - I-serien UAWS 107 cm - II-serien UAWS
B. Djup (maximalt) med tangentbordsbrickan utdragen och förlängd ledad skärmarm (tillval)	112 cm - I-serien UAWS, vriden åt sidan 115 cm - II-serien UAWS, vriden åt sidan
Djup (maximalt) med tangentbordsbrickan utdragen och skärmarm standard	83,6 cm - I- och II-serien UAWS
C. Höjd (nominell)	219 cm efter augusti 2017 204 cm före september 2017
Vikt (maximal)	209 kg

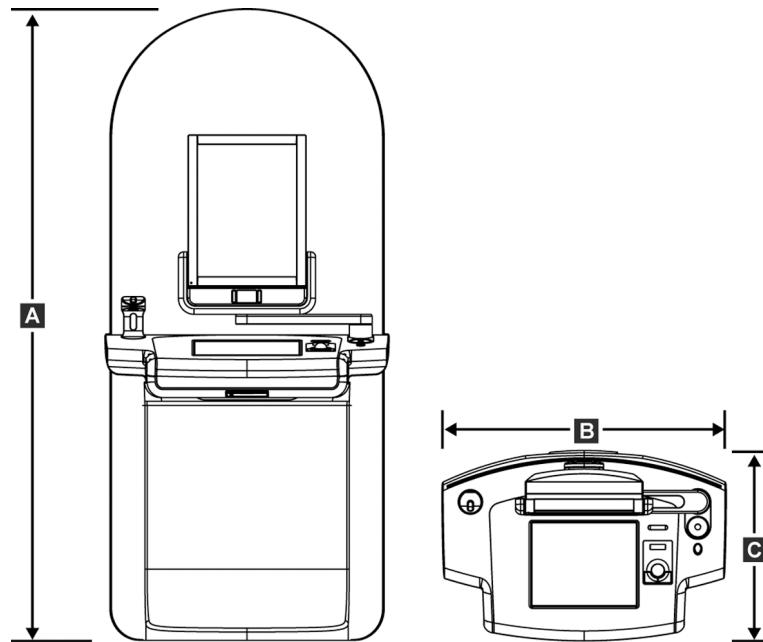
Premium bildtagningsstation*Figur 104: Mått på premium bildtagningsstation*

A. Höjd	202 cm
B. Bredd	92,7 cm
C. Djup	58,5 cm
Vikt	154 kg

Selenia Dimensions System – användarhandbok


Bilaga A: Specifikationer

Standard bildtagningsstation

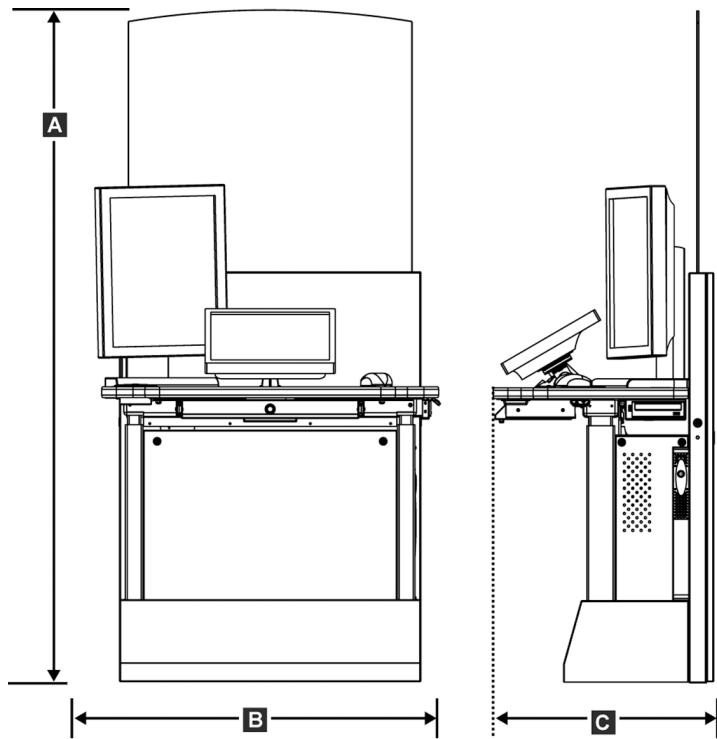

Figur 105: Mått på standard bildtagningsstation


A. Höjd	192 cm
B. Bredd	107 cm
C. Djup	76,2 cm
Vikt	219 kg

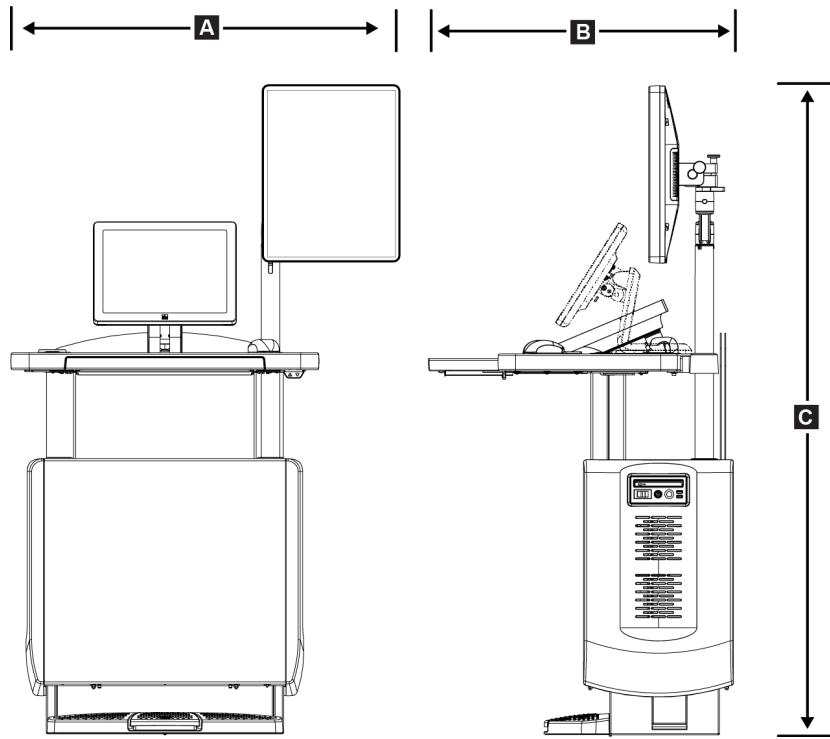Bildtagningsstationer för mobilt bruk*Figur 106: Mått på mobil universalbildtagningsstation*

- | | |
|---|---|
| A. Bredd (maximal) med mobil skärmarm | 100 cm - I-serien UAWS
107 cm - II-serien UAWS |
| B. Djup (maximalt) med tangentbordsbrickan utdragen | 85 cm |
| C. Höjd (maximal) | 180 cm |
| Vikt (maximal) | 179 kg |

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Bilaga A: Specifikationer

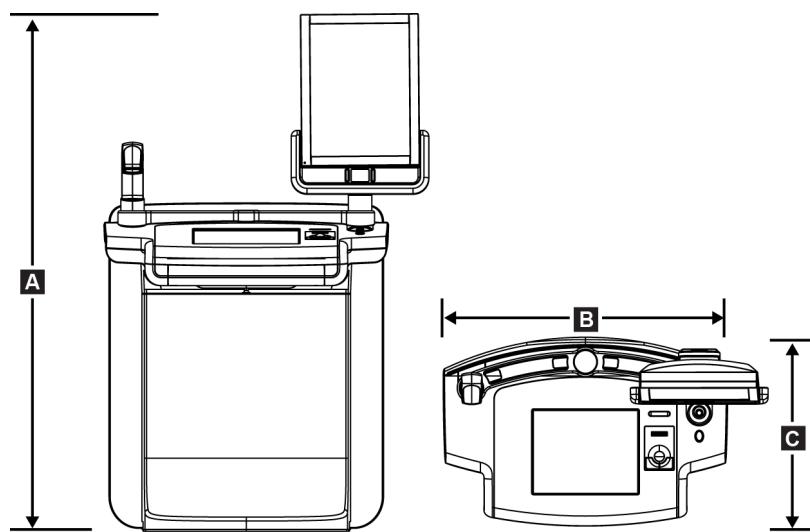

Figur 107: Mått på mobil premium bildtagningsstation

A. Höjd 167,6 cm

B. Bredd 105,5 cm

C. Djup 58,5 cm

Vikt 154 kg

A.2 Miljö vid drift och förvaring

A.2.1 Allmänna villkor för användning

Temperaturområde 20 °C till 30 °C

Område för relativ luftfuktighet 20 % till 80 % utan kondenserande fukt

A.2.2 Förvaringsmiljö

Gantry

Temperaturområde -10 °C till 40 °C

Område för relativ luftfuktighet 0 % till 95 % utan kondenserande fukt

(Placera i emballage vid förvaring i en byggnad.)

Röntgendetektor

<i>Temperaturområde</i>	<i>10 °C till 30 °C på obestämd tid</i>
	<i>10 °C till 35°C i högst 12 timmar</i>
<i>Högsta temperaturförändringshastighet</i>	<i>Högst 10 °C per timme</i>
<i>Område för relativ luftfuktighet</i>	<i>10 % till 80 % luftfuktighet (icke-kondenserande)</i>
<i>(Placera i emballage vid förvaring i en byggnad.)</i>	

Bildtagningsstation

<i>Temperaturområde</i>	<i>-10 °C till 40 °C</i>
<i>Område för relativ luftfuktighet</i>	<i>0 % till 95 % utan kondenserande fukt</i>
<i>(Placera i emballage vid förvaring i en byggnad.)</i>	

A.3 Strålskydd

<i>Strålskydd, blyekvivalens (Pb)</i>	<i>0,5 mm bly för röntgenenergi till 35 kV</i>
---------------------------------------	--

A.4 Inkommande elektricitet**A.4.1 Röntgenstativ**

<i>Nätspänning</i>	<i>200/208/220/230/ 240 VAC ± 10 %</i>
<i>Matningsimpedans</i>	<i>Högsta impedans i ledningen får inte överstiga 0,20 ohm för 208/220/230/240 VAC, 0,16 ohm för 200 VAC</i>
<i>Nätfrekvens</i>	<i>50/60 Hz ± 5 %</i>
<i>Genomsnittlig strömstyrka under 2 timmar</i>	<i>< 5 A</i>
<i>Högsta ledningsströmstyrka</i>	<i>4 A (högst 65 A i ≤ 5 sekunder)</i>

A.4.2 Bildtagningsstation

<i>Elnätets spänning</i>	<i>100/120/200/208/220/230/240 V växelström ±10 %</i>
<i>Elnätets frekvens</i>	<i>50/60 Hz ±5 %</i>
<i>Strömförbrukning</i>	<i>< 1000 W</i>
<i>Arbetscykel (Bildtagningsstation, standard)</i>	<i>10 % ~ 6 minuter per timme eller 2 minuter på, 18 minuter av</i>
<i>Överströmsskydd</i>	<i>8 A</i>

A.5 Teknisk information om röntgenstativet

A.5.1 C-arm

<i>Rotationsområde</i>	<i>Konventionell mammografi:</i> $+195^\circ +3^\circ/-0,5^\circ$ till $0^\circ \pm 0,5^\circ$ till $-155^\circ +0,5^\circ/-3^\circ$
	<i>Tomosyntestillval:</i> $+180^\circ \pm 0,5^\circ$ till $0^\circ \pm 0,5^\circ$ till $-140^\circ \pm 0,5^\circ$
<i>Absolut vinklad position</i>	<i>korrekt till $\pm 0,5^\circ$</i>
<i>Rotationsacceleration</i>	$18^\circ/s^2 +18/-9\%$
<i>Rotationsretardation</i>	$18^\circ/s^2 +18/-9\%$
<i>Rotationspositioneringens vinklingshastighet</i>	$18^\circ/s \pm 25\%$



OBS!

Vinklingshastigheten är medelvärdet av hastigheten på röntgenrörsarmens medurs rotation mellan 0° och 90° eller moturs rotation mellan 90° och 0° . Vinklingshastigheten inkluderar inte tiden för att accelerera från noll hastighet och att bromsa in till noll hastighet.

Avstånd källa till bild (SID) $70,0\text{ cm} \pm 1,0\text{ cm}$

(Fokuspositionavvikelse är $\pm 5\text{ mm}$)

Patientstöd (utan förstoring)

Nedre gräns för vertikal position $70,5\text{ cm} +5,1/-0\text{ cm}$

Övre gräns för vertikal position $141\text{ cm} +0/-17,8\text{ cm}$

A.5.2 Kompression

<i>Manuell kompressionskraft</i>	Högst 300 N
<i>Motordriven kompressions</i>	<i>Fungerar i tre driftslägen:</i> <i>Förkompression, Full kraft, Dubbel kompression.</i> <i>Kan väljas av användaren via programvaran.</i>
<i>Förkompressionskraft</i>	67 till 134 N, motordrivet
<i>Full kompressionskraft</i>	89 till 178 N, motordrivet
<i>Läge för dubbel kompression</i>	<i>Ger förkompressionskraft första gången kompressionbrytaren aktiveras och man därefter aktiverar brytaren på nytt inom 2 sekunder ökar kraften stevvis för varje ytterligare aktivering av brytaren upp till den av användaren valda full kompressionenkraften.</i>
<i>Kompressionkontroller</i>	<i>Upp-/Ned-kontroller på båda sidorna av C-armen samt på 2-positionsfotpedalen (motordrivet). Handratt på båda sidorna av kompressionenheten (manuellt).</i>
<i>Kompressionfrikoppling</i>	<i>Manuell motordriven frikoppling kontrolleras med tryckknappar på båda sidorna av C-armen.</i>
<i>Automatisk kompressionsfrikoppling</i>	<i>Det automatiska frikopplingsläget som kan väljas av användaren höjer upp kompressionenheten när exponeringen är klar.</i>
<i>Variabel hastighet för nedåtgående rörelse</i>	4,2 cm/s $\pm 15\%$
<i>Kompressionkraftdisplay</i>	<i>Två LCD:er på kompressionenheten visar kompressionkraften inom området 18 N till 300 N i steg om 1 N.</i>
<i>Noggrannhet på visningen av kompressionkraft</i>	$\pm 20\text{ N}$
<i>Visning av kompressiontjocklek</i>	<i>Två LCD-displayer på kompressionenheten mäter kompressionstjocklek i steg om 0,1 cm. Displayen är synlig från båda sidorna av patienten.</i>
<i>Kompressiontjocklekens noggrannhet</i>	$\pm 0,5\text{ cm}$ för tjocklekar mellan 0,5 cm och 15 cm
<i>Bröstkompressionstjocklek för tomosyntes</i>	<i>Standardupplösning för tomosyntes Högst: 24 cm (begränsad av kompressionenhetens geometri)</i>
	<i>Hög upplösning för tomosyntes Högst: 15 cm (begränsad av DICOM-begränsningar)</i>
<i>Kompressionspaddlar</i>	<i>Kompressionspaddlarna är genomskinliga. Paddlarna är gjorda av polykarbonatharts eller likvärdigt. När kompression appliceras ska paddelns böjning från ett plan som är parallellt med patientstödets yta vara mindre än eller lika med 1,0 cm.</i>

A.5.3 Röntgenrör

Fokuspunkt	<i>Stor (0,3 mm) nominellt</i>
	<i>Litet (0,1 mm) nominellt</i>
Röntgenrörsspänning	<i>20 kV till 49 kV</i>
Anodmaterial	<i>Volfram</i>
Röntgenfönster	<i>Beryllium 0,63 mm</i>
Förhållanden för test av slangläckage	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

A.5.4 Filtrering av och utmatning från röntgenstrålfältet

Filtrering	<i>Filterhjul med fem positioner:</i>
	<i>Position 1: Rodium, 0,050 mm ±10 %</i>
	<i>Position 2: Aluminium, 0,70 mm (nominellt) (tomasynlestillval)</i>
	<i>Position 3: Silver, 0,050 mm ±10 %</i>
	<i>Position 4: Koppar, 0,3 mm</i>
	<i>Position 5: Bly (medföljer för service)</i>

kV/mA-område

Tabell 21: Högsta mA-inställning som funktion av kV

kV	LFS mA	SFS mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

Tabell 21: Högsta mA-inställning som funktion av kV

kV	LFS mA	SFS mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

*mAs steg (Tabell 1, standard)*4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32.5, 35, 37.5,
40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5, 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260,
280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

Dämpning av kolfiber

*Bildmottagare**< 0,3 mm Al**Förstoringsplattform**< 0,3 mm Al*

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Bilaga A: Specifikationer

A.5.5 Röntgeninbländning

<i>Kollimerade fält</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i>
	<i>10 cm x 10 cm</i>
	<i>15 cm x 15 cm</i>
	<i>18 cm x 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (tomosyntestillval)</i>
	<i>24 cm x 29 cm</i>

A.5.6 Ljusfälsindikation

Kongruens mellan ljusfält och röntgen Inom 2 % av SID

A.5.7 Röntgengenerator

<i>Typ</i>	<i>Högfrekvensinverterare med konstant potential</i>
<i>Beteckning</i>	<i>7,0 kW, högst (isowatt), 200 mA vid 35 kV</i>
<i>Elektrisk effektkapacitet</i>	<i>9,0 kW högst</i>
<i>kV-område</i>	<i>20 kV till 49 kV i steg om 1 kV</i>
<i>kV-noggrannhet</i>	<i>±2 % över området 20-49 kVp</i>
<i>mAs-område</i>	<i>3,0 mAs till 500 mAs i manuellt mAs-läge (minst 8 mAs i AEC-läge)</i>
<i>mAs-noggrannhet</i>	<i>±(10 % + 0,2 mAs)</i>
<i>mA-område</i>	<i>10 mA till 200 mA, grovfokus 10 mA till 50 mA, finfokus</i>

A.6 Teknisk information om bildtagningssystemet

A.6.1 Bildmottagare

Vätskeintrång	<i>Ingen vätska från oavsiktligt spill på bildmottagaren får sippa in.</i>
Böjning	<i>Överstiger inte 1,0 mm vid högsta komprimering.</i>
Aktiv bildtagningsarea	<i>Minst 23,3 cm x 28,5 cm</i>
Konventionell DQE-mammografi	<i>Minst 50% vid 0,2 lp/mm</i> <i>Minst 15 % vid Nyquist-gränsen</i>
DQE (tomosyntestillval)	<i>Minst 30 % vid 0,2 lp/mm</i> <i>Minst 15 % vid Nyquist-gränsen</i>
Dynamiskt område och linjäritet	<i>Detektorundersystemets respons är linjärt med en linjäritet på 0,999 över ett dynamiskt område på 400:1 i röntgenexponering.</i>
Enhetlighet	<i>Detektorundersystemet kan korrigera variationer i förstärkningen pixel för pixel.</i> <i>Vid konventionella mammografiprocedurer ska uniformiteten på detektorns respons på en plan bild vara högst 2 % efter att förstärkningskalibrering applicerats över ett exponeringsområde på 0,5 mR till 200 mR.</i>

Bilaga B Systemmeddelanden och varningsmeddelanden

B.1 Felkorrigering och felsökning

De flesta fel och varningsmeddelanden åtgärdas utan att påverka ditt arbetsflöde. Följ anvisningarna på skärmen eller åtgärda tillståndet och ta sedan bort felstatusen från aktivitetsfältet. Vissa tillstånd kräver omstart av systemet eller anger att fler åtgärder krävs (t.ex. att ringa Hologics tekniska support). I denna bilaga beskrivs de olika meddelandekategorierna och dina åtgärder för att återställa systemet till normal drift. Kontakta Hologics tekniska support om felet återkommer.

B.2 Olika typer av meddelanden

B.2.1 Felnivåer

Varje meddelande har en viss uppsättning av följande egenskaper:

- Avbryter en pågående exponering (ja/nej)
- Förhindrar att en exponering startas (ja/nej)
- Visar ett meddelande för användaren på bildtagningsstationen (ja/nej)
- Kan återställas av användaren (ja/nej)
- Kan återställas automatiskt av Dimensions-systemet (ja/nej)

Meddelanden som visas

Alla meddelanden visas på användarens valda språk.

Eventuella meddelanden som avbryter en exponering eller förhindrar att en exponering startas kommer alltid att visa ett meddelande om vilka åtgärder som krävs av användaren för att fortsätta.

Ytterligare information om meddelandet

Teknisk information om meddelandet finns i loggfilen.

Vissa meddelanden visas alltid som ett kritiskt fel (en omstart av systemet krävs). Dessa meddelanden är resultatet av tillstånd som förhindrar en exponering och inte kan återställas av användaren eller datorn.




Selenia Dimensions System – användarhandbok

Bilaga B: Systemmeddelanden och varningsmeddelanden




B.2.2 Systemmeddelanden

När följande systemmeddelanden visas går du till det steg som visas i kolumnen Användaråtgärd för att ta bort meddelandet och möjliggöra nästa exponering.

Tabell 22: Systemmeddelanden

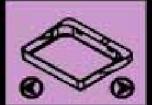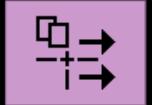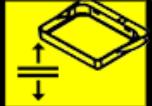Ikon	Meddelande	Användaråtgärd
	Paddeln rör sig	Ingen åtgärd krävs.
	Skickar meddelande	Ingen åtgärd krävs.
	Ogiltig användning av förstoringsstativet	Du har valt en tomografisk vy med förstoringsstativet installerat. Välj en icke-tomografisk vy (tomosyntestillval).
	Ansiktsskydd är inte säkrat	Dra ut eller skjut in ansiktsskyddet helt (tomosyntestillval).
	Ogiltig användning av kompressionspaddel	Ta bort förstoringsstativet eller installera förstoringspaddeln.
	Paddelns position motsvarar inte vald vy	Flytta paddeln till korrekt position för vald vy.
	Kompressionen är mindre än 4,5 cm under kalibrering	Flytta kompressionpaddeln högre än 4,5 cm för att slutföra kalibreringsproceduren.
	FAST-kompression är inställt	Inaktivera FAST-kompression och installera en paddel som är avsedd för detta läge.
	Licens saknas	Licens krävs för att använda denna egenskap eller funktion. (Detta meddelande visas endast för din information. Det finns inga åtgärder användaren kan utföra.)
	Ogiltig detektorkalibrering	Installera förstoringsstativet för kalibrering av finfokus. Ta bort förstoringsstativet för kalibrering av grovfokus.

Tabell 22: Systemmeddelanden

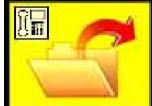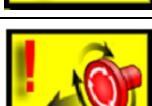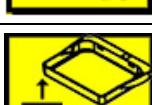
Ikon	Meddelande	Användaråtgärd
	Ogiltig geometrikalibrering	Upprepa geometrikalibreringen innan du försöker göra en exponering. (tomasynctestillval).
	Konfigurationsfil saknas	Gäller servicepersonal.
	Väntar på detektor	Ingen åtgärd krävs.
	System i testmodus	Gäller servicepersonal.
	Röret måste placeras manuellt (flytta till 0 grader)	Rotera C-armen till 0 grader.
	Röret måste placeras manuellt (flytta till -15 grader)	Rotera C-armen till -15 grader.
	Röret måste placeras manuellt (flytta till 15 grader)	Rotera C-armen till +15 grader.
	Nödstoppsbrytaren har aktiverats.	Vrid nödstoppsbrytaren ett kvarts varv för att återställa brytaren.
	Kompressionen för låg för tomografirekonstruktioner.	Flytta kompressionpaddeln högre än 0,5 cm för att ta tomografiexponeringar.

B.3 Meddelanden som rör aggregatet för avbrottsströmförsörjning

**OBS!**

Bruksanvisningen till aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning levereras med systemet. Se *UPS-bruksanvisningen* för fullständiga anvisningar.

LCD-displayen på aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning visar matningsstatus.

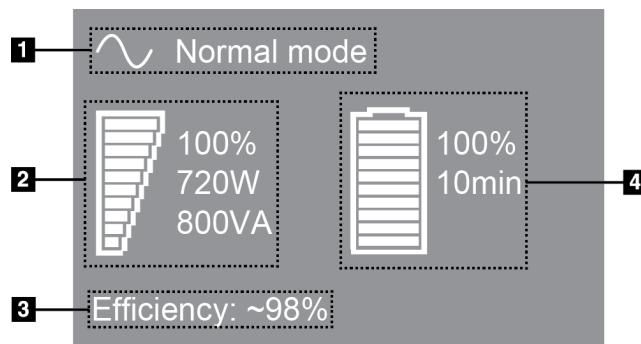

Figur 108: LCD-displayen på aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning

Figurförklaring

1. Läge för avbrottsfri strömförsörjning
2. Belastning på aggregat för avbrottsfri strömförsörjning
3. Effektivitet hos aggregat för avbrottsfri strömförsörjning
4. Batterinivå för aggregat för avbrottsfri strömförsörjning

Om batteriet i aggregatet för avbrottsfri strömförsörjning blir uttjänt ändrar ikonen Mode (Läge) utseende såsom visas. Kontakta din servicerepresentant för att byta ut batteriet.



Bilaga C Användning av mobilt system

I denna bilaga beskrivs systemet installerat i mobil miljö.

C.1 Säkerhetsvillkor och andra försiktighetsuppmannaingar

En acceptabel, stabil och ren växelströmskälla krävs för att säkerställa att systemet uppfyller alla sina prestandaspecifikationer. När det finns tillgängligt ger landström som ansluts på korrekt sätt systemet den bästa prestandan. Om en mobil strömgenerator används måste du uppfylla specifikationerna för ingående ström under alla belastningsförhållanden.

**Varng!**

**Strålningsskyddet är inte godkänt för mobilt bruk och tillhandahålls inte.
Busstillverkaren måste tillhandahålla adekvat avskärmning.**

**Försiktig!**

När landström inte är tillgänglig får mobila strömkällor som ger likvärdig prestanda användas (Se [Specifikationer för mobil användning](#) på sidan 166.) Korrekt systemfunktion och prestanda kan endast säkerställas om kontinuerlig äkta sinusoidal växelström tillförs enligt specifikationerna för ingående ström och laddningsegenskaper för systemet. Strömkällan måste periodvis tillhandahålla 65 ampere vid 208 V växelström i minst 5 sekunder, och minst 4 ampere kontinuerlig ström i övrigt. Denna belastning måste stödjas en gång var 30:e sekund. Vid strömbrott i landström eller mobil strömkälla måste UPS:en kunna tillhandahålla den driftsström som beskrivs ovan i minst 4 minuter. Bildtagningsstationens och gantryts ström måste tillhandahållas på separata, dedicerade kretsar. Användning av kontinuerlig strömförsörjningskälla (UPS) med aktiv konditionering av ledningen rekommenderas på varje strömkrets. På samma sätt bör all strömförsörjning av kringutrustning i den mobila bussen fördelas på andra kretsar. Den elektriska installationen måste verifieras för att uppfylla specifikationerna för inkommande ström och säkerhetskraven enligt IEC 60601-1 efter initial installation samt efter varje förflyttning av den mobila bussen.

**Försiktig:**

Temperaturen och luftfuktigheten inuti fordonet måste alltid upprätthållas. Låt inte miljöförhållandena överstiga angivna specifikationer när enheten inte används.

**Försiktig!**

Spanningen får inte förändras med mer än $\pm 10\%$ när röntgenenheter eller annan utrustning (t.ex. uppvärmning eller luftkonditionering) används.



Försiktighet

För att undvika att bildartefakter uppstår:

- Se till att inte placera eller parkera den mobila bussen nära starkströmskällor (såsom högspänningsledningar och utomhustransformatorer).
 - Kontrollera att eventuell mobil strömgenerator, avbrottsfri strömförsörjning (UPS) eller spänningsstabilisator befinner sig minst 3 meter från bilddetektorns förflyttning.
 - Skada på bröstplattformen eller paddlarna kan orsaka artefakter i bilden.
-

C.2 Specifikationer för mobil användning

Följande systemspecifikationer är endast avsedda för mobil användning. För alla andra specifikationer, se avsnittet [Specifikationer](#) på sidan 147.

C.2.1 Gränsvärden för stötar och vibrationer

Vibrationsgräns	Högst 0,30 G (2 Hz till 200 Hz), mätt vid den punkt där systemet har monterats i bussen.
Stötgräns	Högst 1,0 G (½ sinuspuls), mätt vid den punkt där systemet har monterats i bussen. Luftfjädrade stötdämpare rekommenderas på bussen.

C.2.2 Miljö i bussen

Användningsmiljö

Temperaturområde	20 °C till 30 °C
Område för relativ luftfuktighet	20% till 80% utan kondenserande fukt

Miljö när den inte är i drift/under förflyttning

Temperaturområde	10 °C till 35 °C i högst 12 timmar 10 °C till 30 °C på obestämd tid
Högsta temperaturförändringshastighet	<10 °C/h
Område för relativ luftfuktighet	10% till 80% utan kondenserande fukt

C.3 Inkommande elektricitet

C.3.1 Gantry

<i>Elnätets spänning</i>	200/209/220/230/ 240 V växelström ±10 %
<i>Elnätets impedans</i>	Högsta ledningsimpedans som inte får överskridas
	0,20 Ohm vid 208/220/230/ 240 V växelström,
	0,16 Ohm vid 200 V växelström
<i>Elnätets frekvens</i>	50/60 Hz ±5 %
<i>Genomsnittlig strömförbrukning under 24 timmar</i>	< 5 A
<i>Högsta strömförbrukning i ledningen</i>	4 A (högst 65 A i 3 sekunder)


C.3.2 Bildtagningsstation

<i>Elnätets spänning</i>	100/120/200/208/220/230/240 V växelström ±10%
<i>Elnätets frekvens</i>	50/60 Hz ±5 %
<i>Strömförbrukning</i>	< 1000 W


C.4 Förbereda systemet för förflyttning

Före förflyttning ska följande steg utföras:

1. Vrid C-armen till 0 grader (CC-position).
2. Sänk C-armen till dess lägsta position.
3. Stäng av systemet via användargränssnittet.
4. Placera musen i tangentbordsbrickan.
5. Lås tangentbordsbrickan (se följande figurer):
 - a. Stäng brickan.
 - b. Leta rätt på låsvredet under brickan.

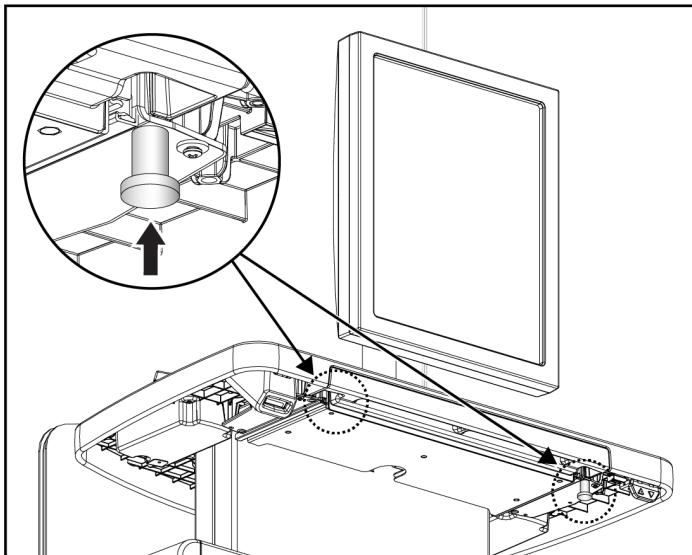


Figur 109: Låsvred för tangentbordsbrickan, höger eller vänster sida (universalbildtagningsstation)

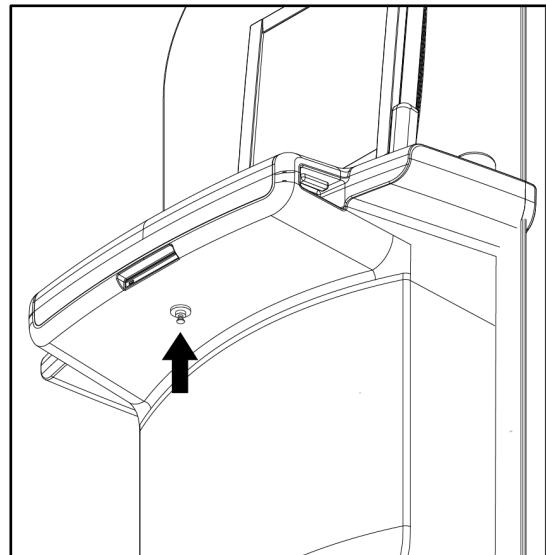


Figur 110: Låsvred för tangentbordsbrickan (premiumarbeitsstation)

- c. Vrid låsvredet 90° tills det passar in i låset. Position A i följande figur visar den låsta positionen.

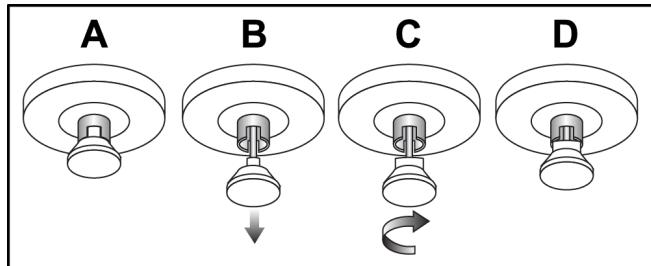


Figur 111: Tangentbordsbrickans låsvred från låst (A) till olåst (D)

6. Om den mobila universalbildtagningsstationen används ska den vridbara monitorn läsas med de medföljande vreden (se följande figurer).

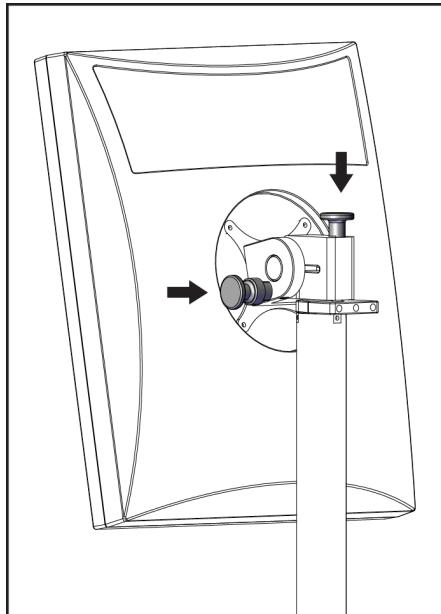

Figur 112: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie I)

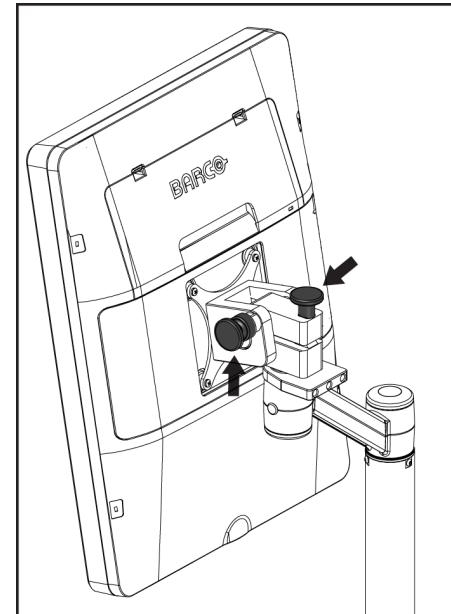


Figur 113: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie II)

7. Sänk ner arbetsytan till lägsta höjd.
8. Avlägsna alla systemtillbehör.
9. Placera alla tillbehör på en säker förvaringsplats.


C.5 Förbereda systemet för användning

1. Lås upp tangentbordsbrickan:
 - a. Leta rätt på låsvredet under brickan.
 - b. Dra vredet nedåt.
 - c. Vrid vredet 90°. Denna position håller spärren öppen. Position D (i följande figur) visar den olåsta positionen.

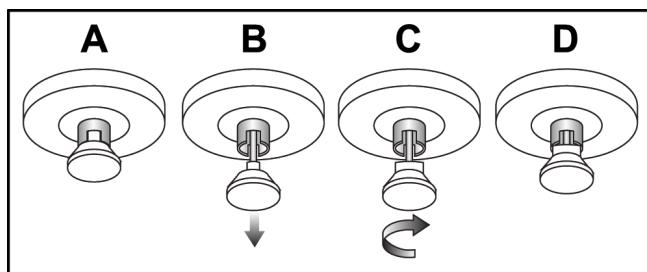


Figur 114: Tangentbordsbrickans låsvred från låst (A) till olåst (D)

2. Dra ut brickan om det behövs.
3. Om den mobila universalbildtagningsstationen används ska den vridbara skärmen låsas upp (se följande figur).

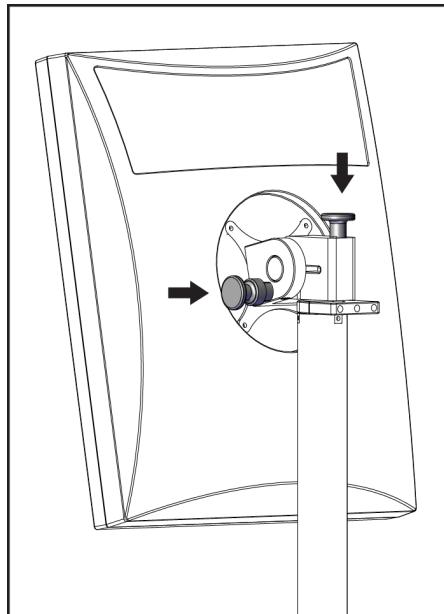

Figur 115: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie I)

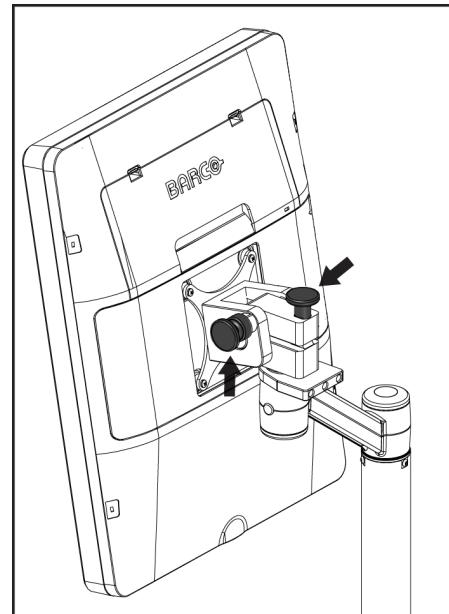

Figur 116: Vridbara monitorlåsvred på den mobila bildtagningsstationen (serie II)

C.6 Testa systemet efter förflyttning

C.6.1 Mobila systemkontroller och funktionstester

För att testa den mekaniska integriteten hos ett mobilt system utför du kontrollerna och funktionstesten. Se avsnittet [Utföra funktionstester](#) på sidan 40.

- Kompression upp/ned
- Kompressionsfrikoppling
- Rotation av C-armen
- C-arm upp/ned
- Åsidosätta kollimatorn
- Ljusfältslampa
- System för paddelförflyttning
- Nödstoppsbrytare

Utför kontrollerna och funktionstesterna varje gång det mobila systemet flyttas.

C.6.2 Kvalitetskontroll för mobila system

För att kontrollera integriteten av prestanda för ett mobilt system utför du följande kvalitetskontrolltester:

- Utvärdering av artefakt
- SNR/CNR-mätning
- Utvärdering av fantombild
- Kompressionstjocklek

Utför kvalitetskontrolltesterna varje gång det mobila systemet flyttas.

Bilaga D Dosinformation

D.1 EUREF dostabeller



OBS!

Denna information gäller endast för EU.

Följande värden gäller för tabellerna med standarddoser.

Följande tabeller visar typiska dosvärden när systemet används för 2D- eller BT-avbildning. Alla dosvärden har en tolerans på $\pm 30\%$. Tabellerna följer de rutiner som beskrivs i de *europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid bröstcancerscreening och -diagnostisering, fjärde utgåvan: avsnitt 2a.2.5.1 Dosimetri, samt Bilaga 5: Procedur för fastställande av genomsnittlig glandulär dos*.

Tabell 23: 2D-dos (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anod	Filter	EUREF-dos (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabell 24: BT-dos (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anod	Filter	EUREF-dos (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Bilaga D: Dosinformation

Tabell 25: CEDM-dos (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anod	Filter	EUREF-dos (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

D.2 EUREF CNR-tabell



OBS!

Denna information gäller endast för EU.

Följande värden gäller för tabellerna med standarddoser.

Följande tabell visar typiska CNR-värden när du använder systemet med Clarity HD eller 15-projektionsstandardupplösning BT-bildläge. Alla CNR-värden har en tolerans på ±25 %. Uppgifterna i tabellen förvärvades genom att följa proceduren som anges i det *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems*: sektion **2.4 AEC Performance**.

Fantom	Clarity HD	Standardlösningar
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

Ordlista över termer

ACR

American College of Radiology.

AEC

Automatisk exponeringskontroll (Automatic Exposure Control).

Bildmottagare

Enhet i röntgendetektorn, raster för att minska spridd strålning och ett kolfiberhölje

BT

Brösttomosyntes. En bildtagningsprocedur som ger information om bröstet i tre dimensioner

CEDM

Kontrastförstärkt digital mammografi

C-View

En licensierad Hologic-funktion där en digital mammografibild (DM) skapas från data som samlats in under en brösttomosyntesskanning (BT)

DICOM

(Digital Imaging and Communications in Medicine) Protokoll för digital medicinsk bildtagning och kommunikation

DM

Digital mammografi (2D)

EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

FAST-paddel

Helautomatisk paddel med självjusterande lutning

FDA

Food and Drug Administration (USA:s livs- och läkemedelsverk)

Intelligent 2D

En licensierad Hologic-funktion där en digital mammografibild (DM) med hög upplösning skapas från data som samlats in under en brösttomosyntesskanning (BT) med hög upplösning

I-View

En licensierad funktion för kontrastförstärkt digital 2D-mammografi

Kollimator

En enhet på röntgenröret för att kontrollera röntgenstrålens exponeringsområde.

Kommentarer

Markeringar på en bild för att indikera ett område av intresse.

Konventionell mammografi

Erstaka röntgenbildsprojektorer av vyer för screening och diagnostiska ändamål

Meddelande

Anteckningar och kommentarer per bild som kommuniceras mellan diagnostiska granskningsarbetssstationer, teknikers arbetsstationer och bildtagningsstationer

MPPS

Modalitet för genomförda procedursteg

MQSA

(Mammography Quality Standards Act) Lagen om kvalitetsstandard för mammografi.

PACS

System för bildarkivering och -kommunikation (Picture Archiving and Communications System). Ett dator- och nätverkssystem som överför och arkiverar digitala medicinska bilder.

Projektionsbild

En av en grupp av brösttomosyntesbilder som tagits vid olika projektionsvinklar och används för att framställa den slutliga rekonstruerade bilden

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Ordlista över termer

Raster

Ett element i den digitala bildmottagaren som minskar spridd strålning under exponeringen

Regenerering

Automatisk borttagning av patientbilder och tillhörande information för att möjliggöra lagring av nya patientbildtagningar

RF

Radiofrekvens

ROI

(Region of Interest) Intresseområde

SID

(Source to Image Distance) Avstånd källa till bild

Tomosyntes

En bildtagningsprocedur som kombinerar ett antal bröstbilder som tas vid olika vinklar.

Tomosyntesbilderna kan rekonstrueras så att de visar fokusplan (snitt) i bröstet.

UDI

Ett FDA- (United States Food and Drug Administration) program för unik enhetsidentifiering (UDI). Ytterligare information om UDI finns på <http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

UPS

Aggregat för avbrotsfri strömförsörjning

USB

USB (universal serial bus)

Väntande

Åtgärden som utförts på en bild för att markera bilden om teknikern inte är helt säker på bildkvaliteten (väntande bilder måste godkännas eller avvisas innan proceduren avslutas)

Sakregister

2**2**

2D-kontrast

2D-kontrastinställningar • 92

A

acceptera avvisade bilder • 83

administrationsskärmen

knappen Admin • 62

skärmen Om (bildtagningsstation) • 129

AEC

knappar • 29

Sensorposition • 29

aktivitetsfält • 52

anpassat resultat • 73

ansiktsskydd • 96

användargränssnitt • 51

användarmeny • 52

användarprofiler • 7

arbetsflöde, standard • 113

arbetslista, söka • 62

arkivera • 74

autorotation • 40, 47

autoupphängning, autoparning • 131

B

bifogad bild, acceptera eller avvisa • 83

bilder

bildtagningsläge • 80

förhandsgranska • 79

granskningsverktyg • 71

resultatalternativ • 88

bildtagningslägen • 80

Bildtagningsstation

kontroller • 32

kontroller och displayer • 32

pekskärm • 32, 34

skärmen Om (bildtagningsstation) • 129

underhåll • 122

C

C-arm

autorotation • 40, 47

displayer • 30

kontroller och indikatorer • 28, 30

rotation och rörelse • 40, 47

uttag för tillbehör • 95

cine-flik • 87

D

dataförlust • 16

display

Bildtagningsstation • 32

förhandsgranska bild • 34

komprimeringskraft • 29

olika typer av bildval • 87

rengöra • 122

tjocklek • 29

dosinformation • 173

EUREF dostabeller • 173

E

exponering

parametrar • 80

sekvens • 116

tekniker, ställa in • 80

F

FAST-kompressionsläge • 105

fel • 161

filter-flik • 61

övriga funktioner • 61

fingeravtrycksläsare – AWS • 32

flikar

filter, kolumn • 61

Flytta paddelsystemet • 40

fotpedaler, AWS • 30

funktionstester

Nödstoppsbrytare • 40, 49

förhandsgranska bildskärm • 34, 79

förkrav för systemanvändning • 7

förstoringshårkorsenhet, installera och ta bort •

110

förstoringspaddlar • 102

Selenia Dimensions System – användarhandbok

Sakregister

Förstoringsstativ • 107

installera och ta bort • 107

G

generator-flik, ställa in tekniker • 80

granska

avvisad bild • 83

H

hantera

alarm • 52

meddelanden • 52

resultatgrupper • 72

Hologics tekniska support • 121

hårkorsenhet för lokalisering

använda • 109

installera och ta bort • 108

rikta in • 111

I

Ikonen Mina inställningar • 52

indikatorer • 27

indragbart ansiktsskydd

använda • 97

installera • 96

installera

förstoringshårkorsenhet • 110

Förstoringsstativ • 107

hårkorsenhet för lokalisering • 108

indragbart ansiktsskydd • 96

komprimeringspaddlar • 104

konventionellt ansiktsskydd • 99

Intelligent 2D • 5

K

kliniska förfaranden • 113

knappar för paddelförflyttning • 29

Knappen Implantat finns • 65

kollimator

programmerad till paddel • 99

programmerad till paddelposition • 40

åsidosätta • 40

kommentarsflik • 87

Kommentarsflik • 87

komprimering

FAST-kompressionsläge • 105

frigöra • 116

kontroller och displayer • 29

paddlar • 99

specifikationer • 155

komprimeringskraft, område • 29

kontaktpaddlar • 102

kontrastinställningar • 92, 136

kontroller

Bildtagningsstation • 32

C-arm • 30

fotpedaler, AWS • 30

Gantry-röntgenstativ • 28

handrattar • 29

indikatorer • 27

komprimering • 30, 40, 41

komprimeringsbroms • 40, 41

ljusfältslampa • 40

manuell frikoppling av komprimering • 40, 41

system • 27

åsidosätta kollimator • 40

konventionellt ansiktsskydd, installera • 99

krav

färdigheter krävs • 7

kvalitetskontroll • 8

utbildning • 7

krav på kvalitetskontroller • 8

L

laserfilmskrivare, isoleringskrav • 16

ljusfältslampa • 40

använda • 115

Logga ut • 63

lokaliseringspaddlar • 103

M

meddelanden och varningar • 161

mobilt system

specifikationer • 166

säkerhet • 165

testa efter förflyttning • 171

N

nållokalisering • 118

Nödstoppsbrytare • 28, 32

funktionstest • 40

P

paddelförflyttning • 65

paddlar

flytta till ny position • 65

installera • 104

komprimering • 102

SmartCurve-paddel • 99, 101

ta bort • 104

patient

ansiktsskydd • 96

position • 115

radera • 60

redigera information • 57

stänga • 71

öppna • 56

Pekskärm • 34

Premium bildtagningsstation • 32

procedurer

lägga till • 56

stänga • 71

punktkomprimeringspaddlar • 102

R

radera patient • 60

redigera

användarinformation • 52

patientinformation • 57

resultat på begäran • 74

resultat, på begäran • 74

resultatenheter

anpassat resultat • 73

hantera resultatgrupper • 52

ikoner i aktivitetsfältet • 52

resultatgrupper • 88

resultatgrupper, hantera • 88

resultatgrupper, välja • 72

ROI-flik • 87

rullhjul • 32

röntgen

brytare (knapp) • 32

indikatorer • 116

kollimerade fält • 40

ta bild • 116

röntgenrör, display • 29

röntgenstativ, kontroller och indikatorer • 28

S

screening

ta bilden • 116

skicka bilder till resultat • 88

skriva ut • 76

skärmar

förhandsgranska bild • 79

söka • 62

skärmen Om (bildtagningsstation) • 129

slå på systemet • 35

förberedelse • 35

SmartCurve-paddel • 99, 101

specifikationer • 147

elektriskt • 153

streckkodsläsare • 32, 34

strålsäkerhet • 16

strömbrytare • 32

stäng av systemet • 50

stänga

patient • 71

procedur • 71

system

administration • 127

beskrivning • 13

funktioner • 2

klar • 116

meddelanden • 162

statusikoner • 52

säkerhet

allmän information • 16

dataförlust • 16

skada på utrustning • 16

strålning • 16

söka i arbetslista • 62

T

ta bilder • 116

ta bort

förstoringshålkorsenhet • 110

Förstoringsstativ • 107

hålkorsenhet för lokalisering • 108

indragbart ansiktsskydd • 96
komprimeringspaddlar • 104
konventionellt ansiktsskydd • 99
tangentbord • 32, 34
tillbehör
 ansiktsskydd • 96
 förstoringsstativ • 107
 hårkorsenheter • 108
 installera på C-arm • 95
 kompressionspaddlar • 99

U

underhåll
 allmänt • 121
utbildningskrav • 7
uttalande om webbsäkerhet • 9
uttalande, webbsäkerhet • 9

V,W

varningar • 161
varningar, försiktighet och anmärkningar
 definierad • 2
välja
 exponeringsparametrar • 80
 resultatgrupper • 72

Ö

öppna patientprocedur • 56



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australia

Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
Level 3, Suite 302
2 Lyon Park Road
Macquarie Park, NSW 2113
Australia
1.800.264.073

EC REP

Hologic BV
Da Vincielaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

CE
2797