

1.1 Uputstvo za primenu jastučića za grudi MammoPad

Jastučići za grudi MammoPad® su medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu. Oni su radiolucentni i ne sadrže lateks. Za svakog pacijenta koristite svežu podlogu. Sledite ovaj postupak kako biste osigurali pravilno postavljanje podloge.

1. Otvorite kesu s jastučićima za grudi MammoPad, izvadite jednu podlogu i ponovo zatvorite kesu.



Napomena

Jastučići se moraju čuvati u zapečaćenoj plastičnoj kesi kako bi se sprečila kontaminacija koja bi mogla da utiče na kvalitet snimka.

2. Odlepite papirnu zadnju stranu s podloge i odložite je u otpad.
3. Nanesite lepljivu stranu na platformu za snimanje u skladu s uputstvima u sledećoj napomeni za vaš tip sistema. Ne nanosite podlogu na obojene nalepnice.



Napomena

Selenia® i većina drugih FFDM sistema – Okrenite zaobljeni ugao na donjoj levoj strani detektora. Zagladite podlogu od zadnje strane prema prednjoj strani platforme za snimanje.

Dimensions® i GE sistem – Okrenite zaobljeni ugao na donjoj desnoj strani detektora. Zagladite podlogu od prednje strane prema zadnjoj strani platforme za snimanje.

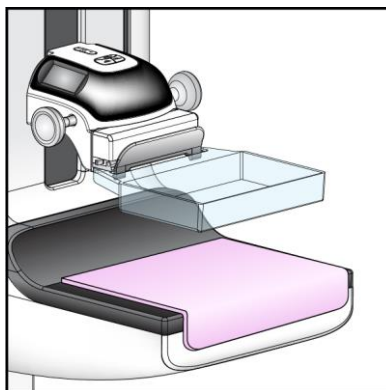


Figure 1: MammoPad postavljen na platformu za snimanje

4. Sledite svoju standardnu rutinu pozicioniranja za sve prikaze pregleda.
5. Po završetku pregleda, uklonite podlogu sa platforme za snimanje i odložite je u otpad.



Napomena

Ako je podloga bila izložena krvi ili telesnim tečnostima, sledite proceduru za odlaganje biološki opasnog materijala vaše ustanove.

Pomoć u vezi s proizvodom MammoPad zatražite od podrške za proizvode na 1-877-371-4372.

Ovlašćeni predstavnik u EU:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgija

