

## ThinPrep® CytoLyt® oldat

## Használati útmutató

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A CytoLyt® oldat egy vízalapú, sejtmosó pufferoldat, amely a vörösvértestek lizálására, a fehérje kicsapódásának megelőzésére, a nyálka feloldására, valamint az általános citológiai sejtminták morfológiájának megőrzésére szolgál a minta ThinPrep® feldolgozó rendszerrel történő tárgylemezre helyezése előtt.

Megjegyzés: A CytoLyt oldat nem használható a ThinPrep 3000 feldolgozó rendszerrel feldolgozott mintákkal.

**ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MAGYARÁZAT**

A CytoLyt oldat a ThinPrep® feldolgozó rendszerrel történő együttes használatra készült, amely egy citológiai preparálóeszköz a minták tárgylemezre helyezése mikroszkópos vizsgálathoz. A CytoLyt oldat 15 °C és 30 °C között legfeljebb nyolc napig teszi lehetővé a sejtek szállítását és tárolását.

**AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI**

A CytoLyt oldat egy mintavételre és a vörösvértestek lizálására szolgáló hordozóanyag. ThinPrep feldolgozó rendszerrel feldolgozott mintákon történő használat esetén a folyamat során a sejtek egy mikroszkóptárgylemezre vihetők fel, amelynek révén egy vékony, citológiai vizsgálatra alkalmas egységes sejtréteg alakul ki.

**ÖSSZETÉTEL**

Metanol alapú, tartósító pufferoldat. CAS 67-56-1

**FIGYELMEZTETÉSEK**

**Veszély.** Gyúlékony. Metanolt tartalmaz.

H302 - Lenyelve ártalmas.

H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

H332 - Belélegezve ártalmas.

H370 - Károsítja a szerveket.

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Csak megfelelően szellőző környezetben használja. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

**ÓVINTÉZKEDÉSEK**

P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó.

Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Az oldat használata során a védőkesztyű és szemvédő használata kötelező. A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolása sérült.

Amennyiben a CytoLyt oldat fioláját sejtekkel együtt szállítja, ellenőrizze, hogy a fiola szorosan le van-e zárva. Csavarja egy vonalba a kupakon lévő jelzést az edényen vagy csövön lévő jelzéssel, így megakadályozható a szivárgás.

Mint minden laboratóriumi eljárás során, itt is követni kell az általános óvintézkedéseket.

**ELŐKEZELÉS**

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

ThinPrep CytoLyt oldat

Használati útmutató

Magyar AW-19143-2802 Rev. 001 6-2019

1/3



# ThinPrep® CytoLyt® oldat

## **TÁROLÁS**

A citológiai minták nélküli CytoLyt oldatot 15 °C és 30 °C (59 °F és 86 °F) között kell tárolni. Ne használja a CytoLyt oldatot a tárolón jelzett lejáratási időn túl. Minden használat után zárja le a 94 ml-es üveget.

## **MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS**

Tiszta, nem steril oldat.

## **MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS**

Gyűjtse be a nem nőgyógyászati mintákat rutinszerűen, a minták előkészítésére vonatkozó utasításokat pedig tekintse meg a ThinPrep feldolgozó rendszer kezelési útmutatójában. Jegyezze fel a szükséges páciensadatokat az erre szánt területre. (Lásd az ábrát.)

### **Tárolás és kezelés**

A CytoLyt oldatban 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között legfeljebb nyolc napig tárolhatók a sejtek.

## **FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK**

A CytoLyt oldatban begyűjtött citológiai mintákat PreservCyt® oldattal kell előkészíteni, azután ThinPrep feldolgozó rendszeren kell feldolgozni a ThinPrep feldolgozó rendszer kezelési útmutatójában szereplő utasítások szerint.

## **AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI**

A CytoLyt oldat semmilyen ThinPrep feldolgozó rendszeren nem helyettesíthető mintavételre, -előkészítésre vagy -feldolgozásra szolgáló egyéb oldattal.

## **TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK**


Tekintse meg a ThinPrep feldolgozó rendszer kezelői útmutatóját.

## **ÁRTALMATLANÍTÁS**

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

## **ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a [www.hologiccsds.com](http://www.hologiccsds.com) oldalon.

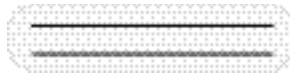

Ábra

## ThinPrep® CytoLyt® oldat



Gyártó



Lásd a használati útmutatót



*In vitro* diagnosztikai  
orvostechnikai eszköz



Hivatalos képviselő az  
Európai Közösségben



Katalógusszám



Lejárat dátum



Gyártási tételszám



Hőmérsékleti korlátok



Tűzveszélyes



Irritációt okoz, légzőrendszeri  
irritáció, bőrzékenyítő



Légzőszervi érzékenyítő,  
célszervi toxicitás



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Ausztrália) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000