

„ThinPrep®“ tirpalas „CytoLyt®“

Naudojimo instrukcija



NUMATYTOJI PASKIRTIS

Tirpalas „CytoLyt®“ – tai vandeninis buferintas ląstelių plovimo tirpalas, skirtas lizuoti eritrocitams, neleisti nusėsti baltymams, suskystinti gleivėms ir išsaugoti bendrųjų citologinių ląstelių mėginių morfologijai prieš ruošiant objektinius stiklelius „ThinPrep®“ procesoriumi.

Pastaba: tirpalas „CytoLyt“ neskirtas naudoti su mėginiais, apdorotais „ThinPrep 3000“ procesoriuje.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

Tirpalas „CytoLyt“ skirtas naudoti su „ThinPrep®“ procesoriumi – citologinių mėginių apdorojimo įrenginiu, kuriuo ruošiami objektiniai stikleliai mikroskopiniam tyrimui. Naudojant tirpalą „CytoLyt“ ląsteles galima gabenti ir ne daugiau kaip aštuonioms paroms užkonservuoti laikant 15–30 °C temperatūroje.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Tirpalas „CytoLyt“ – tai terpė, naudojama eritrocitams paimti ir lizuoti. Naudojant „ThinPrep“ procesoriuje apdorojamiems mėginiams, šiuo metodu ląsteles galima perkelti ant mikroskopo objektyvio stiklelio sudarant citologiniam tyrimui tinkamą ploną ir tolygų ląstelių sluoksnį.

SUDĖTIS

Metanolinis buferintas konservavimo tirpalas. CAS 67-56-1

ISPĖJIMAI

Pavojus. Degi. Sudėtyje yra metanolio.

H302. Kenksminga prarijus.

H312. Kenksminga susilietus su oda.

H332. Kenksminga įkvėpus.

H370. Kenkia organams.

H226. Degūs skystis ir garai.

Skirta in vitro diagnostikai. Naudoti esant tinkamam vėdinimui. Neskirta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams. Negalima padaryti nenuodingos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

P210. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Dirbant su tirpalu mūvėti pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.

Gabenant tirpalo „CytoLyt“ flakoną su ląstelėmis reikia užtikrinti, kad flakonas būtų sandariai uždarytas. Pratekėjimui išvengti reikia sulygiuoti dangtelio žymę su indelio ar mėgintuvėlio žyme.

Kaip ir atliekant visas laboratorines procedūras, reikia imtis bendrųjų atsargumo priemonių.



„ThinPrep®“ tirpalas „CytoLyt®“

PIRMINIS APDOROJIMAS

Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.

LAIKYMAS

Tirpalą „CytoLyt“ be citologinių mėginių laikykite 15–30 °C (59–86 °F) temperatūroje. Nenaudokite tirpalo „CytoLyt“ praėjus galiojimo datai, pažymėtai ant talpyklos. Kaskart panaudoję uždarykite 946 ml flakoną.

IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ PAĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Neginekologinius mėginius imkite įprastai ir vadovaukitės „ThinPrep“ procesoriaus operatoriaus vadove pateiktais ruošimo nurodymais. Įrašykite reikiamą informaciją apie pacientą į tam skirtą vietą. (Žr. paveikslėlių.)

Laikymas ir tvarkymas

Tirpalas „CytoLyt“ ne daugiau kaip aštuonioms paroms užkonservuoja ląsteles laikant 15–30 °C (59–86 °F) temperatūroje.

APDOROJIMO NURODYMAI

Į tirpalą „CytoLyt“ paimti citologiniai mėginiai toliau ruošiami naudojant tirpalą „PreservCyt®“, o tada apdorojami „ThinPrep“ procesoriuje, vadovaujantis „ThinPrep“ procesoriaus operatoriaus vadovo nurodymais.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Imant, ruošiant arba apdorojant mėginius bet kuriame „ThinPrep“ procesoriuje, tirpalo „CytoLyt“ negalima pakeisti jokių kitu tirpalu.

VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS


Žr. „ThinPrep“ procesoriaus operatoriaus vadovą.

IŠMETIMAS

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Visą saugos duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje www.hologicds.com.

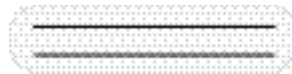

Pav.

„ThinPrep®“ tirpalas „CytoLyt®“



Gamintojas



Panaudoti iki



Degi



Žr. naudojimo instrukciją



Partijos kodas



Dirginanti, kvėpavimo takų dirginimas, odą jautrinanti medžiaga



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Temperatūros apribojimas



Kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga, toksiškumas konkrečiam organui



Ilgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Katalogo numeris



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, JAV
Tel. +1 508 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Australijos užsakovas: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000