

Разтвор ThinPrep® CytoLyt®

Инструкции за употреба



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разтворът CytoLyt® е основан на вода, неутрализиран разтвор за промиване на клетки, създаден да лизира червените кръвни клетки, да предотвратява утаяването на протеина, да разтваря слуз и да защитава изграждането на общите цитологични клетъчни проби преди подготовката на предметното стъкло с процесора ThinPrep®.

Забележка: Разтворът CytoLyt да не се използва с проби, обработени с процесора ThinPrep 3000.

КРАТКО ОБЯСНЕНИЕ

Разтворът CytoLyt е създаден за употреба с процесора ThinPrep® – устройство за цитологична подготовка, което създава предметни стъкла за микроскопско изследване. Разтворът CytoLyt позволява транспортирането и консервирането на клетките за осем дни при температура между 15°C – 30°C.

ПРОЦЕДУРНИ ПРИНЦИПИ

Разтворът CytoLyt представлява среда, която се използва за събиране и лизиране на червените кръвни клетки. При използване на пробите, обработени в процесора ThinPrep, процесът позволява прехвърлянето на клетки върху предметно стъкло, като предоставя тънък, еднороден слой от клетки, подходящ за цитологична оценка.

СЪСТАВ

Основан на метанол, неутрализиран консервиращ разтвор. CAS 67-56-1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опасност. Запалимо. Съдържа метанол.

H302 – вреден при поглъщане.

H312 – вреден при контакт с кожата.

H332 – вреден при вдишване.

H370 – причинява увреждане на органите.

H226 – запалими течност и пари.

За употреба при *in vitro* диагностика. Използвайте с правилна вентилация. Не е за външна или вътрешна употреба при хора или животни. Не може да се направи неотровен.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P210 – да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.

Съхранявайте в добре проветриво помещение. Съдът да се съхранява плътно затворен. Носете ръкавици и предпазни очила при работа с разтвора. Да се измият ръцете старателно след употреба. Не използвайте, ако първичната опаковка е повредена.

При транспортиране на флакон с разтвор CytoLyt, съдържащ клетки, се уверете, че флаконът е плътно запечатан. Подравнете означението на капачето с означението на чашката или тубичката, за да предотвратите изтичане.

Както по време на всички лабораторни процедури, трябва да се следват всички общи предпазни мерки.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Не се изисква разтваряне, смесване или разреждане.

Разтвор ThinPrep® CytoLyt®

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте разтвора CytoLyt без цитологични проби при температура между 15°C и 30°C (59°F и 86°F). Не използвайте разтвора CytoLyt след изтичане на срока на годност, отбелязан на съда. След всяка употреба затваряйте бутилката от 946 ml.

ВЪНШЕН ВИД И ЦЯЛОСТ

Прозрачен, нестерилен разтвор.

ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ

Вземайте рутинно негинекологични проби и направете справка с ръководството за оператора на процесора ThinPrep за инструкциите за подготовка. Запишете необходимата информация за пациента в предвиденото пространство. (Вижте фигурата.)

Съхранение и работа

Разтворът CytoLyt запазва клетките за до осем дни при температура между 15°C (59°F) и 30°C (86°F).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБРАБОТКА

Цитологичните проби, взети в разтвора CytoLyt, се подготвят допълнително с разтвора PreservCyt®, след което се обработват в процесора ThinPrep съгласно инструкциите в ръководството за оператора на процесора ThinPrep.

ПРОЦЕДУРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Разтворът CytoLyt не може да се замества с друг разтвор за вземане, консервиране или обработка на проби в процесора ThinPrep.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Направете справка с ръководството за оператора на процесора ThinPrep.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте съгласно всички приложими разпоредби.

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ТОКСИКОЛОГИЯТА или на лекар, ако не се чувствате добре. За пълния информационен лист за безопасност вижте www.hologiccsds.com.

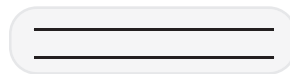

Фигура

Разтвор ThinPrep® CytoLyt®

Производител

Вижте инструкциите
за употребаМедицинско изделие за
in vitro диагностикаОторизиран представител
в Европейската общност

Каталожен номер



Използвайте до



Код на партидата



Температурно ограничение



Запалимо

Раздразнение, дразнене на
дихателните пътища, кожна
сенсibiliзацияДихателна сенсibiliзация,
токсичност за целеви
органиHologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 САЩ
Тел.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • БелгияПоръчител за Австралия: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Masquarie Park NSW 2113 • Австралия • Тел.: 02 9888 8000