

## Aptima® CMV Quant Assay

Para uso diagnóstico *in vitro*

Solo para exportación de EE. UU.

<b>Información general</b> .....	<b>2</b>
Uso indicado .....	2
Resumen y explicación de la prueba .....	2
Principios del procedimiento .....	2
Advertencias y precauciones .....	3
Requisitos de almacenamiento y manipulación de reactivos .....	6
Recogida y almacenamiento de muestras .....	8
Muestras almacenadas en el Panther System .....	11
Transporte de muestras .....	11
<b>Panther System</b> .....	<b>12</b>
Reactivos y materiales suministrados .....	12
Material necesario que debe adquirirse por separado .....	14
Materiales opcionales .....	15
Procedimiento de la prueba del Panther System .....	15
Notas del procedimiento .....	22
<b>Control de calidad</b> .....	<b>23</b>
Calibración del ensayo .....	23
Controles negativo y positivo .....	23
Calibrador interno/Control interno .....	23
<b>Interpretación de resultados</b> .....	<b>24</b>
<b>Limitaciones</b> .....	<b>25</b>
<b>Rendimiento</b> .....	<b>26</b>
Límite de detección utilizando la 1. <sup>a</sup> norma internacional de la OMS .....	26
Límite de detección en distintos genotipos de CMV .....	28
Rango lineal .....	29
Linealidad en distintos genotipos de CMV .....	31
Límite inferior de cuantificación utilizando la 1. <sup>a</sup> norma internacional de la OMS .....	33
Determinación del límite inferior de cuantificación en distintos genotipos de CMV .....	36
Reproducibilidad .....	40
Sustancias potencialmente interferentes .....	41
Especificidad .....	42
Especificidad analítica .....	43
Correlación de métodos .....	44
Contaminación por arrastre .....	45
<b>Bibliografía</b> .....	<b>46</b>

## **Información general**

### **Uso indicado**

El ensayo Aptima CMV Quant Assay es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos *in vitro* para la cuantificación del DNA del citomegalovirus humano en plasma EDTA y sangre total humanos en el Panther System totalmente automático.

El Aptima CMV Quant Assay está indicado para ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes sometidos a trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células madre hematopoyéticas.

El Aptima CMV Quant Assay no está indicado para su uso como una prueba de cribado para la presencia de CMV en la sangre o hemoderivados.

### **Resumen y explicación de la prueba**

El citomegalovirus humano (CMV) es un virus de DNA bicatenario lineal de 240 kb que pertenece a la familia del herpes y está bastante extendido. Dependiendo de la población y la región geográfica estudiadas, la seroprevalencia del CMV oscila entre el 45 y el 100 % a nivel mundial.<sup>1,2</sup> En portadores inmunocompetentes, la infección por CMV suele ser asintomática y autolimitada. No obstante, en sujetos inmunodeprimidos, como pacientes de trasplantes y personas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, el CMV es una causa significativa de morbilidad y mortalidad.

Al igual que ocurre con otros virus de la familia del herpes, tras la infección inicial, el CMV establece una infección latente de por vida que puede reactivarse esporádicamente. En receptores de trasplantes, la transferencia de CMV latente a través del injerto o la reactivación de la infección por CMV latente en el portador puede resultar en una replicación viral extensa y la difusión a varios órganos, que a menudo es potencialmente mortal.<sup>3</sup>

Debido a su rapidez y sensibilidad, la prueba cuantitativa de amplificación de ácidos nucleicos es el método de preferencia para la supervisión de la infección y la enfermedad por CMV en los receptores de trasplantes.<sup>4</sup> Según las directrices más recientes, se recomienda controlar la carga viral del CMV al menos semanalmente a modo de guía para la toma de decisiones sobre el inicio de una terapia anti-CMV y para controlar la respuesta a la terapia.<sup>5,6,8</sup> En general, los valores de carga viral más elevados se correlacionan con un mayor riesgo de enfermedad por CMV.<sup>4,9</sup> Por lo tanto, la cuantificación del DNA del CMV, junto con la presentación clínica y otros marcadores de laboratorio, es crítica para el tratamiento de los pacientes con infección por CMV.

### **Principios del procedimiento**

El Aptima CMV Quant Assay es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos *in vitro* que utiliza la tecnología de amplificación mediada por transcripción en tiempo real (TMA) del Panther System\* para cuantificar el DNA y los genotipos 1, 2, 3 y 4 del CMV. El diseño del primer se dirige al gen UL56 altamente conservado para garantizar una cuantificación precisa del DNA del CMV. El ensayo cumple con la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para el citomegalovirus humano (código NIBSC: 09/162)<sup>21</sup>.

El Aptima CMV Quant Assay implica tres pasos principales, que tienen lugar en un único tubo en el Panther System: captura seleccionada, amplificación seleccionada por TMA y detección de los productos de amplificación (amplicón) a través de sondas marcadas con fluorescencia.

\* Incluidas las variantes del Panther System.

Durante la captura seleccionada, el DNA viral se aísla de las muestras. La muestra se trata con un detergente para solubilizar la envoltura vírica, desnaturalizar las proteínas y liberar el DNA genómico viral. Los oligonucleótidos de captura hibridan con regiones altamente conservadas del DNA del CMV, si las hay, de la muestra analítica. A continuación, la diana hibridada se captura sobre micropartículas magnéticas que se separan de la muestra en un campo magnético. Los pasos de lavado eliminan los componentes extraños del tubo de reacción.

La amplificación de la diana se produce por TMA, que es un método de amplificación de ácidos nucleicos mediada por transcripción que utiliza dos enzimas: transcriptasa inversa de MMLV (virus de la leucemia murina de Moloney) y RNA polimerasa T7. La transcriptasa inversa se utiliza para generar una copia del DNA (que contiene una secuencia promotora para la RNA polimerasa T7) de la secuencia diana. La RNA polimerasa T7 genera varias copias del amplicón de RNA a partir del molde de copia de DNA.

La detección se lleva a cabo utilizando unas sondas fluorescentes de ácidos nucleicos monocatenarios que están presentes durante la amplificación de la diana e hibridan específicamente con el amplicón en tiempo real. Cada sonda fluorescente tiene un fluoróforo y un inhibidor de fluorescencia. Cuando la sonda fluorescente no se hibrida con el amplicón, el inhibidor de fluorescencia está muy cerca del fluoróforo y suprime la fluorescencia. Cuando la sonda fluorescente se une al amplicón, el inhibidor se aleja del fluoróforo, que emitirá una señal a una longitud de onda específica cuando es excitado por una fuente luminosa. Cuantas más sondas fluorescente hibridan con el amplicón, mayor es la señal fluorescente generada. El tiempo que tarda la señal fluorescente en llegar a un umbral especificado es proporcional a la concentración inicial de CMV. Cada reacción tiene un calibrador interno/control interno (IC) que controla las variaciones del procesamiento, la amplificación y la detección de las muestras. El software del Panther System determina la concentración de una muestra utilizando las señales de CMV e IC correspondientes a cada reacción y comparándolas con la información de calibración.

Los resultados del ensayo se convierten de copias/mL a IU/mL mediante el uso de una ecuación de factor de conversión integrada en el software del Panther. Esta misma ecuación de factor de conversión se utiliza para las muestras tanto de sangre total como de plasma. Cuando se selecciona el factor de conversión de sangre total en el Panther, se aplica un factor de dilución de 4 a los resultados de carga viral de CMV para las muestras de sangre total.

## Advertencias y precauciones

- A. Para uso diagnóstico *in vitro*.
- B. Para uso profesional.
- C. Para reducir el riesgo de obtener resultados no válidos, lea atentamente el prospecto completo y el *Panther/Panther Fusion System Operator's Manual* (Manual del usuario del Panther/Panther Fusion System) correspondiente antes de realizar este ensayo.

## Información para los laboratorios

- D. PRECAUCIÓN: Los controles de este ensayo contienen plasma humano. El plasma es negativo para antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), anticuerpos anti-HCV, anticuerpos anti-HIV-1 y anti-HIV-2, y antígeno de HIV cuando se analiza con procedimientos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Además, el plasma es no reactivo para DNA de CMV, DNA de HBV, RNA de HCV y RNA de HIV-1 cuando se analiza con pruebas de ácidos nucleicos aprobadas utilizando muestras mezcladas. Todo el material proveniente de sangre humana debe considerarse potencialmente infeccioso y manipularse según las precauciones universales.<sup>10,11,12</sup>

- E. Este procedimiento solamente debe realizarlo personal formado adecuadamente en el uso del Aptima CMV Quant Assay y en la manipulación de material potencialmente infeccioso. Si se produce algún derrame, proceda inmediatamente a la desinfección siguiendo los procedimientos adecuados del centro.
- F. Utilice únicamente el instrumental de laboratorio desechable suministrado o especificado.
- G. Respete las precauciones habituales del laboratorio. No pipetee con la boca. No coma, beba ni fume en las áreas de trabajo designadas. Utilice guantes desechables sin polvo, protección para los ojos y batas de laboratorio al manipular las muestras y los reactivos del kit. Lávese bien las manos después de manipular las muestras y los reactivos del kit.
- H. Las superficies de trabajo, pipetas y otros equipos se deben descontaminar regularmente con solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M).
- I. Deseche todo el material que haya entrado en contacto con las muestras y los reactivos de acuerdo con la normativa local, estatal y comunitaria.<sup>10,11,12,13</sup> Limpie a fondo y desinfecte todas las superficies de trabajo.
- J. Los controles contienen azida sódica como conservante. No utilice tubos de metal para transferir reactivos. Si se desechan soluciones que contengan compuestos de azida sódica en un sistema de tuberías, dichas soluciones se deben diluir y eliminar enjuagando el desagüe con abundante agua corriente. Se recomienda seguir estas precauciones para evitar la acumulación de depósitos en tuberías de metal, donde pueden darse las condiciones necesarias para una explosión.
- K. Las buenas prácticas estándar para laboratorios moleculares incluyen la vigilancia medioambiental. Para vigilar el entorno de un laboratorio, se sugiere el procedimiento siguiente:
1. Tome una torunda con punta de algodón y emparéjela con un tubo de alícuotas de muestras Aptima (SAT).
  2. Etiquete adecuadamente cada SAT.
  3. Llene cada SAT con 1 mL de diluyente de muestras Aptima.
  4. Para recoger muestras de superficie, humedezca ligeramente una torunda con agua desionizada libre de nucleasas.
  5. Ponga en contacto la torunda con la superficie de interés utilizando un movimiento vertical de arriba abajo. Gire la torunda una media vuelta mientras la mantiene en contacto con el lugar.
  6. Coloque inmediatamente la muestra de la torunda en el tubo y agite suavemente la torunda en el diluyente para extraer el material absorbido. Presione la torunda contra un lado del tubo de transporte para extraer tanto líquido como sea posible. Deseche la torunda y tape el tubo.
  7. Repita los pasos con las muestras de las torundas restantes.
  8. Analice la torunda con un ensayo molecular.



### Información sobre las muestras



- L. Las muestras pueden ser infecciosas. Respete las precauciones universales<sup>10,11,12</sup> al realizar este ensayo. Deben establecerse métodos correctos de manipulación y eliminación de material según la normativa local.<sup>11</sup> Este procedimiento solamente debe realizarlo personal formado adecuadamente en el uso del Aptima CMV Quant Assay y en la manipulación de material potencialmente infeccioso.
- M. Mantenga las condiciones de almacenamiento apropiadas durante el envío de muestras para garantizar su integridad. No se ha evaluado la estabilidad de las muestras en condiciones de envío distintas a las recomendadas.
- N. Evite la contaminación cruzada durante los pasos de manipulación de muestras. Tenga especial cuidado para evitar la contaminación por la difusión de aerosoles al aflojar o destapar los tubos de muestras. Las muestras pueden contener concentraciones extremadamente altas de organismos. Asegúrese de que los recipientes de muestras no entren en contacto unos con otros y deseche los materiales usados sin pasarlos por encima de los recipientes abiertos. Cambie los guantes si entran en contacto con la muestra.

### Información sobre el ensayo

- O. No utilice el kit de reactivos, el calibrador ni los controles después de la fecha de caducidad.
- P. No intercambie, mezcle ni combine reactivos de ensayo de kits con números de lote maestro diferentes. Los fluidos del ensayo pueden ser de números de lote diferentes. Los controles y el calibrador pueden ser de números de lote diferentes.
- Q. Evite la contaminación microbiana y por nucleasas de los reactivos.
- R. Tape y almacene todos los reactivos de ensayo a las temperaturas especificadas. El uso de reactivos de ensayo almacenados incorrectamente puede afectar al rendimiento del ensayo. Consulte *Requisitos de almacenamiento y manipulación de reactivos* y *Procedimiento de la prueba del Panther System* para obtener más información.
- S. No combine ningún reactivo ni fluido de ensayo sin instrucciones específicas. No rellene los frascos de reactivos o de fluidos. El Panther System verifica los niveles de reactivo.
- T. Evite el contacto del TER con la piel, los ojos y las mucosas. Lave el área afectada con agua si se produce contacto con este reactivo. Si el reactivo se derrama, dilúyalo con agua antes de seguir los procedimientos adecuados del centro de trabajo.
- U. Algunos reactivos de este kit están etiquetados con símbolos de riesgo y seguridad.

**Nota:** La comunicación sobre peligros refleja las clasificaciones de las hojas de datos de seguridad (SDS) de la UE. Para obtener información sobre la comunicación de peligros específica de su región, consulte la SDS específica de la región en la Biblioteca de hojas de datos de seguridad en [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com)

Información sobre riesgos de la UE	
	<p><b>Controles del kit de CMV</b>  <b>Plasma humano 95-100 %</b>  <b>Azida sódica &lt;1 %</b></p>
	<p><b>ADVERTENCIA</b>  H312 - Nocivo en contacto con la piel  H412 - Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos  EUH032 - El contacto con ácidos libera gases muy tóxicos  P273 - Evitar su liberación al medio ambiente  P280 - Llevar gafas/máscara de protección</p>

**Reactivo potenciador de diana (TER)**  
**Hidróxido de litio monohidratado al 5-10 %**

**PELIGRO**  
H302 - Nocivo en caso de ingestión  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

### Requisitos de almacenamiento y manipulación de reactivos

A. La tabla siguiente muestra las condiciones de almacenamiento y la estabilidad de los reactivos, los controles y el calibrador.

Reactivo	Almacenamiento sin abrir	Kit abierto (reconstituido)	
		Almacenamiento	Estabilidad
Reactivo de amplificación qCMV	2 °C a 8 °C		
Solución de reconstitución de amplificación qCMV	2 °C a 8 °C	2 °C a 8 °C	30 días <sup>a</sup>
Reactivo enzimático qCMV	2 °C a 8 °C		
Solución de reconstitución de enzimática qCMV	2 °C a 8 °C	2 °C a 8 °C	30 días <sup>a</sup>
Reactivo promotor qCMV	2 °C a 8 °C		
Solución de reconstitución del promotor qCMV	2 °C a 8 °C	2 °C a 8 °C	30 días <sup>a</sup>
Reactivo de captura qCMV	2 °C a 8 °C	2 °C a 8 °C	30 días <sup>a</sup>
PCAL qCMV (calibrador positivo)	-15 °C a -35 °C	15 °C a 30 °C	Vial de un solo uso Usar en 24 horas
qCMV NC CONTROL – (control negativo)	-15 °C a -35 °C	15 °C a 30 °C	Vial de un solo uso Usar en 24 horas
qCMV LPC CONTROL + (control positivo bajo)	-15 °C a -35 °C	15 °C a 30 °C	Vial de un solo uso Usar en 24 horas
qCMV HPC CONTROL + (control positivo alto)	-15 °C a -35 °C	15 °C a 30 °C	Vial de un solo uso Usar en 24 horas
Reactivo potenciador de diana qCMV	15 °C a 30 °C	15 °C a 30 °C	30 días <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Al retirarlos del Panther System, los reactivos se deben volver a guardar inmediatamente a sus temperaturas de almacenamiento adecuadas.

B. Deseche todos los reactivos reconstituidos, el reactivo de captura (TCR) y el reactivo potenciador de diana (TER) no utilizados después de 30 días o de la fecha de caducidad del lote maestro, lo que ocurra primero.

- C. Los reactivos almacenados en el Panther System tienen 96 horas de estabilidad en el instrumento. Los reactivos pueden cargarse en el Panther System hasta 8 veces. El Panther System registra cada vez que se cargan los reactivos.
- D. Tras descongelar el calibrador, la solución debe ser transparente, es decir, no debe presentar turbidez ni precipitados.
- E. Tanto el reactivo promotor liofilizado como el reactivo promotor reconstituido son fotosensibles. Proteja estos reactivos de la luz durante el almacenamiento y la preparación para el uso.
- F. El reactivo potenciador de diana qCMV debe estar a una temperatura de 15 °C a 30 °C antes del uso.

## Recogida y almacenamiento de muestras

**Nota:** Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes posiblemente infecciosos. Respete las precauciones universales.

**Nota:** Tenga cuidado para evitar la contaminación cruzada durante los pasos de manipulación de las muestras. Por ejemplo, deseche el material usado sin hacerlo pasar sobre tubos abiertos.

**Nota:** Para el almacenamiento de muestras, solo se recomiendan tubos secundarios de plástico.

Las muestras de sangre total recogidas en los siguientes tubos de cristal o plástico se pueden utilizar para la preparación de plasma:

- Tubos con anticoagulantes con EDTA
- Tubos de preparación de plasma (PPT)

### A. Recogida de muestras

1. Plasma: La sangre total se puede almacenar entre 2 °C y 30 °C, y se debe centrifugar en las 24 horas posteriores a la recogida de la muestra. Separe el plasma del sedimento de eritrocitos siguiendo las instrucciones del fabricante del tubo utilizado. El plasma se puede analizar en el Panther System en un tubo primario o transferirse a un tubo secundario como el tubo de alícuotas de muestras (SAT) Aptima. Para obtener el volumen de muestra de 500 µL, el volumen mínimo de plasma para el tubo de recogida primario es de hasta 1200 µL. Para los tubos secundarios, el volumen mínimo es 700 µL para obtener el volumen de muestra de 500 µL. En la siguiente tabla, se muestran los requisitos de volumen muerto para cada tipo de tubo primario y secundario.

Tubo (tamaño y tipo)	Volumen muerto en Panther
Tubo de alícuotas de muestras (SAT) Aptima	0,2 mL
12 x 75 mm	0,5 mL
13 x 100 mm	0,5 mL
13 x 100 mm con gel	0,3 mL
16 x 100 mm con gel	0,7 mL

Si no se analiza inmediatamente, el plasma se puede almacenar según con las especificaciones que se indican más adelante. Si se transfiere a un tubo secundario, el plasma se puede congelar a -20 °C o -70 °C. No lleve a cabo más de tres ciclos de congelación-descongelación. No congele las muestras de plasma en tubos de recogida primarios con EDTA.

2. Antes de su análisis en el Panther System, la sangre total se debe procesar mediante el uso de tubos de diluyente de sangre total prellenados. No someta las muestras de sangre total sin procesar a más de tres ciclos de congelación-descongelación.




## B. Condiciones de almacenamiento de las muestras

## 1. Muestra de plasma EDTA

La sangre total se puede almacenar entre 2 °C y 30 °C, y se debe centrifugar en las 24 horas posteriores a la recogida de la muestra. Posteriormente, el plasma se puede almacenar en una de las condiciones siguientes:

- En el tubo de recogida primario o en el tubo secundario, entre 2 °C y 30 °C durante un máximo de 24 horas.
- En el tubo de recogida primario o en el tubo secundario, entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 5 días.
- En el tubo secundario a -20 °C o -70 °C durante un máximo de 60 días.

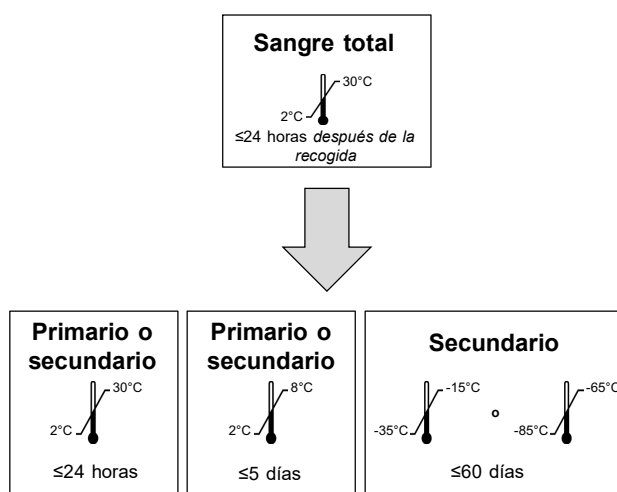


**Figura 1. Condiciones de almacenamiento de los tubos con EDTA**

2. Muestras de PPT

La sangre total se puede almacenar entre 2 °C y 30 °C, y se debe centrifugar en las 24 horas posteriores a la recogida de la muestra. Posteriormente, el plasma se puede almacenar en una de las condiciones siguientes:

- En el PPT, entre 2 °C y 30 °C durante un máximo de 24 horas.
- En el PPT, entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 5 días.
- En el PPT a -20 °C o -70 °C durante un máximo de 60 días.

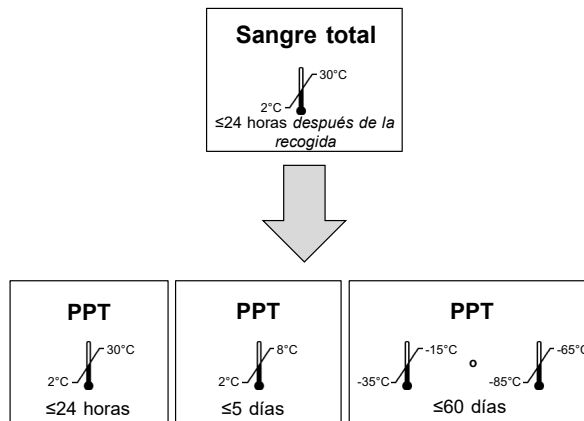


**Figura 2. Condiciones de almacenamiento de los PPT**

3. Muestras de sangre total

La sangre total se puede almacenar entre 15 °C y 30 °C durante un máximo de 36 horas después de la recogida de la muestra. Las muestras de sangre total recogidas se pueden almacenar bajo una de las condiciones siguientes:

- En el tubo de recogida primario, entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 5 días.
- En el tubo de recogida primario a -20 °C o -70 °C durante un máximo de 60 días.

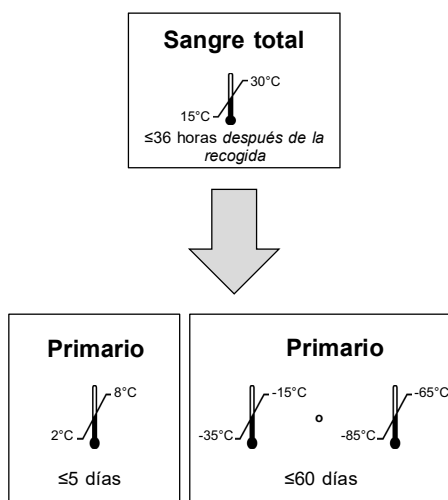

**Figura 3. Condiciones de almacenamiento de las muestras de sangre total**

### Muestras almacenadas en el Panther System

Las muestras de plasma y de sangre total procesada se pueden dejar sin tapar en el Panther System durante un máximo de 8 horas. Las muestras pueden retirarse del Panther System y analizarse siempre que el tiempo total transcurrido en el instrumento no supere las 8 horas antes de que el Panther System pipetee la muestra.

### Transporte de muestras

Mantenga las condiciones de almacenamiento de las muestras como se describe en *Recogida y almacenamiento de muestras*.

**Nota:** Las muestras se deben enviar respetando las normativas de transporte regional, nacional e internacional aplicables.

## Panther System

Los reactivos del Aptima CMV Quant Assay para uso con el Panther System se indican a continuación. Los símbolos de identificación de los reactivos también se indican junto al nombre del reactivo.

### Reactivos y materiales suministrados

**Kit del Aptima CMV Quant Assay**, 100 pruebas (n.º de ref. PRD-05074)

(1 caja del ensayo, 1 kit de calibrador, 1 kit de controles y 1 caja del reactivo potenciador de diana)

#### Caja del Aptima CMV Quant Assay

(almacenar entre 2 °C y 8 °C tras la recepción)

Símbolo	Componente	Cantidad
<b>A</b>	<b>Reactivo de amplificación qCMV</b> <i>Ácidos nucleicos no infecciosos desecados en solución de tampón.</i>	1 vial
<b>E</b>	<b>Reactivo enzimático qCMV</b> <i>Transcriptasa inversa y RNA polimerasa desecadas en solución de tampón HEPES.</i>	1 vial
<b>PRO</b>	<b>Reactivo promotor qCMV</b> <i>Ácidos nucleicos no infecciosos desecados en solución de tampón.</i>	1 vial
<b>AR</b>	<b>Solución de reconstitución de amplificación qCMV</b> <i>Solución acuosa con glicerol y conservantes.</i>	1 × 7,2 mL
<b>ER</b>	<b>Solución de reconstitución de enzimática qCMV</b> <i>Solución de tampón HEPES con un surfactante y glicerol.</i>	1 × 5,8 mL
<b>PROR</b>	<b>Solución de reconstitución del promotor qCMV</b> <i>Solución acuosa con glicerol y conservantes.</i>	1 × 4,5 mL
<b>TCR</b>	<b>Reactivo de captura qCMV</b> <i>Ácidos nucleicos en una solución salina de tampón con fase sólida, ácidos nucleicos no infecciosos y calibrador interno.</i>	1 × 72,0 mL
	<b>Collares de reconstitución</b>	3
	<b>Hoja de códigos de barras del lote maestro</b>	1 hoja

**Kit de calibrador del Aptima CMV Quant** (n.º de ref. PRD-05075)

(almacenar entre -15 °C y -35 °C tras la recepción)

Símbolo	Componente	Cantidad
<b>PCAL</b>	<b>Calibrador positivo qCMV</b> <i>DNA plasmídico en solución de tampón.</i>	5 × 2,5 mL
	<b>Etiqueta de código de barras del calibrador</b>	—

**Kit de controles del Aptima CMV Quant** (n.º de ref. PRD-05076)  
(almacenar entre -15 °C y -35 °C tras la recepción)

Símbolo	Componente	Cantidad
NC	<b>Control negativo qCMV</b> <i>Plasma humano desfibrinado negativo para CMV con gentamicina y azida sódica al 0,2 % como conservantes.</i>	5 × 0,8 mL
LPC	<b>Control positivo bajo qCMV</b> <i>CMV inactivado en plasma humano desfibrinado con gentamicina y azida sódica al 0,2 % como conservantes.</i>	5 × 0,8 mL
HPC	<b>Control positivo alto qCMV</b> <i>CMV inactivado en plasma humano desfibrinado con gentamicina y azida sódica al 0,2 % como conservantes.</i>	5 × 0,8 mL
	<b>Etiqueta de código de barras de los controles</b>	—

**Caja del reactivo potenciador de diana Aptima CMV Quant**  
(almacenar entre 15 °C y 30 °C tras la recepción)

Símbolo	Componente	Cantidad
TER	<b>Reactivo potenciador de diana qCMV</b> <i>Solución concentrada de hidróxido de litio.</i>	1 × 46,0 mL

**Material necesario que debe adquirirse por separado**

**Nota:** A menos que se indique lo contrario, los materiales comercializados por Hologic aparecen en la lista con su referencia.

Material	N.º de referencia
Panther® System	—
Kit de ciclo del Panther para ensayos en tiempo real (solo para ensayos en tiempo real)	PRD-03455 (5000 pruebas)
<i>Kit de fluidos del ensayo Aptima® (también denominado kit de fluidos universales)</i>	303014 (1000 pruebas)
<i>Contiene solución de lavado Aptima, tampón para fluido de desactivación Aptima y reactivo de aceite Aptima</i>	
<i>Unidades multitubo (MTU)</i>	104772-02
<i>Juego de bolsas de desechos Panther</i>	902731
<i>Tapa del recipiente de desechos Panther</i>	504405
O kit de ciclo del Panther System	303096 (5000 pruebas)
<i>(Cuando se procesan ensayos TMA que no son en tiempo real junto con ensayos TMA en tiempo real) Contiene MTU, bolsas de desechos, tapas del recipiente de desechos, Auto Detect y fluidos del ensayo</i>	
Tubos de diluyente de sangre total (solo para el procesamiento de sangre total)	PRD-06783 (100 tubos prellenados por bolsa)
Puntas conductoras de 1000 µL, detectoras de líquido	10612513 (Tecan)
Lejía, solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M)	—
Guantes desechables sin polvo	—
Tapones no perforables de repuesto	103036A
Tapones sólidos Hologic de repuesto (tapón de tubo de un solo uso para el procesamiento de sangre)	PRD-06720
Tapones de repuesto para reactivos	
<i>Frascos de reconstitución de reactivos de amplificación, enzimático y promotor</i>	CL0041 (100 tapones)
<i>Frasco de TCR</i>	CL0040 (100 tapones)
<i>Frasco de TER</i>	903302 (100 tapones)
Cubiertas con forro de plástico para mesas de laboratorio	—
Paños sin pelusa	—
Pipeteador	—
Puntas	—
Opciones para el tubo de recogida primario (EDTA y PPT):	—
<i>13 mm × 100 mm</i>	
<i>13 mm × 75 mm</i>	
<i>16 mm × 100 mm</i>	
Centrifugadora	—
Mezclador vórtex	—

## Materiales opcionales

Material	N.º de referencia
Opciones para el tubo secundario:	
12 mm × 75 mm	—
13 mm × 100 mm	—
16 mm × 100 mm	—
Tubos de alícuotas de muestras Aptima (SAT) (paquete de 100)	503762
Tapón de tubo de transporte (paquete de 100)	504415
Tapón para SAT	
Diluyente de muestras Aptima	PRD-03003
Kit de diluyente de muestras Aptima	PRD-03503
Contiene diluyente de muestras Aptima, 100 SAT y 100 tapones	
Pipetas de transferencia	—
Torundas con puntas de algodón	—
Balancín para tubos	—

## Procedimiento de la prueba del Panther System

**Nota:** Consulte el Manual del usuario del Panther/Panther Fusion System para obtener más información sobre los procedimientos.

### A. Preparación del área de trabajo

1. Limpie las superficies de trabajo donde se prepararán los reactivos. Limpie las superficies de trabajo con una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 %-3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Deje la solución de hipoclorito de sodio en contacto con las superficies durante 1 minuto como mínimo y, a continuación, enjuague con agua desionizada (DI). No deje que la solución de hipoclorito de sodio se seque. Cubra la superficie de la mesa con una cubierta absorbente con forro de plástico para mesas de laboratorio limpia.
2. Limpie una superficie de trabajo aparte para preparar las muestras. Utilice el procedimiento descrito anteriormente (paso A.1).
3. Limpie los pipeteadores que vaya a utilizar. Utilice el procedimiento de limpieza descrito anteriormente (paso A.1).

### B. Preparación del calibrador y de los controles

Deje que el calibrador y los controles alcancen una temperatura de entre 15 °C y 30 °C antes de procesarlos de la manera siguiente:

1. Retire el calibrador y los controles del almacenamiento (entre -15 °C y -35 °C) y colóquelos a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C. Durante el proceso de descongelación, invierta ligeramente cada tubo para mezclar completamente su contenido. Asegúrese de que el contenido de los tubos esté completamente descongelado antes del uso.

**Opción.** Los tubos del calibrador y de los controles pueden ponerse en un balancín para tubos para mezclar bien su contenido. Asegúrese de que el contenido de los tubos esté completamente descongelado antes del uso.

**Nota:** Evite que se forme demasiada espuma al invertir el calibrador y los controles. La espuma afecta a la detección del nivel en el Panther System.

2. Cuando el contenido de los tubos se haya descongelado, seque la parte exterior del tubo con un paño desechable limpio y seco.
3. Para evitar la contaminación, no abra los tubos.

C. Reconstitución y preparación de reactivos de un nuevo kit

**Nota:** La reconstitución de los reactivos debe llevarse a cabo antes de iniciar cualquier tarea en el Panther System.

1. Para preparar el reactivo de captura (TCR), haga lo siguiente:
  - a. Retire el TCR del almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C). Asegúrese de que el número de lote del frasco de TCR coincida con el número de lote de la hoja de códigos de barras del lote maestro.
  - b. Agite de inmediato y enérgicamente el frasco de TCR 10 veces. Deje que el frasco de TCR permanezca entre 15 °C y 30 °C durante un mínimo de 45 minutos para que se caliente. Durante este periodo, agite e invierta el frasco de TCR al menos cada 10 minutos.


**Opción.** El frasco de TCR puede prepararse en un balancín para tubos siguiendo estas instrucciones: Retire el TCR del almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C) y agítelo de inmediato y enérgicamente 10 veces. Ponga el frasco de TCR en un balancín para tubos y déjelo entre 15 °C y 30 °C durante un mínimo de 45 minutos para que se caliente.

- c. Asegúrese de que todo el precipitado se haya disuelto y de que las partículas magnéticas estén suspendidas antes del uso.
2. Para reconstituir los reactivos de amplificación, enzimático y promotor, haga lo siguiente:
  - a. Retire los reactivos liofilizados y las soluciones de reconstitución correspondientes del almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C). Empareje cada solución de reconstitución con su reactivo liofilizado.
  - b. Asegúrese de que las etiquetas de los frascos de la solución de reconstitución y del reactivo liofilizado sean del mismo color. Compruebe los números de lote en la hoja de códigos de barras del lote maestro para asegurarse de que se han emparejado los reactivos adecuados.
    - i. Abra el vial de reactivo liofilizado retirando el precinto metálico y el tapón de goma.
    - ii. Inserte firmemente el extremo ranurado del collar de reconstitución (negro) en el vial (Figura 4, paso 1).
    - iii. Abra el frasco de solución de reconstitución correspondiente y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.
    - iv. Ponga el frasco de solución de reconstitución sobre una superficie estable (p. ej., una mesa de trabajo). A continuación, invierta el vial de reactivo liofilizado sobre el frasco de solución de reconstitución y acople firmemente el collar al frasco de solución de reconstitución (Figura 4, paso 2).
    - v. Invierta lentamente los frascos acoplados (el vial acoplado al frasco de solución) para permitir que la solución pase al vial de cristal (Figura 4, paso 3).
    - vi. Agite los frascos acoplados durante un mínimo de 10 segundos (Figura 4, paso 4).
    - vii. Espere al menos 30 minutos para que el reactivo liofilizado entre en la solución.



- viii. Una vez que el reactivo liofilizado haya entrado en la solución, agite los frascos acoplados durante un mínimo de 10 segundos y, a continuación, balancee ligeramente la solución en el interior del vial de cristal hacia delante y hacia atrás para mezclarla bien.
- c. Inclíne lentamente de nuevo los frascos acoplados para hacer que toda la solución vuelva al frasco de solución de reconstitución (Figura 4, paso 5).
- d. Retire con cuidado el collar de reconstitución y el vial de cristal (Figura 4, paso 6).
- e. Vuelva a tapar el frasco. Registre las iniciales del usuario y la fecha de reconstitución en la etiqueta (Figura 4, paso 7).
- f. Deseche el collar de reconstitución y el vial de cristal (Figura 5, paso 8).

**Advertencia:** Evite que se forme demasiada espuma al reconstituir los reactivos. La espuma afecta a la detección del nivel en el Panther System.

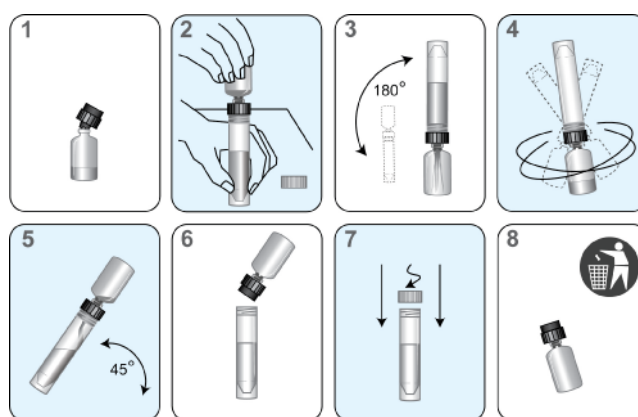

**Figura 4. Proceso de reconstitución de los reactivos**

- 3. Retire el reactivo potenciador de diana qCMV del almacenamiento (entre 15 °C y 30 °C). Anote las iniciales del usuario y la fecha de apertura en la etiqueta. Asegúrese de que el número de lote del frasco de TER coincida con el número de lote de la hoja de códigos de barras del lote maestro.
- D. Preparación de los reactivos previamente reconstituidos
- 1. Retire los reactivos previamente preparados del almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C). Los reactivos de amplificación, enzimático, promotor y TCR previamente preparados deben alcanzar una temperatura de entre 15 °C y 30 °C antes del inicio del ensayo.
  - 2. Retire el TER del almacenamiento (entre 15 °C y 30 °C).
  - 3. En el caso del TCR previamente preparado, lleve a cabo el paso C.1 descrito anteriormente antes de cargarlo en el sistema.
  - 4. Agite e invierta los reactivos de amplificación, enzimático y promotor para mezclarlos bien antes de cargarlos en el sistema. Evite que se forme demasiada espuma al invertir los reactivos.

**Opción.** Los reactivos previamente preparados se pueden preparar en un balancín para tubos siguiendo estas instrucciones: Retire los reactivos del almacenamiento (entre 2 °C y 8 °C). Ponga los reactivos en un balancín para tubos y déjelos entre 15 °C y 30 °C durante un mínimo de 30 minutos para que se calienten.

5. No rellene los frascos de reactivo. El Panther System reconocerá y rechazará los frascos que se hayan rellenado.

#### E. Manipulación de muestras de plasma

1. Asegúrese de que las muestras procesadas en los tubos primarios o las muestras sin diluir en los tubos secundarios se almacenen correctamente de acuerdo con lo descrito en *Recogida y almacenamiento de muestras*
2. Asegúrese de descongelar por completo las muestras congeladas. Agite las muestras descongeladas con un mezclador vórtex de 3 a 5 segundos para mezclarlas bien.
3. Deje que las muestras alcancen una temperatura de entre 15 °C y 30 °C antes de procesarlas. Consulte *Muestras almacenadas en el Panther System* para obtener más información sobre la permanencia en el instrumento.
4. Asegúrese de que cada tubo de recogida primario contenga hasta 1200 µl de muestra o de que cada tubo secundario contenga al menos 700 µl de muestra. Consulte la tabla que se proporciona en *Recogida de muestras* para identificar los requisitos de volumen muerto para cada tipo de tubo primario y secundario.
5. Justo antes de cargar las muestras en una gradilla, centrifugue cada muestra entre 1000 y 3000g durante 10 minutos. No retire los tapones en este paso.

Consulte el paso G.2 a continuación para obtener información sobre la carga de la gradilla y la retirada de los tapones.

#### F. Manipulación de muestras de sangre total

1. Asegúrese de que las muestras procesadas en los tubos primarios se almacenen correctamente de acuerdo con lo descrito en *Recogida y almacenamiento de muestras*.
2. Asegúrese de descongelar por completo las muestras congeladas.
3. Deje que las muestras alcancen una temperatura de entre 15 °C y 30 °C antes de procesarlas. Consulte *Muestras almacenadas en el Panther System* para obtener más información sobre la permanencia en el instrumento.
4. Invierta ligeramente los tubos de sangre total al menos 3 veces, o mézclelos ligeramente en un balancín, hasta que la sangre sea homogénea.
5. Antes de procesar las muestras, realice el siguiente procedimiento para cada muestra.
  - a. La sangre en tubos primarios se debe mezclar completamente por inversión y la muestra se debe transferir de inmediato al tubo que contiene el diluyente de sangre total.
  - b. Agregue 500 µL de muestras de sangre total al tubo de diluyente de sangre total.
  - c. Coloque el tapón y agite la muestra con un mezclador vórtex durante al menos 5 segundos.

Consulte el paso G.2 a continuación para obtener información sobre la carga de la gradilla y la retirada de los tapones.

#### G. Preparación del sistema

1. Prepare el sistema de acuerdo con las instrucciones del *Manual del usuario del Panther/Panther Fusion System* y las *Notas del procedimiento*. Asegúrese de que se utilicen las gradillas para reactivos y los adaptadores de TCR del tamaño adecuado.


2. Cargue las muestras en la gradilla de muestras. Lleve a cabo los pasos siguientes para cada tubo de muestras (muestra y, cuando sea necesario, calibrador y controles).
    - a. Afloje el tapón de un tubo de muestras, pero no lo retire aún.

**Nota:** *Tenga especial cuidado para evitar la contaminación por la difusión de aerosoles. Afloje ligeramente los tapones de los tubos de muestras.*
    - b. Cargue el tubo de muestras en la gradilla de muestras.
    - c. Repita los pasos 2.a y 2.b para todas las muestras restantes.
    - d. Una vez cargadas las muestras en la gradilla de muestras, retire y deseche los tapones de todos los tubos de muestras de una gradilla de muestras. Para evitar la contaminación, no pase ningún tapón sobre otras gradillas de muestras o tubos de muestras.
    - e. Si es necesario, utilice una pipeta de transferencia desechable nueva para eliminar las burbujas y la espuma. La presencia de burbujas en el tubo afecta a la detección del nivel por parte del Panther System.
    - f. Cuando haya retirado el último tapón, cargue la gradilla de muestras en el compartimento de muestras.

**Nota:** *Antes de cargar la gradilla de muestras en el compartimento de muestras, fije el retenedor muestras si está procesando otros ensayos y tipos de muestras al mismo tiempo.*
    - g. Repita los pasos del 2.a al 2.f con la siguiente gradilla de muestras.
- H. Preparación del sistema: aplicación del factor de conversión de muestras de sangre total
1. Prepare el sistema siguiendo las instrucciones del *Manual del usuario del Panther System*.
  2. Cargue la gradilla de muestras.
  3. Aplique el factor de conversión de sangre total a los pedidos de pruebas del ensayo para muestras de sangre total.

**Nota:** *El factor de conversión de sangre total se puede aplicar a una gradilla completa o un único pedido de pruebas.*
- Para aplicar el factor de conversión de sangre total a toda una gradilla de muestras de sangre total, haga lo siguiente:
- a. En la pantalla *Sample Rack Bay* (Compartimento de gradillas de muestras), haga doble clic en la gradilla de interés. Se abrirá la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras) para la gradilla seleccionada.
  - b. Seleccione **Dilute All (Diluir todo)**.

Se muestra la ventana Dilution Factor (Factor de dilución).

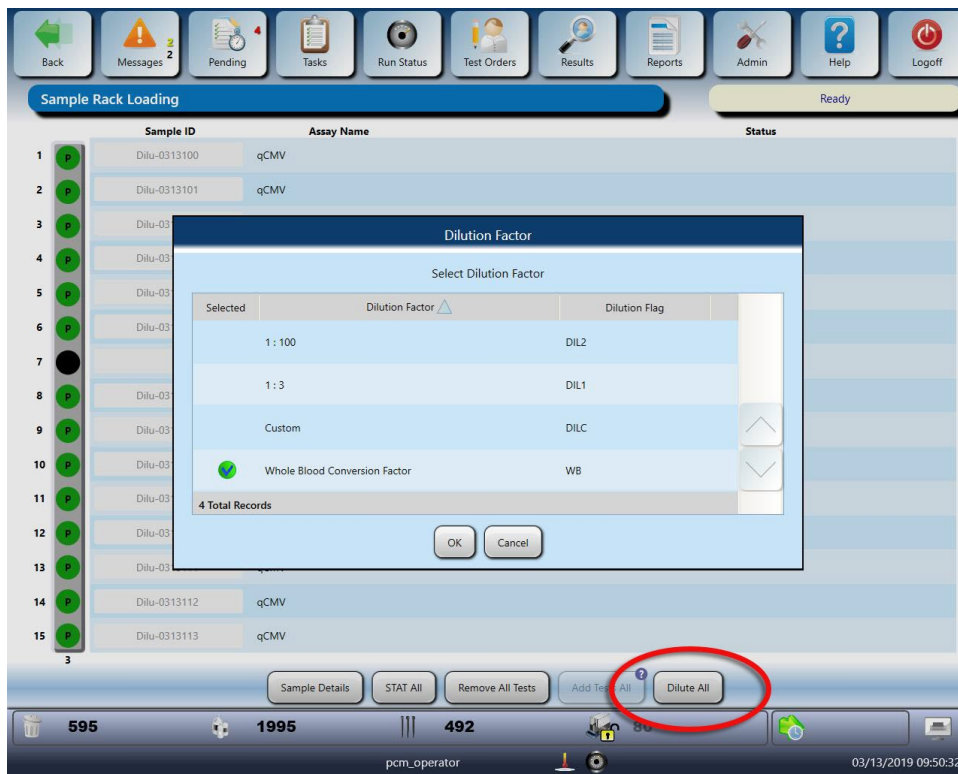


**Figura 5. Ventana Dilution Factor (Factor de dilución) de la pantalla Sample Rack Loading (Carga de gradillas de muestras)**

- c. Seleccione **Whole Blood Conversion Factor (Factor de conversión de sangre total)**.
- d. Seleccione **OK (Aceptar)**.  
Se muestra la ventana *Set Dilution Factor for Rack* (Establecer factor de dilución para la gradilla).
- e. Seleccione **Yes (Sí)** para aplicar la marca de factor de conversión de sangre total a toda la gradilla de muestras de sangre total.

Para aplicar el factor de conversión de sangre total a un único pedido de pruebas (p. ej., a la cuarta muestra de la gradilla; consulte la ilustración a continuación), haga lo siguiente:

- a. En la pantalla *Sample Rack Bay* (Compartimento de gradillas de muestras), haga doble clic en la gradilla cargada que incluye la muestra o las muestras de interés.  
Se muestra la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras) para la gradilla de muestras seleccionada.
- b. En la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras), haga doble clic en la muestra de interés.  
Se muestra la pantalla *Sample Details* (Detalles de la muestra) con los pedidos de pruebas actuales para la muestra seleccionada.
- c. Seleccione el pedido de pruebas de interés en el panel *Test Orders* (Pedidos de pruebas).
- d. Seleccione **Apply Dilution (Aplicar dilución)**.

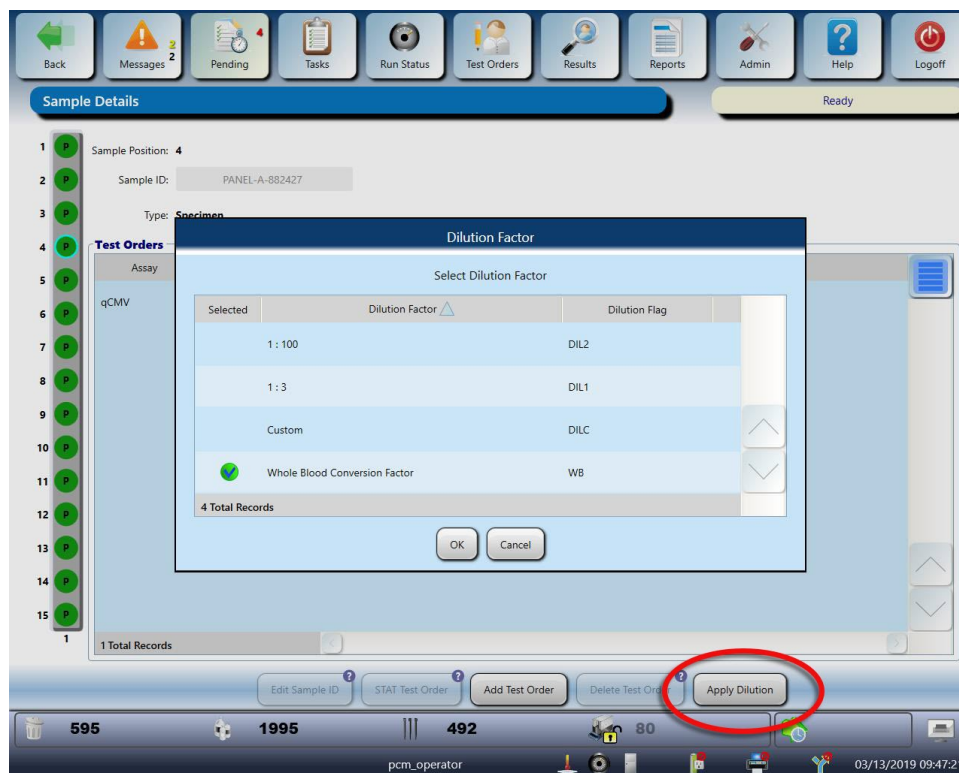

**Figura 6. Ventana Dilution Factor (Factor de dilución) de la pantalla Sample Details (Detalles de la muestra)**

- e. Seleccione **Whole Blood Conversion Factor (Factor de conversión de sangre total)**.
  - f. Seleccione **OK (Aceptar)** para aplicar la marca de factor de conversión de sangre total a los pedidos de pruebas seleccionados.
4. Si es necesario, el factor de sangre total se puede eliminar de los pedidos de pruebas antes de que se inicie su procesamiento.

Para eliminar el factor de conversión de sangre total de toda una gradilla, haga lo siguiente:

1. En la pantalla *Sample Rack Bay* (Compartimento de gradillas de muestras), haga doble clic en la gradilla de interés.  
Se abrirá la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras) para la gradilla seleccionada.
2. Seleccione **Dilute All (Diluir todo)**.
3. En la ventana *Dilution Factor* (Factor de dilución), anule la selección de **Whole Blood Conversion Factor (Factor de conversión de sangre total)**.
4. Seleccione **OK (Aceptar)**.  
Se muestra la ventana *Set Dilution Factor for Rack* (Establecer factor de dilución para la gradilla).
5. Seleccione **Yes (Sí)** para eliminar el factor de conversión de sangre total de toda una gradilla.

Para eliminar el factor de conversión de sangre total de pedidos de pruebas, haga lo siguiente:

1. En la pantalla *Sample Rack Bay* (Compartimento de gradillas de muestras), haga doble clic en la gradilla cargada que incluye la muestra o las muestras de interés.  
Se muestra la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras) para la gradilla de muestras seleccionada.
2. En la pantalla *Sample Rack Loading* (Carga de gradillas de muestras), haga doble clic en la muestra de interés.  
Se muestra la pantalla *Sample Details* (Detalles de la muestra) con los pedidos de pruebas actuales para la muestra seleccionada.
3. Seleccione el pedido de pruebas de interés en el panel *Test Orders* (Pedidos de pruebas).
4. Seleccione **Apply Dilution (Aplicar dilución)**.
5. En la ventana *Dilution Factor* (Factor de dilución), anule la selección de **Whole Blood Conversion Factor (Factor de conversión de sangre total)**.
6. Seleccione **OK (Aceptar)** para eliminar el factor de conversión de sangre total del pedido de pruebas.

## Notas del procedimiento

### A. Calibrador y controles

1. Los tubos del calibrador positivo qCMV, del control positivo bajo qCMV, del control positivo alto qCMV y del control negativo qCMV se pueden cargar en cualquier posición de la gradilla de muestras y en cualquier carril del compartimento de muestras del Panther System. El pipeteo de las muestras comenzará cuando se cumpla una de las dos siguientes condiciones:
  - a. El sistema está procesando actualmente el calibrador y los controles.
  - b. Existen resultados válidos para el calibrador y los controles registrados en el sistema.
2. Una vez que los tubos del calibrador y los controles se hayan pipeteado y se estén procesando para el kit de reactivos del Aptima CMV Quant Assay, las muestras podrán analizarse con el kit reconstituido asociado durante un periodo máximo de 24 horas **a menos que**:
  - a. Los resultados del calibrador o los controles no sean válidos.
  - b. Se retire del sistema el kit de reactivos de ensayo asociado.
  - c. El kit de reactivos de ensayo asociado haya superado los límites de estabilidad.
3. El calibrador y cada tubo de control se puede utilizar una vez. Los intentos de usar el tubo más de una vez pueden dar lugar a errores de procesamiento.

### B. Polvo de guantes

Como sucede en cualquier sistema de reactivos, el exceso de polvo en algunos guantes puede ser causa de contaminación de los tubos abiertos. Se recomienda utilizar guantes sin polvo.

## **Control de calidad**

Los usuarios pueden invalidar resultados de ciclos o muestras si observan y documentan dificultades técnicas o relacionadas con el usuario o el instrumento durante la realización del ensayo. En este caso, es necesario volver a analizar las muestras.

Las muestras con resultados no válidos deben volver a analizarse para obtener un resultado válido.

### **Calibración del ensayo**

Para generar resultados válidos, el ensayo debe calibrarse. Se procesa por triplicado un único calibrador positivo cada vez que se carga un kit de reactivos en el Panther System. Una vez establecida, la calibración será válida durante un máximo de 24 horas. El software del Panther System avisa al usuario cuando hay que realizar una calibración. El usuario escanea un coeficiente de calibración en la hoja de códigos de barras del lote maestro incluida en cada kit de reactivos.

Durante el procesamiento, el software del Panther System verifica automáticamente los criterios de validación del calibrador. Si son válidas menos de dos de las réplicas del calibrador, el software invalida automáticamente el ciclo. Las muestras de un ciclo invalidado se deben volver a analizar utilizando un calibrador recién preparado y controles recién preparados.

### **Controles negativo y positivo**

Para generar resultados válidos, debe analizarse un conjunto de controles del ensayo. Se deben analizar una réplica del control negativo, una del control positivo bajo y una del control positivo alto cada vez que se carga un kit de reactivos en el Panther System. Una vez establecidos, los controles serán válidos durante un máximo de 24 horas. El software del Panther System avisa al usuario cuando se requieren controles.

Durante el procesamiento, el software del Panther System verifica automáticamente los criterios de validación de los controles. Para generar resultados válidos, el control negativo debe dar un resultado de «No detectado» y los resultados de los controles positivos deben estar dentro de unos parámetros predefinidos. Si cualquiera de los controles tiene un resultado no válido, el software invalida automáticamente el ciclo. Las muestras de un ciclo invalidado se deben volver a analizar utilizando un calibrador recién preparado y controles recién preparados.

### **Calibrador interno/Control interno**

Cada muestra contiene un calibrador interno/control interno (IC). Durante el procesamiento, el software del Panther System verifica automáticamente los criterios de validación del IC. Si el resultado del IC no es válido, el resultado de la muestra se invalida. Todas las muestras con un resultado de IC no válido se deben volver a analizar para obtener un resultado válido.

El software del Panther System se ha diseñado para verificar los procesos de forma precisa cuando los procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones descritas en este prospecto y en el *Manual del usuario del Panther/Panther Fusion System*.

## Interpretación de resultados

El Panther System determina automáticamente la concentración de DNA de CMV en muestras y controles comparando los resultados con una curva de calibración. Las concentraciones de DNA de CMV se notifican en IU/mL y  $\log_{10}$  IU/mL. La interpretación de los resultados se indica en la Tabla 1 y la Tabla 2.

Tabla 1: Interpretación de resultados de plasma

Resultado notificado del Aptima CMV Quant Assay		Interpretación
IU/mL	Valor de $\log_{10}$	
No detectado	No detectado	No se ha detectado DNA de CMV.
<53 detectado	<1,72	Se ha detectado DNA de CMV, pero a un nivel inferior al límite inferior de cuantificación (LIDC).
53 a 10 000 000	1,72 a 7,00	La concentración de DNA del CMV está dentro del rango cuantitativo comprendido entre LIDC y LSDC, en IU/mL.
>10 000 000	>7,00	La concentración de DNA de CMV es superior al límite superior de cuantificación (LSDC).
No válido <sup>a</sup>	No válido <sup>a</sup>	Se ha producido un error en la generación del resultado. Es necesario volver a analizar la muestra.

<sup>a</sup> Los resultados no válidos se muestran en caracteres azules.

Tabla 2: Interpretación de resultados de sangre total

Resultado notificado del Aptima CMV Quant Assay		Interpretación
IU/mL	Valor de $\log_{10}$	
No detectado	No detectado	No se ha detectado DNA de CMV.
<176 detectado	<2,24	Se ha detectado DNA de CMV, pero a un nivel inferior al límite inferior de cuantificación (LIDC).
176 a 10 000 000	2,24 a 7,00	La concentración de DNA del CMV está dentro del rango cuantitativo comprendido entre LIDC y LSDC, en IU/mL.
>10 000 000	>7,00	La concentración de DNA de CMV es superior al límite superior de cuantificación (LSDC).
No válido <sup>a</sup>	No válido <sup>a</sup>	Se ha producido un error en la generación del resultado. Es necesario volver a analizar la muestra.

<sup>a</sup> Los resultados no válidos se muestran en caracteres azules.



**Limitaciones**

- A. El uso de este ensayo está limitado al personal con la debida formación para realizar el procedimiento. El incumplimiento de las instrucciones indicadas en este prospecto puede producir resultados equívocos.
- B. La obtención de resultados fiables depende de la adecuación de la recogida, el transporte, el almacenamiento y el procesamiento de las muestras.
- C. Aunque es raro, las mutaciones dentro de las regiones altamente conservadas del genoma viral cubierto por los primers o las sondas en el Aptima CMV Quant Assay pueden dar como resultado una menor cuantificación o la imposibilidad de detectar el virus.

## **Rendimiento**

### **Límite de detección utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS**

El límite de detección (LDD) del ensayo se define como la concentración de DNA de CMV que se detecta con una probabilidad del 95 % o superior según el documento EP17-A2 del CLSI.<sup>14</sup>

### **Límite de detección utilizando las normas de la OMS en plasma**

El LDD se determinó mediante el análisis de paneles de la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS (código NIBSC 09/162) para CMV<sup>21</sup> diluido en plasma humano negativo para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada dilución con tres lotes de reactivo para un total de 180 réplicas por dilución. Se realizó un análisis probit para generar los límites de detección previstos. Los valores LDD que se muestran en la Tabla 3 son los resultados del lote de reactivos con el límite de detección previsto más elevado. El LDD del ensayo Aptima CMV Quant Assay utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS es de 40,7 IU/mL para plasma.

*Tabla 3: Límite de detección para plasma utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV*

<b>Límite de detección previsto</b>	<b>Concentración (IU/mL)</b>
10 %	1,9
20 %	2,9
30 %	4,0
40 %	5,3
50 %	6,9
60 %	9,1
70 %	12,2
80 %	17,1
90 %	27,5
95 %	40,7

### **Límite de detección utilizando las normas de la OMS en sangre total**

El LDD se determinó mediante el análisis de paneles de la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV diluido en sangre total negativa para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada dilución con tres lotes de reactivo para un total de 180 réplicas por dilución. Se realizó un análisis probit para generar los límites de detección previstos. Los valores LDD que se muestran en la Tabla 4 son los resultados del lote de reactivos con el límite de detección previsto más elevado. El LDD del ensayo Aptima CMV Quant Assay utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS es de 131,0 IU/mL para sangre total.

Tabla 4: Límite de detección para sangre total utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV

Límite de detección previsto	Concentración (IU/mL)
10 %	8,8
20 %	13,2
30 %	17,7
40 %	22,7
50 %	28,7
60 %	36,2
70 %	46,5
80 %	62,4
90 %	93,7
95 %	131,0

## Límite de detección en distintos genotipos de CMV

### Límite de detección en distintos genotipos de CMV en plasma

Se verificó el LDD para tres genotipos distintos basados en la secuencia de glicoproteína B<sup>7</sup> (gB-2, gB-3 y gB-4) mediante el análisis de varias concentraciones de CMV alrededor del LDD establecido para plasma utilizando la norma de la OMS (genotipo gB-1). Se analizaron 30 réplicas por cada muestra del panel y por cada lote de reactivos, utilizando dos lotes de reactivos del Aptima CMV Quant Assay. El LDD más elevado verificado para los tres genotipos fue 40 IU/mL utilizando ambos lotes de reactivos.

Tabla 5: Límite de detección en distintos genotipos de CMV en plasma

Genotipo	Concentración (IU/mL)
gB-2	40
gB-3	40
gB-4	35

El LDD general en plasma es 40,7 IU/mL.

### Límite de detección en distintos genotipos de CMV en sangre total

Se verificó el LDD para tres genotipos distintos de glicoproteína B (gB-2, gB-3 y gB-4) mediante el análisis de varias concentraciones de CMV alrededor del LDD establecido para sangre total utilizando la norma de la OMS para CMV (genotipo gB-1). Se analizaron 30 réplicas por cada muestra del panel y por cada lote de reactivos, utilizando dos lotes de reactivos del Aptima CMV Quant Assay. El LDD más elevado verificado para los tres genotipos fue 150 IU/mL utilizando ambos lotes de reactivos.

Tabla 6: Límite de detección en distintos genotipos de CMV en sangre total


Genotipo	Concentración (IU/mL)
gB-2	150
gB-3	150
gB-4	130

El LDD general en sangre total es 150 IU/mL.

## Rango lineal

### Rango lineal en plasma


El rango lineal se determinó mediante el análisis de paneles de CMV diluido en plasma humano negativo para CMV según el documento EP06-A del CLSI.<sup>15</sup> Las concentraciones de los paneles oscilaron entre 1,62 log IU/mL y 7,30 log IU/mL. El Aptima CMV Quant Assay demostró linealidad en el rango analizado. El límite superior de cuantificación (LSDC) del ensayo es 7 log IU/mL, como se muestra en la Figura 7.

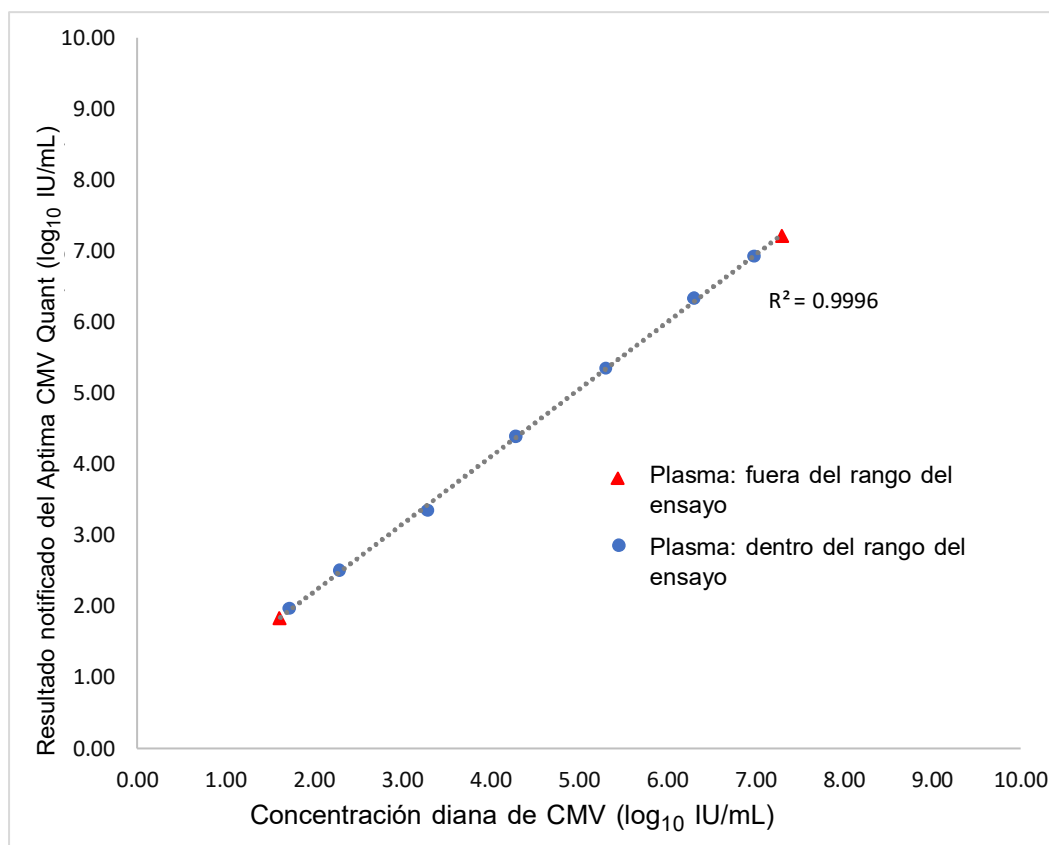

**Figura 7. Linealidad en plasma**

### Rango lineal en sangre total

El rango lineal se determinó mediante el análisis de paneles de CMV diluido en sangre total humana negativa para CMV según el documento EP06-A del CLSI.<sup>15</sup> Las concentraciones de los paneles oscilaron entre 2,15 log IU/mL y 7,3 log IU/mL para sangre total. El Aptima CMV Quant Assay demostró linealidad en el rango analizado. El límite superior de cuantificación (LSDC) del ensayo es 7 log IU/mL, como se muestra en la Figura 8.

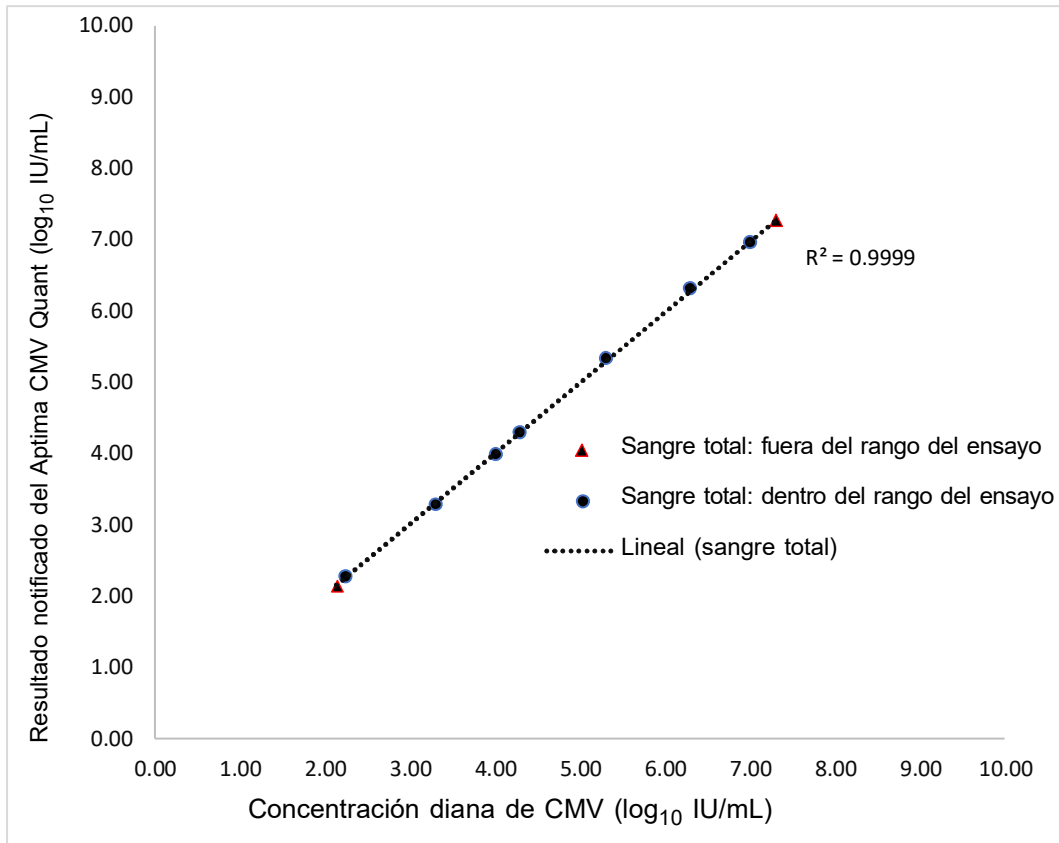


**Figura 8. Linealidad en sangre total**

## Linealidad en distintos genotipos de CMV

### Linealidad en distintos genotipos de CMV en plasma


La linealidad de los genotipos de glicoproteína gB-2, gB-3 y gB-4 se verificó mediante el análisis de paneles de CMV diluido en plasma negativo para CMV a concentraciones de entre 1,72 log IU/mL y 7,00 log IU/mL. Se observó linealidad en todo el rango para todos los genotipos analizados, como se muestra en la Figura 9.

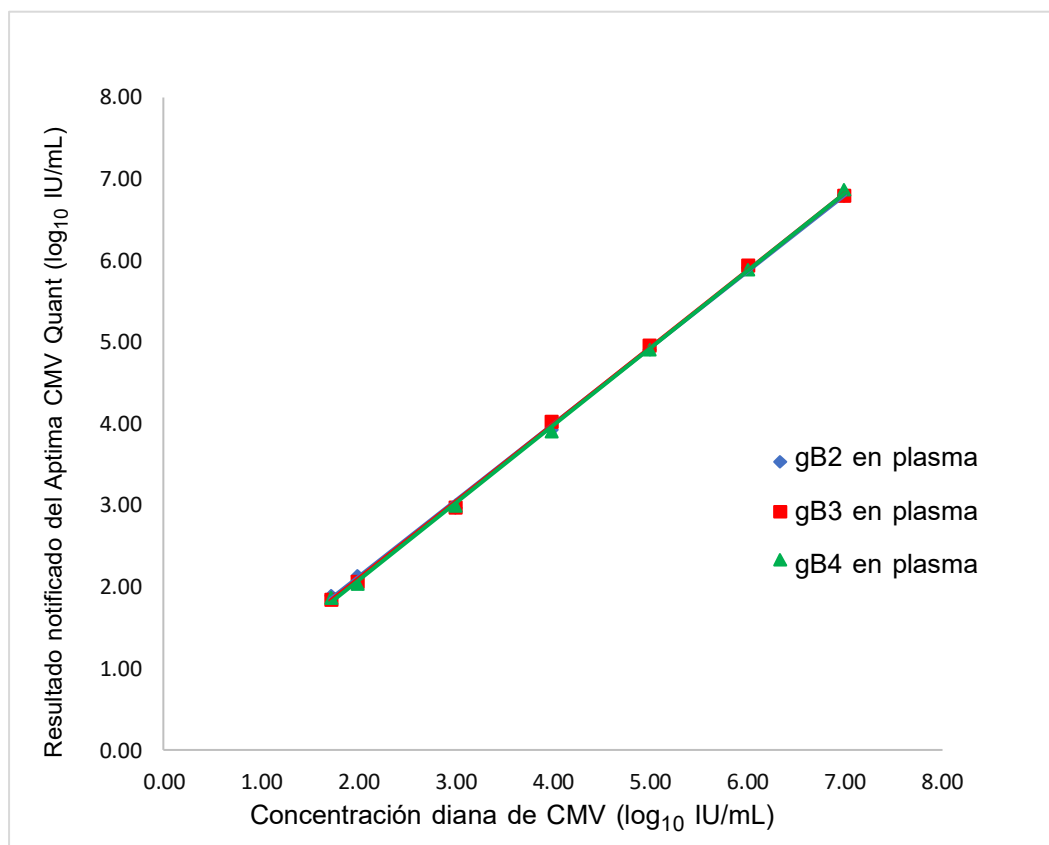

**Figura 9. Linealidad en los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 de CMV en plasma**

**Linealidad en distintos genotipos de CMV en sangre total**

La respuesta lineal de los genotipos de glicoproteína gB-2, gB-3 y gB-4 se verificó mediante el análisis de paneles de CMV diluido en sangre total negativa para CMV a concentraciones de entre 2,25 log IU/mL y 7,00 log IU/mL. Se observó linealidad en todo el rango para los tres genotipos analizados, como se muestra en la Figura 10.

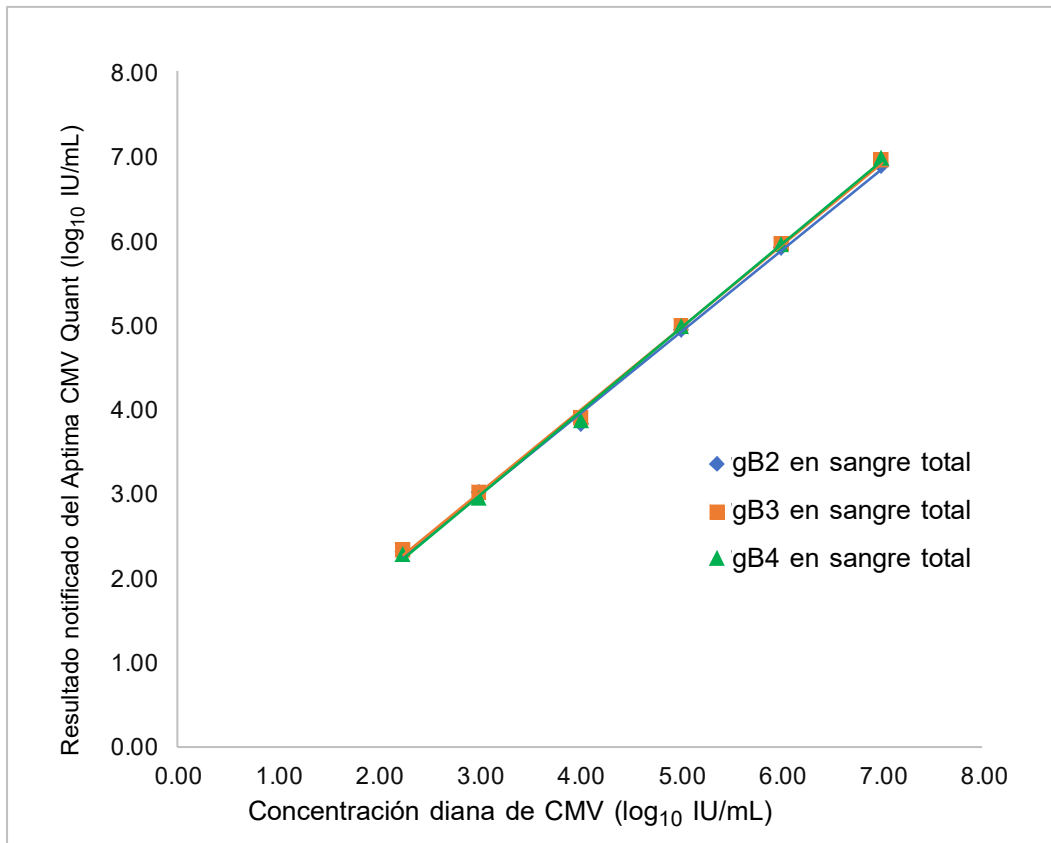

**Figura 10. Linealidad en los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 de CMV en sangre total**



### Límite inferior de cuantificación utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS

El límite inferior de cuantificación (LIDC) se define como la concentración más baja a la que el DNA de CMV se cuantifica de manera fiable dentro de un margen de error total, según el documento EP17-A2 del CLSI.<sup>14</sup> El error total se estimó mediante el uso del modelo Westgard: Error total (TE) = |sesgo| + 2 DE. Para garantizar la exactitud de las mediciones, el error total del Aptima CMV Quant se determinó en 1 log IU/mL (es decir, en el LIDC, una diferencia superior a 1 log IU/mL entre dos mediciones es estadísticamente significativa).

### Límite inferior de cuantificación utilizando la norma internacional de la OMS en plasma

El LIDC se determinó mediante el análisis de paneles de la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS (código NIBSC 09/162) para el DNA del CMV diluido en plasma humano negativo para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada dilución con tres lotes de reactivo para un total de 180 réplicas por dilución. Los resultados de LIDC para los tres lotes de reactivo se muestran en la Tabla 7. Los resultados del lote de reactivos con la concentración más elevada que cumple los requisitos de TE y detección del  $\geq 95$  % se muestran en la Tabla 8. El LIDC generado con la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV en plasma es de 53 IU/mL.

Tabla 7: Determinación del LIDC utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV diluido en plasma

Lote de reactivo	N	N detectado	Concentración	Aptima CMV	DE	Sesgo	TE calculado
			diana	Quant			
			(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)
1	60	56	1,48	1,64	0,36	0,16	0,87
	60	59	1,54	1,72	0,29	0,18	0,76
	60	59	1,60	1,74	0,28	0,14	0,70
	60	59	1,70	1,85	0,19	0,15	0,53
2	60	56	1,48	1,56	0,29	0,09	0,67
	60	58	1,54	1,61	0,27	0,07	0,60
	60	58	1,60	1,69	0,28	0,09	0,64
3	60	60	1,70	1,83	0,24	0,14	0,62
	60	56	1,48	1,67	0,26	0,19	0,71
	60	58	1,54	1,67	0,24	0,13	0,60
	60	60	1,60	1,78	0,19	0,18	0,55
	60	60	1,70	1,87	0,22	0,17	0,61

DE = Desviación estándar

Las muestras del panel que cumplieron el objetivo de exactitud (TE  $\leq 1$ ) y detección  $\geq 95$  % para los lotes de reactivo 1, 2 y 3 están sombreadas.

Tabla 8: Resumen del LIDC para plasma utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV

Lote de reactivo	(IU/mL)	(log IU/mL)
1	53	1,72
2	41	1,61
3	47	1,67

### Límite inferior de cuantificación utilizando la norma internacional de la OMS en sangre total

El LIDC se determinó mediante el análisis de paneles de la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para DNA del CMV diluido en sangre total humana negativa para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada dilución con tres lotes de reactivo para un total de 180 réplicas por dilución. Los resultados para los tres lotes de reactivo se muestran en la Tabla 9. Los resultados del lote de reactivos con la concentración más elevada que cumple los requisitos de TE y detección del  $\geq 95\%$  se muestran en la Tabla 10. El LIDC generado con la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV en sangre total es de 176 IU/mL.

Tabla 9: Determinación del LIDC utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV diluido en sangre completa

Lote de reactivo	N	N detectado	Concentración diana	Aptima CMV Quant	DE	Sesgo	TE calculado
			(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)
1	60	58	2,11	2,06	0,47	0,06	1,00
	60	59	2,16	2,04	0,51	0,12	1,14
	60	60	2,20	2,14	0,44	0,06	0,94
	60	59	2,24	2,28	0,26	0,04	0,56
2	60	60	2,11	2,02	0,42	0,09	0,93
	60	60	2,16	2,12	0,26	0,04	0,56
	60	59	2,20	2,14	0,30	0,07	0,67
	60	60	2,24	2,26	0,26	0,02	0,53
3	60	59	2,11	2,25	0,43	0,13	1,00
	60	59	2,16	2,34	0,27	0,18	0,72
	60	60	2,20	2,38	0,30	0,17	0,77
	60	60	2,24	2,39	0,30	0,15	0,74

DE = Desviación estándar

Las muestras del panel que cumplieron el objetivo de exactitud (TE  $\leq 1$ ) y detección  $\geq 95\%$  para los lotes de reactivo 1, 2 y 3 están sombreadas.

*Tabla 10: Resumen del LIDC para sangre total utilizando la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS para CMV*

Lote de reactivo	(IU/mL)	(log IU/mL)
1	138	2,14
2	106	2,02
3	176	2,25

## Determinación del límite inferior de cuantificación en distintos genotipos de CMV

### Límite inferior de cuantificación en distintos genotipos en plasma

El LIDC determinado según la norma de la OMS se verificó mediante el análisis de diluciones de los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 de CMV en plasma humano negativo para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada muestra del panel con un lote de reactivos. Los resultados se muestran en la Tabla 11. El LIDC calculado para los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 del lote de reactivos con la concentración más elevada que cumple los requisitos de TE y detección del  $\geq 95\%$  se resume en la Tabla 12. El LIDC general de este ensayo para plasma es de 53 IU/mL.

Tabla 11: Determinación del LIDC en distintos genotipos en plasma

Genotipo	N	N detectado	Concentración	Aptima CMV	DE	Sesgo	TE calculado
			diana	Quant	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)
gB-2	60	56	1,48	1,38	0,41	0,10	0,92
	60	58	1,54	1,39	0,39	0,16	0,95
	60	56	1,60	1,49	0,38	0,11	0,87
	60	58	1,65	1,70	0,24	0,04	0,51
	60	57	1,70	1,54	0,32	0,16	0,80
gB-3	60	55	1,48	1,27	0,38	0,20	0,97
	60	55	1,54	1,27	0,40	0,27	1,07
	60	53	1,60	1,31	0,47	0,29	1,23
	60	56	1,65	1,46	0,34	0,20	0,88
	60	55	1,70	1,57	0,29	0,13	0,71
gB-4	60	59	1,74	1,55	0,30	0,19	0,79
	60	58	1,48	1,38	0,39	0,09	0,88
	60	59	1,54	1,51	0,33	0,03	0,69
	60	57	1,60	1,66	0,36	0,06	0,79
	60	59	1,65	1,66	0,29	0,01	0,59
	60	60	1,70	1,70	0,24	0,00	0,48

DE = Desviación estándar

Las muestras del panel que cumplieron el objetivo de exactitud ( $TE \leq 1$ ) y detección  $\geq 95\%$  para los lotes de reactivo 1, 2 y 3 están sombreadas.

Tabla 12: Resumen del LIDC en distintos genotipos en plasma

Genotipo	LIDC	
	(IU/mL)	(log IU/mL)
gB-2	50	1,70
gB-3	35	1,55
gB-4	24	1,38

### Límite inferior de cuantificación en distintos genotipos en sangre total

El LIDC determinado según la norma de la OMS se verificó mediante el análisis de diluciones de los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 de CMV en sangre total humana negativa para CMV. Se analizaron 60 réplicas de cada muestra del panel con un lote de reactivos. Los resultados se muestran en la Tabla 13. El LIDC para los genotipos gB-2, gB-3 y gB-4 del lote de reactivos con la concentración más elevada que cumple los requisitos de TE y detección del  $\geq 95\%$  se resume en la Tabla 14. El LIDC general de este ensayo para sangre total es de 176 IU/mL.

Tabla 13: Determinación del LIDC en distintos genotipos en sangre total

Genotipo	N	N detectado	Concentración	Aptima CMV	DE	Sesgo	TE calculado
			diana	Quant			
			(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)	(log IU/mL)
gB-2	60	56	2,08	1,77	0,43	0,30	1,16
	60	56	2,15	1,87	0,39	0,27	1,06
	60	56	2,20	1,80	0,59	0,40	1,58
	60	58	2,26	1,97	0,41	0,28	1,11
	60	59	2,30	2,06	0,50	0,24	1,24
	60	57	2,34	2,01	0,52	0,33	1,38
	60	59	2,38	2,11	0,36	0,27	1,00
	60	60	2,41	2,19	0,30	0,23	0,84
gB-3	60	46	2,08	1,73	0,59	0,35	1,53
	60	54	2,15	1,78	0,50	0,36	1,37
	60	54	2,20	1,87	0,50	0,33	1,34
	60	58	2,26	2,02	0,52	0,23	1,27
	60	58	2,30	2,02	0,32	0,28	0,92
gB-4	60	55	2,08	1,78	0,53	0,30	1,37
	60	57	2,15	1,97	0,40	0,18	0,97
	60	58	2,20	2,09	0,39	0,12	0,89

DE = Desviación estándar

Tabla 14: Resumen del LIDC en distintos genotipos en sangre total


Genotipo	LIDC	
	(IU/mL)	(log IU/mL)
gB-2	129	2,11
gB-3	104	2,02
gB-4	93	1,97

### Trazabilidad según la 1.<sup>a</sup> norma internacional de la OMS

Durante los procesos de desarrollo y fabricación del producto, se emplearon una serie de normas secundarias con concentraciones conocidas para determinar la trazabilidad según la norma de la OMS. La norma de la OMS para CMV se diluyó y analizó junto con las normas secundarias, así como los controles del ensayo y los calibradores utilizados en el Aptima CMV Quant Assay, para evaluar la trazabilidad según el documento EP32-R del CLSI.<sup>16</sup> La concentración de las normas secundarias osciló entre 1,80 y 6,60 log<sub>10</sub> IU/mL.

### Trazabilidad según la norma de la OMS utilizando plasma


Las concentraciones analizadas para la norma de la OMS para CMV oscilaron entre 2,18 y 4,70 log<sub>10</sub> IU/mL. Los paneles de plasma de la OMS, las normas secundarias, los controles del ensayo y los calibradores del ensayo se recuperaron según lo esperado en el rango lineal del ensayo, como se puede comprobar en la Figura 11.

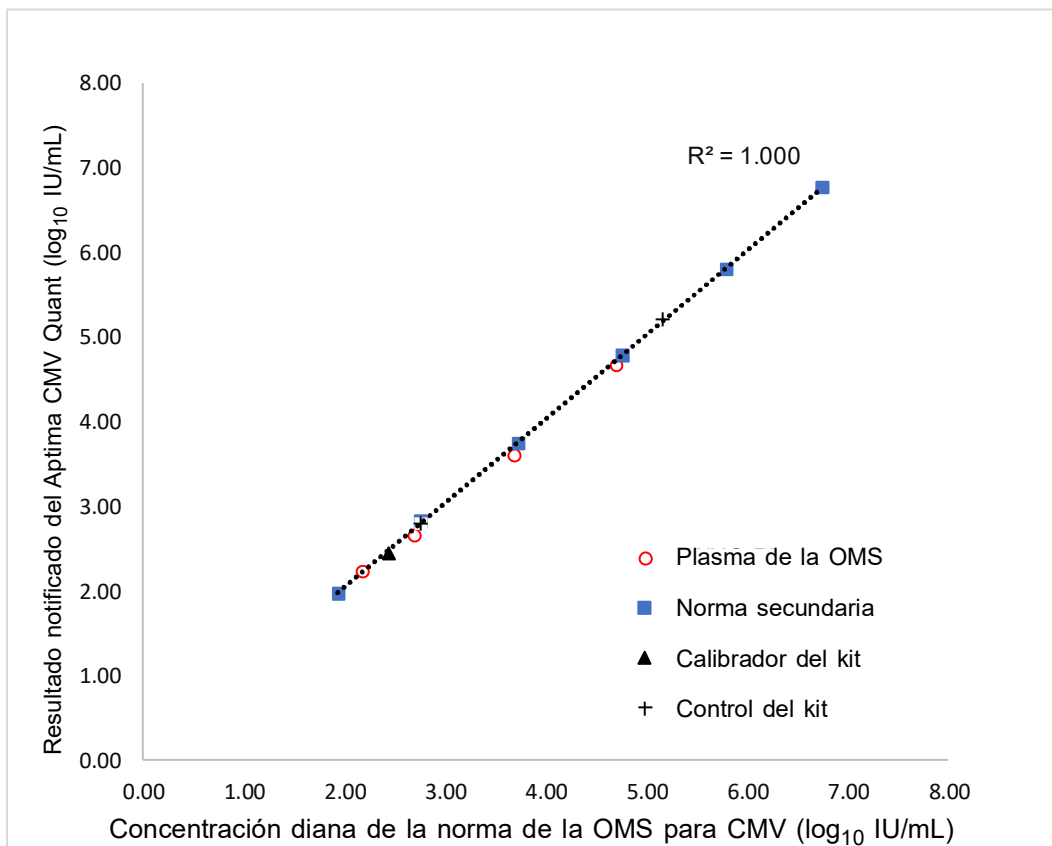

**Figura 11. Trazabilidad entre las concentraciones diana de la 1.<sup>a</sup> norma de la OMS para CMV y las concentraciones notificadas en el Aptima CMV Quant Assay (norma de la OMS, dilución en plasma)**

**Trazabilidad según la norma de la OMS utilizando sangre total**

Las concentraciones analizadas para la norma de la OMS para CMV en sangre total oscilaron entre 2,70 y 4,70  $\log_{10}$  IU/mL. Los paneles de sangre total con las normas de la OMS, las normas secundarias, los controles del ensayo y los calibradores del ensayo se recuperaron según lo esperado en el rango lineal del ensayo, como se puede comprobar en la Figura 12.

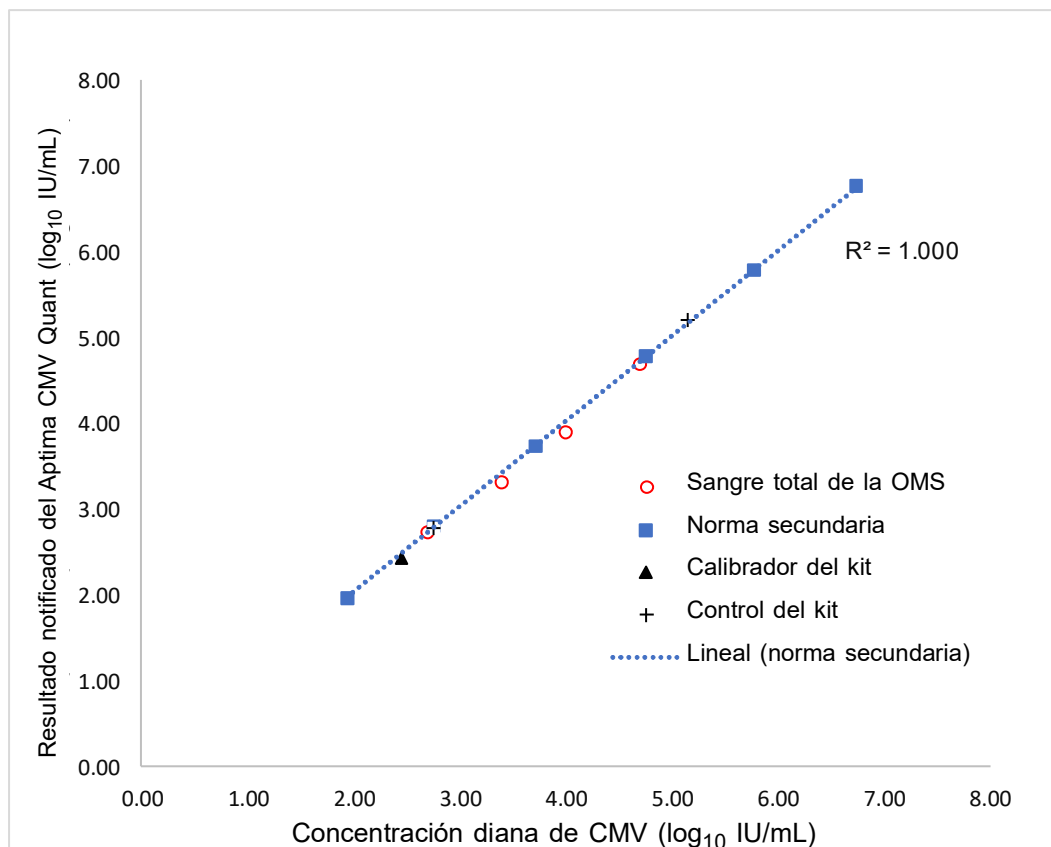

**Figura 12. Trazabilidad entre las concentraciones diana de la 1.ª norma de la OMS para CMV y las concentraciones notificadas en el Aptima CMV Quant Assay (norma de la OMS, dilución en sangre total)**

## Reproducibilidad

### Plasma

Para evaluar la reproducibilidad, se elaboró un panel de 6 muestras mediante la dilución de muestras clínicas positivas para CMV o CMV cultivado en plasma negativo para CMV. Tres usuarios analizaron el panel con tres lotes de reactivos en tres sistemas Panther System durante 20 días o más. Cada usuario ejecutó dos ciclos al día y cada muestra del panel se analizó por duplicado en cada ciclo. El estudio se diseñó y analizó según las recomendaciones del documento EP-05-A3 del CLSI.<sup>17</sup>

En la Tabla 15, se indica la reproducibilidad de los resultados del ensayo (en log IU/mL) entre instrumentos, usuarios, lotes de reactivo, ciclos, días, en el ciclo y en total. La variabilidad total se debió principalmente a la variabilidad en el ciclo (es decir, debido al error aleatorio).

Tabla 15: Reproducibilidad del Aptima CMV Quant Assay en plasma

N	Concentración media (log IU/mL)	Entre lotes DE	Entre instrumentos DE	Entre usuarios DE	Entre días DE	Entre ciclos DE	En el ciclo DE	Total DE
108	2,28	0,02	0,04	0,00	0,00	0,06	0,16	0,18
108	2,82	0,06	0,00	0,00	0,04	0,07	0,11	0,14
108	3,49	0,07	0,00	0,01	0,06	0,06	0,11	0,15
108	4,53	0,04	0,02	0,04	0,00	0,07	0,07	0,11
108	5,57	0,06	0,00	<0,001	0,04	0,02	0,09	0,12
108	6,67	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12

DE = Desviación estándar

Nota: La variabilidad de algunos factores podría ser numéricamente negativa, lo que puede ocurrir si la variabilidad debida a dichos factores es muy pequeña. Cuando esto ocurre, la DE se muestra como 0.

### Sangre total

Para evaluar la reproducibilidad, se elaboró un panel de 6 muestras mediante la dilución de muestras clínicas positivas para CMV o el enriquecimiento de sangre total negativa para CMV con CMV cultivado. Tres usuarios analizaron el panel con tres lotes de reactivos en tres sistemas Panther System durante 20 días o más. Cada usuario ejecutó dos ciclos al día y cada muestra del panel se analizó por duplicado en cada ciclo.

En la Tabla 16, se indica la reproducibilidad de los resultados del ensayo (en log IU/mL) entre instrumentos, usuarios, lotes, ciclos, días, en el ciclo y en total. La variabilidad total se debió principalmente a la variabilidad en el ciclo (es decir, debido al error aleatorio).



Tabla 16: Reproducibilidad del Aptima CMV Quant Assay en sangre total

N	Concentración media (log IU/mL)	Entre lotes DE	Entre instrumentos DE	Entre usuarios DE	Entre días DE	Entre ciclos DE	En el ciclo DE	Total DE
108	2,78	0,00	0,01	0,05	0,00	0,08	0,14	0,17
108	3,38	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,13	0,14
108	3,95	0,06	0,00	0,07	0,05	0,05	0,13	0,18
108	4,76	0,03	0,01	0,08	0,00	0,07	0,12	0,16
108	5,64	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,11	0,13
108	6,74	0,03	0,00	0,05	0,00	0,04	0,09	0,12

DE = Desviación estándar

Nota: La variabilidad de algunos factores podría ser numéricamente negativa, lo que puede ocurrir si la variabilidad debida a dichos factores es muy pequeña. Cuando esto ocurre, la DE se muestra como 0.

### Sustancias potencialmente interferentes

Se evaluó la susceptibilidad del Aptima CMV Quant Assay a las interferencias causadas por altos niveles de sustancias endógenas, anticoagulantes y medicamentos que se suelen recetar a los pacientes sometidos a trasplantes. Las concentraciones de análisis para cada una de las sustancias interferentes se seleccionaron en función de las referencias bibliográficas disponibles y las directrices de los documentos EP07<sup>18</sup> y EP37<sup>19</sup> del CLSI. Se analizaron muestras de plasma negativo para CMV y muestras enriquecidas con CMV a una concentración de 2,22 log IU/mL y 3,30 log IU/mL. Se analizaron muestras de sangre total negativa para CMV y muestras enriquecidas con CMV a una concentración de 2,72 log IU/mL y 4,00 log IU/mL de DNA del CMV para determinar la hemoglobina.

En las muestras de plasma, no se observó ninguna interferencia en el rendimiento del ensayo en presencia de albúmina (60 mg/mL), hemoglobina (10 mg/mL), triglicéridos (15 mg/mL), bilirrubina no conjugada (0,4 mg/mL) o DNA genómico humano (2 µg/mL). En las muestras de sangre total, no se observó ninguna interferencia en el rendimiento del ensayo en presencia de 100 mg/mL de hemoglobina añadida a las muestras de sangre total.

Se analizaron con el Aptima CMV Quant Assay muestras clínicas de plasma de pacientes con niveles elevados de sustancias específicas o de pacientes con las enfermedades indicadas en la Tabla 17. No se observó ninguna interferencia en el rendimiento del ensayo.

Tabla 17: Tipos de muestras clínicas analizadas

	Tipos de muestras clínicas	Número muestras clínicas analizadas
1	Anticuerpo antinuclear (AAN)	10
2	Lupus eritematoso sistémico (LES)	10
3	Artritis reumatoide (AR)	10

No se observó ninguna interferencia en el rendimiento del ensayo en presencia de las sustancias exógenas indicadas en la Tabla 18 a concentraciones de al menos tres veces la  $C_{m\acute{a}x}$  de los fármacos en plasma humano.

Tabla 18: Sustancias exógenas

Mezcla de sustancias exógenas	Sustancias exógenas analizadas
1	Cefotetan, clavulanato de potasio, ticarcilina disódica, vancomicina
2	Piperacilina
3	Sulfametoxazol
4	Tazobactam sódico, trimetoprima, fluconazol
5	Ganciclovir, valganciclovir, cidofovir, foscarnet, valaciclovir, aciclovir, letermovir
6	Azatioprina, ciclosporina, micofenolato de mofetilo, ácido micofenólico
7	Sirolimus, tacrolimus, prednisona, everolimus
8	Citrato de sodio, EDTA, heparina

## Especificidad

La especificidad se determinó mediante el análisis de 780 muestras clínicas recientes congeladas negativas para CMV. La especificidad se calculó como el porcentaje de muestras negativas para CMV con resultado de «No detectado» en comparación con el número total de muestras analizadas para cada tipo de muestra.

El DNA del CMV no se detectó en 389 muestras de plasma y 390 muestras de sangre total. La especificidad fue del 99,7 % (389/390, CI del 95 %: 98,6-100 %) para plasma y del 100 % (390/390, CI del 95 %: 99,3-100 %). La especificidad combinada del Aptima CMV Quant Assay para plasma y sangre total fue del 99,9 % (779/780, CI del 95 %: 99,3-100 %).

Tabla 19: Especificidad en muestras de plasma y sangre total

	Plasma	Sangre total	Plasma y sangre total
Réplicas válidas (n)	390	390	780
No detectado	389	390	779
<b>Especificidad</b>	99,7 %	100 %	99,9 %
<b>(CI del 95 %)</b>	(98,6-100)	(99,3-100)	(99,3-100)

CI = Intervalo de confianza

## Especificidad analítica

La posible reactividad cruzada con los patógenos indicados en la Tabla 20 se evaluó en plasma humano negativo para CMV con presencia o ausencia de 2,2 log IU/mL y 3,3 log IU/mL de CMV. En las muestras de sangre total se detectaron tres parásitos sanguíneos, que también se evaluaron en sangre total negativa para CMV con presencia o ausencia de 2,7 log IU/mL y 4,0 log IU/mL de CMV. Los patógenos se analizaron a la concentración más elevada disponible. No se observó ninguna reactividad cruzada ni interferencia.

Tabla 20: Patógenos analizados para determinar la especificidad analítica


Microorganismo/Patógeno	Concentración	Microorganismo/Patógeno	Concentración
Adenovirus tipo 4	1886	DICT50/mL <sup>a</sup>	<i>Mycobacterium intracellulare</i>
Poliomavirus BK	1 000 000	cp/mL <sup>b</sup>	<i>Mycoplasma genitalium</i>
Virus de Epstein-Barr	1 000 000	cp/mL	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Virus de la hepatitis B	1 000 000	IU/mL <sup>c</sup>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Virus de la hepatitis C	1 000 000	cp/mL	<i>Propionibacterium acnes</i>
Virus del herpes simple tipo 1	1 428 571	DICT50/mL	<i>Salmonella enterica</i> serovariedad Typhimurium
Virus del herpes simple tipo 2	147 143	DICT50/mL	<i>Staphylococcus aureus</i>
HIV-1 subtipo B	1 000 000	cp/mL	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
Herpesvirus humano 6A	1 000 000	cp/mL	<i>Streptococcus agalactiae</i>
Herpesvirus humano 7	1 428 571	DICT50/mL	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Herpesvirus humano 8	1 000 000	cp/mL	<i>Streptococcus pyogenes</i>
Metapneumovirus humano	192 857	DICT50/mL	<i>Aspergillus niger</i>
Virus del papiloma humano tipo 18	1 000 000	cp/mL	<i>Candida albicans</i>
Virus de la parainfluenza humana	944	DICT50/mL	<i>Cryptococcus neoformans</i>
Virus de la gripe	3857	DICT50/mL	<i>Trichomonas vaginalis</i>
Rinovirus	7257	DICT50/mL	<i>Leishmania major</i> *
Virus varicela-zóster	1 000 000	cp/mL	<i>Babesia microti</i> *
Virus Zika	29 286	DICT50/mL	<i>Plasmodium falciparum</i> *
<i>Chlamydia trachomatis</i>	1 000 000	UFC/mL <sup>d</sup>	<sup>a</sup> DICT50/mL = Unidades de dosis infectiva en cultivo tisular por mL
<i>Clostridium perfringens</i>	1 000 000	UFC/mL	<sup>b</sup> cp/mL = Copia viral por mL
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	1 000 000	UFC/mL	<sup>c</sup> IU/mL = Unidades internacionales por mL
<i>Enterococcus faecalis</i>	1 000 000	UFC/mL	<sup>d</sup> UFC/mL = Unidades formadoras de colonias por mL
<i>Escherichia coli</i>	1 000 000	UFC/mL	* Analizado con el tipo de muestra de sangre total
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1 000 000	UFC/mL	
<i>Listeria monocytogenes</i>	1 000 000	UFC/mL	

## Correlación de métodos

Este estudio se ha diseñado según el documento EP09c del CLSI.<sup>19</sup>

### Correlación de métodos en plasma


El rendimiento del Aptima CMV Quant Assay se evaluó en comparación con el Roche cobas® CMV en el sistema cobas® 6800 mediante el análisis de muestras clínicas sin diluir de pacientes positivos para CMV y muestras artificiales elaboradas mediante el enriquecimiento de plasma EDTA negativo de donantes individuales con varias cepas de virus cultivados pertenecientes a los cuatro genotipos. Se utilizaron un total de 160 muestras clínicas y 115 muestras artificiales dentro del rango lineal común a ambos ensayos para la regresión de Deming, como se muestra en la Figura 13.

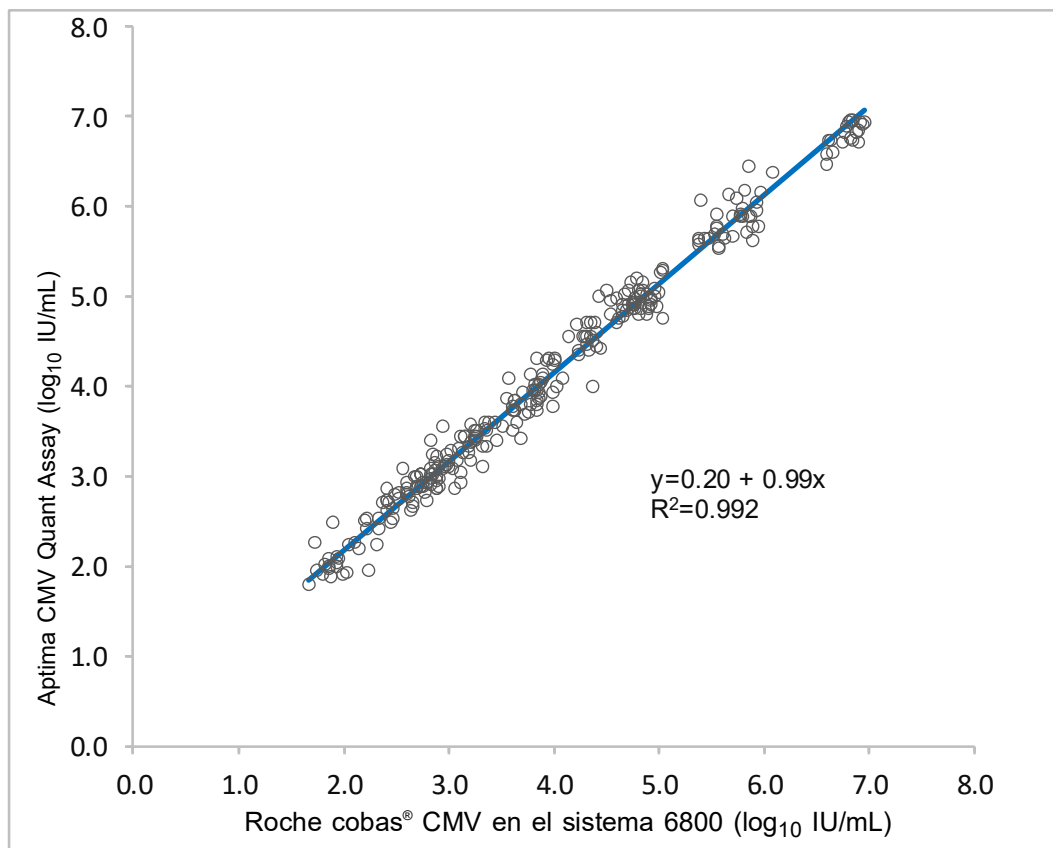

**Figura 13. Correlación entre la carga viral de CMV en el Aptima CMV Quant Assay y el Roche cobas® CMV Assay en el análisis de muestras de plasma**

### Correlación de métodos en sangre total

El rendimiento del Aptima CMV Quant Assay se evaluó en comparación con el Abbott CMV RealTime Assay en la plataforma m2000 mediante el análisis de muestras clínicas sin diluir de pacientes positivos para CMV y muestras artificiales elaboradas mediante el enriquecimiento de sangre total EDTA negativa de donantes individuales con virus cultivado. Se utilizaron un total de 159 muestras clínicas y 83 muestras artificiales dentro del rango lineal común a ambos ensayos para la regresión de Deming, como se muestra en la Figura 14.

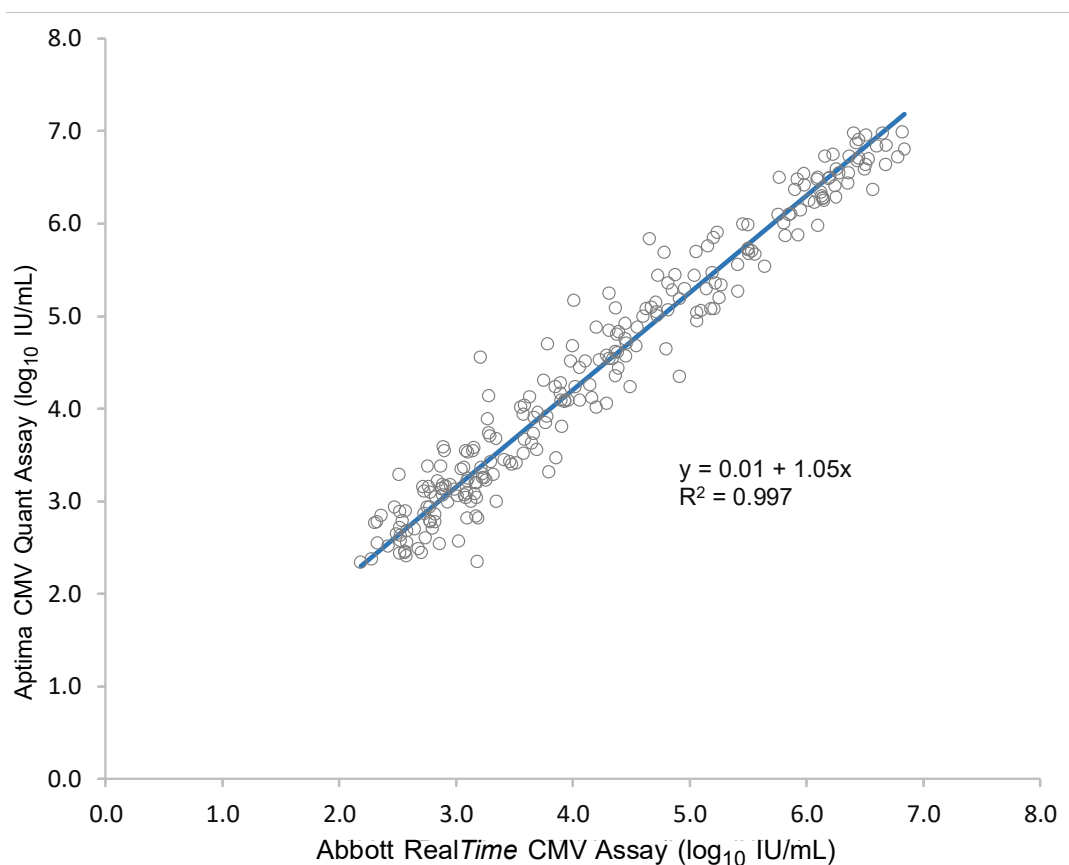

**Figura 14. Correlación entre la carga viral de CMV en el Aptima CMV Quant Assay y el Abbott RealTime CMV Assay en el análisis de muestras de sangre total**

### Contaminación por arrastre

La contaminación por arrastre para el Panther System se ha evaluado mediante el uso de plasma como tipo de muestra y utilizando otros ensayos de carga viral (Aptima HIV-1 Quant Dx Assay, Aptima HCV Quant Assay y Aptima HBV Quant Assay). No se observó contaminación cruzada en análisis anteriores. Para establecer que el Panther System reduce al mínimo el riesgo de resultados positivos falsos provocados por contaminación por arrastre en el tipo de muestra de sangre total, se realizó un estudio de varios paneles enriquecidos en tres sistemas Panther System. La contaminación por arrastre se evaluó utilizando muestras de sangre total enriquecidas con DNA de CMV de título elevado (6 log IU/mL) entremezcladas con muestras negativas para CMV en un patrón de tablero de ajedrez. Las pruebas se realizaron en doce ciclos. La tasa global de contaminación por arrastre fue del 0,24 % (1/423).

## **Bibliografía**

1. **Bate SL, Dollard SC, Cannon MJ.** Cytomegalovirus Seroprevalence in the United States: The National Health and Nutrition Examination Surveys, 1988-2004. *Clinical Infectious Diseases* 2010; 50:531-540.
2. **Cannon MJ, Schmid DS, Hyde TB.** Review of Cytomegalovirus Seroprevalence and Demographic Characteristics Associated with Infection. *Reviews in Medical Virology* 2010;20:202-213.
3. **Wills MR, Poole E, Lau B, Krishna B, Sinclair JH.** The immunology of human cytomegalovirus latency: could latent infection be cleared by novel immunotherapeutic strategies *Cell and Mol Immunol.* 2015;12:128-138.
4. **Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al.** The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid Organ Transplantation. *Transplantation.* 2018;102(6):900-931.
5. **Emery VC, Sabin CA, Cope AV, et al.** Application of Viral-Load Kinetics to Identify Patients who Develop Cytomegalovirus Disease After Transplantation. *Lancet.* 2000; 10;355(9220):2032-6.
6. **Humar A, Gregson D, Caliendo AM, et al.** Clinical Utility of Quantitative Cytomegalovirus Viral Load Determination for Predicting Cytomegalovirus Disease in Liver Transplant Recipients. *Transplantation.* 1999; 15;68(9):1305-11.
7. **Humar A, Kumar D, Gilbert C, et al.** Cytomegalovirus (CMV) Glycoprotein B Genotypes and Response to Antiviral Therapy, in Solid-Organ–Transplant Recipients with CMV Disease. *The Journal of Infectious Diseases.* 2003;188(4):581–4,
8. **Razonable RR, Hayden RT.** Clinical Utility of Viral Load in Management of Cytomegalovirus Infection After Solid Organ Transplantation. *Clinical Microbiology Reviews.* 2013; 26(4):703-727.
9. **de la Cámara R.** CMV in Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases.* 2016; 20;8(1):e2016031.
10. **Clinical and Laboratory Standards Institute.** 2005. Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods; Approved Guideline. CLSI Document MM13-A. Wayne, PA.
11. **29 CFR Part 1910.1030.** Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens; current version.
12. **Centers for Disease Control and Prevention/National Institutes of Health.** Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL); current version.
13. **Clinical and Laboratory Standards Institute.** 2002. Clinical Laboratory Waste Management. CLSI Document GP5-A2. Villanova, PA.
14. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2012. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline—Second Edition. CLSI Document EP17-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
15. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2003. Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline. CLSI document EP06-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
16. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2006. Metrological Traceability and Its Implementation; A Report. CLSI document EP32-R. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
17. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2014. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline – Third Edition. CLSI document EO05-03. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
18. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2018. Interference testing in Clinical Chemistry – Third Edition. CLSI document EP07, 3<sup>rd</sup> Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
19. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2018. Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry. CLSI document EP37, 1<sup>st</sup> Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
20. **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).** 2018. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. CLSI document EP09c, 3<sup>rd</sup> Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
21. **1st WHO International Standard for Human Cytomegalovirus (HCMV) for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC 09/162),** Merlin strain



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic BV**  
Da Vinciiaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Para obtener la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la asistencia técnica y la asistencia al cliente específicos de cada país, visite [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Hologic, Aptima y Panther son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses identificadas en [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

© 2021 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados.

AW-21334-301 Rev. 002

2021-08