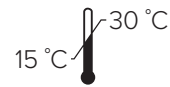


## ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ oldat

## Használati utasítás

**RENDELTETTÉSZERŰ HASZNÁLAT**

A ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ oldat vizeletmintákhoz használt szállító- és tartósítóközeg, amelyet citológiai tárgylemezek előkészítésére használnak ThinPrep™ feldolgozóeszközzel a ThinPrep™ rendszer részeként. Professzionális használatra.

**ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT**

A PreservCyt oldat lehetővé teszi a vizelet szállítását és megőrzését.

**AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI**

A PreservCyt oldat a vizeletminták sejtjeinek és DNS-ének megőrzésére szolgáló közeg.

**ÖSSZETÉTEL**

Metanolalapú, tartósító pufferoldat. 35–55% metanol. CAS 67-56-1

**FIGYELMEZTETÉSEK**

**Veszély.** Gyúlékony. Metanolt tartalmaz.

H301. Lenyelve mérgező.

H311. Bőrrel érintkezve mérgező.

H370. Károsítja a szerveket.

H331. Belélegezve mérgező.

H226. Tűzveszélyes folyadék és gőz.

*In vitro* diagnosztikai használatra.

Emberekre vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni.

Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

**ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Ellenőrizze a csomag teljes tartalmának sérülésmentességét.

P210. Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó.

P260. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P310. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

# ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ oldat

P303 + P361 + P533. HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: Azonnal távolítsa el/vegye le az összes szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhannyal.

P305 + P351 + P338. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percig. Távolítsa el az esetleges kontaktlencséket, ha egyszerűen megteheti. Folytassa az öblítést.

P308 + P311. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

P370 + P378. Tűz esetén: Az oltáshoz használjon száraz homokot, száraz vegyi anyagot vagy alkoholálló habot.

P403 + P233. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: összhangban a helyi/regionális/országos/nemzetközi szabályokkal.

A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

Mint minden laboratóriumi eljárás során, itt is be kell tartani az általános óvintézkedéseket.

Ne használja, ha az illetéktelen felnyitás elleni zárófolia sérült.

Jól szellőző helyen használja.

Kerülje a közvetlen érintkezést.

## **ELŐKÉSZÍTÉS**

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

## **TÁROLÁS ÉS KEZELÉS**

A fel nem használt PreservCyt oldatot 15–30 °C-on tárolja. Ne használja a lejárat dátumon túl. A PreservCyt oldatot tartalmazó fiolát és mintavételi csészét használat előtt zárva kell tartani.

A vizeletmintát tartalmazó Preservation Cyt oldatot 4 °C és 30 °C között tárolja. A mintát 48 órán belül dolgozza fel.

## **KÜLSŐ ÉS ÉPSÉG**

Átlátszó, nem steril oldat.

## **BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK**

A PreservCyt oldat bakteriosztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, és megakadályozza az organizmusok növekedését a vizeletmintákban, ha a vizelet és a PreservCyt oldat aránya 4 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten 2:1. További információkat a ThinPrep feldolgozóeszköz kezelői kézikönyvében talál.

Ha az eszékhez vagy az eszközzel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

## **FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK**

Megjegyzés: A Vysis UroVysion hólyagrák tesztkészlethez legalább 33 cm<sup>3</sup> szokásosan levett vizelet szükséges.

1. Óvatosan öntse a PreservCyt oldatot tartalmazó fiola teljes tartalmát a vizeletet tartalmazó mintavételi csészébe. Szorosan zárja le a mintavételi csészét, hogy ne szivárogjon.
2. A PreservCyt oldatot tartalmazó mintát 4–30 °C hőmérsékleten tárolja. Az előnyben részesített tárolási és szállítási feltételeket a jégcsomagon találja (pl. kék jég Styrofoam dobozban).
3. A mintát 48 órán belül a ThinPrep feldolgozóeszköz kezelői kézikönyvében vagy a Vysis UroVysion hólyagrák tesztkészlet használati utasításában szereplő utasítások szerint kell feldolgozni.

## ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ oldat

### ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A használt mintavételi csésze, nedvszívó párna, szállítózacsó és esetlegesen megmaradt minták ártalmatlanítása során ezeket biológiailag veszélyes anyagként kell kezelni. Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

### AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A PreservCyt oldat nem helyettesíthető más, a minták levételére, előkészítésére és feldolgozására szolgáló oldattal. A síkosítóanyagok (pl. KY® gé) alkalmazását a mintavétel előtt minimalizálni kell, mert az ilyen anyagok zavarhatják a sejtátvitelt.

### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz. A teljes biztonsági adatlapot a [www.hologic.com](http://www.hologic.com) weboldalon találja.

### Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-22938-2802 Rev. 001	2021. 03.	Utastítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utastítások hozzáadása.



Gyártó



Lásd használati utastítás



*In vitro* diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Katalógusszám



Felhasználható




Tételszám



Hőmérsékleti határértékek



Ne használja fel újra

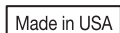

Készült az USA-ban



Gyúlékony



Akut toxicitás



Légúti szenzibilizálás, célszervi toxicitás



Mennyiség



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Tel.: +1 (508) 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel.: +02 9888 8000