

„ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™“ tirpalas

Naudojimo instrukcijos



PASKIRTIS

„ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™“ tirpalas yra transportavimo ir konservavimo terpė šlapimo mėginiams. Jis skirtas citologiniams objekciniams stikleliams paruošti naudojant „ThinPrep™“ apdorojimo įrenginį kaip „ThinPrep™“ sistemos dalį. Skirta naudoti specialistams.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„PreservCyt“ tirpalas leidžia transportuoti ir konservuoti šlapimą.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

„PreservCyt“ tirpalas yra terpė, naudojama šlapimo mėginių ląstelėms ir DNR konservuoti.

SUDĖTIS

Metanolio pagrindu pagamintas buferinis konservantų tirpalas. 35–55 % metanolio. CAS 67-56-1

ISPĖJIMAI

Pavojus: degus. Sudėtyje yra metanolio.

H301. Toksiškas prarijus.

H311. Toksiškas susilietus su oda.

H370. Kenkia organams.

H331. Toksiškas įkvėpus.

H226. Degus skystis ir garai.

In vitro diagnostikai.

Neskirta išorinio ar vidinio vartojimo žmonėms ar gyvūnams reikmėms.

Negalima padaryti nenuodingo.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Patikrinkite visą turinį, ar nepažeistas.

P210. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P260. Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301 + P310. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P303 + P361 + P353. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čirukšle.

„ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™“ tirpalas

P305 + P351 + P338. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P308 + P311. ESANT sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P370 + P378. Gaisro atveju: gesinti naudojant sausą smėlį, sausas chemines medžiagas ar alkoholiui atsparias putas.

P403 + P233. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P501. Turinį / talpyklą šalinti laikantis vietos / regiono / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

Po darbo kruopščiai nusiplauti rankas.

Kaip ir atliekant visas laboratorines procedūras, reikia laikytis universalių atsargumo priemonių.

Nenaudoti, jei sulaužyta sandarinimo plomba.

Naudoti gerai vėdinamoje vietoje.

Vengti tiesioginio kontakto.

PASIRENGIMAS

Tirpinti, maišyti ar skiesti nereikia.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Nepanaudotą „PreservCyt“ tirpalą laikyti 15–30 °C temperatūroje. Negalima naudoti pasibaigus galiojimo laikui. „PreservCyt“ tirpalo buteliuką ir mėginių ėmimo indelį laikykite uždarytą, kol būsite pasirėngę naudoti.

„PreservCyt“ tirpalą su šlapimo mėginiu laikyti nuo 4 °C iki 30 °C temperatūroje. Mėginį apdorokite per 48 valandas.

IŠVAIZDA IR VIENTISUMAS

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

SAUGA IR NAUDOJIMO PARAMETRAI

„PreservCyt“ tirpalas pasižymi bakteriostatinėmis savybėmis ir neleidžia mikroorganizmams daugintis šlapimo mėginiuose, kai taikomas šlapimo ir „PreservCyt“ tirpalo santykis yra 2 : 1, esant 4–30 °C temperatūrai. Papildomą informaciją žr. „ThinPrep“ apdoravimo įrenginio naudotojo vadove.

Įvykus rimtam incidentui, susijusiam su šiuo prietaisu ar komponentais, naudojamais su šiuo prietaisu, praneškite apie tai „Hologic“ techninės priežiūros tarnybai ir paciento ir (arba) naudotojo regione esančiai vietinei kompetentingai institucijai.

APDOROJIMO INSTRUKCIJOS

Pastaba: „Vysis UroVysion“ šlapimo pūslės vėžio rinkiniui reikia mažiausiai 33 ml šlapimo, surinkto įprastu būdu.

1. Visą „PreservCyt“ tirpalo buteliuko turinį atsargiai supilkite į mėginio indelį su šlapimu. Tvirtai pritvirtinkite mėginio indelį, kad išvengtumėte nuotėkio.
2. Mėginį su „PreservCyt“ tirpalu laikyti nuo 4 °C iki 30 °C temperatūroje. Pageidaujamos laikymo ir transportavimo sąlygos – ant ledo pakelių (pvz., mėlynas ledas putplastyje).
3. Mėginį apdorokite per 48 valandas pagal „ThinPrep“ apdoravimo įrenginio vartotojo instrukcijas arba „Vysis UroVysion“ šlapimo pūslės vėžio rinkinio gamintojo naudojimo instrukcijas.

„ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™“ tirpalas

ŠALINIMO INFORMACIJA

Panaudotą mėginių ėmimo indelį, sugeriamąją pagalvėlę, transportavimo maišelį ir visus likusius mėginius šalinkite kaip biologiškai pavojingus. Šalinkite laikydamiesi visų galiojančių taisyklių.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

„PreservCyt“ tirpalo negalima maišyti su jokių kitų tirpalu mėginiams imti, ruošti ar apdoroti. Prieš imant mėginius, reikia sumažinti lubrikantų (pvz., KY® želės) naudojimą, nes tokios medžiagos gali trukdyti perkelti ląsteles.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipkitės į gydytoją, jeigu pasijutote blogai. Visą saugos duomenų lapą rasite svetainėje www.hologic.com.

Peržiūrų istorija

Peržiūra	Data	Apibūdinimas
AW-22938-3002 Rev. 001	2021 m. kovas	Patikslintos instrukcijos. Pridėtos instrukcijos, kaip pranešti apie rimtus incidentus.



Gamintojas



Žr. naudojimo instrukcijas



In vitro diagnostikos medicinos prietaisas



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Katalogo numeris



Tinka iki




Partijos kodas



Temperatūros apribojimas



Nenaudoti pakartotinai

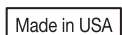

Pagaminta JAV



Degus



Ūminis toksiškumas



Kvėpavimo takų jautriklis, toksiškumas tiksliniam organui



Kiekis



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV
Tel. + 1 (508) 263-2900 • www.hologic.com

EC REP „Hologic BV“ • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija • Tel. + 32 2 711 46 80

Australijos rėmėjas: „Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd“ • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. + 02 9888 8000