

Aptima Unisex Iztriepju Paraugu Ievākšanas Komplekts Sieviešu Endocervikālo un Vīriešu Uretrālo Iztriepju Paraugiem

Lietot *in vitro* diagnostikai.

Tikai eksportam no ASV.

Pielietojums

Aptima Unisex Iztriepju Paraugu Ievākšanas Komplekts Sieviešu Endocervikālo un Vīriešu Uretrālo Iztriepju Paraugiem ir paredzēts lietošanai ar Aptima testiem. Aptima Unisex Iztriepju Paraugu Ievākšanas Komplekts paredzēts sieviešu endocervikālo vai vīriešu uretrālo iztriepju ievākšanai.

Iekļautie materiāli

50 Aptima Unisex Iztriepju Paraugu Ievākšanas Komplekts Sieviešu Endocervikālo un Vīriešu Uretrālo Iztriepju Paraugiem (art. Nr. 301041)

Katrs komplekts sastāv no:

Sastāvdaļa	Skaitis	Apraksts
Unisex irbulītis ar tamponu	1	<i>Irbulītis ar tamponu endocervikālo vai vīriešu uretrālo iztriepju paraugu ņemšanai.</i>
Tampons notīrīšanai	1	<i>Tampons notīrīšanai sievietēm.</i>
Transporta mēģene	1	<i>Aptima iztriepju transporta vidi saturoša mēģene (2.9 mL).</i>

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- A. Izvairīties no transporta vides tiešas saskares ar ādu, gļotādām vai iekšķīgas lietošanas.

Komplekta uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ievākšanas komplektu istabas temperatūrā (15°C līdz 30°C).

Vaginālo iztriepju paraugu veikspēja

Testa veikspējas raksturojums sieviešu endocervikālo un vīriešu uretrālo iztriepju paraugiem ir uzdots atbilstošā Aptima testa lietošanas pamācībā. Aptima testa lietošanas pamācības tiešsaistē var aplūkot www.hologic.com. Veikspēja ar vīriešu uretrālo iztriepju paraugiem netika izvērtēta visiem Aptima testiem. Tabulā ir apkopoti katram Aptima testam atbilstošie paraugu tipi.

Aptima Tests uz	Sieviešu iztriepju paraugi	Vīriešu iztriepju paraugi
<i>Chlamydia trachomatis</i>		
<i>Chlamydia trachomatis</i> un <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Aptima Combo 2™ Tests)	Jā	Jā
<i>Mycoplasma genitalium</i>		
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>		
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Jā	Nē

Paraugu ievākšana un uzturēšana

A. Endocervikālo iztriepju paraugi

Piezīme: ja stobriņa saturs izbirst, izmetiet to un nomainiet ar jaunu Aptima abiem dzimumiem paredzēto uztriepes vates kociņa pārvietošanas stobriņu.

1. Noņemot pārmērīgu gļotu daudzumu no cervikālās atveres un apkārt esošas gļotādas ar tamponu notīrīšanai (tampons ar baltu kātiņu iepakojumā ar sarkanu uzdruku). Izmet šo tamponu.

Piezīme: Lai noņemtu pārmērīgu gļotu daudzumu no cervikālās atveres var izmantot lielāka izmēra tamponu (nav iekļauts komplektā).

2. Ievadīt paraugu ievākšanas irbulīti (tampons ar zilu kātiņu iepakojumā ar zaļu uzdruku) endocervikālajā kanālā.
3. Uzmanīgi griezt irbulīti pulksteņa rādītāja virzienā 10 līdz 30 sekundes endocervikālajā kanālā, lai nodrošinātu nepieciešama parauga daudzuma uzņemšanu.
4. Uzmanīgi izņemt irbulīti; izvairīties no jebkāda kontakta ar vaginālajām gļotām.
5. Noņemt vāciņu iztriepes parauga transporta mēģenei un nekavējoties ievietot parauga ievākšanas irbulīti transporta mēģenē.
6. Uzmanīgi nolauzt irbulīša kātiņu atzīmes vietā pret mēģenes sieniņu un izmest nolauzto kātiņa daļu; šo darbību veikt ar rūpību, lai nepieļautu satura izšļakstīšanos.
7. Cieši aizvākot iztriepes parauga transporta mēģeni.

B. Vīriešu uretrālo iztriepju paraugi

1. Pacientam nevajadzētu urinēt vismaz 1 stundu pirms parauga ievākšanas.
2. Ievadīt paraugu ievākšanas irbulīti (tampons ar zilu kātiņu iepakojumā ar zaļu uzdruku) uretrā 2 līdz 4 cm dziļumā.
3. Uzmanīgi griezt irbulīti pulksteņa rādītāja virzienā 2 līdz 3 sekundes uretrā, lai nodrošinātu nepieciešama parauga daudzuma uzņemšanu.
4. Uzmanīgi izņemt irbulīti.
5. Noņemt vāciņu iztriepes parauga transporta mēģenei un nekavējoties ievietot parauga ievākšanas irbulīti transporta mēģenē.
6. Uzmanīgi nolauzt irbulīša kātiņu atzīmes vietā pret mēģenes sieniņu un izmest nolauzto kātiņa daļu; šo darbību veikt ar rūpību, lai nepieļautu satura izšļakstīšanos.
7. Cieši aizvākot iztriepes parauga transporta mēģeni.

Paraugu transportēšana un uzglabāšana

Pēc parauga ievākšanas transportēt un uzglabāt iztriepes parauga transporta mēģeni temperatūras intervālā no 2°C līdz 30°C līdz testa veikšanai. Paraugu testēšana jāveic ar Aptima testiem 60 dienu laikā pēc ievākšanas. Ja ir nepieciešams ilgāks uzglabāšanas periods, ievērot atbilstošā Aptima testa lietošanas pamācības nosacījumus.

Piezīme: Paraugi jānosūta atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem.

Ierobežojumi

- A. Šī komplekta izmantošana ir paredzēta tikai ar Aptima testiem. Veiktspēja ar citiem izstrādājumiem netika izvērtēta.
- B. Vīriešu uretrālo iztriepju paraugu veiktspēja netika izvērtēta Aptima Trichomonas vaginalis testam.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA


Klientu atbalsts: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com.

Hologic, Aptima, un Aptima Combo 2 ir Hologic, Inc. un/vai to meitasuzņēmumu preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Visas citas preču zīmes, kas var būt pieminētas šajā iepakojuma lapiņā, ir to attiecīgo īpašnieka īpašums.

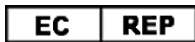

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

© 2001–2016 Hologic, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

502135LV Rev. 002

2016-02