

Bộ Lấy Mẫu Thử bằng Que Gạc Aptima[®] Multitest


Hướng dẫn thể thức thu thập mẫu cho bệnh nhân

Thu thập mẫu bằng que gạc âm đạo




Rửa tay trước khi bắt đầu. Xin hỏi bác sĩ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có thắc mắc nào về thể thức này.

Xé mở nửa bao rồi lấy que gạc ra. Đừng chạm vào phần đầu mềm hay để que gạc xuống. **Nếu chạm vào đầu mềm, để xuống hay làm rách thì yêu cầu Bộ Lấy Mẫu Thử bằng Que Gạc Aptima Multitest mới.** Cầm que, đặt ngón cái và ngón trỏ ở giữa que trên lần rạch màu đen.

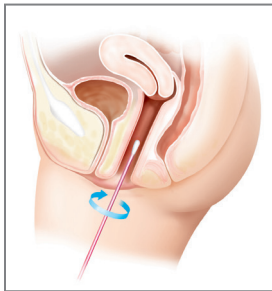

Cẩn thận đẩy que vào miệng âm đạo, khoảng 2 inch (5 cm), rồi nhẹ nhàng xoay que từ 10 đến 30 giây. Nhớ để cho que chạm thành âm đạo để chất ẩm thấm vào que. Rút que ra mà không chạm vào da.

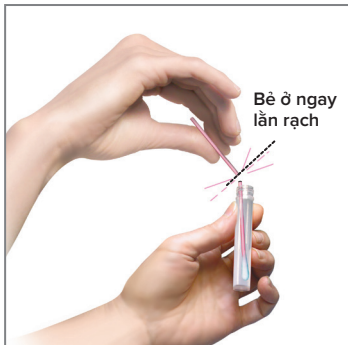

Mở nắp lọ ra trong lúc vẫn cầm que gạc trong tay. Không làm đổ chất trong lọ ra. **Nếu làm đổ chất trong lọ ra thì yêu cầu Bộ Lấy Mẫu Thử bằng Que Gạc Aptima Multitest mới.** Bỏ ngay que gạc vào lọ để lần rạch màu đen ở phía trên lọ. Chính lần rạch ở mép trên lọ rồi cẩn thận bẻ que gạc. Que sẽ rút xuống đáy lọ. Bỏ phần trên của que.



Vặn chặt nắp lọ.
Gửi trả lọ theo hướng dẫn của người chăm sóc sức khỏe.

Hologic cung cấp hướng dẫn thể thức lấy mẫu này như là công cụ thông tin chung; đây không phải là hướng dẫn xác nhận hay bảo đảm hiệu quả. Trách nhiệm của bác sĩ là đọc và hiểu tờ thông tin phù hợp và tuân theo các điều lệ và quy định hiện dụng của địa phương, tiểu bang và liên bang.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.888.484.4747

DS-01553-1001 Duyệt lại 003 © 2017 Hologic, Inc. Giữ tất cả bản quyền. Hologic, The Science of Sure, Aptima và những biểu trưng liên quan là thương hiệu và/hoặc thương hiệu cầu chứng của Hologic, Inc. và/hoặc các hãng phụ thuộc tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Thông tin này dành cho các chuyên gia y tế tại Hoa Kỳ và những thị trường khác và không dùng để mời chào sản phẩm hay khuyến mãi ở nơi bị cấm những hoạt động này. Do tài liệu của Hologic được gửi đi qua các trang mạng, truyền hình qua mạng (eBroadcast) và triển lãm thương mại nên không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được nơi xuất hiện những tài liệu này. Đối với những thông tin cụ thể về sản phẩm nào có sẵn để bán tại một quốc gia đặc biệt, xin liên lạc với đại diện Hologic hay gửi thư đến diagnostic.solutions@hologic.com.