













## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health






Verklarende lijst van symbolen

Dit is een verklarende woordenlijst van symbolen op producten en etiketten van Hologic Breast en Skeletal Health. Gebruik deze woordenlijst als aanvulling op uw producthandleidingen.

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Uitsluitend op voorschrift	FDA 21 CFR 801.109
	Niet veilig voor kernspintomografie	ASTM F2503 referentiernr., tabel 2, symbool 7.3.3; 7.4.9.1; afb. 9
	MRI-conditioneel gebruik	ASTM F2503 referentiernr., tabel 2; 7.4.6.1; afb. 6,7
	Let op – straling	Hologic
	Noodstop	Hologic
	Toegankelijk voor rolstoelgebruikers	Hologic
	Aansluiting voor driver en afstandsbediening van hulpmiddel	Hologic
	Snoerhaspel van de hulpmiddel-driver	Hologic
	Aansluiting van de voetschakelaar	Hologic
	Snoerhaspel van de voetschakelaar	Hologic
	Snoerhaspel van de zoutoplossingslang	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

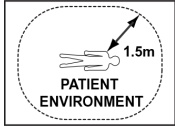Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Gevaar: Knelgevaar	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Accu	Hologic
<b>YYYY-MM-DD</b>	Datumnotatie: YYYY duidt het jaar aan MM duidt de maand aan DD duidt de dag aan	Hologic
	Stroomonderbreker	Hologic
	Plaats apparatuur buiten de patiëntomgeving	Hologic
<b>Translations in Box</b>	Vertalingen in vak	Hologic
<b>Temp Logger Activated</b>	Temperatuurlogger geactiveerd	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Serienummer temperatuurlogger	Hologic
<b>P/N</b>	Onderdeelnummer	Hologic
<b>REV</b>	Revisie	Hologic
<b>Model</b>	Modelnummer	Hologic
<b>QTY</b>	Aantal	Hologic
<b>SFW SHIPPED</b>	Softwareversie bij verzending	Hologic
















## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
<b>SFW Version</b>	Softwareversienummer	Hologic
<b>APPLICATION INSTALLATION</b>	Installatie van toepassing	Hologic
<b>Verified By</b>	Geverifieerd door	Hologic
<b>CASE</b>	Pakmateriaal (doos of verpakking)	Hologic
<b>VC</b>	Code van leverancier	Hologic
<b>Made in USA</b>	Vervaardigd in de Verenigde Staten van Amerika	Hologic
<b>Made in Costa Rica</b>	Vervaardigd in Costa Rica	Hologic
<b>Assembled in Costa Rica</b>	Geassembleerd in Costa Rica	Hologic
<b>Made in China</b>	Vervaardigd in China	Hologic
<b>Made in Mexico</b>	Vervaardigd in Mexico	Hologic
<b>Made in Thailand</b>	Vervaardigd in Thailand	Hologic
<b>Patents</b>	Patenten	Hologic
<b>USA REP</b>	Vertegenwoordiger in de VS	Hologic
<b>LATERAL ARM USE ONLY</b>	Alleen voor gebruik met laterale arm	Hologic
<b>Q.C. Use Only</b>	Alleen voor gebruik bij kwaliteitsbewaking	Hologic
<b>UNLOAD THIS SIDE</b>	Aan deze zijde uitladen	Hologic
<b>RAMP THIS SIDE</b>	Deze zijde op platform plaatsen	Hologic


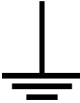








## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Ontgrendeld	IEC 60417 referentienr. 5569
	'AAN' (voeding)	IEC 60417, referentie 5007
	'UIT' (voeding)	IEC 60417, referentie 5008
	Zekering	IEC 60417, referentie 5016
	Beveiligde aarding (geaard)	IEC 60417, referentie 5019
	Potentiaalgelijkschakelings-aansluiting	IEC 60417, referentie 5021
	Wisselstroom	IEC 60417, referentie 5032
	Gevaarlijke spanning	IEC 60417, referentie 5036
	Dit systeem zendt radiofrequente (RF) energie uit (niet-ioniserende elektromagnetische straling)	IEC 60417, referentie 5140
	Toegepast onderdeel type BF	IEC 60417, referentie 5333
	Toegepast onderdeel type B	IEC 60417, referentie 5840
	Ethernet	IEC 60417, referentie 5988
	Waarschuwing elektriciteit	IEC 60417, referentie 6042
	USB	IEC 60417-1
	Vergrendeld	IEC 60417-1 ISO 7000-5569





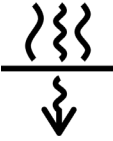




## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	"Aan" en "Uit" (voeding) voor de computer en het display	IEC 60417-5010
	Aarding (geaard)	IEC 60417-5017
	Elektrostatisch-gevoelige apparatuur	IEC 60417-5134
	Gdeelte van apparatuur "AAN"	IEC 60417-5264
	Schakelaar computer inschakelen	IEC 60417-5264
	Schakelaar computer in stand-by	IEC 60417-5266
	Broneenheid röntgen	IEC 60417-5338
	Stralingsbron röntgen	IEC 60417-5339
	Stralingsfilter	IEC 60417-5381
	Niet onderdompelen in vloeistof	IEC 60417-5995
<b>IPX8</b>	De apparatuur of het accessoire is bestand tegen continue onderdompeling in water (tot 1 meter diepte gedurende 1 uur)	IEC 60529

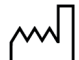












## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
 <b>IPX4</b>	Spatbestendig	IEC 60529
<b>IPX6</b>	Krachtige waterstralen die op de apparatuur of accessoires komen, ongeacht de richting, mogen geen schadelijke gevolgen hebben	IEC 60529
<b>IP54</b>	Beschermd tegen beperkte indringing van stof, geen schadelijke afzettingen en beschermd tegen opspatten van water uit elke richting, beperkte indringing toegestaan	IEC 60529
<b>IP22</b>	Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5 mm Ø en groter en beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels als de behuizing tot een hoek van 15° gekanteld is	IEC 60529
	Medisch hulpmiddel	ISO 15223 Concept
	Fabrikant	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.1
	Bevoegd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.2
	Fabricagedatum	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.3
	Uiterste gebruiksdatum	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.4
	Batchcode	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.5
	Catalogusnummer	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223-1:2016, referentie 5.1.7












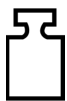

## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide	ISO 15223-1:2016, referentie 5.2.3
	Gesteriliseerd door bestraling	ISO 15223-1:2016, referentie 5.2.4
	Niet opnieuw steriliseren	ISO 15223-1:2016, referentie 5.2.6
	Niet-steriel	ISO 15223-1:2016, referentie 5.2.7
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	ISO 15223-1:2016, referentie 5.2.8
	Breekbaar; voorzichtig hanteren	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.1
	Droog bewaren	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.4
	Onderste temperatuurgrens	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.5
	Bovenste temperatuurgrens	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.6
	Temperatuurgrens	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.7
	Vochtigheidsgrens	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.8
	Atmosferische drukgrens	ISO 15223-1:2016, referentie 5.3.9
	Niet hergebruiken	ISO 15223-1:2016, referentie 5.4.2

## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health






Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing	ISO 15223-1:2016, referentie 5.4.3
	Let op	ISO 15223-1:2016, referentie 5.4.4
	Gecombineerd gewicht van apparatuur en veilige werkbelasting	ISO 60417, referentie 1321A
	Deze zijde boven	ISO 7000:2014, referentie 0623
	Niet stapelen	ISO 7000:2014, referentie 2402
	Maximaal stapelbaar aantal	ISO 7000:2014, referentie 2403
	Knelpunt	ISO 7010
	Waarschuwing	ISO 7010, referentie W001
	CE-markering met referentienummer van aangemelde instantie	MDR-verordening (EU) 2017/745
	Inhoud	N.v.t.
	Bevat geen latex van natuurlijk rubber	N.v.t.
	Aansluiting universele seriële bus	N.v.t.
	Niet knippen	N.v.t.



## Producten en etiketten van Breast and Skeletal Health

Verklarende lijst van symbolen

Symbool	Beschrijving	Standard (Standaard)
	CSA-genoteerd apparaat	Standards Council of Canada (SCC) en de U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	Medisch – Algemene medische apparatuur wat betreft risico's van elektrische schok, brand en mechanische risico's alleen in overeenstemming met ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 (2014) en IEC 60601-1:2012	UL-classificatie
	INMETRO & ULBR-markering	UL-BR INMETRO-certificaat (Brazilië)
	Symbool recyclebaar	Unicode, referentie U+267C
	Gooi elektrische en elektronische apparatuur gescheiden weg van gewoon afval. Stuur buiten gebruik gesteld materiaal naar Hologic of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger	AEEA-richtlijn 2002/96/EG