













Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter






Ordlista över symboler

Detta är en ordlista för symboler på produkter och etiketter för Hologic Breast och Skeletal Health. Använd denna ordlista som ett komplement till dina produkthandböcker.

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Endast på läkares ordination	FDA 21 CFR 801.109
	Inte säker vid magnetisk resonanstomografi	ASTM F2503 referenrn. Tabell 2, symbol 7.3.3;7.4.9.1; Figur 9
	Villkorlig användning vid magnetisk resonanstomografi	ASTM F2503 referensnr. Tabell 2; . 7.4.6.1; Figur 6,7
	Varning – strålning	Hologic
	Nödstopp	Hologic
	Rullstolsanpassad	Hologic
	Anslutning av drivenhet och fjärrkontroll	Hologic
	Plattan för hantering av sladd för drivenhet	Hologic
	Anslutning till fotbrytare	Hologic
	Hanteringsplatta för fotbrytare	Hologic
	Saltlösning slanghanteringsplatta	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

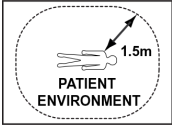Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Fara! Klämpunkt	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Batteri	Hologic
YYYY-MM-DD	Datumformat: YYYY står för året MM står för månaden DD står för dagen	Hologic
	Kretsbrytare	Hologic
	Placera utrustningen utanför patientmiljön	Hologic
Translations in Box	Översättningar i ruta	Hologic
Temp Logger Activated	Temperaturlogger aktiverad	Hologic
Temp Logger SN	Temperaturlogger, serienummer	Hologic
P/N	Artikelnummer	Hologic
REV	Revidering	Hologic
Model	Modellnummer	Hologic
QTY	Antal	Hologic
SFW SHIPPED	Levererad programvaruversion	Hologic




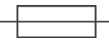











Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
SFW Version	Versionsnummer för programvara	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Installation av program	Hologic
Verified By	Verifierad av	Hologic
CASE	Fodral (låda eller paket)	Hologic
VC	Leverantörskod	Hologic
Made in USA	Tillverkad i USA	Hologic
Made in Costa Rica	Tillverkad i Costa Rica	Hologic
Assembled in Costa Rica	Monterad i Costa Rica	Hologic
Made in China	Tillverkad i Kina	Hologic
Made in Mexico	Tillverkad i Mexiko	Hologic
Made in Thailand	Tillverkad i Thailand	Hologic
Patents	Patent	Hologic
USA REP	USA-representant	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Endast användning av sidoarm	Hologic
Q.C. Use Only	Endast för kvalitetskontroll	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Ta ut från den här sidan	Hologic
RAMP THIS SIDE	Ramp på den här sidan	Hologic


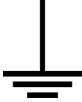








Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Upplåst	IEC 60417 referensnr 5569
	"PÅ" (ström)	IEC 60417, referens 5007
	"AV" (ström)	IEC 60417, referens 5008
	Säkring	IEC 60417, referens 5016
	Skyddsjord (jord)	IEC 60417, referens 5019
	Potentialutjämningsterminal	IEC 60417, referens 5021
	Växelström	IEC 60417, referens 5032
	Farlig spänning	IEC 60417, referens 5036
	Detta system avger radiofrekvensenergi (RF) (icke-joniserande strålning)	IEC 60417, referens 5140
	Patientkontaktdel typ BF	IEC 60417, referens 5333
	Patientkontaktdel, typ B	IEC 60417, referens 5840
	Ethernet	IEC 60417, referens 5988
	Varning för elektricitet	IEC 60417, referens 6042
	USB	IEC 60417-1
	Låst	IEC 60417-1 ISO 7000-5569





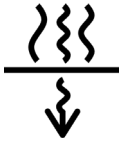





Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	"På" och "Av" (ström) för datorn och bildskärmen	IEC 60417-5010
	Mark (jord)	IEC 60417-5017
	Elektrostatiskt känslig enhet	IEC 60417-5134
	"PÅ" för del av utrustningen	IEC 60417-5264
	Strömbrytare för Dator på	IEC 60417-5264
	Strömbrytare för Dator i standby	IEC 60417-5266
	Röntgenkällaggregat	IEC 60417-5338
	Röntgenkälla emitterar	IEC 60417-5339
	Strålningsfilter	IEC 60417-5381
	Sänk inte ned i vätska.	IEC 60417-5995
IPX8	Tillbehörsutrustningen är lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten (upp till 1 m nedsänkning i 1 timme)	IEC 60529














Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
 IPX4	Stänksäker	IEC 60529
IPX6	Vatten som spolas med högt tryck runt hela utrustningen eller tillbehöret får inte ha skadlig inverkan	IEC 60529
IP54	Skyddad mot begränsad inträngning av damm, inga skadliga avlagringar och skyddad mot vatten som stänkts från alla håll, begränsad inträngning tillåten	IEC 60529
IP22	Skyddad mot fasta främmande föremål med Ø 12,5 mm och större och skydd mot vertikalt fallande vattendroppar när HÖLJET lutar upp till 15°	IEC 60529
	Medicinteknisk produkt	ISO 15223 utkast
	Tillverkare	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.1
	Auktoriserad representant i europeiska gemenskapen	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.2
	Tillverkningsdatum	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.3
	Utgångsdatum	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.4
	Satskod	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.6
	Serienummer	ISO 15223-1:2016, referens 5.1.7
	Steriliserad med etylenoxid	ISO 15223-1:2016, referens 5.2.3


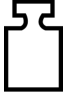











Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Steriliserad med strålning	ISO 15223-1:2016, referens 5.2.4
	Får ej omsteriliseras	ISO 15223-1:2016, referens 5.2.6
	Icke-steril	ISO 15223-1:2016, referens 5.2.7
	Använd inte om förpackningen är skadad	ISO 15223-1:2016, referens 5.2.8
	Ömtålig, hanteras med försiktighet	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.1
	Förvaras torrt	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.4
	Övre temperaturgräns	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.5
	Övre temperaturgräns	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.6
	Temperaturgräns	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.7
	Luftfuktighetsgräns	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.8
	Atmosfärisk tryckgräns	ISO 15223-1:2016, referens 5.3.9
	Får inte återanvändas	ISO 15223-1:2016, referens 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Se elektronisk bruksanvisning	ISO 15223-1:2016, referens 5.4.3

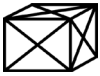



Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Försiktighet	ISO 15223-1:2016, referens 5.4.4
	Utrustningens totala vikt och säkra maxbelastning	ISO 60417, referens 1321A
	Denna sida upp	ISO 7000:2014, referens 0623
	Får inte staplas.	ISO 7000:2014, referens 2402
	Staplingsgräns enligt antal	ISO 7000:2014, referens 2403
	Klämpunkt	ISO 7010
	Varning	ISO 7010, referens W001
	CE-märke med referensnummer för anmält organ	MDR-förordning (EU) 2017/745
	Innehåll	Saknas
	Innehåller inte naturgummilatex	Saknas
	USB-anslutning	Saknas
	Skär inte	Saknas
	CSA-listad produkt	Standards Council of Canada (SCC) och U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Bröst- och skeletthälsa Produkter och etiketter

Ordlista över symboler

Symbol	Beskrivning	Standard (Standard)
	Medicinskt – Allmän medicinsk utrustning vid elektriska stötar, brand och mekaniska faror endast i enlighet med ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 (2014) och IEC 60601-1:2012	UL-klassificering
	INMETRO- och ULBR-märke	UL-BR INMETRO-certifiering (Brasilien)
	Symbol för återvinningsbar	Unicode, referens U+267C
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant	WEEE-direktiv 2002/96/EG