

1.1 Uvod

Ta dodatek spremeni vaš uporabniški in servisni priročnik sistemov Selenia® Dimensions® in 3Dimensions™. Naslednja vsebina zamenja preglednice Simboli in diagrame Mesta oznak. Ta dodatek shranite skupaj z uporabniškimi in servisnimi priročniki za morebitno prihodnjo uporabo.







1.2 Prizadeti priročniki

Ta dodatek vpliva na naslednje priročnike:

- MAN-06383-3302 Uporabniški priročnik sistema 3Dimensions, različica 2.2, revizija 001, poglavje 1.16 (Simboli) in poglavje 2.7 (Mesta oznak)
- MAN-06384 Servisni priročnik sistema 3Dimensions, različici 2.2, revizija 001, poglavje 1.7 (Simboli) in poglavje 2.7 (Mesta oznak)
- MAN-06385-3302 Uporabniški priročnik sistema Dimensions, različici 1.11, revizija 001, poglavje 1.17 (Simboli) in poglavje 2.7 (Mesta oznak)
- MAN-06386 Servisni priročnik sistema Dimensions, različici 1.11, revizija 001, poglavje 1.7 (Simboli) in poglavje 2.7 (Mesta oznak)






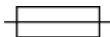







1.3 Simboli










Ta razdelek opisuje simbole na sistemu.



Simbol	Opis	Standardno
	Pozor – sevanje	Hologic
	Ta sistem oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo (neionizirajoče elektromagnetno sevanje)	IEC 60417, referenca 5140
	Opozorilo – elektrika	IEC 60417, referenca 6042
	Nevarna napetost	IEC 60417, referenca 5036
	Pozor	ISO 7010, referenca 5.1.6
	Pozor	ISO 15223-1:2016, referenca 5.4.4

Sistemi 3Dimensions in Selenia Dimensions

Dodatek za simbole in mesta oznak

Simbol	Opis	Standardno
	Ustavitev v sili	Hologic
	Električno in elektronsko opremo morate odlagati ločeno od običajnih odpadkov. Odpadni material pošljite podjetju Hologic ali se obrnite na servisnega zastopnika.	Direktiva OEE02002/96/ES
	Del v stiku z bolnikom tipa B	IEC 60417, referenca 5840
	Terminal za izenačitev potenciala	IEC 60417, referenca 5021
	Zaščitna ozemljitev	IEC 60417, referenca 5019
	Varovalka	IEC 60417, referenca 5016
	Izmenični tok	IEC 60417, referenca 5032
	IZKLOP (napajanje)	IEC 60417, referenca 5008
	VKLOP (napajanje)	IEC 60417, referenca 5007
Rx ONLY	Samo na recept	21 CFR 801.109
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.2
	Oznaka CE z referenčno številko priglšenega organa	Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745
	Medicinski pripomoček	Osnutek ISO 15223
	Nesterilno	ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.7

Simbol	Opis	Standardno
 <small>www.hologic.com/package-inserts</small>	Glejte navodila za uporabo	ISO 15223-1:2016, referenca 5.4.3
Translations in Box	Prevodi v okvirčku	Hologic
	Simbol za recikliranje	Unicode, Referenca U+267C
	Dostopno za invalidske vozičke	Hologic
	Hranite na suhem	ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.4
	Lomljivo; ravnati previdno	ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.1
	Ne skladajte	ISO 7000:2014, referenca 2402
	Temperaturna omejitev	ISO 15223-1:2016, referenca 5.3.7
Temp Logger Activated	Zapisevalnik temperature aktiviran	Hologic
Temp Logger SN	Serijska številka zapisevalnika temperature	Hologic
	S to stranjo navzgor	ISO 7000:2014, referenca 0623
	Ne uporabite, če je ovojna poškodovana	ISO 15223-1:2016, referenca 5.2.8
P/N	Številka dela	Hologic
REV	Revizija	Hologic

Simbol	Opis	Standardno
Model	Številka modela	Hologic
REF	Kataloška številka	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.6
LOT	Koda serije	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.5
SN	Serijska številka	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.7
QTY	Količina	Hologic
SFW SHIPPED	Programska oprema odposlana	Hologic
SFW Version	Številka različice programske opreme	Hologic
CASE	Primer	Hologic
VC	Šifra dobavitelja	Hologic
	Proizvajalec	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.1
	Datum izdelave	ISO 15223-1:2016, referenca 5.1.3
Made in USA	Izdelano v ZDA	Hologic
Patents	Patenti	Hologic

1.4 Diagram Mesta oznak

Diagram Mesta oznak v poglavju 2.7 v obeh naslednjih priročnikih ni več veljaven:

- MAN-06383-3302, revizija 001
- MAN-06384, revizija 001
- MAN-06385-3302, revizija 001
- MAN-06386, revizija 001