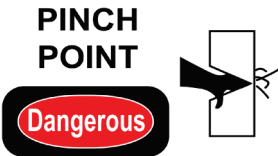


Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnät

Symbolien sanasto

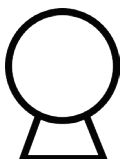
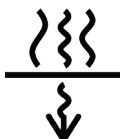
Tämä on Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteiden ja -merkkintöjen symbolien sanasto. Käytä tätä sanastoa tuoteoppaiden lisänä.

Symboli	Kuvaus	Normi
	Vain lääkärin määräyksestä	FDA 21 CFR 801.109
	Ei turvallinen magneettikuvauksessa	ASTM F2503 Viitenro Taulukko 2, Symboli 7.3.3; 7.4.9.1; Kuva 9
	Ehdollisesti turvallinen käyttöön magneettikuvauksessa	ASTM F2503 Viitenro Taulukko 2; 7.4.6.1; Kuva 6,7
	Huomio – säteilyä	Hologic
	Hätäpysäytys	Hologic
	Pääsy pyörätuolilla	Hologic
	Jalkakytkimen liitäntä	Hologic
	Jalkakytkimen johdon säätölevy	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Vaara: puristuspiste	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Akku	Hologic

Symboli	Kuvaus	Normi
YYYY-MM-DD	Päivämäärän muoto: YYYY on vuosi MM on kuukausi DD on päivä	Hologic
	Virrankatkaisin	Hologic
Translations in Box	Käännökset laatikossa	Hologic
Temp Logger Activated	Lämpötilatallennin aktivoitu	Hologic
Temp Logger SN	Lämpötilatallentimen sarjanumero	Hologic
PN	Osanumero	Hologic
REV	Tarkistettu versio	Hologic
Model	Mallinumero	Hologic
QTY	Määrä	Hologic
SFW SHIPPED	Toimitettu ohjelmistoversio	Hologic
SFW Version	Ohjelmistoversion numero	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Sovelluksen asennus	Hologic
Verified By	Tarkistaja	Hologic
CASE	Kotelo (laatikko tai pakkaus)	Hologic
VC	Toimittajan koodi	Hologic
Made in USA	Valmistettu Yhdysvalloissa	Hologic

Symboli	Kuvaus	Normi
Made in Costa Rica	Valmistettu Costa Ricassa	Hologic
Assembled in Costa Rica	Koottu Costa Ricassa	Hologic
Made in China	Valmistettu Kiinassa	Hologic
Made in Mexico	Valmistettu Meksikossa	Hologic
Made in Thailand	Valmistettu Thaimaassa	Hologic
Patents	Patentit	Hologic
USA REP	Edustaja Yhdysvalloissa	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Vain lateraalivarren käyttö	Hologic
Q.C. Use Only	Vain laadunvarmistuskäyttö	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Poisto tälle puolelle	Hologic
RAMP THIS SIDE	Luiska tälle puolelle	Hologic
MATL	Materiaali	Hologic
	Lukitsematon	IEC 60417 Viitenro 5569
	PÄÄLLÄ (virta)	IEC 60417, viite 5007
	POIS PÄÄLTÄ (virta)	IEC 60417, viite 5008
	Sulake	IEC 60417, viite 5016

Symboli	Kuvaus	Normi
	Suojamaatto (maadoitus)	IEC 60417, viite 5019
	Potentiaalin tasausliitin	IEC 60417, viite 5021
	Vaihtovirta	IEC 60417, viite 5032
	Vaarallinen jännite	IEC 60417, viite 5036
	Järjestelmä lähettää radiotaajuista energiaa (ei-ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä)	IEC 60417, viite 5140
	Tyypin BF liityntäosa	IEC 60417, viite 5333
	Tyypin B liityntäosa	IEC 60417, viite 5840
	Ethernet	IEC 60417, viite 5988
	Varoitus, sähkö	IEC 60417, viite 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lukittu	IEC 60417-5569
	Tietokoneen ja näytön virran kytkentä päälle ja pois	IEC 60417-5010
	Maadoitus	IEC 60417-5017
	Sähköstaattisille purkauksille herkkä laite	IEC 60417-5134

Symboli	Kuvaus	Normi
	Virta PÄÄLLÄ osassa laitetta	IEC 60417-5264
	“OFF” (POIS PÄÄLTÄ) laitteen osan kohdalla	IEC 60417-5264
	Tietokoneen valmiustilakytkin	IEC 60417-5266
	Röntgenlähdekokoonpano	IEC 60417-5338
	Röntgenlähde, säteily	IEC 60417-5339
	Säteilysuodatin	IEC 60417-5381
	Älä upota nesteeseen	IEC 60417-5995
IPX8	Laite tai varuste soveltuu jatkuvasti upotettavaksi veteen (upotus enintään 1 m:n syvyyteen 1 tunnin ajaksi)	IEC 60529
 IPX4	Roiskeenkestävä	IEC 60529
IPX6	Mistä tahansa suunnasta voimakkaalla paineella laitetta tai varustetta kohti suihkutettu vesi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia	IEC 60529

Symboli	Kuvaus	Normi
IP54	Suojattu pölyltä, rajoitettu sisäänpääsy, ei haitallisia kertymiä, ja suojattu kaikista suunnista roiskuvalla vedeltä, rajoitettu sisäänpääsy sallittu	IEC 60529
IP22	Suojattu halkaisijaltaan vähintään 12,5 mm:n kappaleita vastaan ja suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, kun KOTELO on kallistettuna korkeintaan 15°:n kulmaan	IEC 60529
MD	Lääkinnällinen laite	ISO 15223-1, viite 5.7.7
	Valmistaja	ISO 15223-1, viite 5.1.1
EC REP	Euroopan yhteisössä toimiva valtuutettu edustaja	ISO 15223-1, viite 5.1.2
CH REP	Osoittaa valtuutetun edustajan Sveitsissä	MedDO; SR 812.213
	Valmistuspäivä	ISO 15223-1, viite 5.1.3
	Valmistusmaa	ISO 15223-1, viite 5.1.11
	Viimeinen käyttöpäivä	ISO 15223-1, viite 5.1.4
LOT	Eräkoodi	ISO 15223-1, viite 5.1.5
REF	Luettelonumero	ISO 15223-1, viite 5.1.6
SN	Sarjanumero	ISO 15223-1, viite 5.1.7
STERILE EO	Steriloitu eteenioksidilla	ISO 15223-1, viite 5.2.3
STERILE R	Steriloitu säteilytyksellä	ISO 15223-1, viite 5.2.4

Symboli	Kuvaus	Normi
	Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä	ISO 7000-3707
	Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä, jossa on sisällä suojapakkaus	ISO 7000-3708
	Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä, jonka ympärillä on suojapakkaus	ISO 7000-3709
	Ei saa steriloida uudelleen	ISO 15223-1, viite 5.2.6
	Ei steriili	ISO 15223-1, viite 5.2.7
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	ISO 15223-1, viite 5.2.8
	Särkyvää, käsittele varovasti	ISO 15223-1, viite 5.3.1
	Pidettävä kuivana	ISO 15223-1, viite 5.3.4
	Lämpötilan alaraja	ISO 15223-1, viite 5.3.5
	Lämpötilan yläraja	ISO 15223-1, viite 6.3.5
	Lämpötilarajoitus	ISO 15223-1, viite 7.3.5
	Ilmankosteusrajoitus	ISO 15223-1, viite 8.3.5

Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnät

Symbolien sanasto

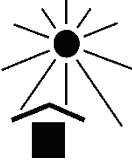
Symboli	Kuvaus	Normi
	Ilmanpainerajoitus	ISO 15223-1, viite 5.3.9
	Ei saa käyttää uudelleen	ISO 15223-1, viite 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Lue käyttöohjeet	ISO 15223-1, viite 5.4.3 Hologic
	Noudata käyttöohjeita	IEC 60601-1, viitenumero taulukko D.2, turvallisuusmerkintä 10 (ISO 7010-M002)
	Huomio	ISO 15223-1, viite 5.4.4
	Laitteen ja sen turvallisen käyttökuormituksen paino yhteensä	ISO 60417, viite 1321A
	Tämä puoli ylöspäin	ISO 7000, viite 0623
	Ei saa pinota	ISO 7000, viite 2402
	Pinoamisrajoitus numerona	ISO 7000, viite 2403
	Varoitus	ISO 7010, viite W001
	CE-merkintä EU-vaatimustenmukaisuus	MDR-asetus (EU) 2017/745
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen viitenumero	MDR-asetus (EU) 2017/745
	Sisältö	Ei saatavilla

Hologic Breast and Skeletal Health -tuotteet ja -merkinnät

Symbolien sanasto

Symboli	Kuvaus	Normi
	Sisältää luonnonkumilateksia	Ei ole
	Ei sisällä luonnonkumilateksia	Ei saatavilla
	USB-liitäntä	Ei saatavilla
	Älä leikkaa	Ei saatavilla
	CSA-hyväksytty laite	Kanadan standardointineuvosto (SCC) ja Yhdysvaltain työterveys- ja työturvallisuusvirasto (OSHA)
	Lääkinnällinen – yleinen lääkinnällinen laite sähköiskun, tulipalon ja mekaanisten vaarojen osalta vain standardien ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) ja IEC 60601-1:2012 mukaisesti	UL-luokitus
	ETL-sertifiointi	Standards Council of Canada (SCC) ja Yhdysvaltain Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	INMETRO & ULBR -merkki	UL-BR INMETRO -sertifiointi (Brasilia)
	Kierrätettävä-symboli	Unicode, viite U+267C

Symboli	Kuvaus	Normi
	Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet erillään normaalijätteestä. Lähetä käytöstä poistettu materiaali Hologicille tai ota yhteyttä huoltoedustajaan	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY
	Potilaan tunnistetiedot	ISO 15223-1, viite 5.3.7
	Potilaan tietosivusto	ISO 15223-1, viite 5.4.7
	Terveystieteiden yksikkö tai lääkäri	ISO 15223-1, viite 5.5.7
	Päivämäärä	ISO 15223-1, viite 6.5.7
	Yksilöllinen laitetunniste	ISO 15223-1, viite 10.5.7
	Hylkää, jos musta piste	Hologic
	Älä työnnä	ISO 7010, viite P017
	Älä istu	ISO 7010, viite P018
	Älä astu pinnalle	ISO 7010, viite P019
	Ionisoivaa säteilyä vapautuu, kun röntgensäde saa virtaa	ISO 7010, viite W003

Symboli	Kuvaus	Normi
	Varoitus koskien asianmukaisten suojainten käyttöä	ISO 7010, viite W009
	Ole varovainen raskaiden taakkojen nostamisessa.	Ei ole
	Pidä poissa auringonvalosta	ISO 7000, viite 0624
	Sisältää ftalaatteja tai niitä esiintyy	BS EN 15986 viitenumero A.4
	Sisältää vaarallisia aineita	ISO 7000-3723
	Maakoodi käännöstä varten	ISO 3166
	Puristuspiste	ISO -7010