

Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Ez egy szimbólumgyűjtemény a Hologic emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékeihez és azok címkéihez. Ezt a gyűjteményt a termékek útmutatójának kiegészítéseként használja.

Szimbólum	Leírás	Normál
	Vényköteles	FDA 21 CFR 801.109
	MR-biztonságos	ASTM F2503, hivatkozás: 2. táblázat, 7.3.3. és 7.4.9.1. szimbólum; 9. ábra
	Feltételesen MR-biztonságos	ASTM F2503, hivatkozás: 2. táblázat, 7.4.6.1. szimbólum; 6. és 7. ábra
	Figyelem – Sugárzásveszély!	Hologic
	Vészleállító	Hologic
	Kerekesszéssel elérhető	Hologic
	Lábkapcsoló csatlakozása	Hologic
	Lábkapcsoló-vezeték rendezőlemeze	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Veszély! Becsípődési hely	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Akkumulátor	Hologic

Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
YYYY-MM-DD	Dátumformátum: Az YYYY az évet jelöli Az MM a hónapot jelöli A DD a napot jelöli	Hologic
	Megszakító	Hologic
Translations in Box	Fordítás a mezőben	Hologic
Temp Logger Activated	Hőmérséklet-naplózó aktiválva	Hologic
Temp Logger SN	Hőmérséklet-naplózó sorozatszám	Hologic
PN	Cikkszám	Hologic
REV	Változat	Hologic
Model	Modellszám	Hologic
QTY	Mennyiség	Hologic
SFW SHIPPED	Szállított szoftververzió	Hologic
SFW Version	Szoftververzió száma	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Alkalmazástelepítés	Hologic
Verified By	Megerősítette:	Hologic
CASE	Doboz (doboz vagy csomag)	Hologic
VC	Forgalmazó kódja	Hologic
Made in USA	Készült az Egyesült Államokban	Hologic

Emlővel és csontvázal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

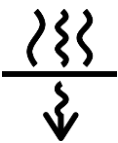
Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
Made in Costa Rica	Készült Costa Ricán	Hologic
Assembled in Costa Rica	Costa Ricán összeszerelve	Hologic
Made in China	Készült Kínában	Hologic
Made in Mexico	Készült Mexikóban	Hologic
Made in Thailand	Készült Thaiföldön	Hologic
Patents	Szabadalmak	Hologic
USA REP	Képviselő az Egyesült Államokban	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Csak a laterális karral használható	Hologic
Q.C. Use Only	Csak minőség-ellenőrzésre	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Erről az oldalról vegye ki	Hologic
RAMP THIS SIDE	Erre az oldalra helyezze a rámpát	Hologic
MATL	Anyag	Hologic
	Kioldott	IEC 60417, hivatkozás: 5569
	„ON” (Be) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5007
	„OFF” (Ki) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5008
	Biztosíték	IEC 60417, hivatkozás: 5016

Emlővel és csontvázszal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Védőföldelés	IEC 60417, hivatkozás: 5019
	Potenciálkiegyenlítési csatlakozóvég	IEC 60417, hivatkozás: 5021
	Váltóáram	IEC 60417, hivatkozás: 5032
	Veszélyes feszültség	IEC 60417, hivatkozás: 5036
	Ez a rendszer rádiófrekvenciás (RF) energiát (nem ionizáló elektromágneses sugárzást) közvetít	IEC 60417, hivatkozás: 5140
	BF típusú alkalmazott alkatrész	IEC 60417, hivatkozás: 5333
	B típusú alkalmazott alkatrész	IEC 60417, hivatkozás: 5840
	Ethernet	IEC 60417, hivatkozás: 5988
	Vigyázat! – elektromosság	IEC 60417, hivatkozás: 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lezárva	IEC 60417-5569
	A számítógép és a kijelző be- és kikapcsolására szolgál	IEC 60417-5010
	Földelés	IEC 60417-5017
	Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszköz	IEC 60417-5134

Szimbólum	Leírás	Normál
	A berendezés adott részének bekapcsolására szolgál	IEC 60417-5264
	A berendezés adott részének kikapcsolására szolgál	IEC 60417-5264
	A számítógép készenléti állapotba állítására szolgál	IEC 60417-5266
	Röntgenforrást tartalmazó egység	IEC 60417-5338
	Röntgensugarat kibocsátó forrás	IEC 60417-5339
	Sugárzásszűrő	IEC 60417-5381
	Ne merítse folyadékba	IEC 60417-5995
IPX8	A készülék folyadékba meríthető (max. 1 m-ig, legfeljebb 1 óra időtartamra)	IEC 60529
 IPX4	Fröccsenésálló	IEC 60529
IPX6	A berendezés vagy eszköz ellenáll a bármilyen irányból érkező erőteljes vízsugárnak	IEC 60529

Szimbólum	Leírás	Normál
IP54	Ellenáll a pornak (korlátozott beszivárgás előfordulhat), a lerakódások nem tesznek kárt a készülékben, ellenáll a bármilyen irányból érkező fröccsenő víznek (korlátozott beszivárgás előfordulhat)	IEC 60529
IP22	Ellenáll a 12,5 mm átmérőjű és annál nagyobb szilárd idegen anyagok bejutásának, a KÉSZÜLÉKHÁZ legfeljebb 15°-os megdöntéséig ellenáll a függőlegesen érkező vízcseppeknek	IEC 60529
	Orvostechikai eszköz	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.7.7
	Gyártó	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.1
	Hivatalos képviselő az Európai Közösségben	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.2
	A svájci meghatalmazott képviselőt jelöli	MedDO; SR 812.213
	Gyártási dátum	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.3
	Származási ország	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.11
	Felhasználhatóság	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.4
	Sarszszám	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.5
	Katalógusszám	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.6
	Sorozatszám	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.1.7

Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Etilén-dioxiddal sterilizálva	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.2.3
	Besugárzással sterilizálva	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.2.4
	Egyszeres steril védőréteg	ISO 7000-3707
	Egyszeres steril védőréteg belső védőcsomagolással	ISO 7000-3708
	Egyszeres steril védőréteg külső védőcsomagolással	ISO 7000-3709
	Ne sterilizálja újra	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.2.6
	Nem steril	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.2.7
	Ne használja, ha a csomagolás sérült	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.2.8
	Törékeny. Körültekintően kezelje	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.1
	Tartsa szárazon	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.4
	Alsó hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.5
	Felső hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.6
	Hőmérsékletkorlát	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.7

Emlővel és csontvázszal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Páratartalom határértéke	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.8
	Légnyomás határértéke	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.3.9
	Ne használja fel újra	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.4.2
	Olvassa el a használati utasítást	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.4.3 Hologic
	Kövesse a használati utasítást	IEC 60601-1, hivatkozás: D.2. táblázat, 10. biztonsági jel (ISO 7010-M002)
	Figyelem!	ISO 15223-1, hivatkozás: 5.4.4
	A berendezés össztömege és biztonságos terhelhetősége	ISO 60417, hivatkozás: 1321A
	Így állítsa a csomagot	ISO 7000, hivatkozás: 0623
	Ne helyezze egymásra	ISO 7000, hivatkozás: 2402
	Legfeljebb ennyi csomagot helyezhet egymásra	ISO 7000, hivatkozás: 2403
	Vigyázat!	ISO 7010, hivatkozás: W001
	CE jelölés Európai megfelelés	MDR-rendelet, (EU) 2017/745
	CE jelölés a bejelentett szerv hivatkozási számával	MDR-rendelet, (EU) 2017/745

Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Tartalomjegyzék	N/A
	Természetes latexgumit tartalmaz	N/A
	Természetes latexgumit nem tartalmaz	N/A
	Univerzális soros busz (USB) csatlakozás	N/A
	Ne vágja el	N/A
	CSA-tanúsítvánnyal rendelkező eszköz	Standards Council of Canada (SCC; Kanadai Szabványügyi Tanács) és a U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA; Egyesült Államok Munkavédelmi Hivatala)
	Orvostechnikai – Általános orvostechnikai berendezések áramütés, tűzveszély és mechanikus veszélyek tekintetében a következők szerint: ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) és IEC 60601-1:2012	UL besorolás
	ETL-tanúsítvány	Kanadai Szabványügyi Tanács (Standards Council of Canada, SCC) és az Egyesült Államok Munkavédelmi és Egészségvédelmi Hivatala (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
	INMETRO és ULBR jelzés	UL-BR INMETRO tanúsítás (Brazília)

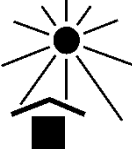
Emlővel és csontvázszal kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	Újrahasznosítható szimbólum	Unicode, hivatkozás: U+267C
	Az elektromos és elektronikus berendezéseket a szokványos hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A leselejtezett anyagokat küldje el a Hologicnak, vagy lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviselővel	2002/96/EK irányelv (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)
	Betegazonosító	ISO 15223:-1, hivatkozás: 5.7.3
	Betegtájékoztató internetes oldal	ISO 15223:-1, hivatkozás: 5.7.4
	Egészségügyi intézmény vagy orvos	ISO 15223:-1, hivatkozás: 5.7.5
	Dátum	ISO 15223:-1, hivatkozás: 5.7.6
	Egyedi eszközazonosító	ISO 15223:-1, hivatkozás: 5.7.10
	Ne vegye át, ha fekete pont látható	Hologic
	Tilos tolni	ISO 7010, hivatkozás: P017
	Tilos ráülni	ISO 7010, hivatkozás: P018
	Tilos rálépni	ISO 7010, hivatkozás: P019

Emlővel és csontvázval kapcsolatos egészségügyi termékek és címkék

Szimbólumok magyarázata

Szimbólum	Leírás	Normál
	A röntgensugár bekapcsolt állapotában ionizáló sugárzást bocsát ki	ISO 7010, hivatkozás: W003
	Figyelmeztetés a megfelelő védelem használatára	ISO 7010, hivatkozás: W009
	Nehéz tárgyak emelésekor legyen óvatos	Nincs
	Napfénytől védve tartandó	ISO 7000, hivatkozás: 0624
	Ftalátokat tartalmaz	BS EN 15986 Hivatkozási szám: A.4
	Veszélyes anyagokat tartalmaz	ISO 7000-3723
	Országkód fordítás esetén	ISO 3166
	Becsípődési hely	ISO -7010