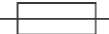


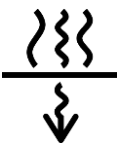
Jest to glosariusz symboli umieszczanych na produktach i etykietach Hologic Breast and Skeletal Health. Niniejszy glosariusz stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi produktu.

Symbol	Opis	Standard
	Wyłącznie z przepisu lekarza	FDA 21 CFR 801.109
	Niebezpieczny w środowisku badań metodą rezonansu magnetycznego	Nr ref. ASTM F2503 Tabela 2, Symbol 7.3.3; 7.4.9.1; rys. 9
	Warunkowo dopuszczony do użytku w środowisku badań metodą rezonansu magnetycznego	Nr ref. ASTM F2503 Tabela 2; 7.4.6.1; rys. 6,7
	Przeostroga — promieniowanie	Hologic
	Zatrzymanie awaryjne	Hologic
	Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich	Hologic
	Podłączanie przełącznika nożnego	Hologic
	Uchwyt do prowadzenia kabla przełącznika nożnego	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Zagrożenie: Miejsce możliwego przytrzaśnięcia	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Bateria	Hologic

Symbol	Opis	Standard
YYYY-MM-DD	Format daty: YYYY oznacza rok MM oznacza miesiąc DD oznacza dzień	Hologic
	Wyłącznik	Hologic
Translations in Box	Tłumaczenia w pudełku	Hologic
Temp Logger Activated	Aktywacja rejestratora temperatury	Hologic
Temp Logger SN	Numer seryjny rejestratora temperatury	Hologic
PN	Numer części	Hologic
REV	Wersja	Hologic
Model	Numer modelu	Hologic
QTY	Ilość	Hologic
SFW SHIPPED	Wysłana wersja oprogramowania	Hologic
SFW Version	Numer wersji oprogramowania	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Instalacja aplikacji	Hologic
Verified By	Zweryfikowane przez	Hologic
CASE	Skrzynia (karton lub opakowanie)	Hologic
VC	Kod sprzedawcy	Hologic
Made in USA	Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki	Hologic

Symbol	Opis	Standard
Made in Costa Rica	Wyprodukowano w Kostaryce	Hologic
Assembled in Costa Rica	Montowano w Kostaryce	Hologic
Made in China	Wyprodukowano w Chinach	Hologic
Made in Mexico	Wyprodukowano w Meksyku	Hologic
Made in Thailand	Wyprodukowano w Tajlandii	Hologic
Patents	Patenty	Hologic
USA REP	Przedstawiciel w USA	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Do użytku tylko z ramieniem bocznym	Hologic
Q.C. Use Only	Wyłącznie do celów kontroli jakości	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Rozładowywać tą stroną	Hologic
RAMP THIS SIDE	Rampa po tej stronie	Hologic
MATL	Materiał	Hologic
	Odblokowane	IEC 60417, ref. nr 5569
	Zasilanie „WŁĄCZONE”	IEC 60417, ref. 5007
	Zasilanie „WYŁĄCZONE”	IEC 60417, ref. 5008
	Bezpiecznik	IEC 60417, ref. 5016

Symbol	Opis	Standard
	Uziemienie ochronne	IEC 60417, ref. 5019
	Złącze do wyrównywania potencjałów	IEC 60417, ref. 5021
	Prąd przemienny	IEC 60417, ref. 5032
	Prąd o wysokim napięciu	IEC 60417, ref. 5036
	Ten system przesyła energię o częstotliwościach radiowych (RF) (elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące)	IEC 60417, ref. 5140
	Część typu BF mająca kontakt z ciałem pacjenta	IEC 60417, ref. 5333
	Część typu B mająca kontakt z ciałem pacjenta	IEC 60417, ref. 5840
	Ethernet	IEC 60417, ref. 5988
	Ostrzeżenie: elementy elektryczne	IEC 60417, ref. 6042
	USB	IEC 60417-1
	Zablokowane	IEC 60417-5569
	Włączanie i wyłączanie zasilania komputera i wyświetlacza	IEC 60417-5010
	Uziemienie	IEC 60417-5017
	Urządzenie wrażliwe na ładunki elektrostatyczne	IEC 60417-5134

Symbol	Opis	Standard
	„WŁĄCZENIE” zasilania dla części sprzętu	IEC 60417-5264
	„WYŁĄCZENIE” zasilania dla części sprzętu	IEC 60417-5264
	Przełącznik trybu czuwania komputera	IEC 60417-5266
	Zestaw źródłowy RTG	IEC 60417-5338
	Źródło emitujące promieniowanie RTG	IEC 60417-5339
	Filtr promieniowania	IEC 60417-5381
	Nie zanurzać w żadnych płynach	IEC 60417-5995
IPX8	To urządzenie lub wyposażenie dodatkowe jest przystosowane do ciągłego zanurzenia w wodzie (do 1 m zanurzenia przez 1 godzinę)	IEC 60529
 IPX4	Odporność na rozpryski	IEC 60529
IPX6	Woda tryskająca silnymi strumieniami na urządzenie lub akcesoria z dowolnego kierunku nie może mieć szkodliwego wpływu	IEC 60529

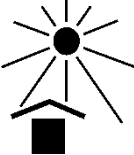
Symbol	Opis	Standard
IP54	Ochrona przed pyłem, ograniczone wnikanie pyłu, brak szkodliwych osadów i Ochrona przed bryzgami wody spadającymi ze wszystkich kierunków, ograniczone wnikanie wody	IEC 60529
IP22	Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi oraz Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody przy nachyleniu OBUDOWY do 15°	IEC 60529
	Wyrób medyczny	ISO 15223-1, ref. 5.7.7
	Producent	ISO 15223-1, ref. 5.1.1
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	ISO 15223-1, ref. 5.1.2
	Wskazuje upoważnionego przedstawiciela w Szwajcarii	MedDO; SR 812.213
	Data produkcji	ISO 15223-1, ref. 5.1.3
	Kraj produkcji	ISO 15223-1, ref. 5.1.11
	Termin ważności	ISO 15223-1, ref. 5.1.4
	Kod partii	ISO 15223-1, ref. 5.1.5
	Numer katalogowy	ISO 15223-1, ref. 5.1.6
	Numer seryjny	ISO 15223-1, ref. 5.1.7
	Wysterylizowano tlenkiem etylenu	ISO 15223-1, ref. 5.2.3

Symbol	Opis	Standard
	Sterylizowane poprzez napromienianie	ISO 15223-1, ref. 5.2.4
	System pojedynczej bariery sterylnej	ISO 7000-3707
	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz	ISO 7000-3708
	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym na zewnątrz	ISO 7000-3709
	Nie sterylizować ponownie	ISO 15223-1, ref. 5.2.6
	Wyrób niejadalowy	ISO 15223-1, ref. 5.2.7
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	ISO 15223-1, ref. 5.2.8
	Produkt delikatny; obchodzić się ostrożnie	ISO 15223-1, ref. 5.3.1
	Chronić przed wilgocią	ISO 15223-1, ref. 5.3.4
	Dolna granica temperatury	ISO 15223-1, ref. 5.3.5
	Górna granica temperatury	ISO 15223-1, ref. 5.3.6
	Granica temperatury	ISO 15223-1, ref. 5.3.7
	Zakres wilgotności	ISO 15223-1, ref. 5.3.8

Symbol	Opis	Standard
	Zakres ciśnienia atmosferycznego	ISO 15223-1, ref. 5.3.9
	Nie wykorzystywać ponownie	ISO 15223-1, ref. 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Zapoznać się z instrukcją obsługi	ISO 15223-1, ref. 5.4.3 Hologic
	Postępować zgodnie z instrukcją użytkowania	IEC 60601-1, Tabela referencyjna nr D.2, znak bezpieczeństwa 10 (ISO 7010-M002)
	Przestroga	ISO 15223-1, ref. 5.4.4
	Łączna masa sprzętu oraz jego bezpieczne obciążenie robocze	ISO 60417, ref. 1321A
	Tą stroną do góry	ISO 7000, ref. 0623
	Nie układać w stos	ISO 7000, ref. 2402
	Limit układania w stos według liczby	ISO 7000, ref. 2403
	Ostrzeżenie	ISO 7010, ref. W001
	Znak CE Zgodność europejska	Rozporządzenie MDR (UE) 2017/745
	Oznaczenie CE z numerem referencyjnym jednostki notyfikowanej	Rozporządzenie MDR (UE) 2017/745
	Zawartość	ND.

Symbol	Opis	Standard
	Zawiera lateks kauczuku naturalnego	Nie dot.
	Nie zawiera naturalnego lateksu	ND.
	Połączenie za pomocą uniwersalnej magistrali szeregowej	ND.
	Nie przecinać	ND.
	Urządzenie na liście CSA	Kanadyjska Rada Normalizacyjna (SCC) i amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Administracja (OSHA)
	Wyrób medyczny – ogólny sprzęt medyczny pod względem ryzyka porażenia prądem, zagrożenia pożarowego i zagrożeń mechanicznych wyłącznie zgodnie z normami ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) oraz IEC 60601-1:2012	Klasyfikacja UL
	Certyfikacja ETL	Kanadyjska Rada Normalizacyjna (SCC) oraz Amerykański Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego (OSHA)
	Znak INMETRO & ULBR	Certyfikacja UL-BR INMETRO (Brazylia)
	Symbol „Nadaje się do recyklingu”	Unicode, ref. U+267C

Symbol	Opis	Standard
	Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać, separując go od odpadów standardowych. Materiał wycofany z eksploatacji należy przesłać do firmy Hologic albo należy skontaktować się z przedstawicielem ds. serwisu	Dyrektywa WEEE 2002/96/WE
	Identyfikacja pacjenta	ISO 15223-1, ref. 5.7.3
	Witryna internetowa informacji o pacjencie	ISO 15223-1, ref. 5.7.4
	Ośrodek opieki zdrowotnej lub lekarz	ISO 15223-1, ref. 5.7.5
	Data	ISO 15223-1, ref. 5.7.6
	Identyfikator UDI (Unique Device Identifier)	ISO 15223-1, ref. 5.7.10
	Odrzuć, jeśli czarna kropka	Hologic
	Nie popychać	ISO 7010, ref. P017
	Nie siadać	ISO 7010, ref. P018
	Nie stawać na powierzchni	ISO 7010, ref. P019

Symbol	Opis	Standard
	Promieniowanie jonizujące emitowane po uruchomieniu wiązki promieniowania rentgenowskiego	ISO 7010, ref. W003
	Ostrzeżenie o konieczności stosowania odpowiedniej ochrony	ISO 7010, ref. W009
	Zachować ostrożność przy podnoszeniu ciężarów	Brak
	chronić przed światłem słonecznym	ISO 7000, ref. 0624
	Zawiera ftalany lub wykazuje ich obecność	BS EN 15986 Nr ref. A.4
	Zawiera substancje niebezpieczne	ISO 7000-3723
	Kod kraju do tłumaczenia	ISO 3166
	Miejsce możliwego przytrzaśnięcia	ISO-7010