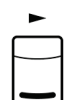
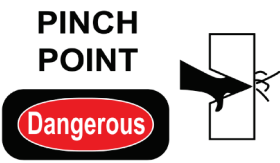
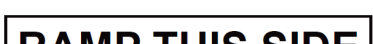
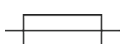




Acesta este un glosar de simboluri pentru produse și etichete Hologic Breast and Skeletal Health. Utilizați acest glosar ca supliment la manualele produselor dvs.

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Numai pe bază de prescripție medicală	FDA 21 CFR 801.109
	Nu este sigur pentru imagistică prin rezonanță magnetică	ASTM F2503 nr. referință Tabelul 2, Simbol 7.3.3; 7.4.9.1; Fig. 9
	Utilizare condiționată pentru imagistică prin rezonanță magnetică	ASTM F2503 nr. referință Tabelul 2; 7.4.6.1; Fig. 6, 7
	Atenție – radiație	Hologic
	Oprire de urgență	Hologic
	Accesibil în scaun cu rotile	Hologic
	Conexiune pedală	Hologic
	Placă de gestionare a cablului pedalei	Hologic
	Wi-Fi	Hologic
	Pericol: prindere a mâinii	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Baterie	Hologic

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
YYYY-MM-DD	Formată dată: YYYY reprezintă anul MM reprezintă luna DD reprezintă ziua	Hologic
	Înterupător de circuit	Hologic
Translations in Box	Traduceri în cutie	Hologic
Temp Logger Activated	Înregistrator de temperatură activat	Hologic
Temp Logger SN	Număr de serie înregistrator de temperatură	Hologic
PN	Număr piesă	Hologic
REV	Revizie	Hologic
Model	Număr model	Hologic
QTY	Cantitate	Hologic
SFW SHIPPED	Versiune software expediată	Hologic
SFW Version	Număr versiune software	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Instalare aplicație	Hologic
Verified By	Verificat de	Hologic
CASE	Carcasă (cutie sau ambalaj)	Hologic
VC	Cod vânzător	Hologic
Made in USA	Fabricat în Statele Unite ale Americii	Hologic


Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Fabricat în Costa Rica	Hologic
	Asamblat în Costa Rica	Hologic
	Fabricat în China	Hologic
	Fabricat în Mexic	Hologic
	Fabricat în Thailanda	Hologic
	Brevete	Hologic
	Reprezentant în SUA	Hologic
	Utilizare numai pentru brațul lateral	Hologic
	Utilizare numai pentru controlul calității	Hologic
	Descărcare pe această parte	Hologic
	Rampă pe această parte	Hologic
	Material	Hologic
	Deblocat	IEC 60417, Referință 5569
	Pornit (alimentare)	IEC 60417, Referință 5007
	Oprit (alimentare)	IEC 60417, Referință 5008
	Siguranță fuzibilă	IEC 60417, Referință 5016

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Legătură de protecție la pământ (împământare)	IEC 60417, Referință 5019
	Bornă de egalizare a potențialelor	IEC 60417, Referință 5021
	Curent alternativ	IEC 60417, Referință 5032
	Tensiune periculoasă	IEC 60417, Referință 5036
	Acest sistem transmite energie în radiofrecvență (RF) (radiație electromagnetică neionizantă)	IEC 60417, Referință 5140
	Parte aplicată de tip BF	IEC 60417, Referință 5333
	Parte aplicată de tip B	IEC 60417, Referință 5840
	Ethernet	IEC 60417, Referință 5988
	Avertizare de electricitate	IEC 60417, Referință 6042
	USB	IEC 60417-1
	Blocat	IEC 60417-5569
	„On (Pornit) și „Off” (Oprit) (referitor la alimentare) pentru computer și afișaj	IEC 60417-5010
	Pământ (împământare)	IEC 60417-5017

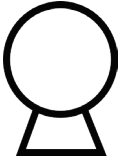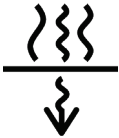Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Dispozitiv sensibil la electricitate statică	IEC 60417-5134
	„Pornit” pentru componentă a echipamentului	IEC 60417-5264
	„Oprit” pentru o parte a echipamentului	IEC 60417-5264
	Comutator Standby al computerului	IEC 60417-5266
	Ansamblu sursă raze X	IEC 60417-5338
	Emisie sursă raze X	IEC 60417-5339
	Filtru de radiații	IEC 60417-5381
	Nu imersați în niciun lichid	IEC 60417-5995
IPX8	Echipamentul de accesoriu este adecvat pentru imersie continuă în apă (imersie până la 1 m timp de 1 oră)	IEC 60529
 IPX4	Rezistent la stropire	IEC 60529


Simbol	Descriere	Standard (Standard)
IPX6	Apa proiectată în jeturi puternice asupra echipamentului sau accesoriului din orice direcție nu trebuie să aibă efecte dăunătoare	IEC 60529
IP54	Protejat împotriva pătrunderii limitate a prafului, fără depuneri dăunătoare și protejat împotriva stropirii cu apă din toate direcțiile, pătrundere limitată permisă	IEC 60529
IP22	Protejat împotriva obiectelor străine solide cu Ø 12,5 mm și mai mari și protecție împotriva picăturilor de apă care cad pe verticală atunci când CARCASA este înclinată până la 15°	IEC 60529
	Dispozitiv medical	ISO 15223-1, Referință 5.7.7
	Producător	ISO 15223-1, Referință 5.1.1
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	ISO 15223-1, Referință 5.1.2
	Indică reprezentantul autorizat în Elveția	MedDO; SR 812.213
	Data fabricației	ISO 15223-1, Referință 5.1.3
	Țara de fabricație	ISO 15223-1, Referință 5.1.11
	Data limită de utilizare	ISO 15223-1, Referință 5.1.4
	Cod lot	ISO 15223-1, Referință 5.1.5
	Număr de catalog	ISO 15223-1, Referință 5.1.6
	Număr de serie	ISO 15223-1, Referință 5.1.7

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Sterilizat cu oxid de etilenă	ISO 15223-1, Referință 5.2.3
	Sterilizat prin iradiere	ISO 15223-1, Referință 5.2.4
	Sistem de barieră sterilă unică	ISO 7000-3707
	Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în interior	ISO 7000-3708
	Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în exterior	ISO 7000-3709
	Nu sterilizați	ISO 15223-1, Referință 5.2.6
	Nesteril	ISO 15223-1, Referință 5.2.7
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	ISO 15223-1, Referință 5.2.8
	Fragil; manipulați cu grijă	ISO 15223-1, Referință 5.3.1
	Păstrați uscat	ISO 15223-1, Referință 5.3.4
	Limită inferioară de temperatură	ISO 15223-1, Referință 5.3.5
	Limită superioară de temperatură	ISO 15223-1, Referință 5.3.6
	Limită de temperatură	ISO 15223-1, Referință 5.3.7

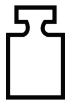Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Limită de umiditate	ISO 15223-1, Referință 5.3.8
	Limită de presiune atmosferică	ISO 15223-1, Referință 5.3.9
	Nu reutilizați	ISO 15223-1, Referință 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Consultați instrucțiunile de utilizare	ISO 15223-1, Referință 5.4.3 Hologic
	Urmați instrucțiunile de utilizare	IEC 60601-1, nr. referință Tabel D.2, Semn de siguranță 10 (ISO 7010-M002)
	Atenție	ISO 15223-1, Referință 5.4.4
	Greutatea combinată a echipamentului și sarcina de lucru sigură a acestuia	ISO 60417, Referință 1321A
	Cu această parte în sus	ISO 7000, Referință 0623
	Nu stivuiți	ISO 7000, Referință 2402
	Limită de stivuire după număr	ISO 7000, Referință 2403
	Avertizare	ISO 7010, Referință W001
	Marcaj CE Conformitate europeană	Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR) (UE) 2017/745

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Marcaj CE cu numărul de referință al organismului notificat	Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR) (UE) 2017/745
	Conținut	N/A
	Conține latex din cauciuc natural	N/A
	Nu conține latex din cauciuc natural	N/A
	Conexiune Universal Serial Bus (Magistrală serială universală)	N/A
	Nu tăiați	N/A
	Dispozitiv listat CSA	Standards Council of Canada (SCC) și U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
	Medical – Echipamente medicale generale în ceea ce privește șocurile electrice, incendiile și pericolele mecanice numai în conformitate cu ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) și IEC 60601-1:2012	Clasificare UL
	Certificare ETL	Consiliul pentru standarde din Canada (SCC) și Administrația pentru securitate și sănătate în muncă (OSHA) în SUA
	Marcaj INMETRO & ULBR	Certificare UL-BR INMETRO (Brazilia)

Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Simbol de reciclare	Unicode, Referință U+267C
	Eliminați echipamentele electrice și electronice separat de deșeurile standard. Trimiteți echipamentele scoase din uz la Hologic sau contactați reprezentantul dvs. de service	Directiva DEEE 2002/96/CE
	Identificarea pacientului	ISO 15223-1, Referință 5.7.3
	Site web de informare a pacienților	ISO 15223-1, Referință 5.7.4
	Centru de îngrijire a sănătății sau medic	ISO 15223-1, Referință 5.7.5
	Data	ISO 15223-1, Referință 5.7.6
	Identificatorul unic al dispozitivului	ISO 15223-1, Referință 5.7.10
	Respingeți dacă acest punct este negru	Hologic
	Nu împingeți	ISO 7010, Referință P017
	A nu se așeza pe aparat	ISO 7010, Referință P018
	A nu se călca pe suprafață	ISO 7010, Referință P019

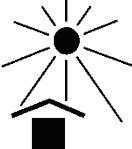Simbol	Descriere	Standard (Standard)
	Radiație ionizată emisă atunci când fasciculul de raze X este energizat	ISO 7010, Referință W003
	Avertisment privind utilizarea unei protecții adecvate	ISO 7010, Referință W009
	Grijă la ridicarea greutăților	Niciunul
	Feriți de lumina soarelui	ISO 7000, Referință 0624
	Conține ftalați sau sunt prezenți ftalați	BS EN 15986 Număr de referință. A.4
	Conține substanțe periculoase	ISO 7000-3723
	Codul țării pentru traducere	ISO 3166
	Punct în care există pericol de prindere a mâinii.	ISO -7010