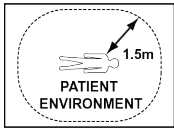


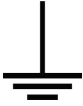
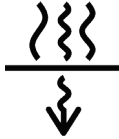
See on Hologic Breast and Skeletal Healthi toodete ja siltide sümbolite sõnastik. Kasutage seda sõnastikku oma toote kasutusjuhendite lisana.

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Retseptiravim	FDA 21 CFR 801.109
	Ei ole ohutu magnetresonantstomograafiaga kasutamiseks	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2, sümbol 7.3.3; 7.4.9.1; joonis 9
	Tingimuslik magnetresonantstomograafiaga kasutamine	ASTM F2503 viitenumber, tabel 2; 7.4.6.1; joonis 6,7
	Tähelepanu – kiirgus!	Hologic
	Hädapidur	Hologic
	Ligipääsetav ratastooliga	Hologic
	Seadme draiveri ja kaugjuhtimispuldi ühendus	Hologic
	Seadme draiveri kaablihalduse plaat	Hologic
	Jalglüliti ühendus	Hologic
	Jalglüliti kaablihalduse plaat	Hologic
	Füsioloogilise lahuse torude haldamise plaat	Hologic
	Wi-Fi	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ohud: murrukoht	Hologic
	Bluetooth	Hologic
	Aku	Hologic
YYYY-MM-DD	Kuupäevavorming: YYYY tähistab aastat MM tähistab kuud DD tähistab päeva	Hologic
	Kaitselüliti	Hologic
	Asetage seadmed patsiendist eemale	Hologic
Translations in Box	Erikeelsed juhised on karbis	Hologic
Temp Logger Activated	Temperatuurilogija on aktiveeritud	Hologic
Temp Logger SN	Temperatuurilogija seerianumber	Hologic
P/N	Partiinumber	Hologic
REV	Redaktsioon	Hologic
Model	Mudeli number	Hologic
QTY	Kogus	Hologic
SFW SHIPPED	Tarnitud tarkvara versioon	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
SFW Version	Tarkvara versiooninumber	Hologic
APPLICATION INSTALLATION	Rakenduse paigaldamine	Hologic
Verified By	Kontrollitud	Hologic
CASE	Ümbris (karp või pakend)	Hologic
VC	Müüja kood	Hologic
Made in USA	Toodetud Ameerika Ühendriikides	Hologic
Made in Costa Rica	Toodetud Costa Rical	Hologic
Assembled in Costa Rica	Kokku pandud Costa Rical	Hologic
Made in China	Toodetud Hiinas	Hologic
Made in Mexico	Toodetud Mehhikos	Hologic
Made in Thailand	Toodetud Tais	Hologic
Patents	Patendid	Hologic
USA REP	USA esindaja	Hologic
LATERAL ARM USE ONLY	Kasutamiseks ainult külgkäel	Hologic
Q.C. Use Only	Ainult kvaliteedikontrollile kasutamiseks	Hologic
UNLOAD THIS SIDE	Tühjenda see külg	Hologic
RAMP THIS SIDE	Kallutage seda külge	Hologic

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Avatud	IEC 60417 viide nr 5569
	SEES (toide)	IEC 60417, viide 5007
	VÄLJAS (toide)	IEC 60417, viide 5008
	Kaitse	IEC 60417, viide 5016
	Kaitsemaandus	IEC 60417, viide 5019
	Potentsiaaliühtlustuse klemm	IEC 60417, viide 5021
	Vahelduvvool	IEC 60417, viide 5032
	Ohtlik pinge	IEC 60417, viide 5036
	See süsteem edastab raadiosageduslikku (RF) energiat (mitteioniseerivat elektromagnetkiirgust)	IEC 60417, viide 5140
	BF-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5333
	B-tüüpi rakendatud osa	IEC 60417, viide 5840
	Ethernet	IEC 60417, viide 5988
	Hoiatav tase elektrit	IEC 60417, viide 6042
	USB	IEC 60417-1
	Lukustatud	IEC 60417-1 ISO 7000-5569

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Arvuti ja kuvari „Sees“ ja „Väljas“ (toide)	IEC 60417-5010
	Maandus	IEC 60417-5017
	Elektrostaatiliselt tundlik seade	IEC 60417-5134
	„SEES“ osa seadmetest	IEC 60417-5264
	Arvuti toitelüliti	IEC 60417-5264
	Arvuti ooterežiimi lüliti	IEC 60417-5266
	Röntgenikiirgusallika komplekt	IEC 60417-5338
	Röntgenikiirgusallikas	IEC 60417-5339
	Kiirgusfilter	IEC 60417-5381
	Ärge kastke vedelikku	IEC 60417-5995
IPX8	Lisaseadmete varustus sobib pidevaks vette kastmiseks (kuni 1 m vee all 1 tund)	IEC 60529

Sümbol	Kirjeldus	Standard
 IPX4	Pritsmekindel	IEC 60529
IPX6	Seadmetest või lisaseadmetest mis tahes suunas vastu projitseeritud veel ei ole kahjulikke mõjusid	IEC 60529
IP54	Kaitstud tolmu piiratud sissepääsu, kahjulike sademete ja igast küljest pritsiva vee eest, piiratud sissepääs lubatud	IEC 60529
IP22	Kaitse tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm ja rohkem ning kaitse vertikaalselt langevate veepiiskade eest, kui SEADE on kallutatud kuni 15°	IEC 60529
	Meditasiiniseade	ISO 15223 Mustand
	Tootja	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.1
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.2
	Tootmiskuupäev	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.3
	Kasutamisaeg	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.4
	Partiikood	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.5
	Kataloogi number	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.6
	Seerianumber	ISO 15223-1:2016, viide 5.1.7
	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.3
	Steriliseeritud kiirgusega	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.4

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Mitte resteriliseerida	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.6
	Mittesteriilne	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.7
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	ISO 15223-1:2016, viide 5.2.8
	Habras, käsitseda ettevaatlikult	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.1
	Hoida kuivana	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.4
	Temperatuuri alumine piir	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.5
	Temperatuuri ülemine piir	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.6
	Temperatuuri limiit	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.7
	Niiskuspiirang	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.8
	Atmosfäärirõhu piirang	ISO 15223-1:2016, viide 5.3.9
	Mitte korduskasutada	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Vaadake elektroonilisi kasutusjuhendeid	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.3
	Ettevaatust!	ISO 15223-1:2016, viide 5.4.4

Breast and Skeletal Health Products and Labels

Glossary of Symbols

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Seadme kaal ja selle ohutu töökoormus	ISO 60417, viide 1321A
	Niipidi üles	ISO 7000:2014, viide 0623
	Mitte asetada üksteise peale	ISO 7000:2014, viide 2402
	Virnastamispiirang arvu järgi	ISO 7000:2014, viide 2403
	Murrukoht	ISO 7010
	Hoiatus	ISO 7010, viide W001
	CE-märgis koos teavitatud asutuse viitenumbriga	MDR eeskiri (EÜ) 2017/745
	Sisu	Puudub
	Ei sisalda looduslikku kummilateksit	Puudub
	Universaalne jadasiini ühendus	Puudub
	Mitte lõigata	Puudub
	CSA loendis olev seade	Kanada Standardnõukogu (SCC) ning USA tööhutuse ja -tervishoiu nõukogu Juhtorgan (OSHA)

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Meditsiin – üldine meditsiiniseade elektrilöögi, tulekahju ja mehaanilisi ohte arvestades kooskõlas ainult standarditega ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 (AI: 2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014) ja IEC 60601-1: 2012	UL-klassifikatsioon
	INMETRO- ja ULBR-märk	UL-BR INMETRO sertifikaat (Brasiilia)
	Ringlussevõtu sümbol	Unicode, viide U+267C
	Visake elektri- ja elektroonikaseadmed tavajäätmetest eraldi. Saatke kasutuselt kõrvaldatud materjal ettevõttele Hologic või võtke ühendust teenindusesindajaga	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 2002/96/EÜ